




User manual

Molift Air 500


molift[®]
by Etac


BM16099 - 2025-10-01 - Rev. 9.0

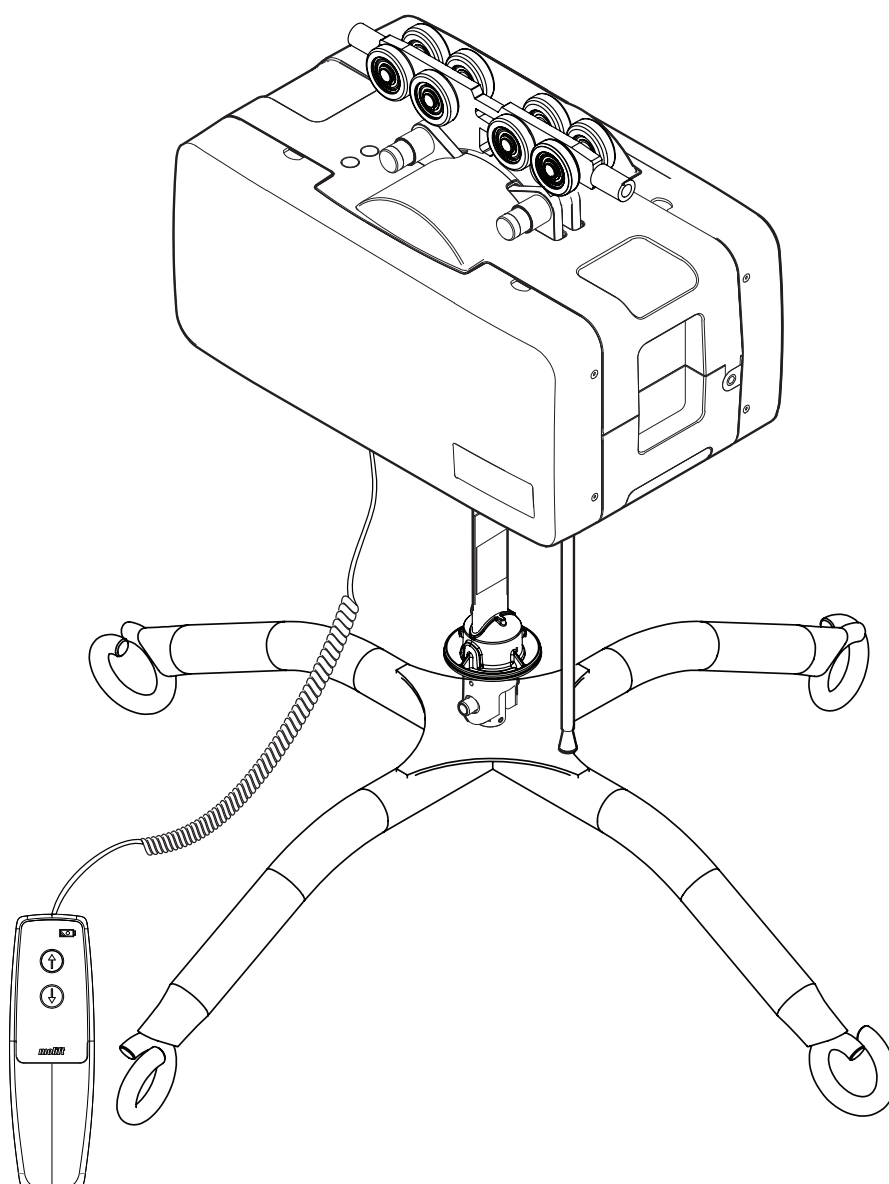

www.etac.com



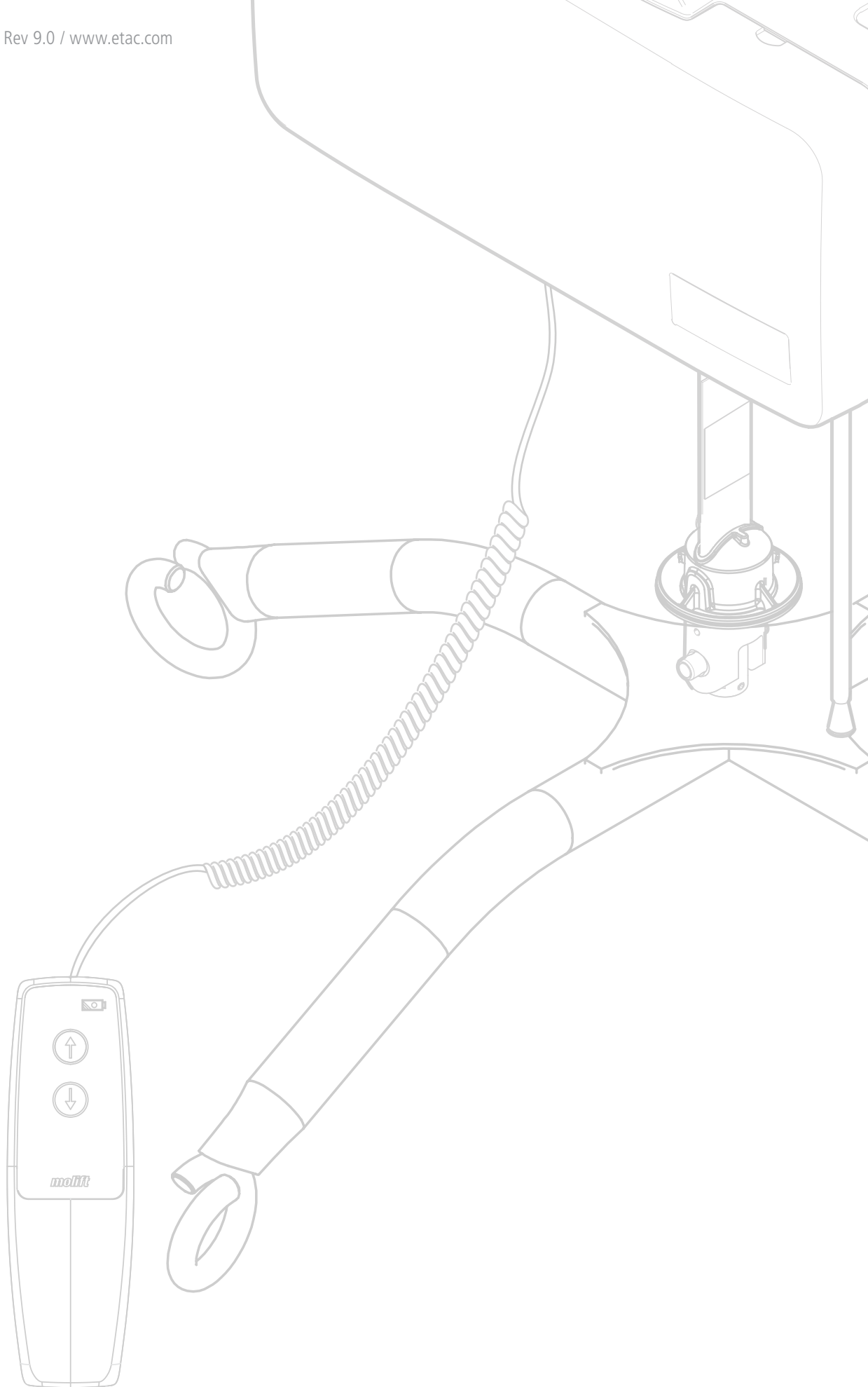

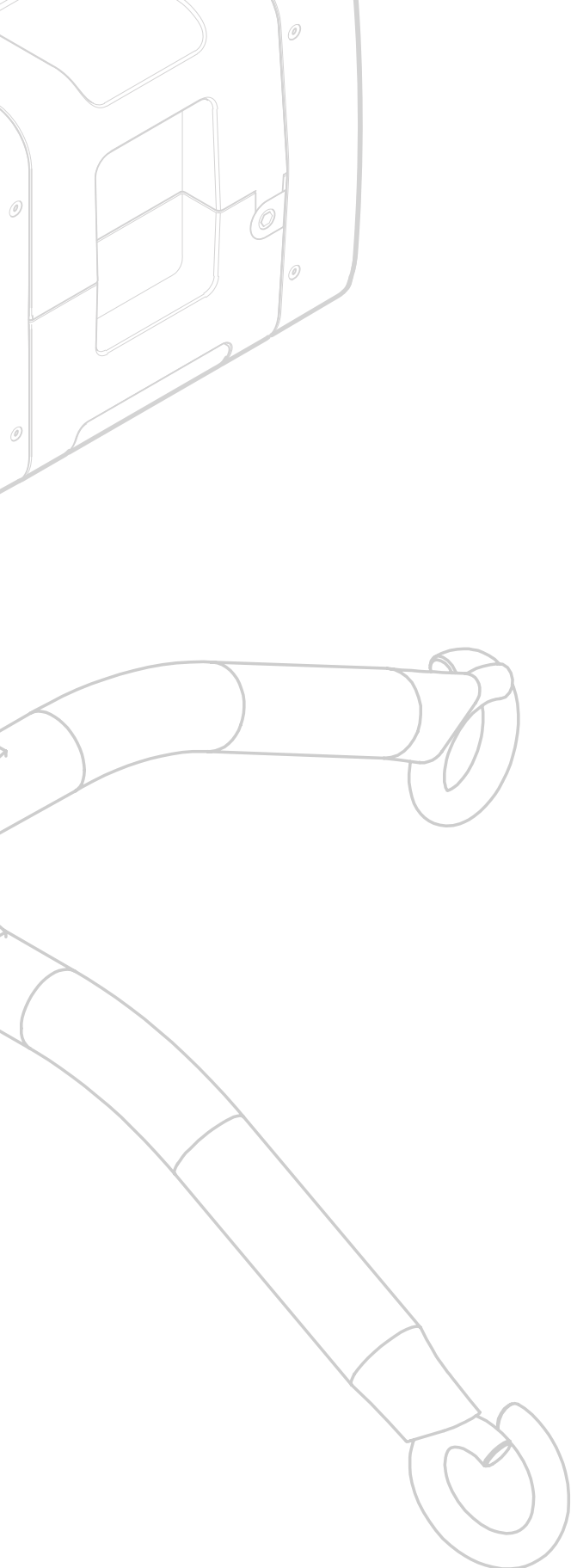

Contents

User manual - English - 4
Gebrauchsanweisung - Deutsch - 17
Brukermanual - Norsk - 31
Bruksanvisning - Svenska - 44
Käyttöohje - Suomi - 57
Manual utente - Italiano - 70
Manual d'utilisation - Français - 83
Manual de usuario - Español - 96
Handleiding - Nederlands - 109
Brugsvejledning - Dansk - 122

Important

This User Manual contains important safety instructions and information regarding the use of the sling and accessories.




This symbol indicates important information related to safety. Follow these instructions carefully.



Read User Manual before use!
It is important to fully understand the content of the user manual before attempting to use the equipment.

Visit www.etac.com for download of documentation to ensure you have the latest version.

Molift Air 500

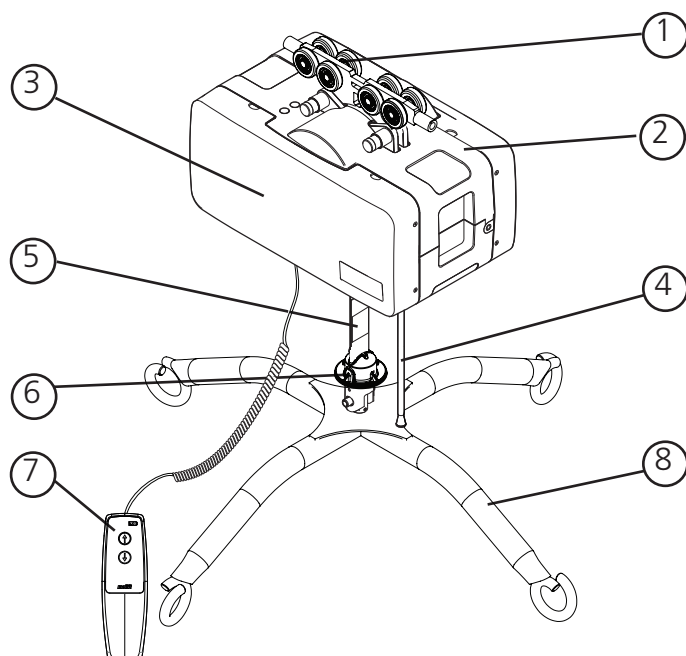

Hoist components:

1. Trolley
2. Hoist
3. Side covers
4. Emergency stop/ Emergency lowering
5. Lifting belt
6. Quick release pin
7. Hand control
8. Sling bar

About Molift Air

Molift Air is a strong and smooth ceiling lift that enables patients and residences to be transferred in a comfortable and safe way. Molift Air is a very light motor which in combination with the quick release coupling system gives an easy handling when mounting and servicing.

General



CE declaration

The product, and its related accessories, described in this instruction for use (IFU), is in compliance with the regulation (EU) 2017/745 of 5. April 2017 – as a medical device, risk class I.

The product has been tested and approved by a third party according to standards IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and EN/ISO 10535:2021.

Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Conditions for Use

Lift and transfer of a client will always pose a certain risk. The rail system must be installed by certified personnel in accordance with applicable installation instructions. The lifter is not intended to be operated by the client being lifted.

Modifications and use of components made by other manufacturers

We recommend only using Molift components and spare parts. Declaration of conformity is not valid and Etac is not responsible for warranty if any modifications are made to the product. Etac shall not be liable for faults or accidents that can occur when using components made by other manufacturers. It can be unsafe to use accessories, detachable parts and materials that is not listed in this user manual.



Only certified personnel are allowed to open hoist or accessories to perform service or repair. Risk of injury from rotating parts and electric shock.



Warranty notice

Two-year warranty against defects in workmanship and materials of our products.

One-year warranty for batteries.

Please refer to www.etac.com for terms and conditions.

Introduction

The person referred to as “the user” is the person who is sitting in the product. “The carer” is the person who manoeuvres the product.

Intended purpose

The ceiling hoist is an assistive device intended for alleviation of, or compensation for, a functional impairment due to an injury or disability. The device is designed for an individual lacking the ability to stand up and transfer themselves to/from a bed, the floor, a wheelchair, a chair, a toilet or similar due to reduced mobility or physical strength.

Intended User

The device can be used for children, adults and elderly people with a need for support to be lifted and transferred, or when gait training, within a rail system.

Intended Environment

For indoor use within a rail system in acute care, long term care and home care.

Indications

For users who are in need of support to be lifted and transferred or during gait training; e.g. people with limited ability to move and who require body support during transfers. Not an exhaustive list.

The user group for the device is based on individual health and mobility function and not on a specific diagnosis or age.

Contraindications

There are no known contraindications.

Precautions

Make sure the sling fits the user and the sling bar.


Training Requirements

Only carers who have read and understood the user manual are allowed to use the device.

Product identification

Product label

The Product labels barcode contain article number, serial number and production date:

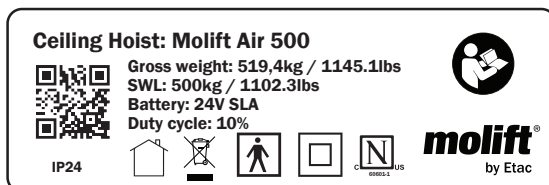

Warning labels and Symbols

Symbols used on the product, explained in more detail:



Class II double insulated



CE marked



Refer to user manual



For indoor use only



Max user weight



Do not dispose in general waste



Emergency stop/
Emergency lowering



Service Light



Battery Light



Hex tool symbol for
Manual Emergency lowering



Certification Body mark



Manufacturer



Date of manufacture



Catalogue number



Serial number



Medical Device



Unique Device Identification



UKCA marked



Type BF applied part

Technical data

Safe Working Load (SWL)

Molift Air 500: 500 kg (1102 lbs)

Weight of unit:

Chassis incl. battery, Excl. sling bar:

14.1 kg (31 lbs)

4-point Sling bar: 5,3 kg (11.7 lbs)

Battery:

Art: 2920007 12 V SLA 2.9 Ah

Battery charger:

Charger for handcontrol, Mascot - type 3743

Art. no.: 2540100

100-240 V AC, 50-60 Hz max 0.5 A

Output 0.56A

IRC Power Supply, Mascot - type 3721

Art. no.: 2610119

Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz max 1.0 A

Output: 24VDC 1.75A/42W

IRC Charger, Mascot - type 3844

Art. no.: 2640200

In: 20-30VDC 1.3 A

Output 0.5 A

Lifting speed

60mm/second (2,36 inches/second)

with 75kg (165,35 lbs) load

Protection class

Hand control IP24

Lift motor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Operating forces button

Buttons on handset: 3.4 N

Material:

Aluminum, Plastic, Steel

Expected Lifetime:

The hoist has an expected lifetime of 30 000 cycles SWL or 15 years. The rails have an expected lifetime of 30 years.

Dimensions:

L x W x H (Length, Width, Height without trolley)


36 x 24,6 x 19,5 cm

(14,2 x 9,7 x 7,7 inches)

A (Hoisting Range)

300 cm (118 Inches)

B (Minimum distance from ceiling to Sling bar coupling point) 32,7 cm (12.7/8 Inches)

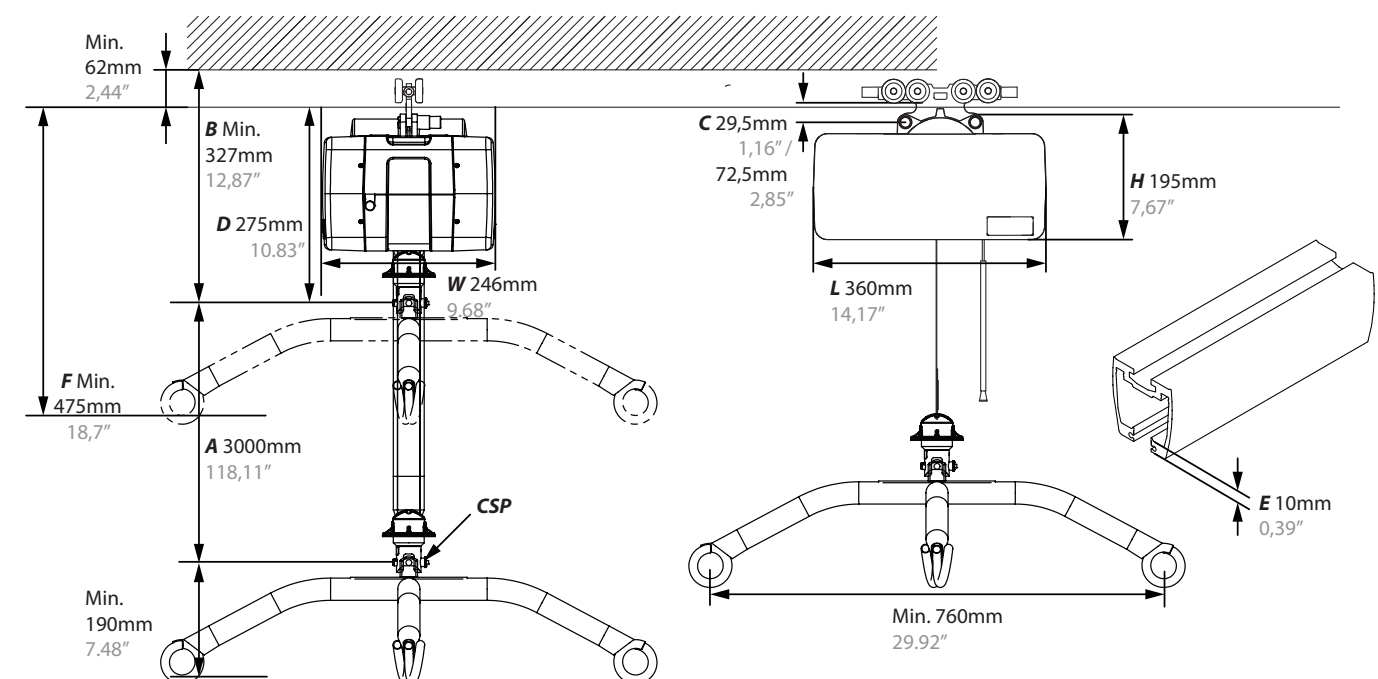

For extended information about technical data, how to perform service and repair, see technical manual.

Installation

The hoist is marked with Safe Working Load (SWL), this should not exceed rail systems max load capacity.




The rail system can only be installed by certified personnel in accordance with applicable installation instructions.



Do not start using hoist before completing control according to checklist after installation.

Trolley installation

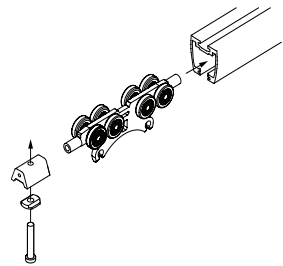

Mounting trolley in rail system. Remove End stop and insert Trolley into rail. Mount end stop, and make sure it is securely fastened. See BM4401 for installation details.




Make sure end stops are mounted in all ends of the Rail system before using the hoist!

Lifter installation




Be careful during elevated work situations. We recommend two or more installers, to prevent losing balance and injury during installation!

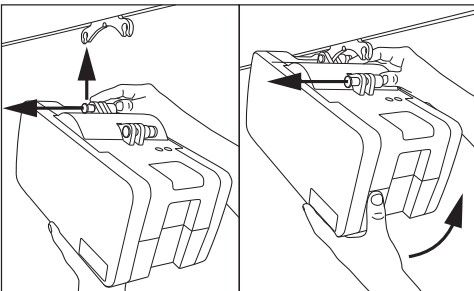

Mounting of Lifter on trolley. No tools required. The lifter has two connection points.

Connect one point first. Push button all the way in, and place lifter in connection point on trolley. Release button and make sure it is clearly showing green before connecting the next point.

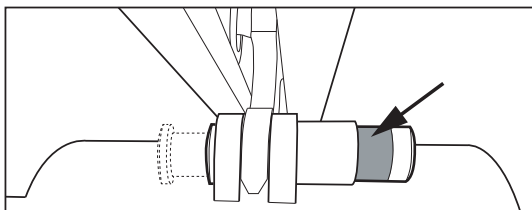

Make sure both connection point buttons completely return and clearly show green after installation.

Emergency lowering cord and tube can be adjusted to the correct length (height) by cutting tube and cord.

Installation

Use this checklist to verify that the hoist is properly installed and can operate correctly and safely before use.

- ☐ End stops on rail are installed after mounting of trolley as described in BM4401
- ☐ Make sure that the hoist is properly fastened to the rail and that the lift does not have any loose parts.
- ☐ Perform one lift with load (60-80 kg)
- ☐ Make sure battery is fully charged.

How to use Molift Air

General Safety Precautions

Only use accessories and slings that are adjusted to fit the client, type of disability, size, weight and type of transfer.

Working pause ratio/Duty Cycle.

Molift Air 500 should not be run constantly for more than 2 minutes (with maximum load), and rest for minimum 18 minutes. Duty Cycle 10%. (Intermittence according to standard ISO-EN 10535)



Do not position hoist in a way that makes it difficult to disconnect mains cable. To isolate the system, pull out the main cable from the electrical wall socket.



If maximum load (SWL) differs between hoist sling bar and body support unit, then the lowest maximum load shall always be used



Molift lifters shall only be used to lift clients. Never use the lifter to lift or move objects of any kind.

Before use / Daily check


Inspection to be performed by caregiver daily or before use:

- ☐ Inspect lifter and rail system has no visible damage, defects or deformations
- ☐ Make sure sling bar connection and all detachable parts are properly connected and secured
- ☐ Test emergency stop button and emergency lowering
- ☐ Make sure battery indicator or service light is not illuminated
- ☐ Make sure lifting strap does not have visible damage or frays.
- ☐ Test run lifters operation functions and make sure lifter does not make any abnormal sounds

If there are any faults or defects, the lift needs to be taken out of operation and marked "out of order". No parts on the Molift Air should be serviced or maintained while in use with a patient.

Hand control

The Hand control has 2 buttons for lifting and lowering, or 4 buttons if the hoist is equipped with propulsion. The Hand control has an indicator light that will illuminate when battery level is low and the lifter requires charging.

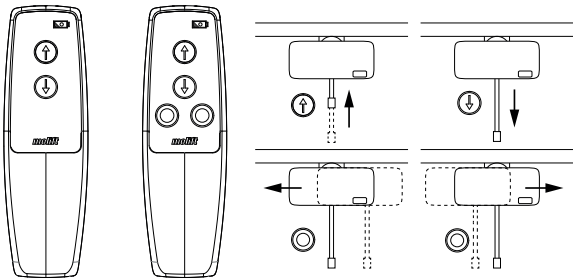


Do not pull Hand control to move the hoist along the rail



The lift will not work if hand control is connected to a charger.
Disconnect hand control from charger before operating the lift.

Mounting sling bar

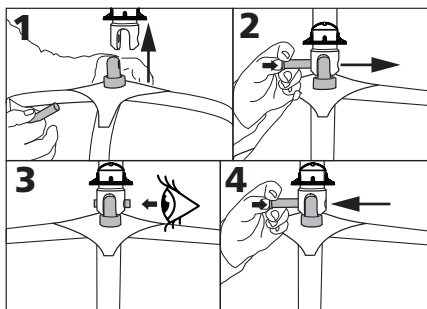


1. Align sling bar in connection point.
2. Push button on locking pin and insert all the way through.
3. Make sure locking pin is properly fastened
4. Push and hold down the button on the locking pin, and pull to remove locking pin.


Emergency stop / emergency lowering

Emergency Stop

Activation and reset of emergency stop:

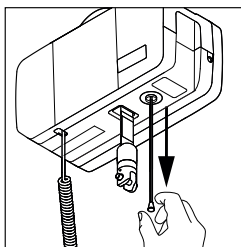


Pull to activate emergency stop. The button will come out, and hoist will stop.

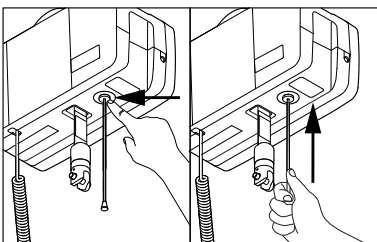

Push with finger or use tube on cord to push button back in to reset emergency stop.

Electrical Emergency Lowering



Pull and hold to start lowering. Hold until client is lowered and can be released from sling bar.

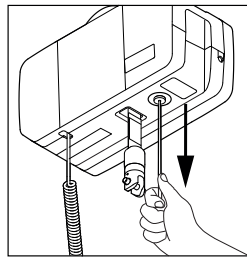

Only for emergency use when hand control does not work!

Manual Emergency lowering

Allen key or bit for power drill can be found inside the lifter. Remove covers on both sides of the hoist to locate.

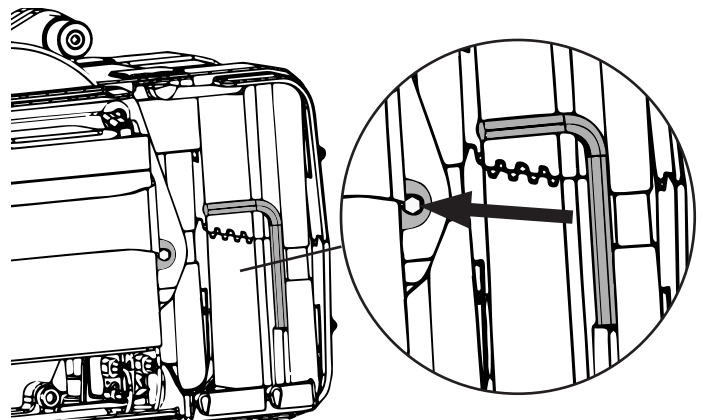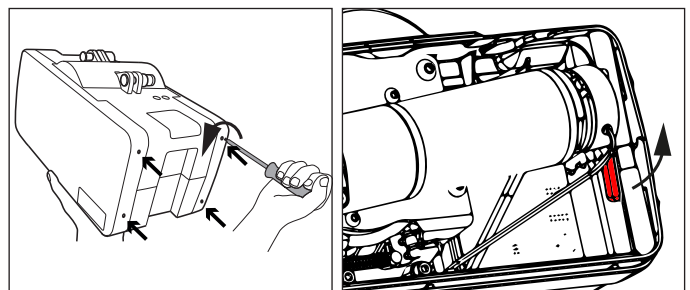

To open side covers use a screwdriver or power drill on all 8 screws (4 on each side). Turn the red "Brake Release" handle up. Locate the tools on the other side of the hoist and rotate counterclockwise to lower lifting belt. Using a power drill is recommended.

Service is NOT required if:

- 1) the Air manual emergency down is used for a known reason, and
- 2) the belt is undamaged, and
- 3) the unit is operating normally after the manual emergency lowering procedure.

The new brake override will contribute to this by making emergency manual lowering less stressful to lift components. If the unit have had a malfunction with unknown reason, and manual emergency lowering system has been used, Service is required.

Electronics

Transport and Storage

For long time storage it is recommended that the emergency stop button is activated (pulled out). The lifter can be stored and transported under temperatures between -25 - 70 °C.

Operating

The lifter is designed for use at standard room temperatures (+5 to +40°C).

Air Pressure: 70 - 106 kPa

Relative Humidity: 15 - 90 %

Following storage or transport at other temperatures leave the lifter in a room with a suitable temperature until it reaches a safe operating temperature.



Medical electrical equipment requires special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC). Portable or mobile radio communication equipment may affect the medical electrical equipment, and should be kept minimum 30 cm (12 inches) from the lifters electronics.

Batteries

Molift Air 500 is available with a 24V SLA battery.

The SLA battery has a life expectancy of approx. 500 charge cycles.



Recharge battery upon receipt, and then every six months, to avoid battery failure.



Batteries must be disposed of as special waste according to local rules and regulations. Do not dispose in general waste.

Battery and service indicator on lifter

	Wrench symbol / Service indicator
	Battery symbol / Battery indicator

The electrical system has a power-save function which will turn off the electrical system five minutes after last operation. All indicators will turn off. The system is activated when pushing one of the operating buttons on the hand control.

Battery indicator on hoist

When the multi level battery indicator is yellow the lifter will have sufficient power available for at least one full lifting cycle with max load. When battery is flashing yellow it is only possible to lower the sling bar.

<i>Battery indicator</i>	<i>Battery level</i>	
	Green	80% or more
	Green	80 - 60%
	Green	60 - 40%
	Green	40 - 20%
	Yellow	20% - 0%
	Yellow flashing	0%

Service indicator / Periodic inspection

The lifters electronics record the weight lifted and number of lifts. After a certain period of operation a signal is given to indicate that service is required.

<i>Service indicator</i>	<i>Mode</i>
No light	No service needed
Yellow	Periodic inspection required
Green flashing	Order service
Red	Perform service

Service scope

When the hoist has performed a number of lifts, (5,000 lifts with the maximum allowed weight (SWL)), the service indicator will light up red.

A service must then be performed by authorized personnel, including the inspection and replacement of worn parts.

Contact Etac or your local dealer or visit etac.com to find an approved service partner.

Charging

Molift Air 500 can be charged through the hand control with a battery charger, or through the rail with In Rail Charging.

Indicator on charger and power supply indicator


Charger indicator	Mode
Green flash	Not connected to hoist
Yellow	Charging
Yellow flash	Top of charge
Green	Fully charged

Power supply indicator	Mode
Blue	Connected to power outlet

Hand control charging

The battery charger is plugged into a power outlet. Wall-mounted docking for hand control is available. Make shure not to damage the cable. The charger can be connected to the power outlet at all times. Use only Molift chargers. The Hand control has an indicator light that will illuminate when battery level is low and the lifter requires charging.


Charger for Molift Air hand control: Art. no.: 2540100

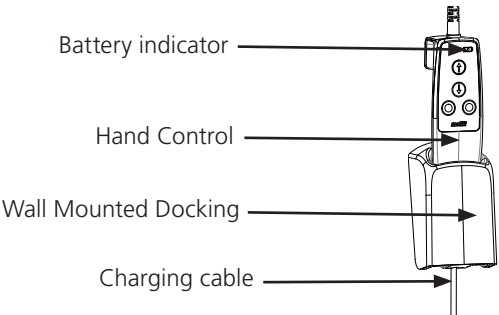


IRC - In Rail Charging

The hoist is charged through a built in charger in lift motor for continuous charging through the entire rail system length.

Molift Air IRC has a built in charger, connected to the battery. It must be installed with IRC Trolley in a rail system with a conductive tape. The IRC trolley is connected to the battery charger inside the Molift Air IRC. The IRC trolley is always in contact with the the conductive tape inside the rail. The IRC power supply is connected to the conductive tape through IRC connection at the end of the rail, and supplies power to the battery charger inside Molift Air IRC.

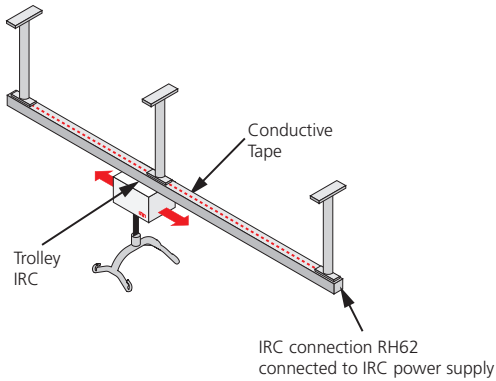

IRC fits both Single rail and Traverse systems.

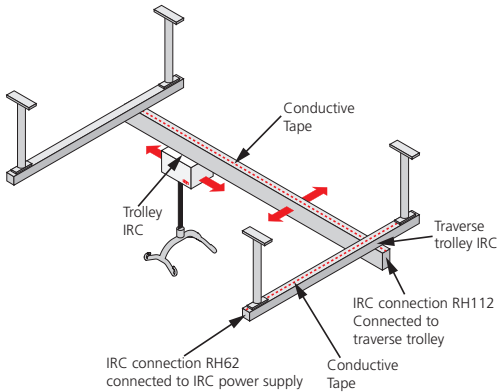

IRC Power Supply

Art. no.: 2610119

Charger 3844 DC/DC (Part of Molift Air IRC)

Art. no.: 2640200

Transfer

Plan the lifting operation in advance to ensure that it is as safe and smooth as possible. Remember to work ergonomically. Assess the risks and take notes. The assistant is responsible for the safety of the user.

Using slings

It is important that the sling has been tested with the individual user and for the intended lifting situation.



Read User Manual for the sling prior to use.



Do not use damaged or badly worn slings.

Device combinations and sling compatibility


When combining a medical device with other devices or accessories, the combination must not change the by manufacturer defined intended purpose of the devices or modify the devices in such a way that compliance with applicable requirements, or safe use of the device are affected.

We recommend using Etac or Molift slings. The hoist can be combined with slings from other manufactures, visit www.etac.com for compatibility statements.


The person /company responsible for the combination of the devices must ensure that the applicable requirements are fulfilled. Electric protection in combination with slings: Type BF Applied part.

Lifting and lowering


When moving the client, stand to the side of the client you are lifting. Make sure that arms and legs do not obstruct the seat, bed, etc. Keep eye contact with the client to help them feel safe.

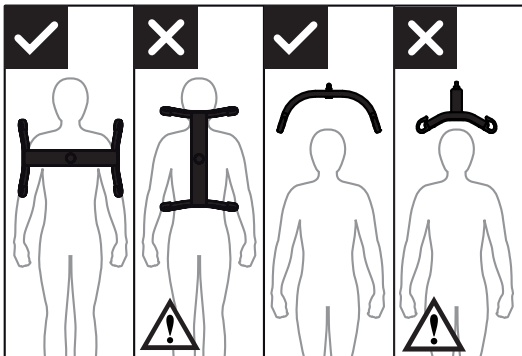

The 4-point sling bar must always be positioned across the client, to prevent the client from unintentionally sliding out of the sling.

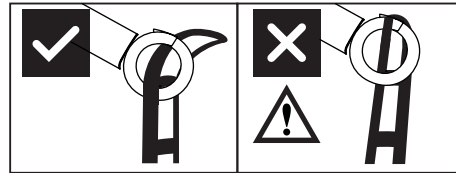


The sling bar hook design prevents sling to be inadvertently detached when mounted correct.

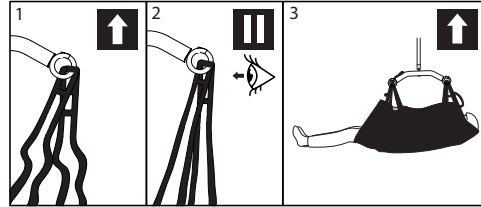

1. Check that the sling is correctly fitted around the client and that the strap loops are correctly fitted to the sling bar hooks.
2. Stretch the sling straps without lifting the client. Ensure that all four loops of the sling are securely fastened to avoid the user slipping or falling.
3. Lift client, and perform transfer.

Angle sensor

The hoist has a directional safety feature that prevents lifting if angle on lifting strap is too steep.

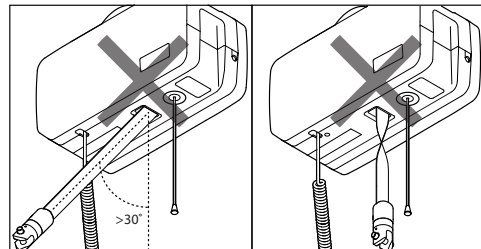

If the hoist doesn't respond to Hand control "up" button, it might be because lifting strap angle is too steep, or lifting belt is twisted and sensor is activated.


Accessories

Charger cords and plugs.

- Plug adapter EU, art.no 2510365
- Plug adapter UK, art.no 2510366
- Plug adapter US, art.no 2510367
- Plug adapter AUS, art.no 2510368
- Cord EU, art.no 1140105
- Cord UK, art.no 1140106
- Cord US, art.no 1140104
- Cord AUS, art.no 1140107
- Wall bracket for charger, art. no. 2610123

Sling bars

Molift Air can be used with a 4 or 8 point sling bar.

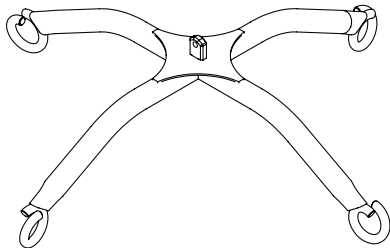

4-point sling bar, steel

Art. no.: 2140003

Slings

Etac supplies a wide selection of slings for different types of transfers. The Molift RgoSling sling series is developed to be combined with a 4-point sling bar with loop connections. The slings also works with a 2-point sling bar. See the combination list in the slings user manual for the correct sling and sling bar combination.

The Molift RgoSling sling series is available in sizes XXS – XXL, in polyester and polyester mesh.

Complete list of slings and sling bars can be found on www.etac.com

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ambulating Vest

Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)

Molift RgoSling Fabric Stretcher

Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XL)

Accessories:


Molift Rgosling Extension Loops

Art. no.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Transition coupling

Some rail systems have transition couplings ① installed. These are used for transferring the user from one rail system to another e.g. between two different rooms.

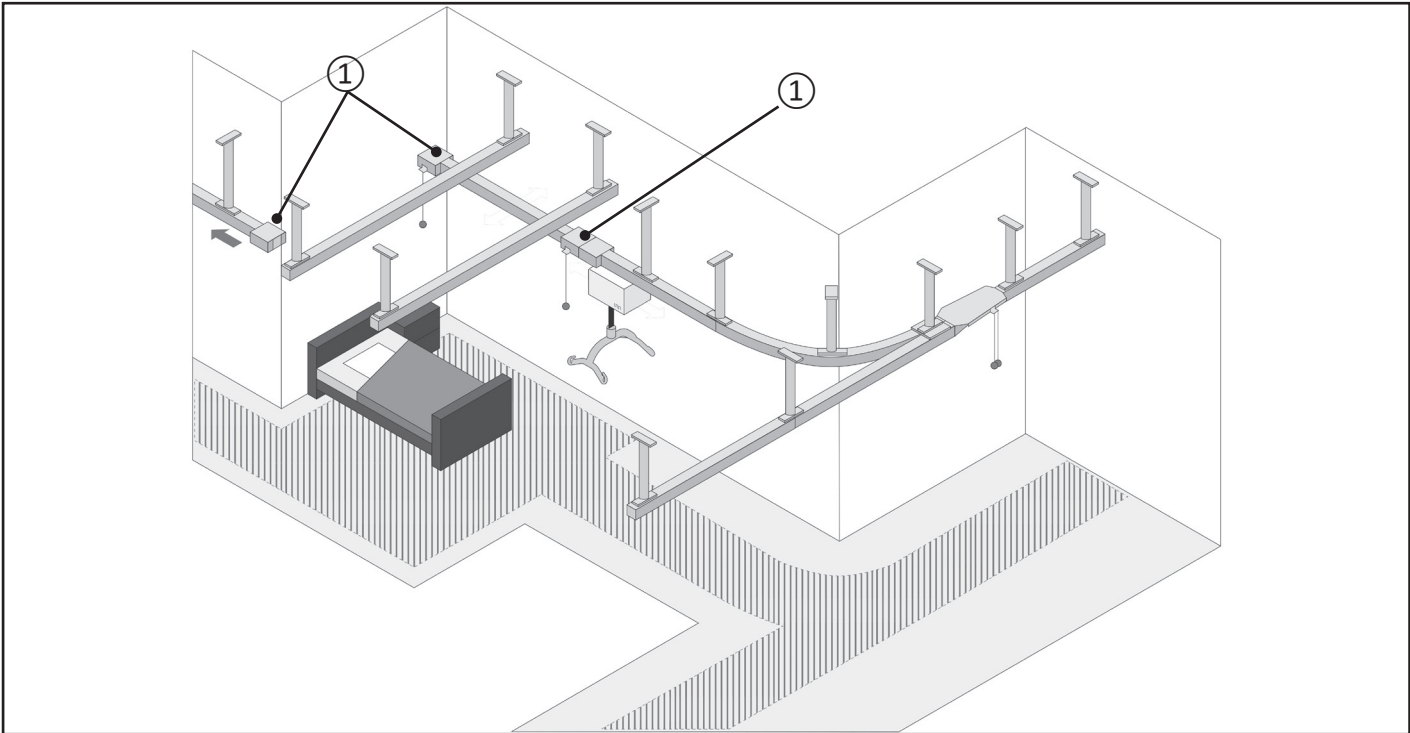


Components

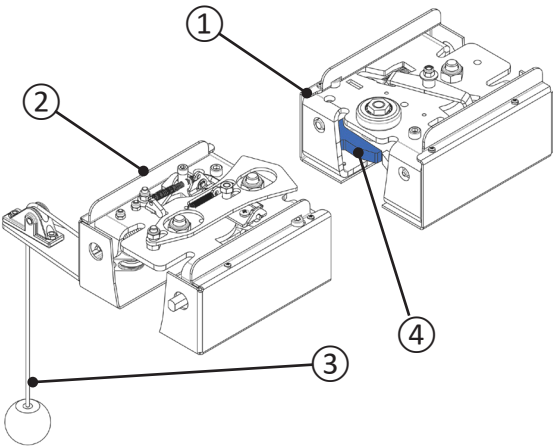


- ① Transition coupling unit
- ② Transition coupling unit with pulley
- ③ Pulley with knob
- ④ Gate (two pcs per unit)

States

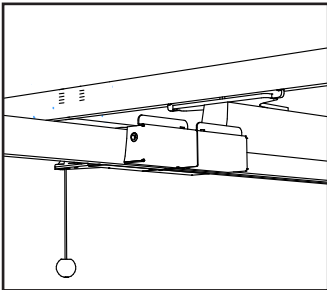


Connected

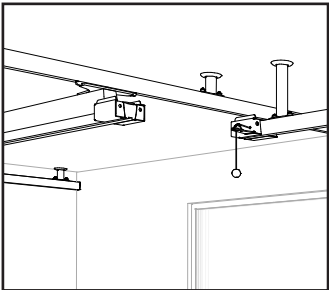


Disconnected

To disconnect

Before disconnecting the transition coupling, ensure trolley is min. 0.5 m away from transition coupling unit.

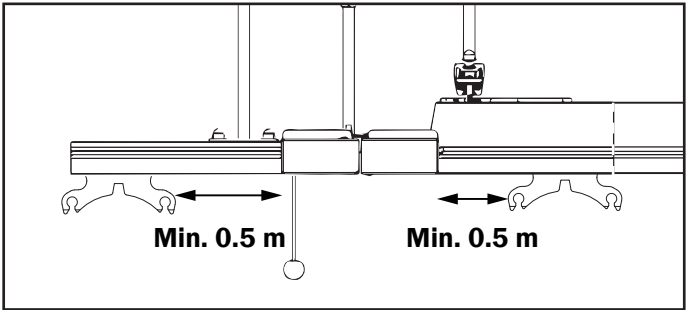

Pull pulley down until stop.
You hear a sound, which confirms disconnection.

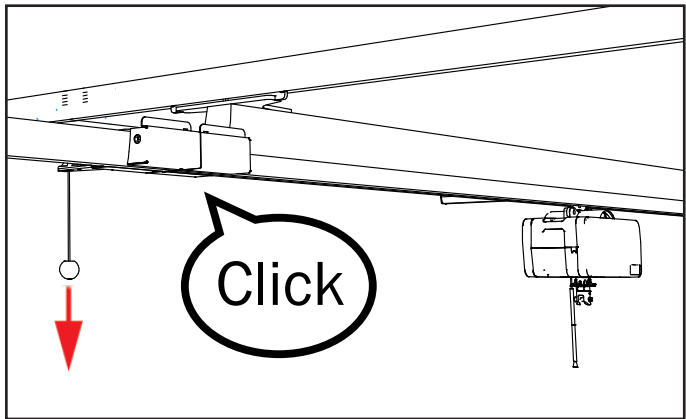


The transition coupling is now disconnected.



Transfer - disconnected transition coupling

Do not perform any transfer of user before you have checked the following:


Both gates ① are visible (transition coupling unit seen from below).

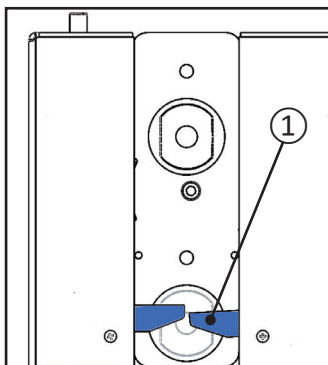

Pin ② must **not** be visible when coupling is disconnected.

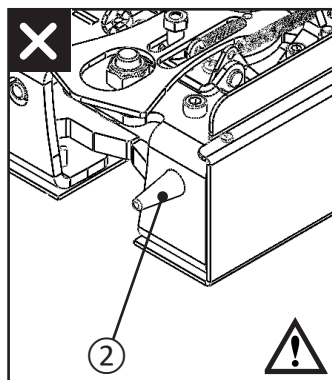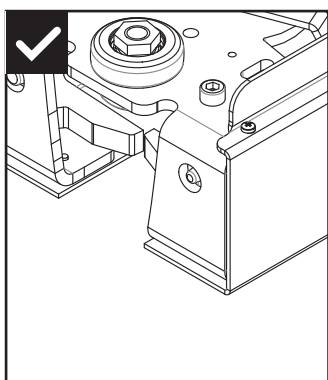


Push traverse rail in the desired direction.

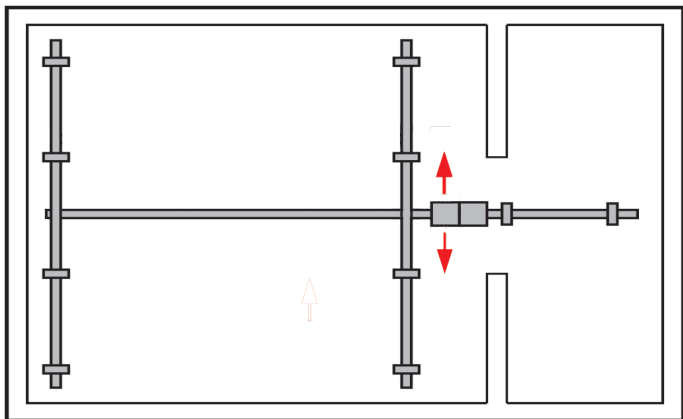


To connect

Before connecting the transition coupling units, ensure trolley is min. 0.5 m away from transition coupling.

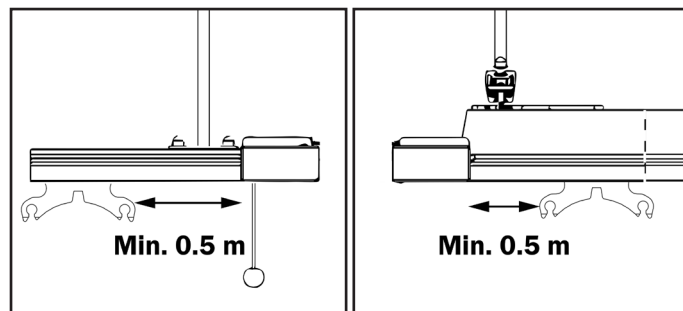

Push the traverse rail towards the stationary rail, so the transition coupling units connect, and you hear a sound.

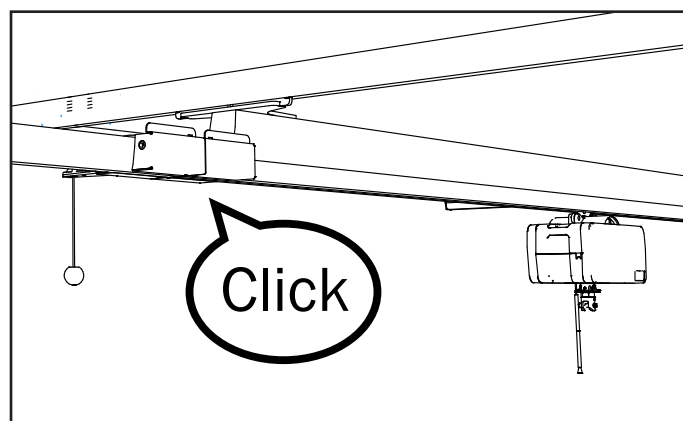

Transfer - connected transition coupling

Do not perform any transfer of user before you have checked the transition coupling units are completely locked together. Pushing the rails apart by hand must be impossible.

The user can now be transferred from one rail to another.



Traverse coupling

Traverse coupling, inspection after installation


Connect traverse coupling and check, hoist loaded w. min 75kg, that the hoist runs freely thru both directions of the Traverse Coupling.

Connect/disconnect traverse coupling 10 times and run thru traverse coupling 10 time wo. stopping. Check that the lock pins on both coupling half returns freely to the bottom position only by spring force.

Insert one hoist Trolley into the rail. Connect traverse coupling. Align the end of the trolley w. the end of the coupling half. Try to disconnect the traverse coupling. The safety mechanism must prevent this. Repeat test for other coupling half.

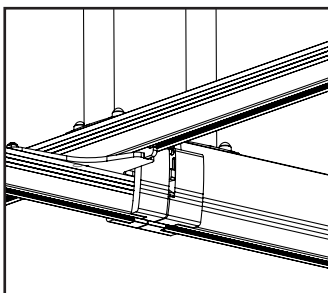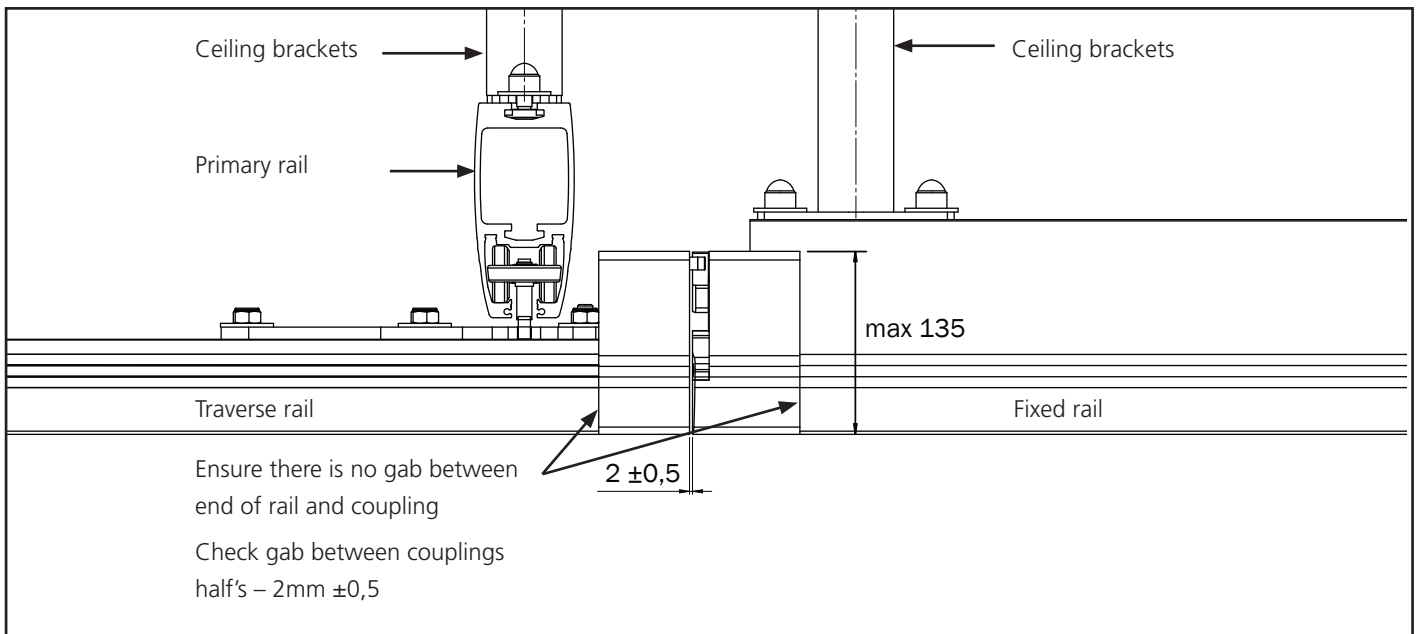

Connected

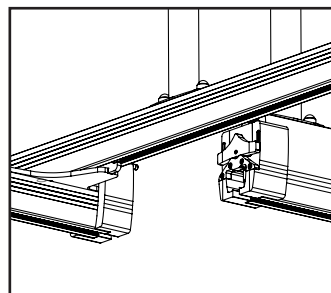


Disconnected

Transfer - connected traverse coupling

The user can now be transferred from one rail to another.

Placement of label

The following label is included in the box with the Traverse coupling. Before use, please attach the label to the Traverse rail as shown below. Make sure the red side is positioned closest to the Traverse coupling.

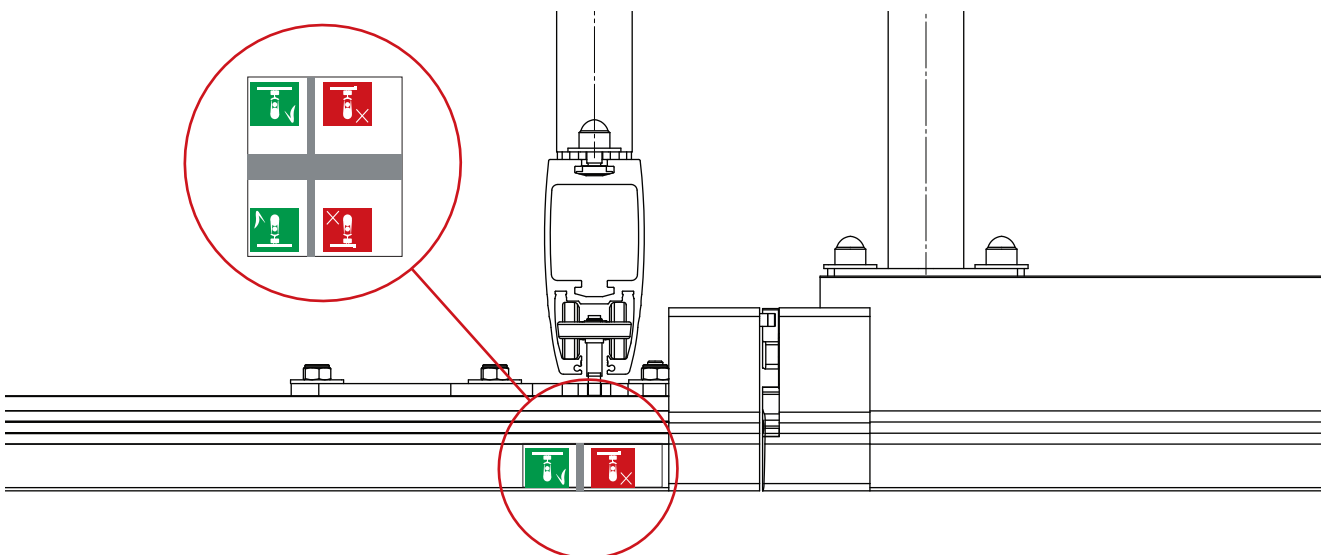

After attaching the label, please cut and remove the thick grey line. This allows the trolley to move freely back and forth along the rail.

Explanation of symbols

White pictogram with green background.
This symbol indicates the optimal placement of the hoist for easy connection of the coupling.



White pictogram with red background.
This symbol indicates a suboptimal placement of the hoist, making coupling connection more difficult.

Cleaning / Disinfection

Clean on a regular basis. Clean surfaces with a damp cloth using an appropriate pH-neutral detergent. Do not use solvents or strong liquids, this may damage surfaces on the hoist. For disinfection when needed; use isopropyl alcohol. Avoid abrasive cleaning products. Check emergency stop and emergency lowering after cleaning. The lift should not be exposed to running water. When installing in environments with a risk of moisture, it is important that the rail system and the motor are regularly washed and dried. A complete guide to reducing the risk of corrosion is available on request.



Make sure not to damage or remove labels when cleaning.



The hoist and hand control have IP24 protection class which indicates: >12.5mm protection against access to hazardous parts, and that water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.



Carer and user is exposed to the following materials: Polypropylene and polyester (slings*), PC/ABS (hand control and hoist cover), powder coated aluminium, powder coated zinc (sling bars).

* = Applied part



In rare cases user or carer exposed to polypropylene and polyester may suffer from allergic reactions such as skin irritation, mild itching and skin tenderness.

Reconditioning

Follow cleaning and installation procedure, complete periodic inspection and use checklist after installation to recondition the hoist.

Recycling

Refer to "Recycling instructions" for how to properly dispose of product. This can be found on www.etac.com.

Spare parts

A list of spare parts is available on request.

Periodic inspection scope

Periodic inspection is a visual examination (particularly of the lifter's load bearing structure and lifting mechanism with attachments, brakes, controls, safety devices and person-support devices) according to Periodic Inspection Report for Molift Air 500.

See www.etac.com.



If there is any problems with the lifter that could jeopardize someones safety, the lifter shall immediately be taken out of service and marked "out of order". Do not use the lifter until it is repaired. Contact your local Molift/Etac dealer/distributor to report any problems.

Periodic Inspection shall be performed at least once a year or more frequently if required by local requirements. The inspection must be performed by service personnel authorized by Etac. Contact Etac at molift@etac.com for training and authorization or recommendation of an approved service partner.

When performing a periodic inspection, the inspector shall fill out the inspection report for Molift Air. The reports should be retained by the person(s) responsible for servicing the lifter. If the inspection reveals defects and damages, the lifter shall be taken out of operation and marked "out of order" until it is repaired.

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause/Action
The lifter does not respond to Hand control action	Emergency Stop is activated. Deactivate by pushing button back in.
	The lifters electronics is overheated. Wait for it to cool down.
	Hand control is not plugged in properly. Hand control or plug or cord can be broken and should be replaced.
The lifter does not respond to Hand control up button	Lifting strap angle sensor is activated. Adjust lifting strap or move hoist to reduce lifting strap angle.
When using Electrical Emergency lowering the lifting band goes upwards	Lifting band has gone completely out, and has been wound the wrong way. Use manual emergency lowering. Send lifter to service.

Wichtiger Hinweis

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise und Informationen für den sicheren Gebrauch des Hebetuchs und des Zubehörs.




Dieses Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin. Befolgen Sie diese Anweisungen bitte genau.



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung!

Es ist sehr wichtig, dass Sie vor Inbetriebnahme des Geräts mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung genau vertraut sind.

Besuchen Sie www.etac.com und vergewissern Sie sich, dass Sie über die neueste Version der Bedienungsanleitung verfügen.

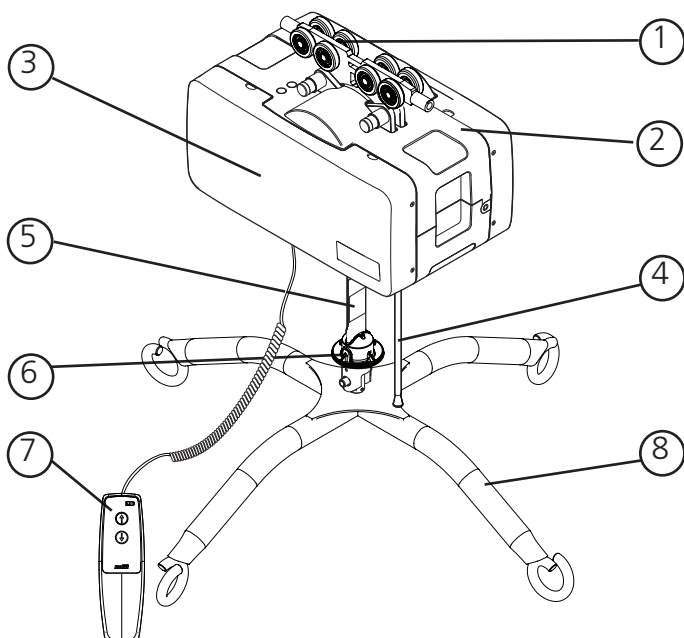Molift Air 500**Bestandteile des Lifts:**

1. Laufschlitten
2. Hubeinheit
3. Seitenabdeckungen
4. Notstoppvorrichtung/
Notabsenkvorrichtung
5. Hebegurt
6. Schnellverschlussbolzen
7. Handsteuerung
8. Spreizstange

Über Molift Air

Molift Air ist ein leistungsfähiger und leichtgängiger Deckenlift, mit dessen Hilfe Patienten und pflegebedürftige Personen sicher und komfortabel umgesetzt werden können.

Molift Air verfügt über einen sehr leichten Motor, der zusammen mit dem Schnellverschlussystem Montage und Wartung einfach macht.

Allgemeines**CE-Erklärung**

Das Produkt und das entsprechende Zubehör, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, entsprechen der Verordnung (EU) 2017/745 von 5. April 2017 - als Medizinprodukt, Risikoklasse I.

Das Produkt wurde von einer dritten Stelle gemäß den Normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und EN/ISO 10535:2021 geprüft und zugelassen.

Jeder schwere Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Bedingungen für die Benutzung

Das Anheben und Umlagern eines Benutzers geht immer mit gewissen Risiken einher. Das Schienensystem muss von zertifiziertem Personal unter Einhaltung der einschlägigen Montageanweisungen montiert werden. Der Lifter ist nicht dafür konzipiert, von dem Benutzer bedient zu werden, der gehoben wird.

Modifikationen und Verwendung von Komponenten anderer Hersteller

Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von Molift-Komponenten und -Ersatzteilen. Wenn am Produkt Modifikationen vorgenommen werden, erlischt die Konformitätserklärung und die von Etac auf das Produkt gegebene Garantie. Für Probleme oder Unfälle, die bei der Verwendung von Komponenten anderer Hersteller auftreten, haftet Etac nicht. Die Verwendung von nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführtem Zubehör, abnehmbaren Teilen und Materialien kann unsicher sein.

Batterien

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie, anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de

Einleitung

Mit „Benutzer“ wird die Person bezeichnet, die im Produkt sitzt. Die „Pflegeperson“ ist die Person, die das Produkt betätigt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Deckenlifter ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Verletzungen oder Behinderungen. Das Produkt ist für Personen vorgesehen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität oder körperlicher Kraft nicht in der Lage sind, aufzustehen und sich selbstständig vom/zum Bett, Fußboden, Rollstuhl, Stuhl, WC usw. zu transferieren.

Vorgesehener Benutzer

Das Produkt kann an einem Schienensystem für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen, die Unterstützung benötigen und zum Transfer gehoben werden müssen, oder beim Gehtraining eingesetzt werden.

Bestimmungsgemäße Anwendungsumgebung

Für die Verwendung in Innenräumen an einem Schienensystem in der Akut-, Langzeit- und häuslichen Pflege.

Indikationen

Für Benutzer, die Unterstützung benötigen und zum Umlagern gehoben werden müssen, oder beim Gehtraining; z. B. Personen mit eingeschränkter Mobilität, deren Körper beim Umlagern bzw. Transfer gestützt werden muss. Keine vollständige Aufzählung. Die für das Produkt vorgesehene Benutzergruppe richtet sich nach dem individuellen Gesundheitszustand und der Bewegungsfähigkeit und nicht auf einer spezifischen Diagnose oder dem Alter.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen

Das Hebetuch muss für Benutzer und Hebebügel passend sein.

Schulungsanforderungen

Nur Pflegepersonen, die die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, dürfen das Produkt verwenden.

Empfohlene Größe des Nutzers

Empfohlene Körpergröße: keine Angabe. Zur Auswahl der Größe des Hebegurts, sind den Bedienungsanleitungen der RGO Sling Gurte zu entnehmen.

Kontraindikationen: es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Wiedereinsatz

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor einem Patientenwechsel oder Wiedereinsatz befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion, zur Wartung sowie der Montage und Anpassung.



Nur zertifiziertes Personal darf den Lift oder das Zubehör öffnen, um Wartung oder Reparaturen vorzunehmen. Aufgrund beweglicher und spannungsführender Teile besteht ein Verletzungsrisiko.



Garantiehinweis

2 Jahre Garantie auf Verarbeitungs- und Materialfehler unserer Produkte.
Ein Jahr Garantie auf Batterien.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.etac.com.


Indikationen

Mobilitätsaufhebung/-einschränkung bei Gebrauchsunfähigkeit und/oder erheblicher Minderung der oberen und unteren Extremität (z.B. Tetraplegie bei Querschnittlähmung oder andere neurologische oder muskulär bedingte Funktionsstörung der oberen und unteren Extremität), die eine selbständige Nutzung anderer Lifter oder Umsetzhilfen nicht mehr zulässt.

Produktkennzeichnung

Produktetikett

Das Produktetikett enthält einen Barcode mit Artikelnummer, Seriennummer und Herstellungsdatum:

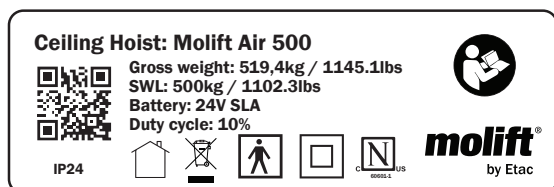

Warnetiketten und Symbole

Die auf dem Produkt verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Schutzklasse 2 (schutzisoliert)



CE-konform



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Maximales Patientengewicht



Nicht im Hausmüll entsorgen



Not-Aus-Schalter/Notabsenkung



Wartungsanzeige



Ladeanzeige



Sechskantschlüsselsymbol für manuelle Notabsenkung



Zeichen der Zertifizierungsstelle



Hersteller



Herstellungsdatum



Katalognummer



Seriennummer



Medizinprodukt



Unique Device Identification



UKCA-konform



Anwendungsteil Typ BF

Technische Daten

Sichere Traglast (SWL)

Molift Air 500: 500 kg

Gewicht des Geräts:

Fahrgestell inkl. Akku, ohne Spreizstange:

14,1 kg (31 lbs)

4-Punkt-Spreizstangen 5,3 kg (11.7 lbs)

Akku:

Art.: 2920007 12 V Bleiakku 2,9 Ah

Akkuladegerät:

Ladegerät für Handsteuerung, Mascot – Typ 3743

Art.-Nr.: 2540100

100-240 V AC, 50-60 Hz max. 0,5 A

Ausgang 0,56 A

IRC-Stromversorgung, Mascot – Typ 3721

Art.-Nr.: 2610119

Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz max. 1,0 A

Ausgang: 24 VDC 1,75 A/42 W

Leistungsaufnahme: 450 W

Leistungsaufnahme (Standby): 0.015 W

IRC-Ladegerät, Mascot – Typ 3844

Art.-Nr.: 2640200

Eingang: 20-30 VDC 1,3 A

Ausgang: 0,5 A

40 mm/sekunden bei 205KG

Hubgeschwindigkeit

60 mm/Sekunde

bei 75 kg Belastung

Schutzklasse

Handsteuerung IP24

Hubmotor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Bedienkraft, Taste

Tasten an der Handbedienung: 3,4 N

Material:

Aluminium, Kunststoff, Stahl

Erwartete Lebensdauer:

Der Lift hat eine erwartete Lebensdauer von 30 000 Zyklen bzw. 15 Jahren. Die Schienen haben eine erwartete Lebensdauer von 30 Jahren.

Abmessungen:

L x B x H (Länge, Breite, Höhe, ohne Laufschlitten)

36 x 24,6 x 19,5 cm

(14,2 x 9,7 x 7,7 Zoll)


A (Hebebereich)

300 cm

B (Mindestabstand zwischen Decke und

Spreizstangenverbindungspunkt) 32,7 cm (12,7/8 Zoll)

Weitere Informationen zu den technischen Daten sowie zu Service und Reparatur finden Sie im technischen Handbuch.

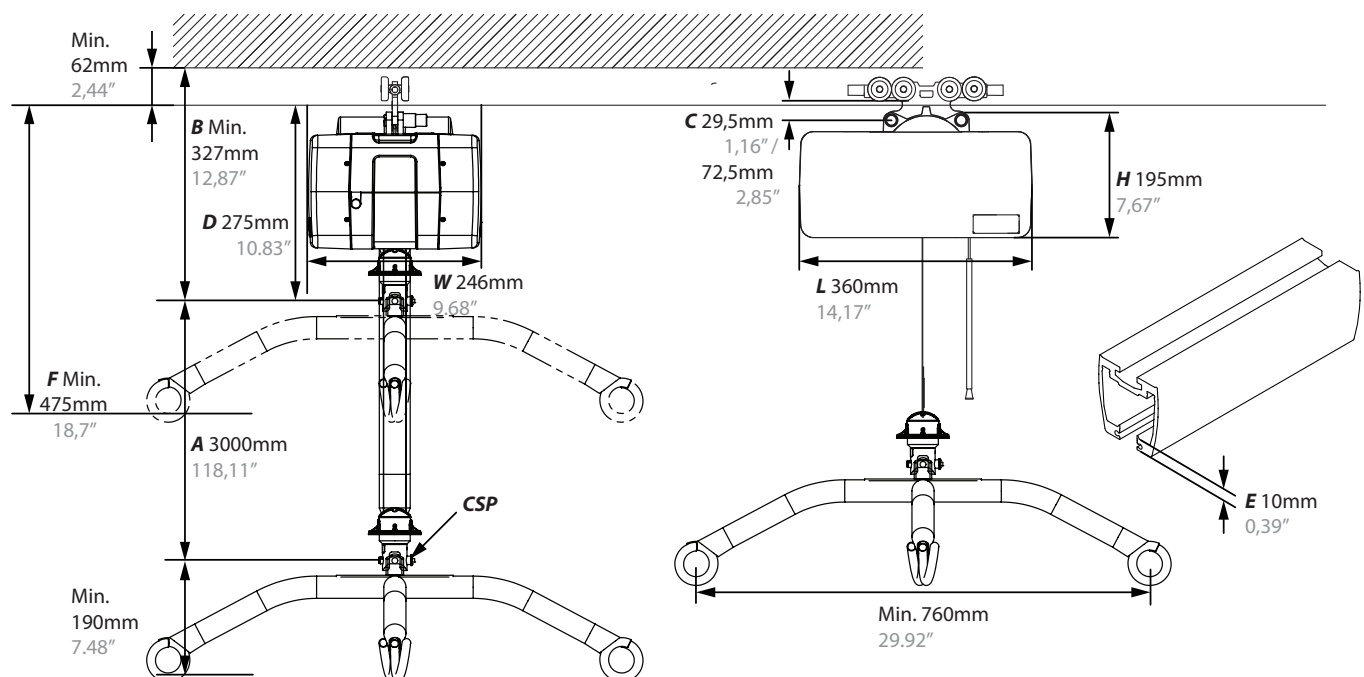

Installation

Der Deckenlifter ist mit dem zulässigen Benutzungsgewicht (SWL) gekennzeichnet, das nicht die maximale Belastbarkeit des Schienensystems übersteigen sollte.




Das Schienensystem darf nur von zertifiziertem Personal und im Einklang mit den einschlägigen Installationsanweisungen installiert werden.



Nehmen Sie den Lifter erst in Gebrauch, nachdem Sie nach der Installation die Checkliste durchgegangen sind.

Installation des Laufschlittens

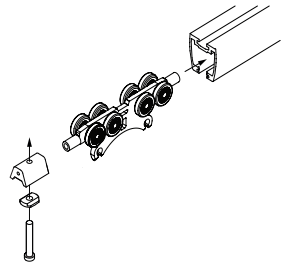

Einsetzen des Laufschlittens im Schienensystem. Entfernen Sie den Endstopper und führen Sie den Laufschlitten in die Schiene ein. Bringen Sie den Endstopper an und vergewissern Sie sich, dass dieser ordnungsgemäß befestigt ist. Siehe BM4401 für Details zur Installation.




Stellen Sie sicher, dass alle Enden des Schienensystems durch Endstopper gesichert sind, bevor Sie den Lifter benutzen!

Lifterinstallation




Seien Sie bei erhöhten Arbeitssituationen vorsichtig. Wir empfehlen zwei oder mehr Monteure, um Gleichgewichtsverlust und Verletzungen während der Installation zu vermeiden!

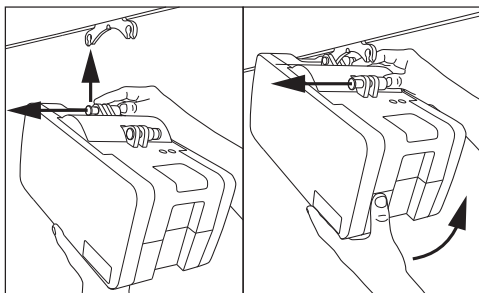

Befestigung des Lifts auf dem Laufschlitten. Keine Werkzeuge erforderlich. Der Lift verfügt über zwei Aufhängungspunkte.

Befestigen Sie zunächst den ersten Punkt. Drücken Sie den Knopf bis zum Anschlag ein, und platzieren Sie dann den Lift in den Verbindungspunkt des Laufschlittens. Lassen Sie den Knopf los und vergewissern Sie sich, dass die grüne Markierung klar zu erkennen ist, bevor Sie den nächsten Punkt befestigen.

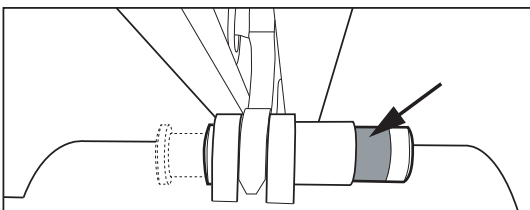

Vergewissern Sie sich, dass beide Verbindungspunktknöpfe vollständig in die Ausgangsposition zurückschnappen und nach der Installation die grüne Markierung bei beiden klar zu erkennen ist. Notabsenkungsschnur und -rohr können durch Zuschneiden an die korrekte Länge bzw. Höhe angepasst werden.

Installation

Verifizieren Sie vor der Inbetriebnahme mit Hilfe dieser Checkliste, dass der Lift ordnungsgemäß installiert ist und vorschriftsmäßig und sicher benutzt werden kann.

- ☐ Endstopper werden nach Installation des Hebeschlittens montiert wie in BM4401 beschrieben
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Hubeinheit korrekt mit der Schiene verbunden ist und der Lift keine losen Teile aufweist.
- ☐ Führen Sie einen Hebevorgang mit einem Gewicht durch (60–80 kg)
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Akku voll geladen ist.

Bedienung des Molift Air

Allgemeine Sicherheitshinweise

Benutzen Sie nur Zubehör und Hebetücher, die dem Benutzer, der Art seiner Behinderung, seiner Größe und seinem Gewicht und der Art der Umsetzung angepasst sind.

Verhältnis Betriebszeit zu Pausen/Arbeitszyklus.

Molift Air 500 sollte nicht dauerhaft länger als 2 Minuten am Stück betrieben werden (unter maximaler Belastung) und dann mindestens 18 Minuten pausieren. Arbeitszyklus 10 %. (Pausenzeit gemäß ISO-EN 10535)



Positionieren Sie die Hubeinheit nicht so, dass das Herausziehen des Netzkabelsteckers erschwert wird. Ziehen Sie zum Isolieren des Systems das Hauptkabel aus der Steckdose.



Falls sich die zulässige maximale Arbeitsbelastung (SWL) der Spreizstange der Hubeinheit und des Trageteils unterscheidet, so ist stets der niedrigere Wert ausschlaggebend



Lifter von Molift dürfen ausschließlich zum Heben von Benutzern verwendet werden. Setzen Sie den Lifter niemals zum Heben oder Bewegen von Objekten aller Art ein.

Vor Gebrauch / Tägliche Prüfung


Die folgenden Prüfmaßnahmen sind vom Pfleger täglich bzw. vor Benutzung durchzuführen:

- ☐ Inspektion des Lifters und des Schienensystems auf sichtbare Schäden, Defekte oder Verformungen
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die Spreizstangenverbindung und alle abnehmbaren Teile ordnungsgemäß verbunden und gesichert sind
- ☐ Test des Not-Aus-Schalters und der Notabsenkung
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige oder die Wartungsanzeige nicht leuchtet
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Hebegurte keine sichtbaren Schäden oder Ausfransungen aufweisen.
- ☐ Testen Sie die operativen Funktionen des Lifters mithilfe eines Probelaufs und stellen Sie sicher, dass der Lifter keine ungewöhnlichen Geräusche macht

Bei Störungen oder Defekten ist der Lifter umgehend außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen („außer Betrieb“). Keine Teile des Molift Air dürfen während des Gebrauchs am Patienten gewartet werden.

Handsteuerung

Die Handsteuerung hat zwei Knöpfe zum Heben und Senken, oder vier Knöpfe, wenn der Lift mit einem Antrieb ausgestattet ist. Die Handsteuerung verfügt über ein Anzeigelicht, das bei niedrigem Ladezustand des Akkus leuchtet und so darauf hinweist, dass der Akku geladen werden muss.

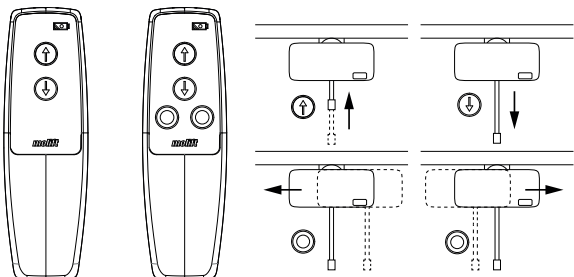


Ziehen Sie den Lifter nicht an der Handsteuerung, um ihn entlang der Schiene zu bewegen.



Der Lifter funktioniert nicht, wenn die Handbedienung an ein Ladegerät angeschlossen ist. Trennen Sie die Handbedienung vom Ladegerät, bevor Sie den Lifter bedienen.

Montage der Spreizstange

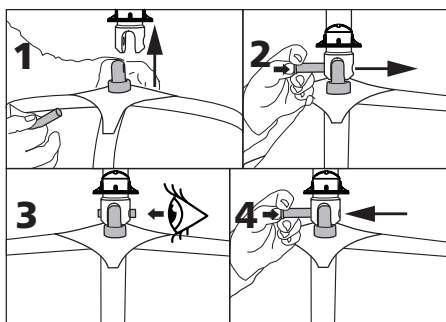


1. Führen Sie die Spreizstange korrekt in den Verbindungspunkt ein.
2. Drücken Sie den Knopf des Verriegelungsstifts ein und schieben Sie den Stift vollständig hindurch.
3. Festen Sitz des Verriegelungsstifts überprüfen.
4. Drücken und halten Sie den Knopf am Verriegelungsstift und ziehen Sie, um den Stift herauszunehmen.


Not-Aus-Schalter/Notabsenkung

Not-Aus-Schalter

Aktivierung und Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters:

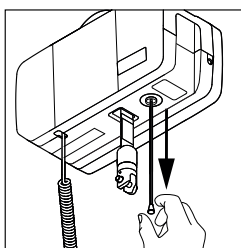


Ziehen, um die Not-Aus-Funktion zu aktivieren. Der Knopf springt heraus, und der Lift hält an.

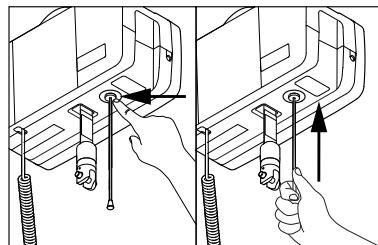

Sie können die Not-Aus-Funktion zurücksetzen, indem Sie den Schalter mit dem Finger oder dem Rohr auf der Schnur wieder zurückdrücken.

Elektrische Notabsenkung





Ziehen und halten, um die Absenkung einzuleiten. Halten, bis der Benutzer abgesenkt wurde und aus der Aufhängung herausgenommen werden kann.

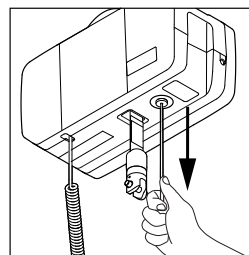

Nur für Notfälle, wenn die Handsteuerung nicht funktioniert!

Manuelle Notabsenkung

Sie finden einen Sechskantschlüssel oder ein Bitstück für einen Akkuschrauber innerhalb des Lifters. Entfernen Sie die Abdeckung beidseitig, um Zugang zu den Werkzeugen zu haben.

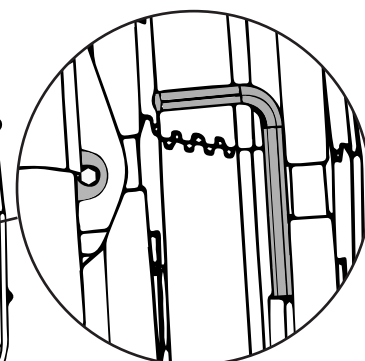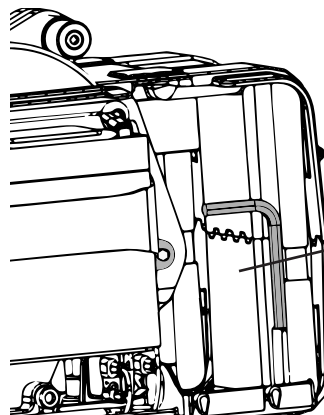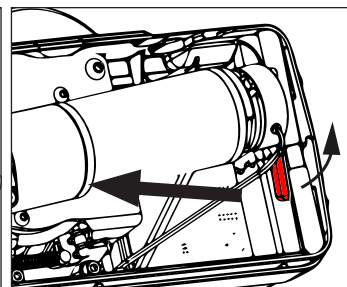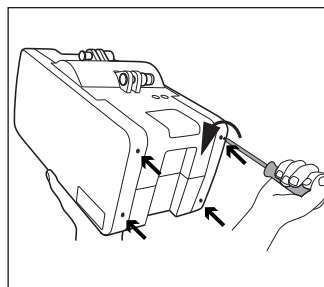

Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers an allen 8 Schrauben (4 auf jeder Seite) die seitlichen Abdeckungen. Drehen Sie den roten „Brake Release“-Griff nach oben. Suchen Sie die Werkzeuge auf der anderen Seite des Lifts und senken Sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn den Hebegurt. Es wird die Benutzung eines Akkuschraubers empfohlen.

Wartung ist NICHT erforderlich, wenn:

- 1) der Grund für die manuelle Notfallabsenkung des Molift Air bekannt ist,
- 2) der Gurt unbeschädigt ist, und
- 3) das Gerät nach der manuellen Notabsenkung normal funktioniert und betrieben werden kann.

Die neue Bremsüberbrückung trägt dazu bei, indem sie die mit der manuellen Notabsenkung einhergehende Beanspruchung der Lifterkomponenten reduziert.

Wenn die Einheit eine Fehlfunktion mit unbekannter Ursache hatte und das manuelle Notabsenkungssystem verwendet wurde, ist eine Wartung erforderlich.

Steuerelektronik

Transport und Lagerung

Für die langfristige Lagerung wird empfohlen, den Not-Aus-Knopf zu aktivieren (herausziehen). Der Lifter kann bei Umgebungstemperaturen von - 25 bis + 70 °C gelagert und transportiert werden.

Betrieb

Der Lifter ist auf die Benutzung bei Zimmertemperaturen ausgelegt (+ 5 bis + 40 °C).

Luftdruck: 70 - 106 kPa

Relative Luftfeuchtigkeit: 15 - 90 %

Nach einer Lagerung oder einem Transport unter abweichenden Temperaturbedingungen muss der Lifter in einem Raum mit geeigneter Temperatur gelagert werden, bis er eine sichere Betriebstemperatur erreicht hat.



Medizinische Elektrogeräte bedürfen spezieller Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilität (EMK). Tragbare oder mobile Funkkommunikationsgeräte können die Funktion medizinischer Elektrogeräte beeinträchtigen und sollten stets mindestens 30 cm Abstand zur Lifter-Elektronik haben.

Batterien

Der Molift Air 500 ist mit einem 24-V-Bleiakku erhältlich. Der Bleiakku hat eine Lebensdauer von ca. 500 Ladezyklen.



Laden Sie den Akku nach Erhalt und danach alle sechs Monate auf, um einen Ausfall des Akkus zu vermeiden.



Akkus müssen als Sondermüll entsprechend den einschlägigen lokalen Bestimmungen entsorgt werden. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Lade- und Wartungsanzeige am Lifter

	Schraubenschlüsselsymbol/ Serviceanzeige
	Batteriesymbol/Ladeanzeige

Das elektrische System verfügt über eine Stromsparfunktion, durch die das elektrische System fünf

Minuten nach dem letzten Betrieb abschaltet. Dann erlöschen alle Anzeigen. Das System kann reaktiviert werden durch Betätigung einer der Betriebstasten auf der Handsteuerung.

Ladeanzeige am Lifter

Wenn die mehrstufige Akkuanzeige gelb aufleuchtet, hat der Lifter noch ausreichend Energie für mindestens einen vollen Hebezyklus mit maximaler Last. Wenn die Batterieanzeige gelb aufblinkt, kann die Spreizstange nur noch abgesenkt werden.

Ladeanzeige	Akkuladestand
	Grün 80 % oder mehr
	Grün 80 - 60 %
	Grün 60 - 40 %
	Grün 40 - 20 %
	Gelb 20 - 0 %
	Gelbes Blinken 0 %

Wartungsanzeige/Regelmäßige Wartung

Die Elektronik des Lifters registriert, wie viele Hebevorgänge mit welcher Gewichtsbelastung durchgeführt wurden. Nach einer bestimmten Gebrauchsdauer leuchtet die LED auf, um die Notwendigkeit einer Wartung anzuzeigen.

Wartungsanzeige	Zustand
Kein Licht	Keine Wartung erforderlich
Gelb	Regelmäßige Inspektion erforderlich
Grün blinkend	Wartung anfordern
Rot	Wartung durchführen

Wartungsumfang

Wenn der Lifter mehrere Hebevorgänge ausgeführt hat (5.000 Hebevorgänge mit der maximal zulässigen Tragfähigkeit (SWL)), leuchtet die Wartungsanzeige rot.

Anschließend muss eine Wartung durch autorisiertes Personal durchgeführt werden, einschließlich Inspektion und Austausch von abgenutzten Teilen.

Wenden Sie sich an Etac oder Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie etac.com, um einen zugelassenen Service-Partner zu finden.

Laden

Molift Air 500 kann über die Handsteuerung mit einem Akku-Ladegerät aufgeladen werden oder über die Schiene per Schienenladung (IRC).


Anzeige am Ladegerät und Anzeige der Stromversorgung

Ladeanzeige	Zustand
Grün blinkend	Nicht an Hubeinheit angeschlossen
Gelb	Laden
Gelb blinkend	Erhaltungsladung
Grün	Vollständig geladen

Stromversorgungsanzeige	Zustand
Blau	An Steckdose angeschlossen


Laden mit der Handsteuerung

Das Akkuladegerät wird mit einer Steckdose verbunden. Wandmontiertes Andocken ist für die Handsteuerung verfügbar. Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel nicht beschädigen. Das Ladegerät kann dauerhaft an eine Steckdose angeschlossen sein. Verwenden Sie nur Molift-Ladegeräte. Die Handsteuerung verfügt über ein Anzeigelicht, das bei niedrigem Ladezustand des Akkus leuchtet und so darauf hinweist, dass der Akku geladen werden muss. Ladegerät für Handsteuerung Molift Air: Art.-Nr.: 2540100

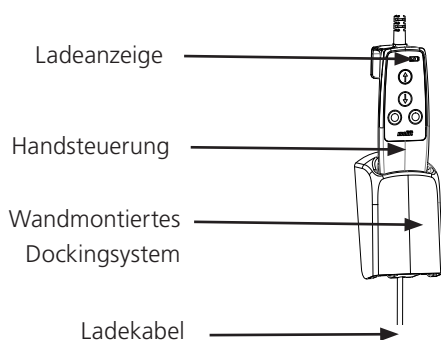


IRC (In Rail Charging) - Schienenladung

Der Lifter wird über ein in den Hebemotor eingebautes Ladegerät dauerhaft über die gesamte Länge des Schienensystems geladen. Der Molift Air IRC verfügt über ein integriertes Ladegerät, das an den Akku angeschlossen ist. Dieses muss mit dem IRC-Laufschlitten und einem leitenden Klebeband in einem Schienensystem installiert werden. Der IRC-Laufschlitten wird im Inneren des Molift Air IRC an das Akku-Ladegerät angeschlossen. Dadurch hat der IRC-Laufschlitten stets Kontakt zum leitenden Klebeband in der Schiene. Die IRC-Stromversorgung wird über den IRC-Anschluss am Schienenende mit dem leitenden Klebeband verbunden und versorgt das Akku-Ladegerät im Molift Air IRC mit Strom.

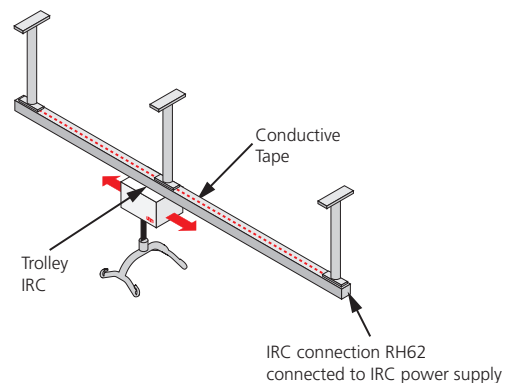

IRC ist für Einzelschienen- und Traversensysteme geeignet.

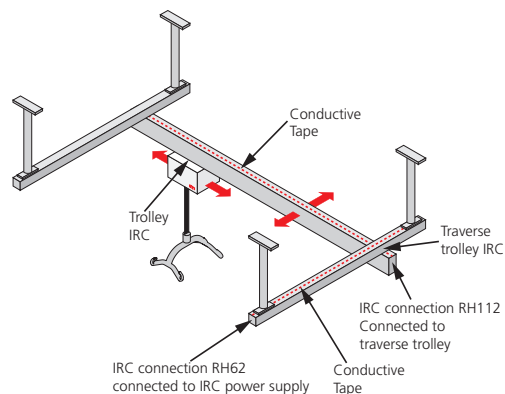

IRC-Stromversorgung

Art.-Nr.: 2610119

Ladegerät 3844 DC/DC (Teil des Molift Air IRC)

Art.-Nr.: 2640200

Transfer

Planen Sie den Hebetransfer im Voraus, um sicherzustellen, dass alles so sicher und störungsfrei wie nur möglich abläuft. Denken Sie an eine ergonomische Arbeitsweise. Bewerten Sie die Risiken und machen Sie entsprechende Notizen. Der Helfer ist für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich.

Benutzung von Hebetüchern

Es ist wichtig, dass das Hebetuch mit jedem einzelnen Benutzer und für jede Hebesituation individuell getestet wird.



Vor dem Gebrauch des Hebetuchs die Bedienungsanleitung lesen.



Keine beschädigten oder stark abgenutzten Hebetücher verwenden.

Gerätekombinationen und Kompatibilität der Hebetücher

Bei der Kombination des Medizinprodukts mit anderen Produkten oder Zubehöerteilen dürfen durch die Kombination der vom Hersteller festgelegte vorgesehene Verwendungszweck der Produkte nicht verändert und die Produkte nicht derart modifiziert werden, dass die Einhaltung der geltenden Anforderungen oder die sichere Verwendung des Produkts beeinträchtigt werden kann.


Benutzen Sie nach Möglichkeit Etac- oder Molift-Hebetücher. Der Lifter kann mit Hebetüchern anderer Hersteller kombiniert werden. Kompatibilitätserklärungen finden Sie unter www.etac.com.

Die für die Kombination der Produkte verantwortliche Person/Firma muss sicherstellen, dass die geltenden Anforderungen erfüllt werden.


Elektrischer Schutz in Kombination mit Hebetüchern:
Anwendungsteil Typ BF.

Heben und Senken


Wenn Sie den Benutzer bewegen, stellen Sie sich beim Anheben neben die Person. Sorgen Sie dafür, dass Arme und Beine nicht eingeklemmt werden (Bett, Stuhl usw.). Versuchen Sie, Augenkontakt zu halten, denn dadurch fühlt sich der Benutzer gut aufgehoben.

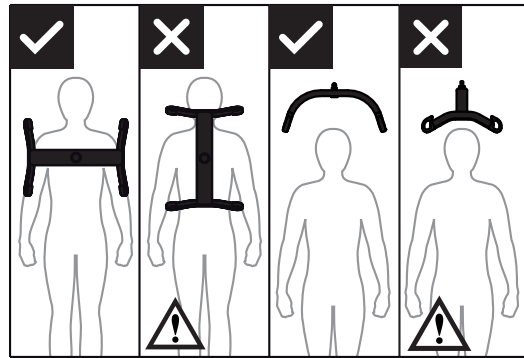

Die 4-Punkt-Spreizstange muss immer horizontal zum Benutzer ausgerichtet sein, um zu verhindern, dass dieser aus dem Hebetuch rutscht.

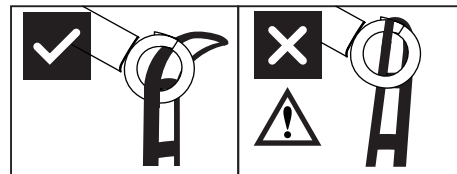


Bei korrekter Montage verhindert das Design der Spreizstangenhaken, dass sich das Hebetuch unbeabsichtigt löst.

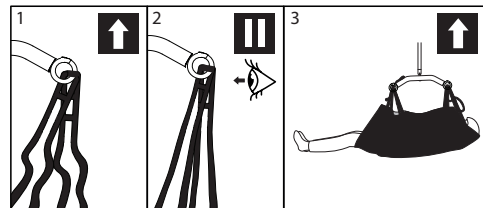

1. Stellen Sie sicher, dass das Hebetuch ordnungsgemäß am Benutzer anliegt und die Gurtschlaufen ordnungsgemäß an den Aufhängungshaken befestigt sind.
2. Ziehen Sie die Schlaufengurte des Hebetuchs an, ohne dabei den Benutzer anzuheben. Stellen Sie sicher, dass alle vier Schlaufen des Hebetuchs korrekt befestigt sind, um ein Herausrutschen oder Herausfallen des Benutzers zu verhindern.
3. Heben Sie den Benutzer an und führen Sie den Transport durch.

Winkelsensor

Der Lift verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die das Anheben verhindert, wenn der Winkel des Hebegurts zu steil ist.

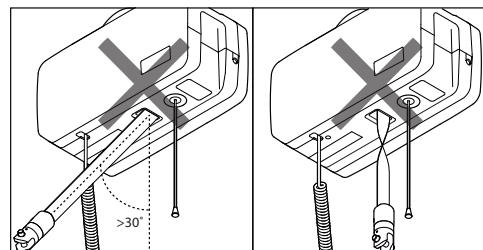

Wenn der Lift nicht auf den Hebeknopf der Handsteuerung reagiert, so liegt dies gegebenenfalls daran, dass der Winkel des Hebegurts zu steil ist oder der Hebegurt sich verdreht hat und der Sensor aktiviert ist.


Zubehör

Ladekabel und Stecker.

Steckeradapter EU, Art.-Nr. 2510365
 Steckeradapter UK, Art.-Nr. 2510366
 Steckeradapter US, Art.-Nr. 2510367
 Steckeradapter AUS, Art.-Nr. 2510368
 Kabel EU, Art.-Nr. 1140105
 Kabel UK, Art.-Nr. 1140106
 Kabel US, Art.-Nr. 1140104
 Kabel AUS, Art.-Nr. 1140107
 Wandhalterung für Ladegerät, art. no. 2610123

Spreizstangen

Molift Air kann mit einer 4-Punkt- oder 8-Punkt-Spreizstange benutzt werden.

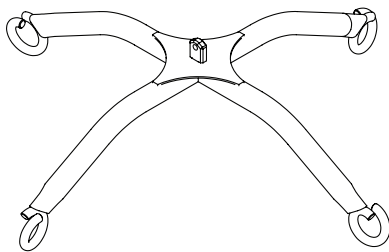

4-Punkt-Spreizstange, Stahl
 Art.-Nr.: 2140003

Hebetücher

Etac bietet eine breite Auswahl von Hebetüchern für Transportaufgaben aller Art an. Das Hebetuch der Serie Molift RgoSling kann sowohl mit einer 4-Punkt-Hebebügel mit Schlaufenverbindungen entwickelt. Der Hebetucher funktioniert auch mit einem 2-Punkt-Hebebügel. Ein Verzeichnis der korrekten Kombinationsmöglichkeiten für die einzelnen Hebetücher und Spreizstangen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Hebetücher.

Die Hebetuch-Serie Molift RgoSling ist in den Größen XXS – XXL aus Polyester oder aus Polyester-Netzgewebe erhältlich. Die vollständige Liste der Hebetücher und Spreizstangen finden Sie unter www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ambulating Vest
 Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
 Molift RgoSling Fabric Stretcher
 Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XXL)

Zubehör:


Molift RgoSling Verlängerungsschlaufen

Art.-Nr.: 1721600


Molift RgoSling Ambulating Vest Lendengurt (XXS-XL)

Übergangskupplung

An einigen Schienensystemen sind Übergangskupplungen ① montiert. Diese werden verwendet, um den Benutzer von einem Schienensystem auf ein anderes zu transferieren, z. B. zwischen zwei verschiedenen Räumen.

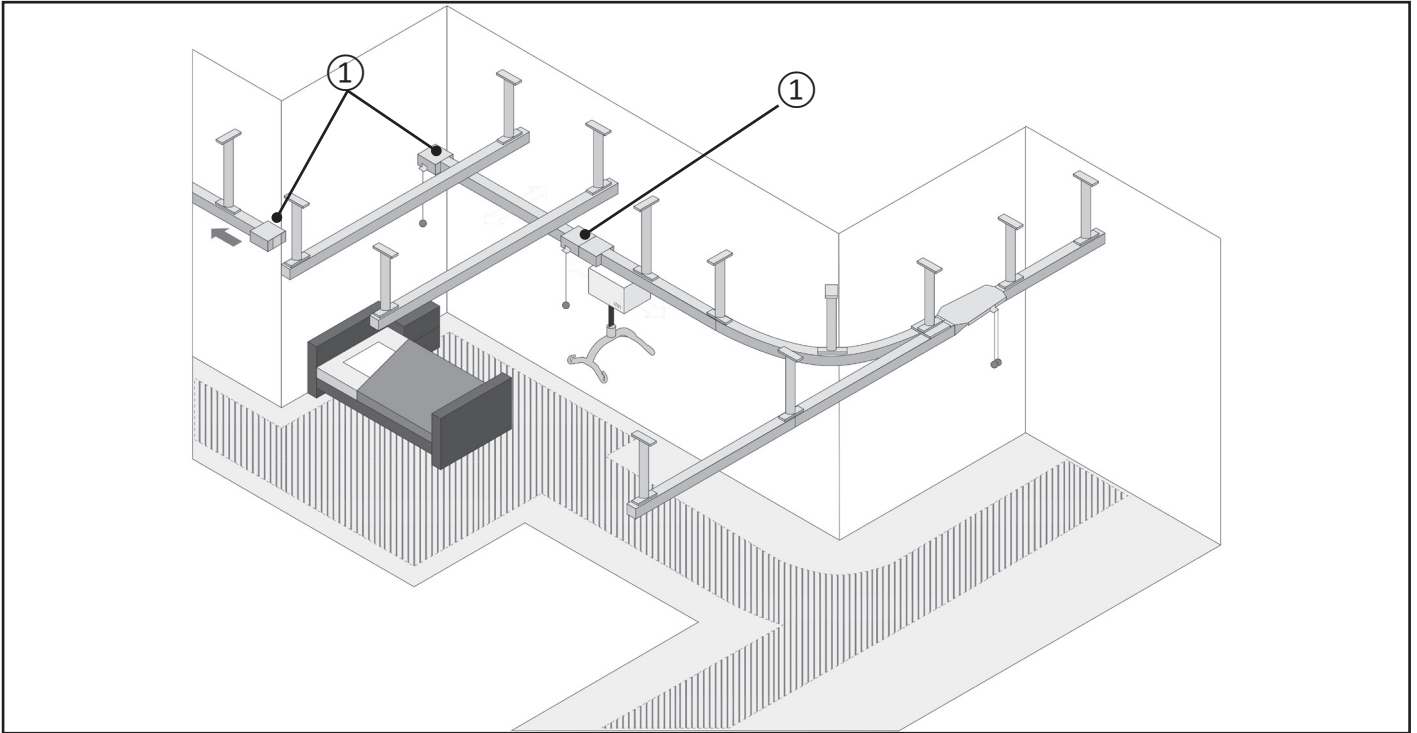


Bestandteile

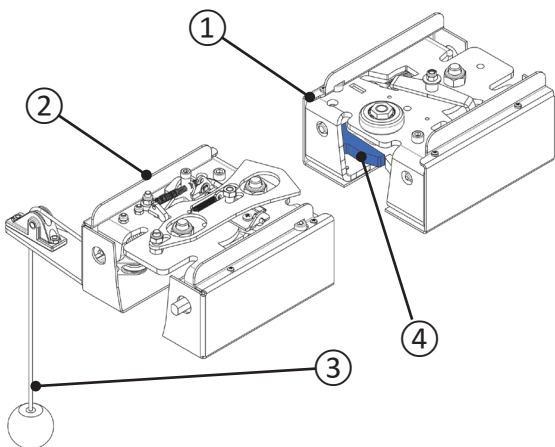


- ① Übergangskupplungseinheit
- ② Übergangskupplungseinheit mit Umlenkrolle
- ③ Umlenkrolle mit Knauf
- ④ Verschluss (zwei Stück pro Einheit)

Zustände

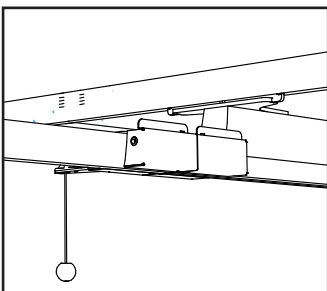


Angekoppelt

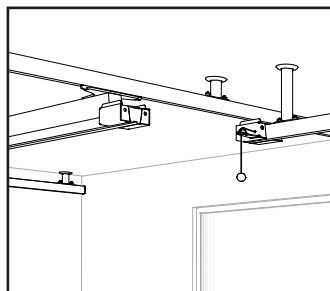


Abgekoppelt

Abkuppelung

Stellen Sie vor dem Abkoppeln der Übergangskupplung sicher, dass der Laufschlitten mind. 0,5 m von der Übergangskuppelungseinheit entfernt ist.

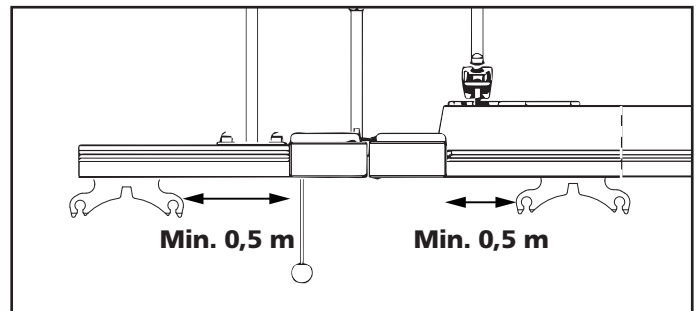

Ziehen Sie die Umlenkrolle bis zum Anschlag nach unten. Sie hören ein Geräusch, das die Abkuppelung bestätigt.

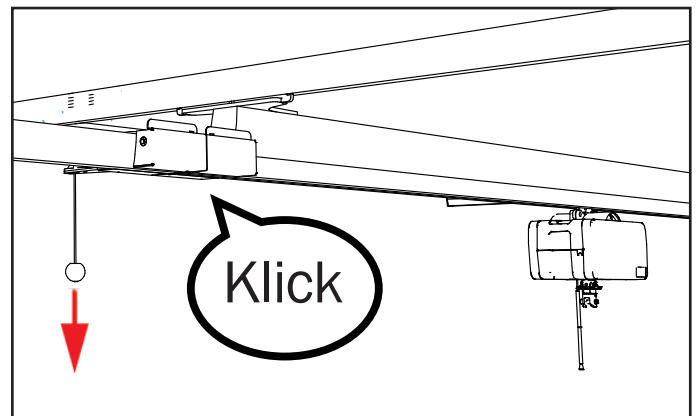


Die Übergangskupplung ist jetzt abgekoppelt.



Transfer – abgekoppelte Übergangskupplung

Führen Sie erst Benutzertransfers durch, nachdem Sie Folgendes überprüft haben:


Beide Verschlüsse ① sind sichtbar
(Übergangskupplungseinheit von unten aus gesehen).

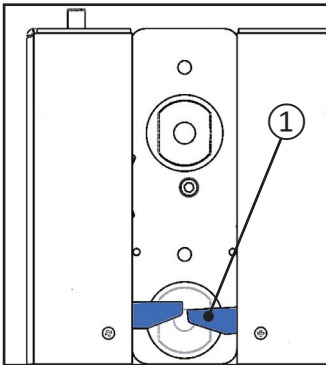

Sicherungsbolzen ② darf beim Abkoppeln der Kupplung **nicht** sichtbar sein.

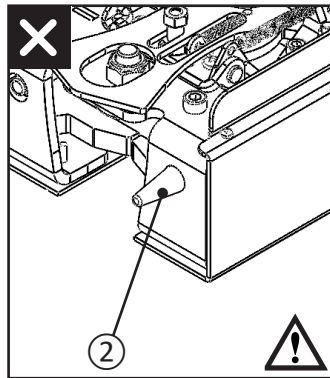
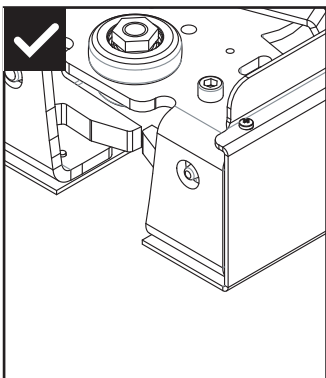


Schieben Sie die Traversenschiene in die gewünschte Richtung.

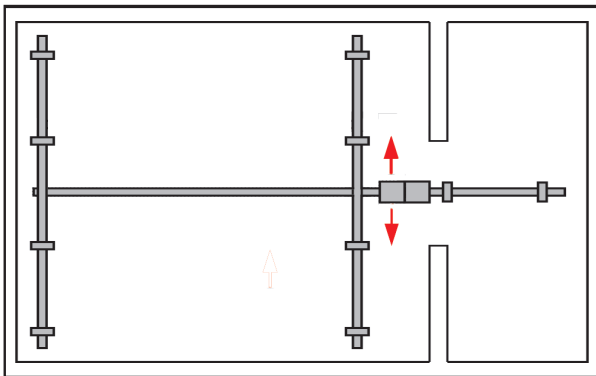


Ankoppelung

Stellen Sie vor dem Ankoppeln der Übergangskupplungseinheiten sicher, dass der Laufschlitten mind. 0,5 m von der Übergangskupplungseinheit entfernt ist.

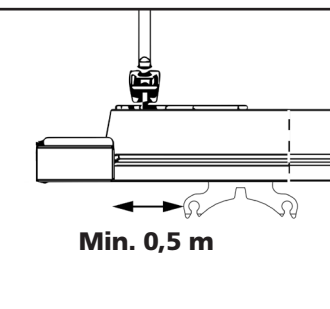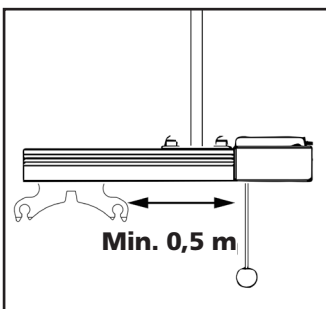

Schieben Sie die Traversenschiene in Richtung der stationären Schiene, sodass sich die Übergangskupplungseinheiten verbinden und Sie ein Geräusch hören.

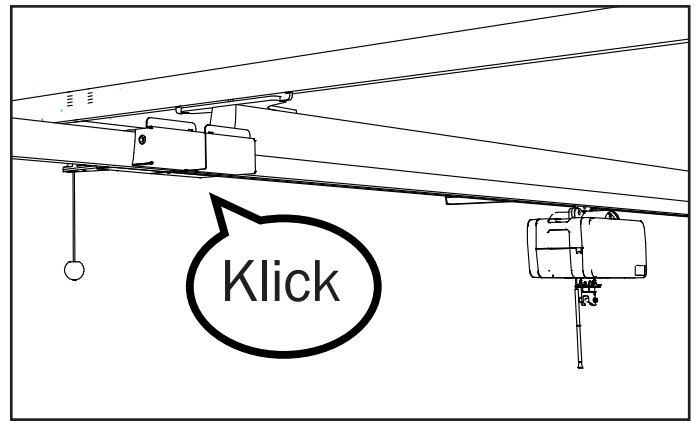

Transfer – angekoppelte Übergangskupplung

Führen Sie erst Benutzertransfers durch, nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Übergangskupplungseinheiten vollständig miteinander verbunden sind. Die Schienen dürfen sich nicht von Hand auseinanderschieben lassen.

Der Benutzer kann nun von einer Schiene auf eine andere transferiert werden.

Reinigung/Desinfizierung

Regelmäßig reinigen. Säubern Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mithilfe eines geeigneten pH-neutralen Reinigers. Verzichten Sie auf den Einsatz von Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche des Lifters beschädigen können. Regelmäßig reinigen. Säubern Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mithilfe eines geeigneten pH-neutralen Reinigers. Für die Desinfektion (sofern erforderlich): Benutzen Sie Isopropylalkohol oder reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung mit einem pH-Wert von 5-9. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Überprüfen Sie nach der Reinigung den Not-Aus-Schalter und die Notabsenkung. Der Lift sollte nie unterfließendes Wasser gehalten werden. Bei der Installation in feuchtigkeitsgefährdeten Umgebungen ist es wichtig, dass das Schienensystem und der Motor regelmäßig gewaschen und getrocknet werden. Eine vollständige Anleitung zur Reduzierung des Korrosionsrisikos ist auf Anfrage erhältlich.



Traversenkupplung

Traversenkupplung, Inspektion nach Montage


Lassen Sie die Traversenkupplung einrasten und prüfen Sie, ob der Lifter mit mindestens 75 kg Last in beide Richtungen der Traversenkupplung frei läuft.

Traversenkupplung 10 Mal ein-/auskuppeln und 10 Mal ohne Anhalten durch die Traversenkupplung fahren. Prüfen Sie, ob die Arretierstifte an beiden Kupplungshälften nur durch Federkraft frei in die untere Position zurückkehren.

Eine Laufkatze in die Schiene einsetzen. Traversenkupplung einkuppeln. Richten Sie das Ende der Laufkatze mit dem Ende der Kupplungshälfte aus. Versuchen Sie, die Traversenkupplung auszukuppeln. Der Sicherheitsmechanismus muss dies verhindern. Wiederholen Sie die Prüfung für die andere Kupplungshälfte.

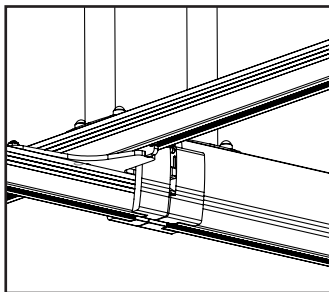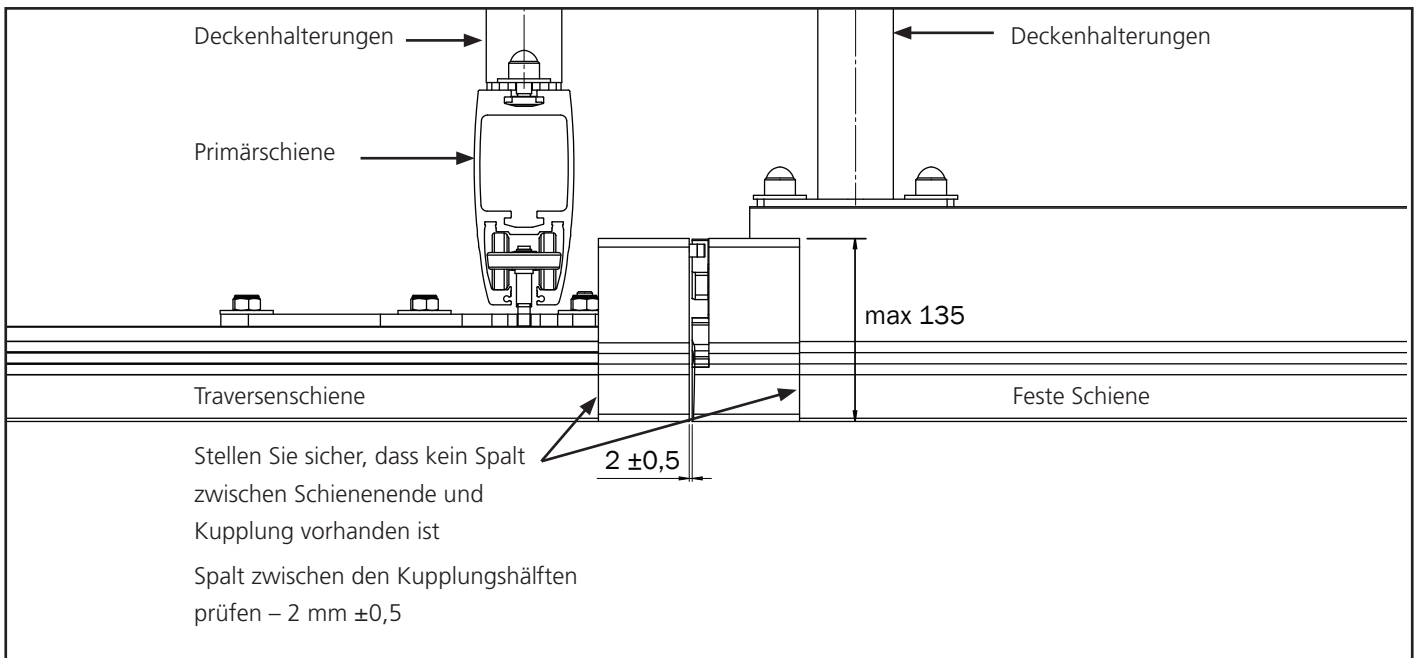

Angekoppelt

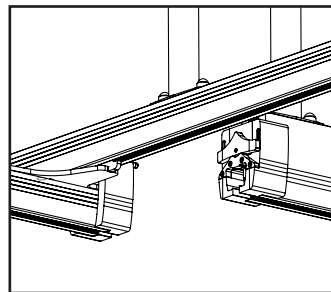


Disconnected

Transfer – angekoppelte Übergangskupplung

Der Benutzer kann nun von einer Schiene auf eine andere transferiert werden.

Anbringen des Aufklebers

Der folgende Aufkleber liegt im Karton der Traversenkupplung bei. Bringen Sie vor der Verwendung den Aufkleber wie unten gezeigt an der Traversenschiene an. Stellen Sie sicher, dass die rote Seite der Traversenkupplung am nächsten liegt.

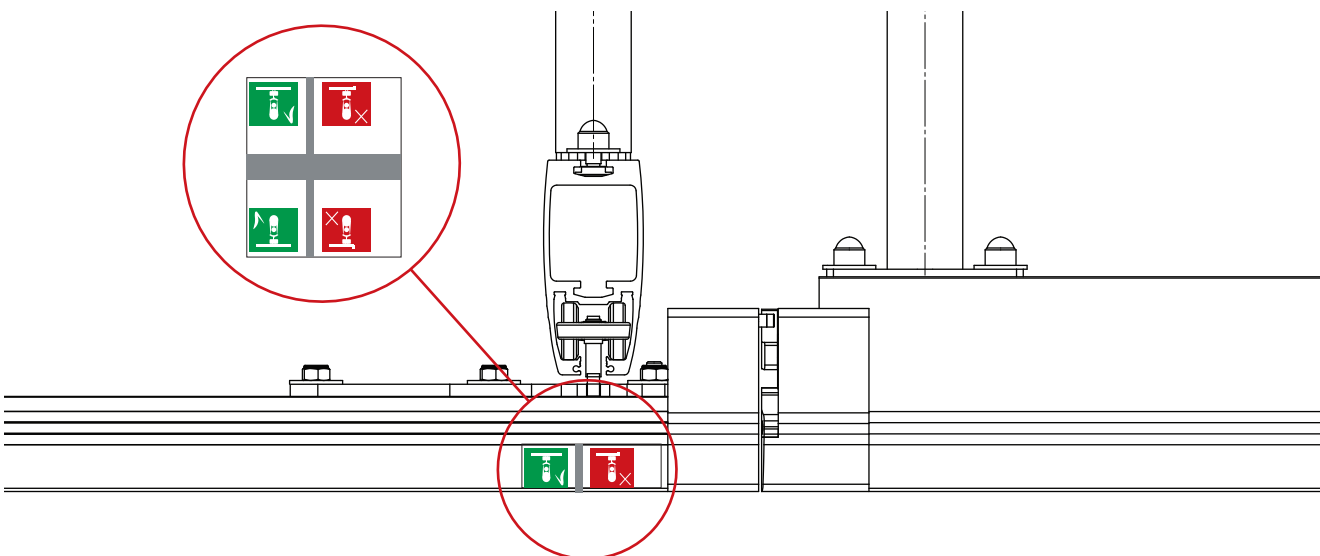

Schneiden Sie nach dem Anbringen des Aufklebers die dicke graue Linie aus und entfernen Sie diese. Dadurch kann sich das Fahrwerk frei entlang der Schiene vor- und zurückbewegen.

Symbolerklärung

Weißes Piktogramm mit grünem Hintergrund. Dieses Symbol zeigt die optimale Positionierung des Lifters für einen einfachen Anschluss der Kupplung.



Weißes Piktogramm mit rotem Hintergrund. Dieses Symbol zeigt eine suboptimale Positionierung des Lifters, die den Anschluss der Kupplung erschwert.

Reinigung/Desinfizierung

Regelmäßig reinigen. Säubern Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mithilfe eines geeigneten pH-neutralen Reinigers. Verzichteten Sie auf den Einsatz von Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche des Lifters beschädigen können. Für die Desinfektion (sofern erforderlich): Benutzen Sie Isopropylalkohol. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Überprüfen Sie nach der Reinigung den Not-Aus-Schalter und die Notabsenkung. Der Lift sollte nie unter fließendes Wasser gehalten werden.



Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Etiketten nicht beschädigt oder entfernt werden.



Die Hubeinheit und die Handsteuerung haben die Schutzart IPX4. Dies bedeutet: >12,5 mm Schutz vor gefährlichen Teilen und dass Wasser, das in einem beliebigen Winkel gegen das Gehäuse spritzt, keine schädliche Wirkung haben darf.



Pflegeperson und Kunde kommen mit den folgenden Materialien in Berührung: Polypropylen und Polyester (Hebetücher*), PC/ABS (Handsteuerung und Abdeckung für die Hebeeinheit), pulverbeschichtetes Aluminium, pulverbeschichtetes Zink (Spreizstangen).
* = Anwendungsteil



In seltenen Fällen können bei Kunden oder Pflegepersonen, die mit Polypropylen oder Polyester in Berührung kommen, allergische Reaktionen wie Hautreizungen, leichter Juckreiz oder empfindliche Haut auftreten.

Instandsetzung

Befolgen Sie die Reinigungs- und Installationsanweisungen, führen Sie regelmäßige Inspektionen durch und gehen Sie nach der Installation die Checkliste durch, um den Lifter wieder instandzusetzen.

Recycling

In den „Recyclinganweisungen“ finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts. Diese finden Sie auf www.etac.com.

Ersatzteile

Eine Ersatzteilliste ist auf Anfrage verfügbar.

Umfang der regelmäßigen Inspektion

Die regelmäßige Inspektion umfasst eine visuelle Untersuchung (insbesondere in Bezug auf das lasttragende Gestell des Lifters und den Hebemechanismus mit Befestigungsvorrichtungen, Bremsen, Steuerelementen, Sicherheitsvorrichtungen und Personenträgern) gemäß dem Regelmäßigen Inspektionsbericht von Molift Air 500. Besuchen Sie www.etac.com.



Sollte mit dem Lifter ein Problem bestehen, das die Sicherheit von Menschen gefährden könnte, so muss dieser sofort außer Betrieb genommen und deutlich als „außer Betrieb“ gekennzeichnet werden. Eine Benutzung darf erst nach der Reparatur erfolgen. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren lokalen Molift/Etac-Händler/-Vertriebspartner.

Die regelmäßige Inspektion muss mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden, je nach den lokalen Anforderungen auch häufiger. Die Inspektionen dürfen nur von Wartungspersonal durchgeführt werden, das von Etac dazu autorisiert worden ist. Kontaktieren Sie Etac auf molift@etac.com wegen der erforderlichen Schulungen und Autorisierungen oder um einen autorisierten Service-Partner zu erfragen.

Der Inspektor muss bei der Durchführung einer periodischen Inspektion den Inspektionsreport für Molift Air ausfüllen. Die Berichte sollten von der/den Person(en) verwahrt werden, die für die Wartung des Lifters verantwortlich ist/sind. Werden bei der Wartung Defekte und Schäden entdeckt, sollte der Lifter außer Betrieb genommen und bis zur vollständigen Reparatur als „außer Betrieb“ gekennzeichnet werden.

Fehlersuche und -behebung

Symptom	Mögliche Ursache/ Maßnahme
Der Lifter reagiert nicht auf die Betätigung der Handsteuerung	Not-Aus-Schalter ist aktiviert. Deaktivieren durch erneutes Eindrücken des Schalters.
	Die Elektronik des Lifters ist überhitzt. Warten Sie, bis der Lifter wieder abgekühlt ist.
	Die Handsteuerung ist nicht korrekt eingesteckt. Die Handsteuerung, der Stecker oder das Kabel kann beschädigt worden sein und sollte in diesem Fall ausgetauscht werden.
Der Lifter reagiert nicht auf den Hebeknopf der Handsteuerung	Der Winkelsensor des Hebegurts ist aktiviert. Passen Sie den Hebegurt entsprechend an oder bewegen Sie den Lift, um den Winkel zu verringern.
Wenn die elektrische Notabsenkung verwendet wird, bewegt sich das Hebeband nach oben.	Das Hebeband ist vollständig draußen und wurde falsch aufgewickelt. Verwenden Sie die manuelle Notabsenkung. Schicken Sie den Lifter zur Wartung.

Viktig

Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om bruk av seilet og tilbehøret.




Dette symbolet indikerer viktig informasjon om sikkerhet. Disse instruksjonene må følges nøye.



Les bruksanvisningen før bruk!
Det er viktig å forstå bruksanvisningens innhold fullt og helt før utstyret betjenes.

Gå til www.etac.com for å laste ned dokumentasjon, slik at du har den nyeste utgaven.

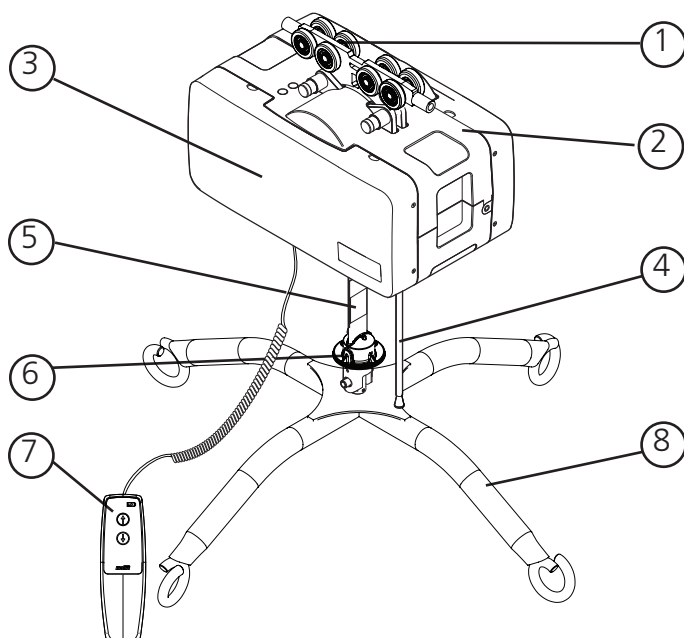Molift Air 500**Løfterens komponenter:**

1. Løpehjul
2. Løfter
3. Sidedeksler
4. Nødstopp/nødsenking
5. Løftestropp
6. Hurtigutløserpinne
7. Håndkontroll
8. Løftebøyle

Om Molift Air

Molift Air er en kraftig takløfter som gjør det mulig å forflytte pasienter og beboere på en komfortabel og sikker måte. Molift Air er en svært lett motor, som i kombinasjon med koblingssystemet med hurtigutløser gir enkel håndtering ved montering og service.

Generelt**Samsvarserklæring**

Produktet og tilhørende tilbehør, som er beskrevet i denne bruksanvisningen, er i samsvar med forordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 - som medisinsk utstyr, risikoklasse I. Produktet er testet og godkjent av en tredjepart i henhold til standardene IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og EN/ISO 10535:2021. Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

Bruksbetingelser

Løfting og forflytning av en bruker medfører alltid en viss risiko. Skinnesystemet skal installeres av sertifisert personell i samsvar med gjeldende installasjonsanvisning. Løfteren er ikke ment for å betjenes av brukeren som løftes.

Endringer og bruk av komponenter som er laget av andre produsenter

Vi anbefaler at det kun brukes Molift komponenter og reservedeler. Samsvarserklæringen blir ugyldig, og Etac står ikke ansvarlig for garantien, dersom utstyret er utsatt for modifikasjoner. Etac har intet ansvar for eventuelle feil eller ulykker som kan oppstå ved bruk av komponenter fra andre produsenter. Det kan være farlig å bruke tilbehør, avtakbare deler og materialer som ikke er angitt i denne bruksanvisningen.



Bare autorisert personale har tillatelse til å åpne løfteren eller tilbehøret for å utføre service eller reparasjoner. Fare for skade som følge av roterende deler og elektrisk støt.

**Garantimelding**

To (2) års produktgaranti mot feil i materialer og arbeidsutførelse.
Ett (1) års batterigaranti.
Les vilkår og betingelser på www.etac.com.

Innledning

Personen som betegnes som «brukeren», er personen som sitter i produktet. «Pleieren» er personen som manøvrerer produktet.

Tiltenkt bruk

Den mobile løfteren er et hjelpemiddel for å avhjelpe eller kompensere for nedsatt funksjonsevne på grunn av skade eller funksjonsnedsettelse. Utstyret er utformet for personer som ikke kan reise seg og forflytte seg til/fra en seng, gulvet, en rullestol, en stol, et toalett eller lignende på grunn av nedsatt bevelighet eller redusert fysisk styrke.

Tiltenkt bruker

Utstyret kan brukes av barn, voksne og eldre som trenger støtte for å løftes og forflyttes over kortere avstander.

Tiltenkt miljø

For innendørsbruk i akuttpleie, langtidspleie og hjemmepleie.

Indikasjoner

For users who are in need of support to be lifted and transferred or during gait training; e.g. people with limited ability to move and who require body support during transfers. Not an exhaustive list.

The user group for the device is based on individual health and mobility function and not on a specific diagnosis or age.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

Forholdsregler

Kontroller at seilet passer til brukeren og løftebøylen.


Opplæringskrav

Utstyret skal bare brukes av pleiere som har lest og forstått bruksanvisningen.

Produktidentifisering

Produktetikett

Strekken på produktetiketten inneholder artikkelnummer, serienummer og produksjonsdato:

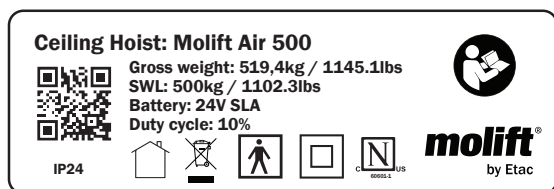

Advarselsetiketter og symboler

Detaljert forklaring av symboler på produktet:



Klasse II dobbeltisolert



CE-merket



Se bruksanvisningen



Kun for bruk innendørs



Maks. pasientvekt



Skal ikke kastes som restavfall



Nødstopp/
Nødsenking



Servicelampe



Batterilampe



Unbrakoverktøysymbol for manuell nødsenking



Sertifiseringsorganets merke



Produsent



Produksjonsdato



Katalognummer



Serienummer



Medisinsk utstyr



Unik enhetsidentifikasjon



UKCA-merket



Type BF påført del

Tekniske data

Sikker arbeidsbelastning (SWL)

Molift Air 500: 500 kg (1102 lb)

Enhetens vekt:

Chassis inkl. batteri, ekskl. løftebøyle:

14,1 kg (31 lb)

4-punkts løftebøyle: 5,3 kg (11,7 lb)

Batteri:

Art.nr: 2920007 12 V SLA 2.9 Ah

Batterilader:

Lader for håndkontroll, Mascot – type 3743

Art.nr.: 2540100

100–240 V AC, 50–60 Hz maks 0,5 A

Strømutgang 0,56 A

IRC-strømforsyning, Mascot – type 3721

Art.nr.: 2610119

Inngang: 100–240 V AC, 50–60 Hz maks 1,0 A

Utgang: 24 VDC 1,75 A/42 W

IRC-lader, Mascot – type 3844

Art.nr.: 2640200

Inn: 20–30 V DC 1,3 A

Strømutgang 0,5 A

Løftehastighet

60 mm/sekund (2,36 tommer/sekund)

med 75 kg (165,35 lb) belastning

Beskyttelsesklasse

Håndkontroll IP24

Løftemotor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Betjeningskraft, knapp

Knapper på håndsett: 3,4 N

Materiale:

Aluminium, plast, stål

Forventet levetid:

Løfteren har en forventet levetid på 30 000 sykluser med sikker arbeidsbelastning eller 15 år. Skinnene har en forventet levetid på 30 år.

Dimensjoner:

L x B x H (lengde, bredde, høyde uten løper)

36 x 24,6 x 19,5 cm

(14,2 x 9,7 x 7,7 tommer)


A (løfteområde)

300 cm (118 tommer)

B (Minsteavstand fra tak til løftebøyle

koblingspunkt) 32,7 cm (12,87 tommer)

Se teknisk håndbok for ytterligere informasjon om tekniske data og hvordan service og reparasjon utføres.

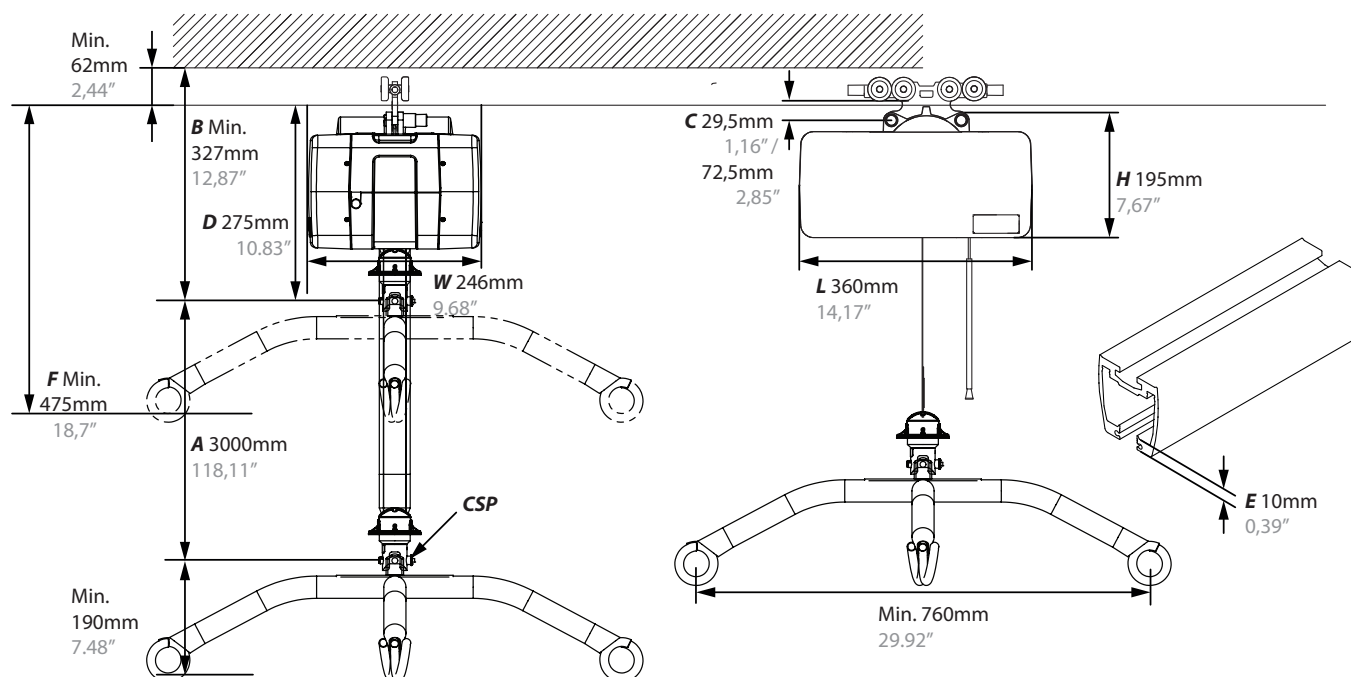

Installasjon

Løfteren er merket med sikker arbeidsbelastning (SWL), som ikke overskrider skinnesystemets maksimale lastekapasitet.




Skinnesystemet skal kun installeres av sertifisert personell i samsvar med gjeldende installasjonsanvisning.



Løfteren må ikke tas i bruk før installasjonen er kontrollert ifølge sjekklisten.

Installasjon av løper

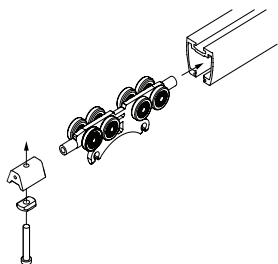

Monter løperen i skinnesystemet. Fjern endestopperen og sett løperen inn på skinnen. Monter endestopperen og kontroller at den sitter som den skal. Se installasjonsdetaljer i BM4401.




Kontroller at endestopperne er montert i alle ender av skinnesystemet før løfteren brukes!

Installasjon av løfteren




Vær forsiktig ved arbeid i høyden. Vi anbefaler at utstyret installeres av to eller flere personer for å unngå fall og personskade under installasjonen!

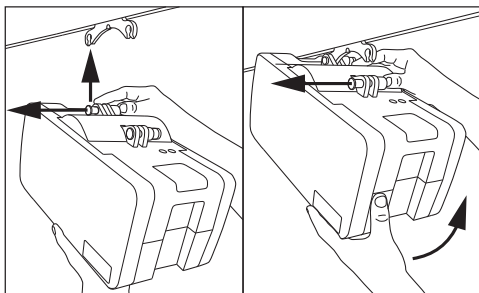

Monter løfteren på løperen. Krever ikke verktøy. Løfteren har to koblingspunkter.

Koble til det ene punktet først. Trykk knappen helt inn og sett løfteren i koblingspunktet på løperen. Slipp knappen og kontroller at grønnfargen er synlig før det neste punktet kobles til.

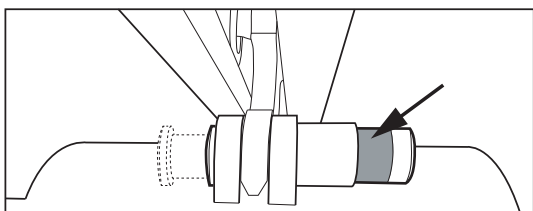

Kontroller at begge knappene på koblingspunktene har gått helt tilbake og at grønnfargen er helt synlig etter installasjonen. Nødsenkingsnoren og slangen kan justeres til riktig lengde (høyde) ved å kappe slangen og snoren.

Installasjon

Bruk denne sjekklisten før løfteren tas i bruk, for å kontrollere at løfteren er riktig montert og at den kan betjenes trygt og riktig.

- ☐ Endestopperne på skinnene installeres etter at løperen er montert som beskrevet i BM4401
- ☐ Forsikre deg om at løfteren er riktig festet til skinnen, og at det ikke er noen løse deler på løfteren.
- ☐ Foreta ett løft med belastning (60–80 kg)
- ☐ Kontroller at batteriet er fullt ladet.

Bruke Molift Air

Generelle sikkerhetshensyn

Bruk bare tilbehør og seil som er justert slik at de passer til brukeren, type funksjonsnedsettelse, størrelse, vekt og type forflytning.

Driftspauser/driftssyklus.

Molift Air 500 må ikke kjøres konstant i mer enn 2 minutter (med maksimal last), deretter hvile i minst 18 minutter. Driftssyklus 10 %. (Intervaller i henhold til standarden ISO-EN 10535)



Ikke monter løfteren på en måte som gjør det vanskelig å koble fra strømkabelen. Trekk ut strømkabelen fra veggkontakten for å isolere systemet.



Hvis den maksimale sikre arbeidsbelastningen for løftebøylen og kroppsstøtten er forskjellig, skal den laveste maksimale lasten alltid brukes



Molift-løftere skal bare brukes til å løfte brukere. Bruk aldri løfteren til å løfte eller flytte gjenstander av noe slag.

Før bruk / daglig kontroll


Inspeksjon som skal utføres av pleieren daglig eller før bruk:

- ☐ Kontroller at det ikke finnes synlig skade, feil eller deformering på løfteren og skinnesystemet
- ☐ Kontroller at festet til løftebøylen og alle avtakbare deler er riktig montert og sikret
- ☐ Test nødstopppknappen og nødsenkingen
- ☐ Kontroller at batteriindikatoren og servicelampen ikke lyser
- ☐ Kontroller at det ikke finnes synlig skade eller slitasje på løftestroppen.
- ☐ Prøvekjør løfterfunksjonene og kontroller at det ikke kommer unormale lyder fra løfteren

Hvis det er feil eller skader på seilet, må løfteren tas ut av bruk og merkes med «i ustand». Ikke utfør service eller vedlikehold på noen deler av Molift Air når den brukes av en pasient.

Håndkontroll


Håndkontrollen har 2 knapper for løfting og senking, eller 4 knapper hvis løfteren er utstyrt med fremdriftsmotor. Håndkontrollen har en indikatorlampe som tennes når batternivået er lavt og løfteren må lades.

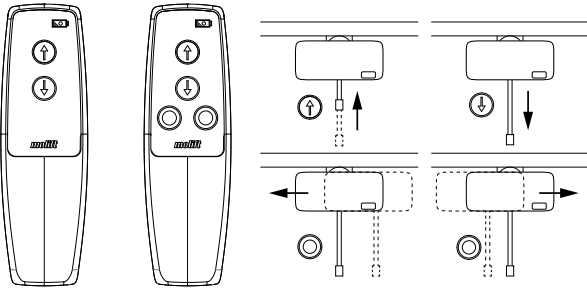

Ikke trekk i håndkontrollen for å flytte løfteren langs skinnen




Liften fungerer ikke hvis håndbetjeningen er koblet til en lader. Koble håndbetjeningen fra laderen før man betjener liften.

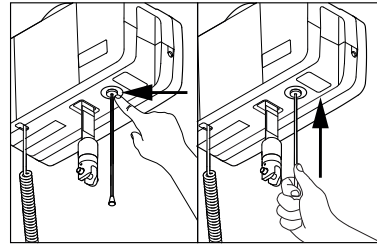

Trykk med en finger eller bruk slangen på snoren til å skyve knappen inn igjen og tilbakestille nødstoppknappen.


Elektrisk nødsenking

Trekk og hold for å starte senkingen. Hold til brukeren er senket og kan fjernes fra løftebøylen.

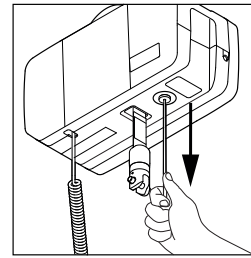

Kun for bruk i nødssituasjoner hvis håndkontrollen ikke fungerer!

Montere løftebøylen

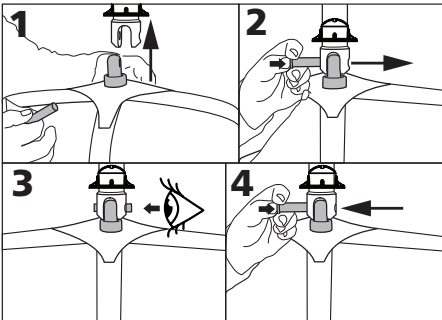


1. Juster løftebøylen i koblingspunktet.
2. Trykk på knappen på låsepinnen og sett den helt gjennom.
3. Kontroller at låsepinnen sitter som den skal
4. Trykk og hold inne knappen på låsepinnen, og trekk ut låsepinnen for å fjerne den.

Nødstopp/nødsenking

Nødstopp



Aktivering og tilbakestilling av nødstopp:

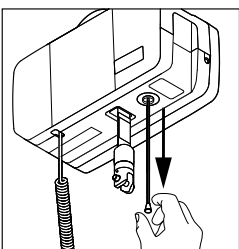

Trekk for å aktivere nødstoppbryteren. Knappen spretter ut og løfteren stopper.

Manuell nødsenking

Unbrakonøkkel og bit til elektrisk drill finnes inne i løfteren. Fjern dekslene på begge sider av løfteren for å finne dem.

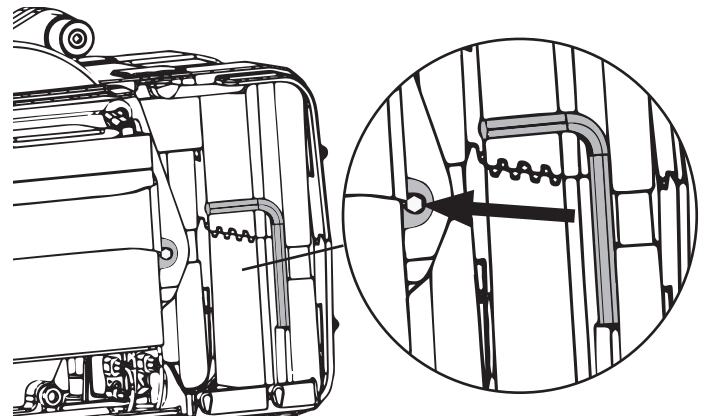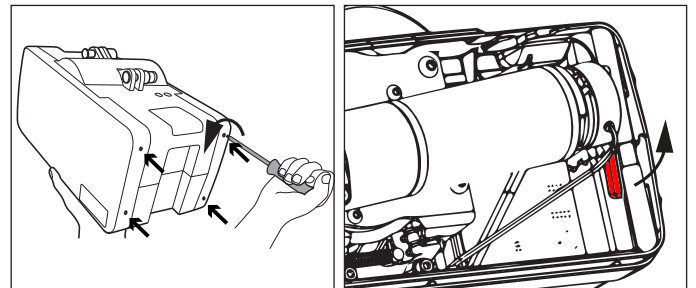

Bruk en skrutrekker eller drill på alle 8 skruene (4 på hver side), for å åpne sidedekslene. Vri det røde bremseutløserhåndtaket opp. Finn verktøyet på den andre siden av løfteren og roter mot urviseren for å senke løftestroppen. Det anbefales å bruke en elektrisk drill.

Service er IKKE nødvendig hvis:

- 1) Den manuelle nødsenkingen på Air-enheten er brukt av en kjent årsak, og
- 2) stroppen er uskadet, og
- 3) enheten fungerer normalt etter den manuelle nødsenkingsprosedyren.

Den nye bremseoverstyringen bidrar til dette ved at komponentene utsettes for mindre belastning ved manuell nødsenking. Service er nødvendig hvis det har oppstått en feil på enheten av ukjent årsak og det manuelle nødsenkesystemet er brukt.

Elektronikk

Transport og lagring

Ved langtidslagring anbefales det å aktivere nødstoppekappen (trukket ut). Løfteren kan lagres og transporteres ved temperaturer mellom -25–70 °C.

Drift

Løfteren er konstruert for bruk ved vanlig romtemperatur (+5 til +40 °C).

Lufttrykk: 70–106 kPa

Relativ fuktighet: 15-90 %

Etter lagring eller transport i andre temperaturer må løfteren stå i et rom med egnet temperatur til den når sikker driftstemperatur.



Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMK). Flyttbart eller bærbart radiokommunikasjonsutstyr kan påvirke det medisinske elektriske utstyret, og skal holdes minst 30 cm (12 tommer) fra elektronikken på løfteren.

Batterier

Molift Air 500 leveres med 24 V oppladbart batteri, og har integrert lader.

SLA-batteriet har en forventet levetid på ca. 500 ladesykluser.



Lad batteriet når du mottar det, og deretter hvert halvår, for å unngå batterisvikt.



Batteriene må kastes som spesialavfall ifølge gjeldende bestemmelser. Skal ikke kastes som restavfall.

Batteri- og serviceindikator på løfteren

	Skrunøkkelsymbol/ serviceindikator
	Batterisymbol/ batteriindikator

Det elektriske systemet har en strømsparefunksjon som slår av det elektriske systemet fem minutter etter siste betjening. Alle indikatorer slukkes. Systemet aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene på håndkontrollen.

Batteriindikator på løfteren

Når batteriindikatoren lyser gult, har løfteren tilstrekkelig strøm igjen til minst én fullstendig løftesyklus med maks. belastning. Når batterinivået blinker gult, er det bare mulig å senke løftebøylen.

<i>Batteriindikator</i>	<i>Batterinivå</i>
	Grønn 80 % eller mer
	Grønn 80-60 %
	Grønn 60-40 %
	Grønn 40-20 %
	Gul 20 %-0 %
	Blinkende gul 0 %

Serviceindikator / periodisk inspeksjon

Elektronikken i løfteren registrerer løftet vekt og antall løft. Etter en bestemt driftsperiode vises et signal om at det er behov for service.

<i>Serviceindikator</i>	<i>Modus</i>
Lyser ikke	Ikke behov for service
Gul	Behov for periodisk inspeksjon
Blinkende grønn	Bestill service
Rød	Utfør service

Serviceomfang

Når løfteren har utført et antall løft (5000 løft med maksimal tillatt vekt (SWL)), lyser serviceindikatoren rødt. Service må deretter utføres av autorisert personell, inkludert inspeksjon og utskifting av slitte deler. Kontakt Etac eller den lokale forhandleren, eller gå til etac.com for å finne en godkjent servicepartner.

Lading

Molift Air 500 kan lades via håndkontrollen med en batterilader, eller via skinnen med In Rail Charging.

Ladeindikator og indikator for strømtilførsel


Ladeindikator	Modus
Blinkende grønn	Ikke koblet til løfteren
Gul	Lading
Blinkende gul	Vedlikeholdslading av fulladet
Grønn	Fulladet

Indikator for strømtilførsel	Modus
Blå	Koblet til strømuttak

Lading med håndkontrollen


Batteriladeren kobles til en stikkontakt. En veggmontert holder for håndkontrollen er tilgjengelig. Pass på at kabelen ikke blir skadet. Laderen kan være koblet til stikkontakten hele tiden. Bruk bare ladere fra Molift. Håndkontrollen har en indikatorlampe som tennes når batterinivået er lavt og løfteren må lades.

Lader til Molift Air-håndkontroll: Art.nr.: 2540100

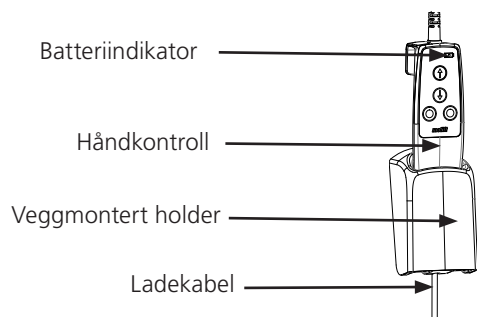


IRC (In Rail Charging)

Løfteren lades gjennom en innebygd lader i løftmotoren for kontinuerlig lading gjennom hele skinnesystemets lengde. Molift Air IRC har en innebygd lader som er koblet til batteriet. Den må installeres med IRC-løperen i et skinnesystem med ledende teip. IRC-løperen er koblet til batteriladeren inni Molift Air IRC. IRC-løperen er alltid i kontakt med den ledende teipen inne i skinnen. IRC-strømforsyningen er koblet til den ledende teipen gjennom IRC-tilkoblingen på enden av skinnen, og forsyner strøm til batteriladeren inni Molift Air IRC.

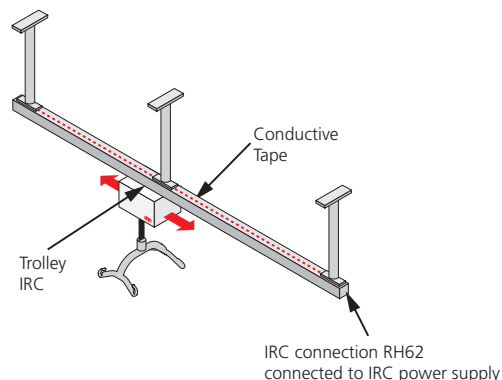

IRC passer både enkeltskinne- og Travers-systemer.

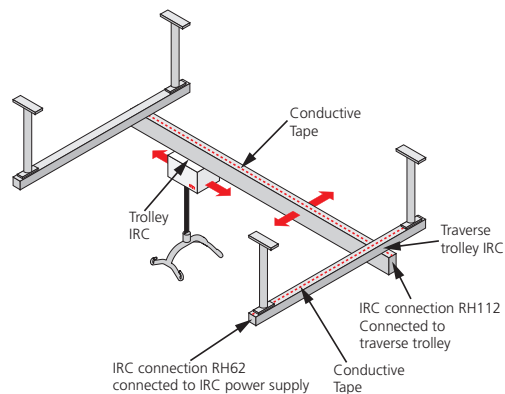

IRC-strømforsyning

Art.nr.: 2610119

Lader 3844 DC/DC (del av Molift Air IRC)

Art.nr.: 2640200

Forflytning

Planlegg løfteoperasjonen på forhånd for å sikre at den foregår mest mulig trygt og uproblematisk. Husk å arbeide ergonomisk. Vurder risikoen og ta notater. Assistenten er ansvarlig for brukerens sikkerhet.

Bruke seil

Det er viktig å teste seilet med den individuelle brukeren og i den tiltenkte løftesituasjonen.



Les bruksanvisningen for seilet før bruk.



Ikke bruk seil som er skadet eller svært slitte.

Enhetskombinasjoner og compatible seil

Vi anbefaler å bruke Etac- eller Molift-seil. Løfteren kan kombineres med stropper fra andre produsenter med tilsvarende opphengsløkker. Besøk www.etac.com for kompatibilitetserklæringer mellom heiser og stropper fra andre produsenter. Vær oppmerksom på at den fysiske eller juridiske personen som bruker CE-merkede compatible enheter fra ulike leverandører er ansvarlig for aktiviteten. Etac kan derfor ikke holdes ansvarlig for noen hendelse.


Vi anbefaler kun å bruke seil fra Etac eller Molift. Løfteren kan kombineres med seil fra andre produsenter. Se kompatibilitetserklæringer på www.etac.com.

Personen/selskapet som er ansvarlig for kombinasjonen av enhetene, må sikre at gjeldende krav oppfylles.


Elektrisk beskyttelse i kombinasjon med seil: Anvendt del type BF.

Løfting og senking


Stå ved siden av brukeren som løftes under forflytning av brukeren. Kontroller at armer og ben ikke kommer i veien for sete, seng osv. Hold øyekontakt med brukeren slik at vedkommende føler seg trygg.

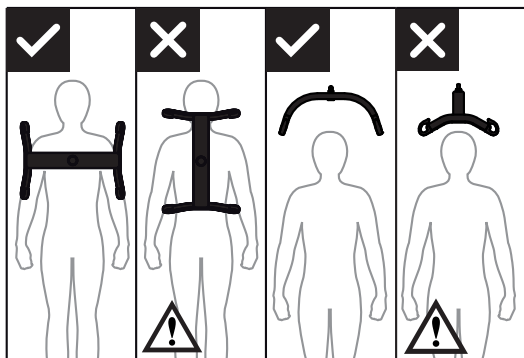

4-punkts løftebøyle skal alltid plasseres i kryss over brukeren for å unngå at brukeren glir ut av seilet ved et uhell.

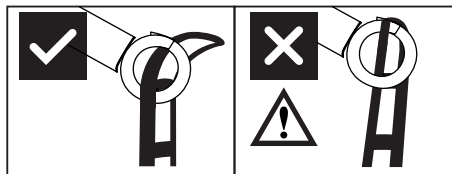


Kroken på løftebøylen er utformet slik at den hindrer at seilet løsner utilsiktet når det er riktig montert.

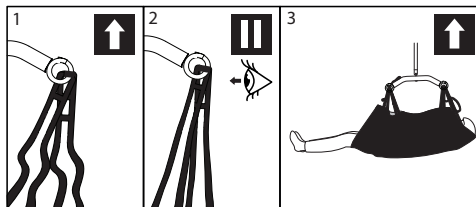

1. Kontroller at seilet sitter som det skal rundt brukeren og at stropløkkene er festet riktig til krokene på løftebøylen.
2. Stram opp seilstroppene uten å løfte brukeren. Kontroller at alle de fire løkkene på seilet er riktig festet, for å unngå at brukeren glir eller faller.
3. Løft pasienten og utfør forflytningen.

Vinkelføler

Løfteren er utstyrt med en retningsbestemt sikkerhetsfunksjon som hindrer løfting hvis løftestroppens vinkel er for skarp.

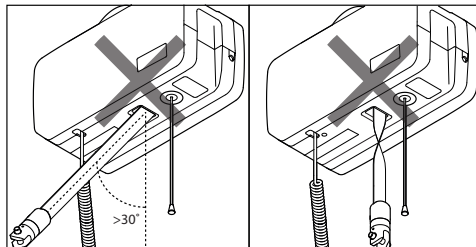

Hvis løfteren ikke reagerer på «opp»-knappen på håndkontrollen, kan det skyldes at løftestroppens vinkel er for skarp, eller at løftebåndet er vridd og føleren er aktivert.

Tilbehør

Ladeledning og plugg.

Pluggadapter EU, art.nr. 2510365

Pluggadapter Storbritannia, art.nr. 2510366

Pluggadapter USA, art.nr. 2510367

Pluggadapter AUS, art.nr. 2510368

Ledning EU, art.nr. 1140105

Ledning Storbritannia, art.nr. 1140106


Ledning USA, art.nr. 1140104

Ledning AUS, art.nr. 1140107

Veggbrakett for lader, art. no. 2610123

Løftebøyler

Molift Air kan brukes med en 4- eller 8-punkts løftebøyle.

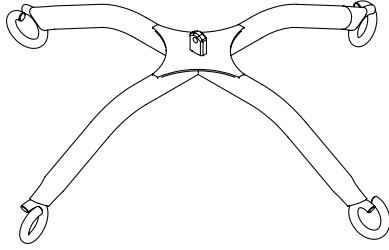

4-punkts løftebøyle, stål
Art.nr.: 2140003

Seil

Etac leverer et bredt utvalg av seil til ulike typer forflytning.

Seilene i Molift RgoSling-serien er utviklet for bruk med 4-punkts løftebøyle med løkkeforbindelser. Seilene fungerer også med 2-punkts løftebøyle. Se kombinasjonslisten i bruksanvisningen for seilene for riktig kombinasjon av seil og løftebøyle.

Seilene i Molift RgoSling-serien er tilgjengelig i størrelse XXS–XXL, i polyester og polyesternetting.

En fullstendig liste over seil og løftebøyler er tilgjengelig på www.etac.com.

Rgosling Mediumback Padded (XS–XXL)

Rgosling Highback Padded (XS–XXL)

Rgosling Mediumback Net (XXS–XXL)

Rgosling Highback Net (XXS–XXL)

Rgosling Toilet Lowback (XXS–XXL)

Rgosling Toilet Highback (XXS–XXL)

Rgosling Ampu Mediumback (XXS–XXL)

Rgosling Ampu Highback (XXS–XXL)

Rgosling ambuleringsvest

Rgosling Comfort Highback (S–L)

RgoSling tekstilbåre

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L–XL)

Tilbehør:


Molift Rgosling Extension Loops

Art.nr.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS–XL)

Overgangskobling

Enkelte skinnerystemer har overgangskoblinger ① montert. Disse brukes til å overføre brukeren fra ett skinnerystem til et annet, f.eks. mellom to ulike rom.

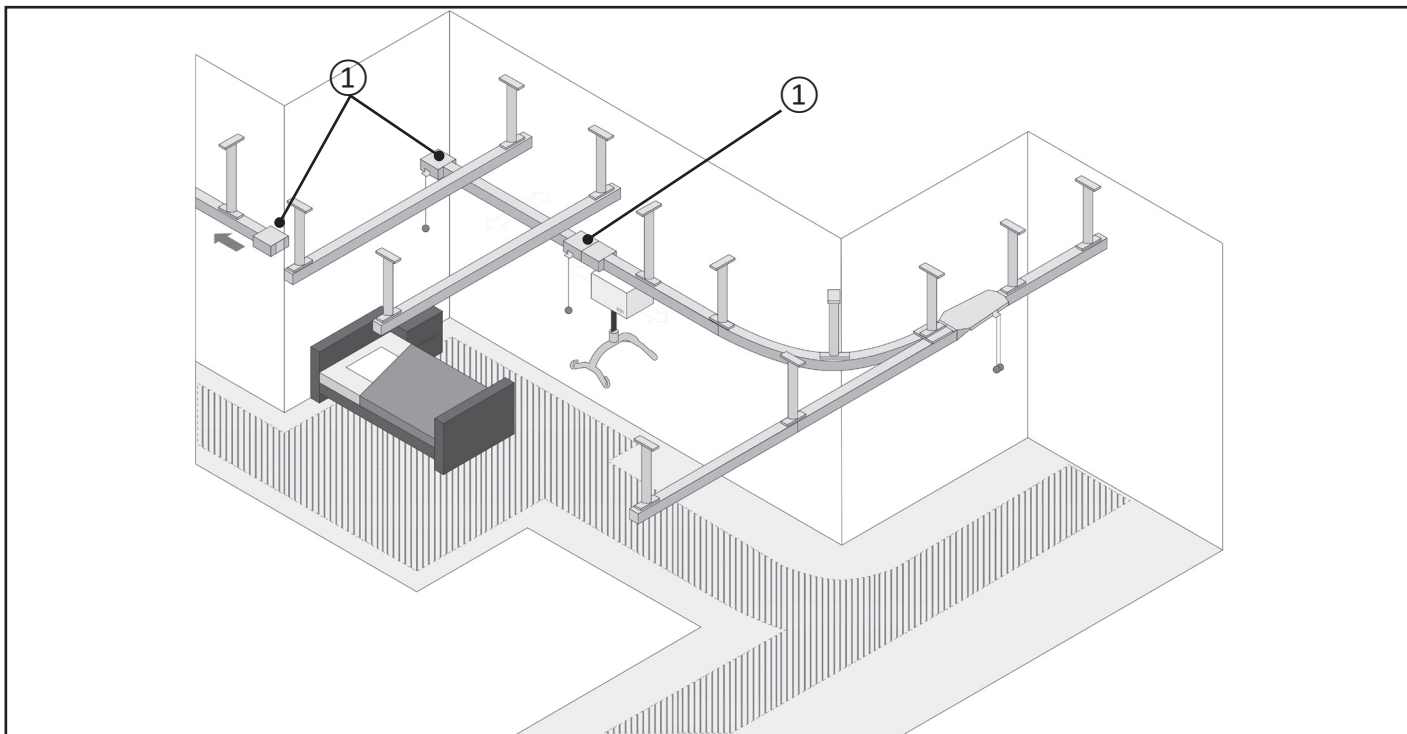


Komponenter

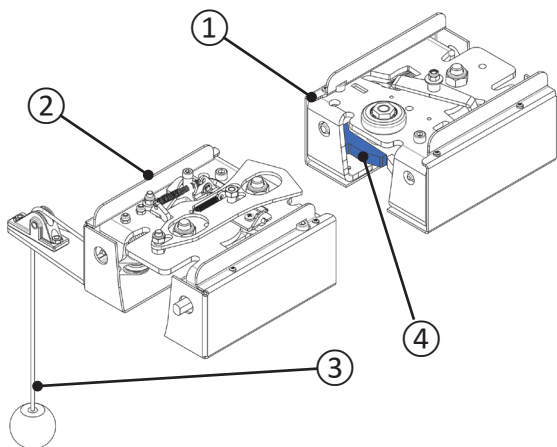


- ① Overgangskoblingsenhet
- ② Overgangskoblingsenhet med remskive
- ③ Remskive med knott
- ④ Port (to stk. per enhet)

Tilstander

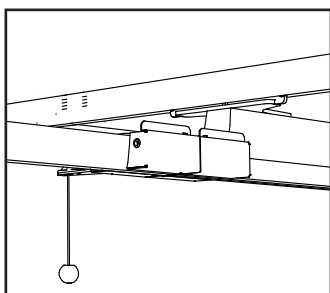


Tilkoblet

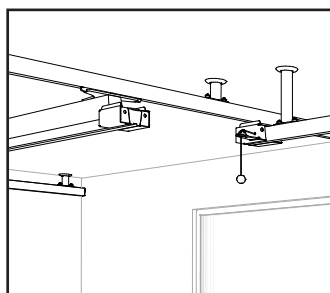

Frakoblet


Koble fra

Pass på at løpekatten er min. 0,5 m fra overgangskoblingsenheten før overgangskoblingen kobles fra.

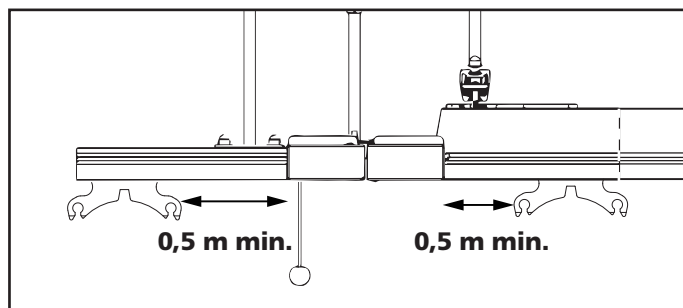

Trekk remskiven ned til den stopper.

Du hører en lyd som bekrefter frakoblingen.

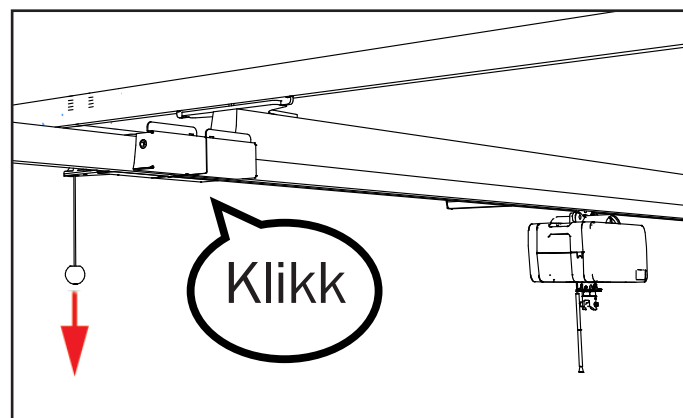


Overgangskoblingen er nå frakoblet.



Overføring – frakoblet overgangskobling

Ikke gjennomfør forflytning av bruker før du har sjekket følgende:


Begge portene ① er synlige (overgangskoblingsenhet sett fra undersiden).

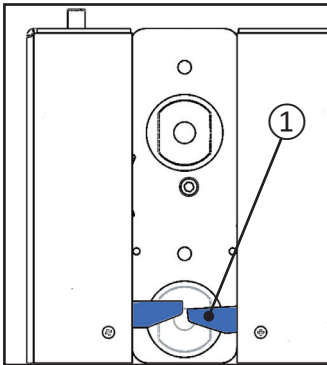


Låsebolten ② skal **ikke** være synlig når koblingen er frakoblet.

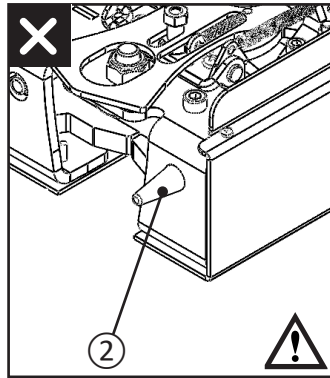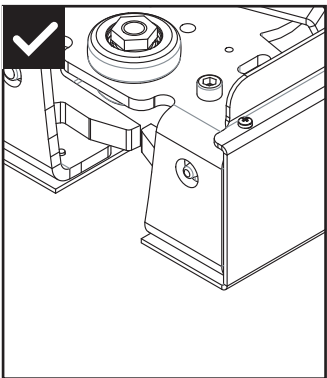


Skyv traversskinnen i ønsket retning.

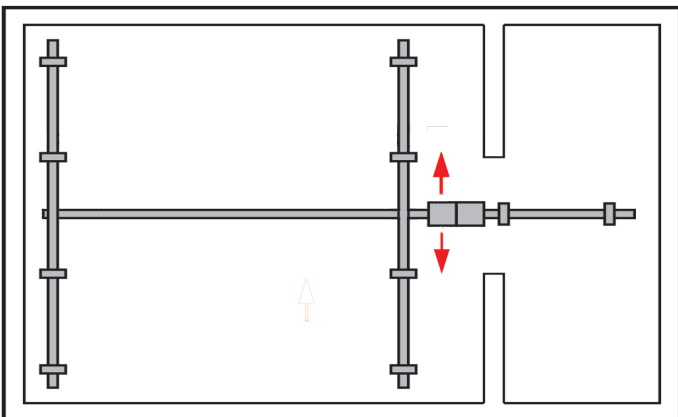**Tilkobling**

Pass på at løpekatten er min. 0,5 m fra overgangskoblingsenhetene før overgangskoblingen kobles til.

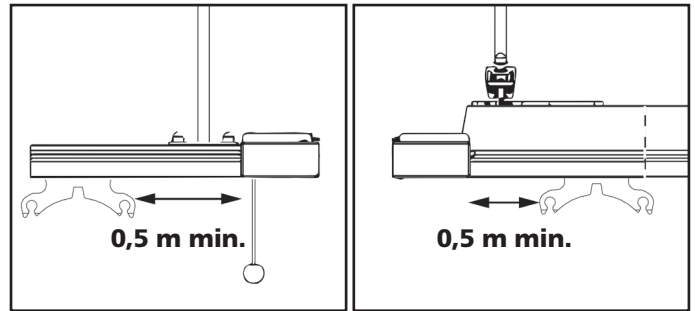

Skyv traversskinnen mot den stasjonære skinnen slik at overgangskoblingsenhetene kobles sammen og du hører en lyd.

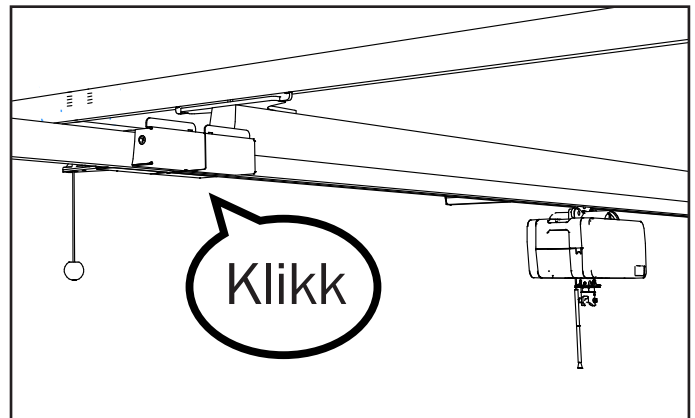**Overføring – tilkoblet overgangskobling**

Ikke overfør en bruker før du har kontrollert at overgangskoblingsenhetene er låst helt sammen. Det skal ikke være mulig å skyve skinnene fra hverandre for hånd.



Brukeren kan nå flyttes fra én skinne til en annen.

Traverskobling**Traverskobling, inspeksjon etter montering**


Koble til traverskoblingen, belast taljen med min. 75 kg og kontroller at taljen løper fritt gjennom traverskoblingen i begge retninger.

Koble til/fra traverskoblingen 10 ganger og kjør gjennom traverskoblingen 10 ganger uten å stoppe. Kontroller at låsepinnene på begge koblingshalvdelenene går fritt tilbake til nedre posisjon bare ved hjelp av fjærkraften.

Sett én taljeløpekatt inn i skinnen. Koble til traverskoblingen. Rett inn enden av løpekatten mot enden av koblingshalvdelen. Prøv å koble fra traverskoblingen. Sikkerhetsmekanismen skal forhindre dette. Gjenta testen for den andre koblingshalvdelen.

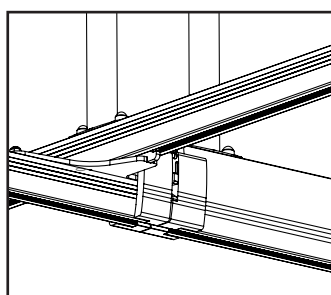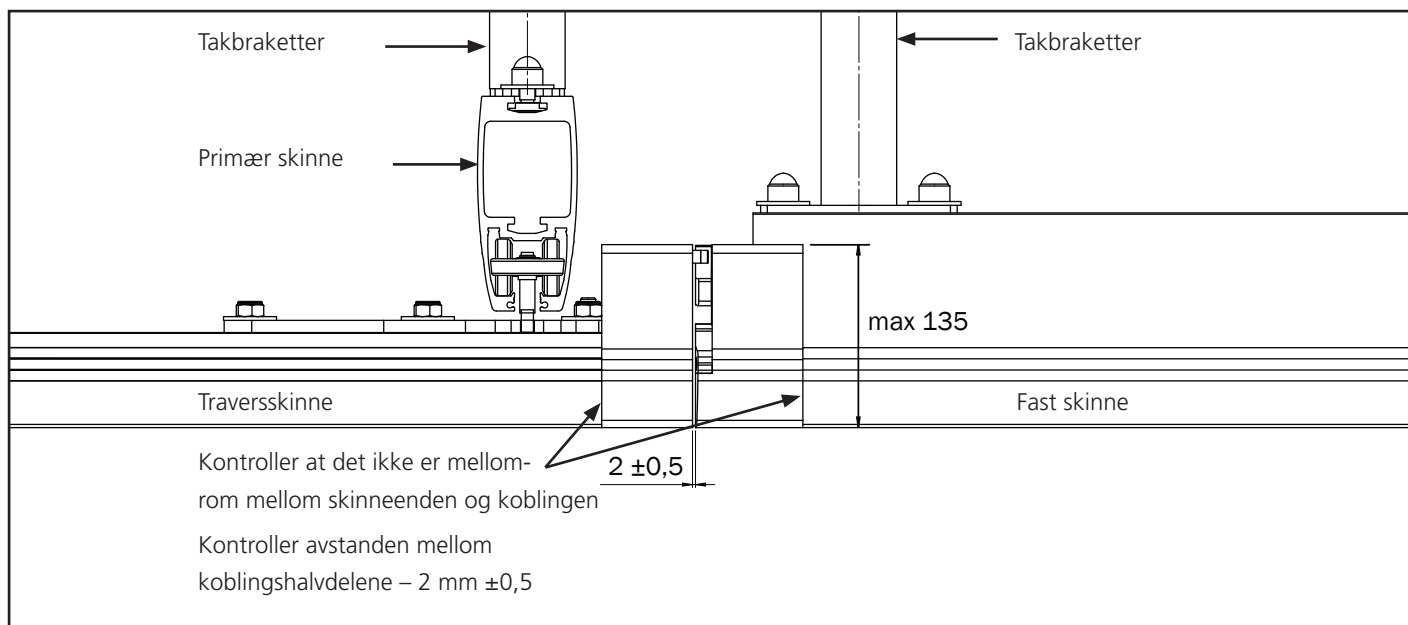

Tilkoblet

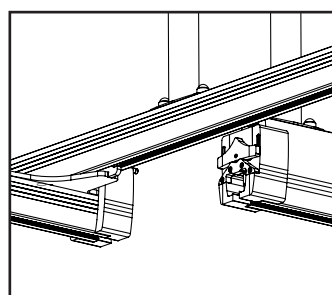


Frakoblet

Overføring – tilkoblet traverskobling

Brukeren kan nå flyttes fra én skinne til en annen.

Plassering av etikett

Følgende etikett er inkludert i esken med traverskoblingen. Fest etiketten på traversskinnen som vist nedenfor før bruk. Kontroller at den røde siden er plassert nærmest traverskoblingen.

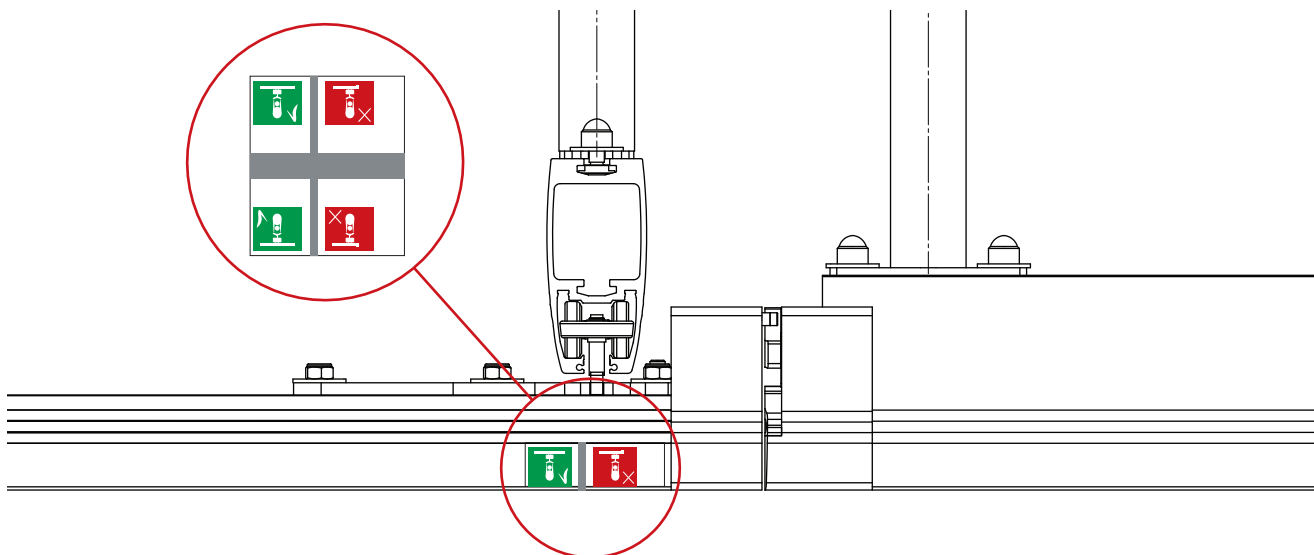

Klipp av og fjern den tykke grå linen når etiketten er satt på. Dette gjør at løpekatten kan bevege seg fritt frem og tilbake langs skinnen.

Forklaring av symboler



Hvitt piktogram med grønn bakgrunn.
Dette symbolet angir optimal plassering av løfteren for enkel tilkobling av koblingen.



Hvitt piktogram med rød bakgrunn.
Dette symbolet indikerer en løfterplassering som ikke er optimal, og som gjør det vanskeligere å koble til koblingen.

Rengjøring/desinfeksjon

Vaskes regelmessig. Rengjør overflater med en fuktig klut og et egnet pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler eller sterke væsker. Det kan skade løfterens overflater. Ved nødvendig desinfeksjon: Bruk isopropanol. Unngå slipende rengjøringsprodukter. Kontroller nødstoppekappen og nødsenkingen etter rengjøring. Løfteren skal ikke utsettes for rennende vann. Ved montering i miljøer med risiko for fuktighet er det viktig at skinnesystemet og motoren vaskes og tørkes jevnlig. En komplett veiledning for å redusere risikoen for korrosjon er tilgjengelig på forespørsel.



Pass på at etikettene ikke blir skadet eller løsner under rengjøring.



Løfteren og håndkontrollen har beskyttelsesklasse IP24 som indikerer: >12,5 mm beskyttelse mot tilgang til farlige deler og at vann som faller som spray ved enhver vinkel opp til 60° fra vertikalt, ikke skal ha skadelig effekt.



Pleier og bruker eksponeres for følgende materialer: Polypropilen og polyester (løftebøyer*), PC/ABS (håndkontroll og løfterdeksel), pudderbelagt aluminium, pudderbelagt sink (løftebøyer).
* = Anvendt del



I sjeldne tilfeller kan bruker eller pleier som eksponeres for polypropilen og polyester oppleve allergiske reaksjoner som hudirritasjon, mild kløe og ømhet i huden.

Rekondisjonering

Følg prosedyren for rengjøring og installasjon, utfør periodisk inspeksjon og bruk sjekklisten etter installasjon for å rekondisjonere løfteren.

Gjenvinning

Se «Instruksjoner for gjenvinning» for riktig kassering av produktet. Dette er tilgjengelig på www.etac.com.

Reservedeler

En liste over reservedeler er tilgjengelig på forespørsel.

Periodisk inspeksjon, omfang

Periodisk inspeksjon er en visuell undersøkelse (særlig av løfterens bærende konstruksjon og løftemekanisme med festepunkter, bremses, betjening, sikkerhetsinnretninger og personløyftheter) ifølge den periodiske inspeksjonsrapporten for Molift Air 500. Se www.etac.com.



Hvis det oppstår problemer med løfteren, som kan utsette noen for fare, skal løfteren umiddelbart tas ut av drift og merkes med «i ustand». Ikke bruk løfteren før den er reparert. Kontakt din lokale Molift/Etac forhandler/distributør for å rapportere problemer.

Periodisk inspeksjon skal utføres minst én gang i året, eller oftere hvis det er påkrevd i lokale bestemmelser. Inspeksjonen skal utføres av servicepersonell som er autorisert av Etac. Kontakt Etac på molift@etac.com for opplæring og autorisasjon, eller for anbefaling av en godkjent servicepartner.

Ved periodisk inspeksjon skal personen som foretar inspeksjonen fylle ut inspeksjonsrapporten for Molift Air. Rapporten skal arkiveres av personen(e) som er ansvarlig for service på løfteren. Dersom kontrollen avdekker defekter og skader, skal løfteren tas ut av bruk og merkes med «i ustand» til den er reparert.

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak/tiltak
Løfteren reagerer ikke på betjening av håndkontrollen	Nødstoppekappen er aktivert. Deaktiver ved å trykke knappen inn igjen.
	Elektronikken i løfteren er overopphetet. Vent til den er avkjølt.
	Håndkontrollen er ikke riktig tilkoblet. Håndkontrollen, pluggen eller ledningen kan være ødelagt, og må skiftes.
Løfteren reagerer ikke på opp-knappen på håndkontrollen	Løftestroppens vinkelføler er aktivert. Juster løftestroppen eller flytt løfteren for å redusere vinkelen på løftestroppen.
Løftebåndet går oppover når den elektriske nødsenkingen brukes	Løftebåndet har gått helt ut, og er viklet inn feil vei. Bruk manuell nødsenking. Send løfteren til service.

Viktigt

Denna användarmanual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och information om hur lyften och desstillbehör ska användas.




Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.



Läs igenom manualen innan du börjar använda lyften!
Det är viktigt att du förstår innehållet i manualen fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

På www.etac.com kan du ladda ned dokumentation så att du garanterat har den senaste versionen.

Molift Air 500

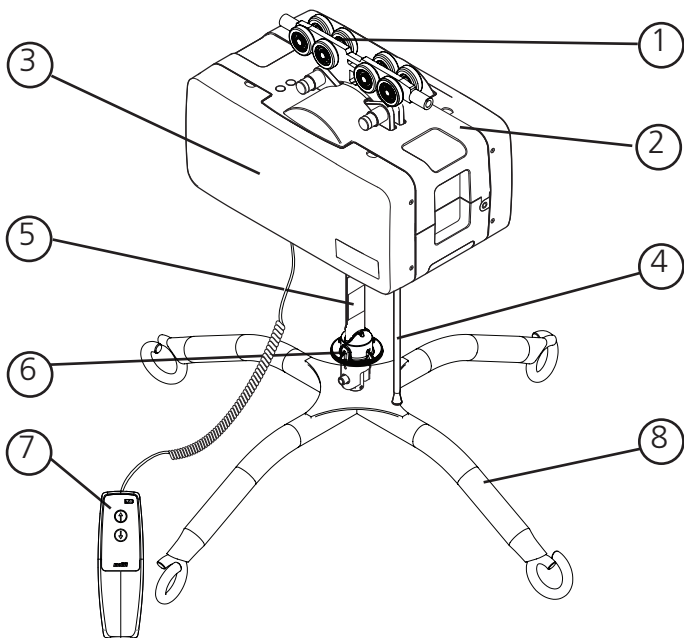

Lyftens delar:

1. Åkvagn
2. Lyftdel
3. Sidoskydd
4. Nödstopp/nödsänkning
5. Lyftband
6. Snabbkopplingsprint
7. Handkontroll
8. Lyftbygel

Om Molift Air

Molift Air är en kraftfull och smidig taklyft som används för att flytta patienter och brukare på ett bekvämt och säkert sätt. Molift Air är en mycket lätt motor som med sitt snabbkopplingsystem är lätt att hantera vid montering och service.

Allmänt

MD

CE

CE-märkning

Produkten och de tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 som medicinteknisk produkt, riskklass I. Produkten har testats och godkänts av tredje part i enlighet med standarderna IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 och EN/ISO 10535:2021. Alla allvarliga incidenter som inträffar och som är relaterade till produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller patienten bor.

Villkor för användning

Lyft och flyttning av en person medför alltid vissa risker. Installationen av skensystemet måste utföras av behörig personal och i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar. Lyften är inte avsedd att styras och hanteras av den person som lyfts.

Modificeringar och användning av komponenter från andra tillverkare

Vi rekommenderar att endast komponenter och reservdelar från Molift används. Försäkran om överensstämmelse är inte giltig och Etac tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på produkten. Etac tar inget ansvar för fel eller olyckor som kan inträffa om komponenter från andra tillverkare används. Det kan vara riskabelt att använda tillbehör, löstagbara delar och material som inte återfinns i användarmanualen.



Endast behörig personal har rätt att öppna lyften eller något av dess tillbehör för att utföra underhåll eller reparationer. Risk för skador från roterande delar och elstötar.



Garantimeddelande

Två års garanti mot defekter i utförande och material i våra produkter.
Ett års garanti på batterier.
Se www.etac.com för villkor.

Introduktion

”Brukaren” är den person som står i produkten. ”Vårdgivaren” är den person som manövrerar produkten.

Avsett syfte

Taklyften är ett hjälpmedel som används för att lindra eller kompensera för funktionsnedsättning. Enheten är utformad för personer som inte kan stå upp och förflytta sig till/från säng, golv, rullstol, stol, toalettstol eller liknande på grund av nedsatt rörlighet eller fysisk styrka.

Avsedda brukare

Enheten kan användas för barn, vuxna och äldre personer med behov av stöd vid lyft och förflyttning eller vid gångträning, i ett skensystem.

Avsedd miljö

För inomhusbruk i ett skensystem inom akutvård, långtidsvård och hemvård.

Indikationer

För brukare som behöver stöd vid lyft och förflyttning eller vid gångträning, t.ex. personer med begränsad rörelseförmåga som behöver kroppsstöd vid förflyttningar. Inte en uttömmande lista. Enhetens målgrupp baseras på individuell hälsa och funktionsförmåga och inte på ett specifikt hälsotillstånd eller en specifik ålder.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

Försiktighetsåtgärder

Se till att selen passar brukaren och lyftbygeln.


Utbildningskrav

Enheten får endast användas av vårdgivare som har läst och förstått användarhandboken.

Produktidentifiering

Produktetikett

Produktetiketten har en streckkod med artikelnummer, serienummer och tillverkningsdatum:

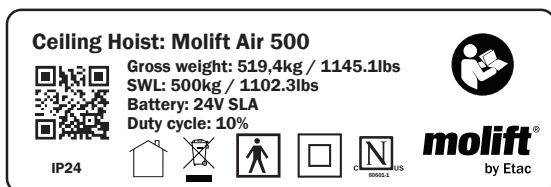

Varningsetiketter och symboler

Närmare beskrivning av de symboler som finns på produkten:



Klass II, dubbel isolering



CE-märkt



Se manual



Endast för inomhusbruk



Max brukarvikt



Får inte kasseras i hushållssoporna



Nödstopp/
nödsänkning



Servicelampa



Batterilampa



Insexnyckelsymbol för manuell nödsänkning



Certifieringsorganets märke



Tillverkare



Tillverkningsdatum



Katalognummer



Serienummer



Medicinteknisk produkt



Unik produktidentifiering



UKCA-märkt



Anbringad del av typ BF

Tekniska data

Säker arbetsbelastning (SWL)

Molift Air 500: 500 kg

Enhetens vikt:

Chassi inkl. batteri, exkl. lyftbygel:

14,1 kg

4-punkts lyftbygel: 5,3 kg

Batteri:

Art: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Batteriladdare:

Laddare för handkontroll, Mascot – typ 3743

Art.nr: 2540100

100–240 V AC, 50–60 Hz max 0,5 A

Utgångsström 0,56 A

IRC-strömförsörjning, Mascot – typ 3721

Art.nr: 2610119

Ingångsström: 100–240 V AC, 50–60 Hz max 1,0 A

Utgångsström: 24 V DC 1,75 A/42 W

IRC-laddare, Mascot – typ 3844

Art.nr: 2640200

In: 20–30 VDC 1,3 A

Utgångsström 0,5 A

Lyfthastighet

60 mm/sekund

med 75 kg belastning

Skyddsklass

Handkontroll IP24

Lyftmotor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Tryckkraft, knapp

Knappar på handkontroll: 3,4 N

Material:

Aluminium, plast, stål

Förväntad livslängd:

Lyften har en förväntad livslängd på 30 000 cykler SWL eller 15 år.

Skenorna har en förväntad livslängd på 30 år.

Mått:

L x B x H (längd, bredd, höjd utan åkvagn)

36 x 24,6 x 19,5 cm


(14,2 x 9,7 x 7,7 tum)

A (Lyftområde)

300 cm

B (minimimått från tak till lyftbygels anslutningspunkt) 32,7 cm

För mer information om tekniska data, utförande av service och reparationer, se teknisk manual.

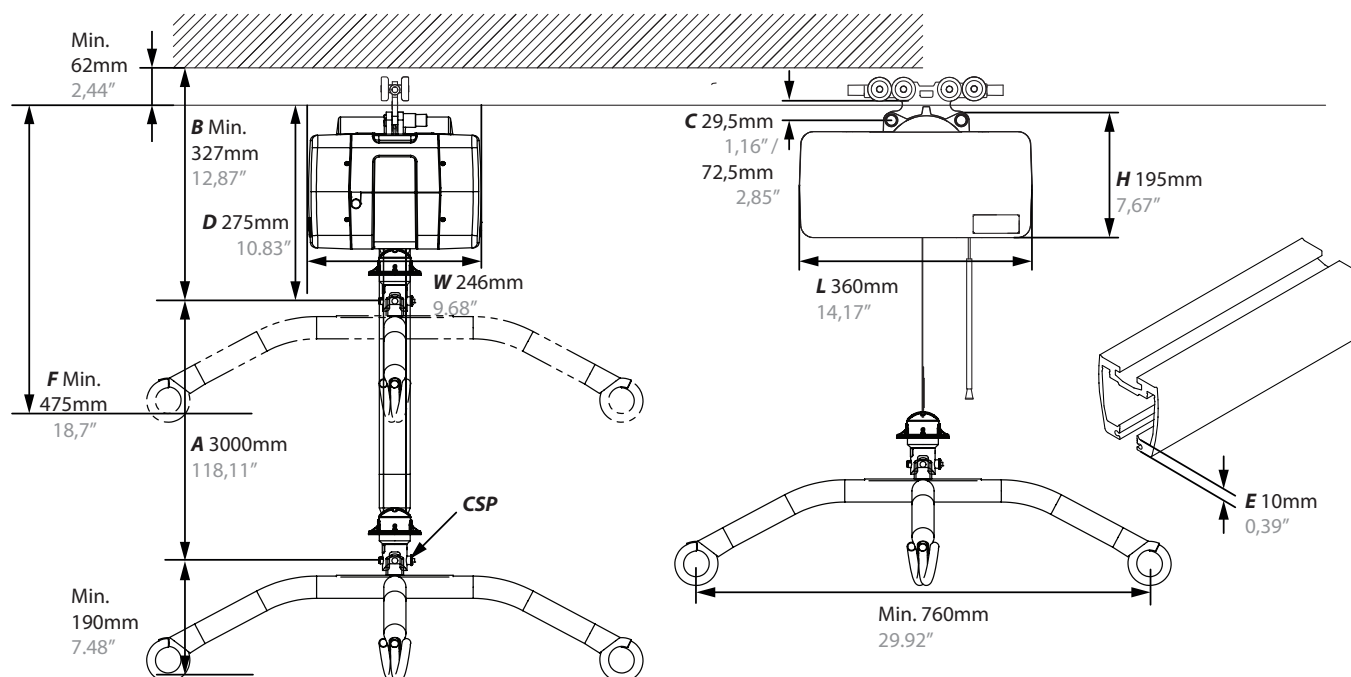

Installation

Lyften är märkt med Safe Working Load (SWL), dvs. säker arbetsbelastning. Denna får inte vara högre än skensystemets maximala belastningskapacitet.




Skensystemet får endast installeras av behörig personal och i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar.



Börja inte använda lyften förrän kontroll har genomförts enligtchecklistan efter installation.

Installation av åkvagnen

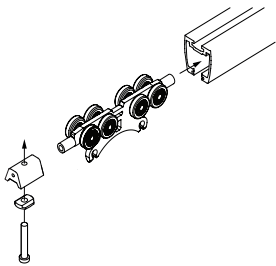

Montera åkvagnen i skensystemet. Ta bort ändstoppet och för in åkvagnen i skenan. Sätt tillbaka ändstoppet och se till att det sitter fast ordentligt. Se BM4401 för detaljer om installationen.




Se till att ändstopp är monterade på alla skensystemets ändar innan du börjar använda lyften!

Installation av lyftdelen




Var försiktig vid arbete på hög höjd. Vi rekommenderar att installationen görs av två eller flera installatörer för undvika skador och olycksfall!

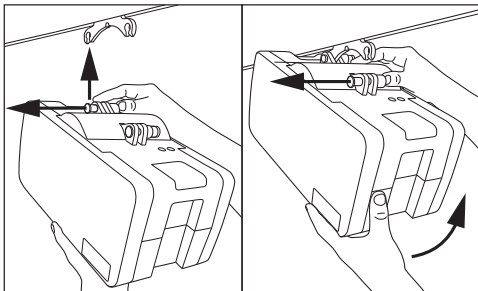

Montera lyftdelen på åkvagnen. Inga verktyg krävs. Lyftdelen har två anslutningspunkter.

Börja med att ansluta en av punkterna. Tryck in knappen så långt det går och placera lyftdelen i anslutningsdelen på åkvagnen. Släpp knappen och var noga med att se till att den visar tydligt grönt innan du ansluter nästa punkt.

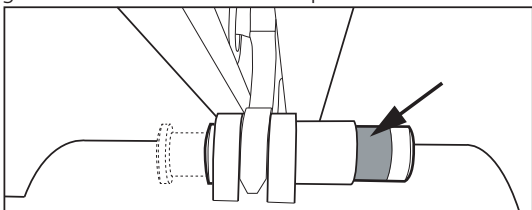

Se till så att båda anslutningspunkternas knappar återgår helt till ursprungsläget och visar tydligt grönt efter installationen. Linan och röret för nödsänkning kan anpassas till korrekt längd (höjd) genom att kapa dem.

Installation

Före användning använder du denna checklista för att kontrollera att lyften är installerad på rätt sätt och kan fungera korrekt och säkert.

- ☐ Ändstopp har satts på plats på skenorna efter montering av åkvagnen enligt BM4401
- ☐ Kontrollera att lyften är ordentligt monterad i skenan och att lyften inte har några lösa delar.
- ☐ Utför ett lyft med belastning (60–80 kg)
- ☐ Kontrollera att batteriet är fulladdat.

Så här använder du Molift Air

Allmänna säkerhetsåtgärder

Använd endast tillbehör och selar som är justerade för att passa brukaren, typen av funktionshinder, kroppsstorleken, vikten och typen av flyttning.

Pausfrekvens/pulslängd.

Molift Air 500 får inte köras konstant i mer än 2 minuter (vid maximal belastning) och varje pausska vara minst 18 minuter. Pulslängd 10 %. (Paus enligt standarden ISO-EN 10535)



Placera inte lyften på ett sätt som gör det svårt att koppla bort nätkabeln. För att isolera systemet, dra ut nätsladden från vägguttaget.



Om den maximala belastningen (SWL) är olika för lyftbygeln och selen eller annat lyfttillbehör ska alltid den lägsta maxbelastningen användas



Molift-lyften ska endast användas för att lyfta personer. Använd aldrig lyften för att lyfta eller flytta någon typ av föremål.

Före användning/daglig kontroll


Följande inspektion ska utföras dagligen eller före användning:

- ☐ Se efter om lyften och skensystemet har några synliga skador, defekter eller deformationer
- ☐ Se till att lyftbygeln koppling och alla borttagbara delar sitter ordentligt fast
- ☐ Testa nödstoppsknappen och nödsänkningen
- ☐ Kontrollera att batteriindikatorn och servicelampan inte lyser
- ☐ Se efter om lyftbandet har synliga skador eller tecken på slitage.
- ☐ Testkör lyftens manöverfunktioner och se till att lyften inte avger onormala ljud

Vid fel eller brister ska lyften tas ur drift och märkas med "ur funktion". Inga delar av Molift Air får ges service eller underhåll medan de används med en patient.

Handkontroll


Handkontrollen har två knappar för höjning och sänkning, alternativt fyra knappar om lyften är utrustad med framdrivning. Handkontrollen är försedd med en indikatorlampa som tänds när batterinivån är låg och lyften behöver laddas

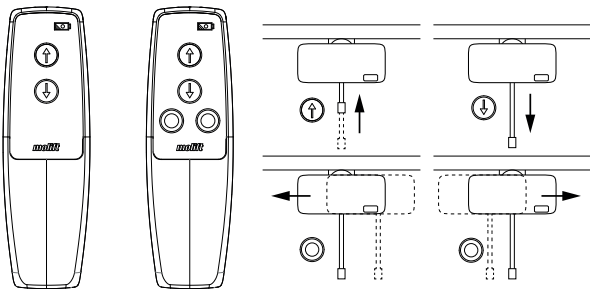

Dra inte i handkontrollen för att flytta lyften längs skenan




Lyften fungerar inte om handkontrollen är ansluten till en laddare. Koppla bort handkontrollen från laddaren innan du manövrerar lyften.

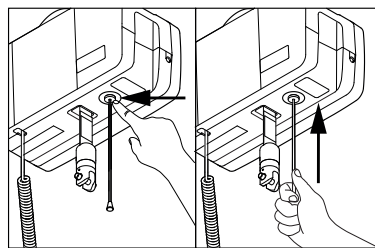

För att återställa nödstoppet trycker du antingen tillbaka knappen med fingret eller drar i röret som hänger i linan.


Elektrisk nödsänkning

Dra och håll fast för att påbörja sänkningen. Håll tills dess att brukaren har sänkts ned så att lyftbygel kan avlägsnas.

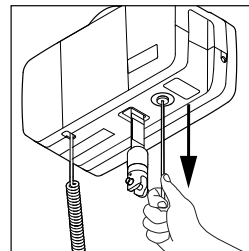

Endast i nödfall när handkontrollen inte fungerar!

Montering av lyftbygel

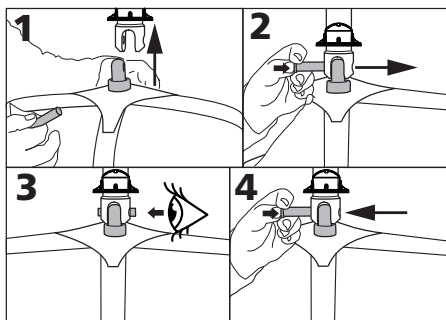


1. Passa in lyftbygel i anslutningspunkten.
2. Tryck på knappen på låstappen och tryck in så långt det går.
3. Se till så att låstappen sitter fast ordentligt
4. Avlägsna låstappen genom att trycka på knappen samt trycka på bulten från motsatt sida samtidigt som du håller in knappen.

Nödstopp/nödsänkning

Nödstopp





Aktivera och återställa nödstoppet:

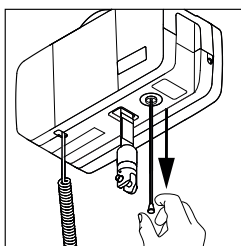

Dra för att aktivera nödstoppet. Knappen trycks ut och lyften stannar.

Manuell nödsänkning

Insexnyckel eller bits för bormaskin finns inuti lyften. Avlägsna sideskyddet för att komma åt dem.

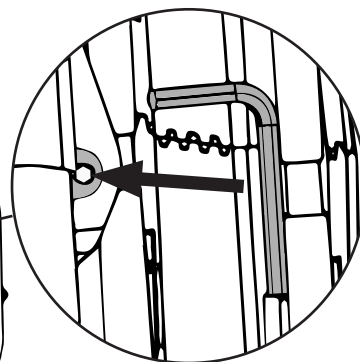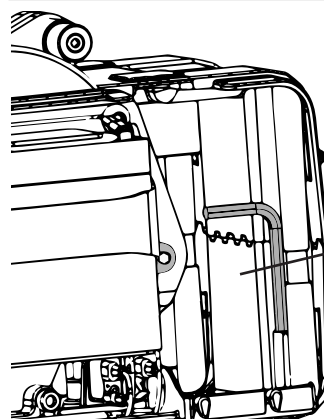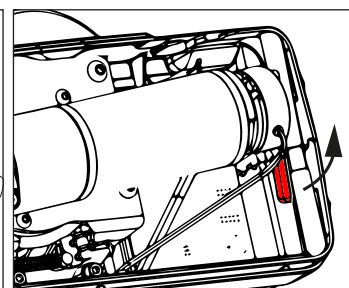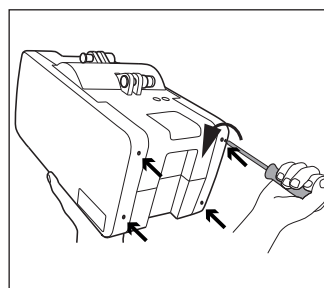

Öppna sideskydden med hjälp av en skruvmejsel eller bormaskin på alla 8 skruvar (4 på var sida). Dra upp den röda "Brake Release"-spaken. Leta upp verktygen på andra sidan av lyften och vrid moturs för att sänka lyftbandet. Bormaskin rekommenderas.

Service behövs INTE om:

- 1) Manuell nödsänkning har använts för en känd orsak, och
- 2) lyftbandet är oskadat, och
- 3) lyften fungerar normalt efter att den manuella nödsänkningen har utförts.

“Brake Release” funktionen bidrar till att göra manuell nödsänkning mindre påfrestande för lyftkomponenterna. Om manuell nödsänkning har använts på grund av ett fel på lyften, ska den skickas till service.

Elektronik

Transport och förvaring

Vid förvaring under längre perioder rekommenderas det att nödstoppssknappen är aktiverad (utdragen). Lyften kan förvaras och transporteras vid temperaturer mellan -25 och 70 °C.

Användning

Lyften är utformad för användning i vanlig rumstemperatur (+5 till +40°C).

Lufttryck: 70–106 kPa

Relativ luftfuktighet: 15–90 %

Om förvaring eller transport skett vid andra temperaturer än de som anges ovan ska lyften ställas i ett rum med lämplig temperatur tills den nått säker drifttemperatur.



Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kräver särskilda säkerhetsåtgärder avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Bärbar eller mobil radiokommunikationsutrustning kan påverka den medicintekniska utrustningen och bör förvaras minst 30 cm från lyftens elektronik.

Batterier

Molift Air 500 finns med ett 24 V SLA-batteri.

SLA-batteriet har en livslängd på ca 500 laddningscykler.



Ladda batteriet vid leverans och därefter var sjätte månad för att undvika batterifel.



Använda batterier måste kasseras som specialavfall i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Får inte kasseras i hushållssoporna.

Batteri- och serviceindikator på lyft

	Skiftnyckelsymbol/ servicelampa
	Batterisymbol/ batterilampa

Det elektriska systemet har en strömsparfunktion som stänger av systemet efter fem minuters inaktivitet. Då släcks även alla lampor. Systemet aktiveras genom ett tryck på någon av manöverknapparna på handkontrollen.

Batteriindikator på lyft

När batteriindikatorn lyser gult har lyften tillräckligt med effekt för minst en hel lyftcykel med maximal belastning. När batteriet blinkar gult går det endast att sänka lyftbygeln.

Batteriindikator	Batterinivå
	Grönt 80 % eller mer
	Grönt 80–60 %
	Grönt 60–40 %
	Grönt 40–20 %
	Gult 20 %–0 %
	Gult blinkande 0 %

Servicelampa/periodisk inspektion

Lyftens elektronik registrerar de laster som lyfts och antalet lyft. Efter en given drifttid ges en signal för att indikera att lyften behöver service.

Servicelampa	Ljus
Inget ljus	Ingen service behövs
Gult	Periodisk inspektion behövs
Grönt blinkande	Beställ service
Rött	Utför service

Servicens omfattning

När lyftanordningen har genomfört ett antal lyft (5 000 lyft med maximal tillåten vikt (SWL)) kommer serviceindikatorn att tändas med rött ljus.

En service måste då utföras av behörig personal, inklusive inspektion och byte av slitna delar.

Kontakta Etac eller din lokala återförsäljare eller besök etac.com för att hitta en godkänd servicepartner.

Laddning

Molift Air kan laddas på två sätt: via handkontrollen med en batteriladdare eller via skenan med In Rail Charging (IRC).

Laddarindikator och nätindikator

Laddningslampa	Ljus
Grönt blinkande	inte ansluten till lyft
Gult	Laddar
Gult blinkande	Fulladdning
Grönt	Fulladdat


Nätindikator	Ljus
Blått	Ansluten till eluttag

Laddning via handkontrollen

Batteriladdaren ansluts till ett eluttag. Vägghäddad dockstation för handkontrollen finns. Var försiktig så att kabeln inte skadas.

Laddaren kan ständigt vara ansluten till eluttaget. Använd endast Molift-laddare. Handkontrollen har en indikatorlampa som tänds när batterinivån är låg och lyften behöver laddas.


Laddare för Molift Air handkontroll: Art.nr: 2540100

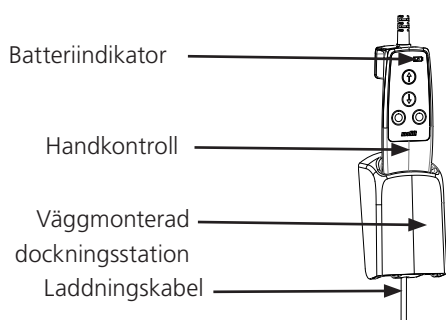


IRC (In Rail Charging)

Lyften laddas genom en inbyggd laddare i lyftmotorn för kontinuerlig laddning längs hela skensystemet.

Molift Air IRC har en inbyggd laddare som är ansluten till batteriet. Den måste installeras med IRC-åkvagnen i ett skensystem med ledande tejp. IRC-åkvagnen är ansluten till batteriladdaren inne i Molift Air IRC. IRC-vagnen är alltid i kontakt med den ledande tejpens inne i skenan. IRC-strömförsörjningen är ansluten till den ledande tejpens genom IRC-anslutning i slutet av skenan och tillför ström till batteriladdaren inne i Molift Air IRC.

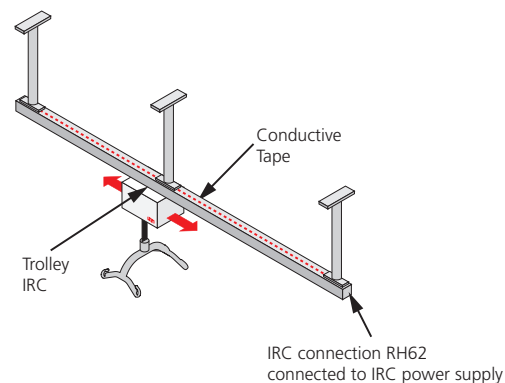

IRC passar för både system med enkel skena och system med travers.

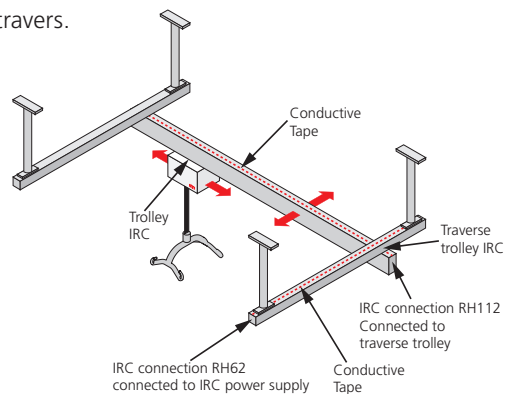

IRC-strömförsörjning

Art.nr: 2610119

Laddare 3844 DC/DC (del av Molift Air IRC)

Art.nr: 2640200

Överföring

Planera lyftmomentet före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt. Tänk på att arbeta ergonomiskt. Gör en riskbedömning och dokumentera. Vårdgivaren är ansvarig för brukarens säkerhet.

Användning av sele

Det är viktigt att selen är utprovad för den enskilda brukaren och den avsedda lyftsituationen.



Läs igenom selens manual före användning.



Använd inte skadade eller mycket slitna selar.

Produktkombinationer och selkompatibilitet

När en medicinsk enhet kombineras med andra enheter eller tillbehör får kombinationen inte ändra enheternas avsedda ändamål som definieras av tillverkaren eller modifiera dem på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med tillämpliga krav eller säker användning enheten.

Vi rekommenderar användning av Etac- eller Molift-selar.


Lyften kan kombineras med selar från andra tillverkare, se www.etac.com för deklaration om kompatibilitet.

Den person/det företag som ansvarar för kombinationen av produkterna måste säkerställa att tillämpliga krav uppfylls.


Elektriskt skydd i kombination med selar: Typ av applicerad del BF.

Lyftning och sänkning


Stå vid sidan av brukaren när du lyfter honom/henne. Kontrollera att armar och ben inte hamnar i vägen för stol, säng eller liknande. Håll ögonkontakt med brukaren så att han/hon känner sig trygg.

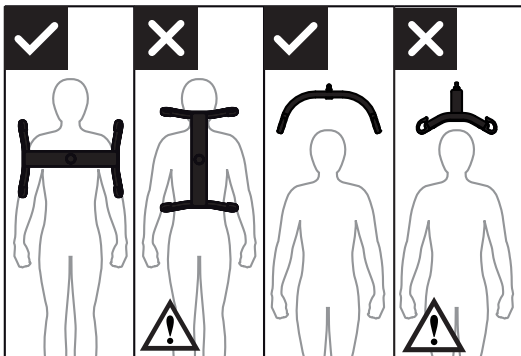

Fyrpunktslyftbygelns ska alltid placeras på tvären över brukaren för att förhindra att brukaren glider ur lyftselen av misstag.

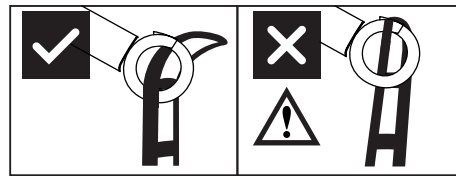


Lyftbygelns utformning med krokar förhindrar att selen oavsiktligt kopplas loss, förutsatt att den är korrekt monterad.

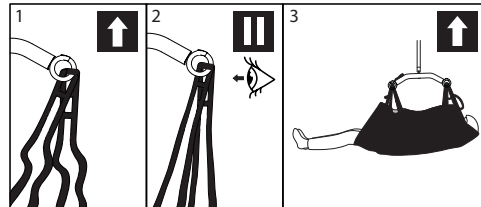

1. Kontrollera att selen är rätt applicerad på brukaren och att bandöglorna sitter som de ska i lyftbygelns krokar.
2. Sträck selens band utan att brukaren lyfts. Se till så att krokarna sitter ordentligt fast i selens alla fyra öglor för att förhindra att brukaren glider eller faller ned.
3. Lyft brukaren och utför förflyttningen.

Vinkelsensor

Lyften har en säkerhetsfunktion som förhindrar lyft om lyftbandets vinkel är för brant.

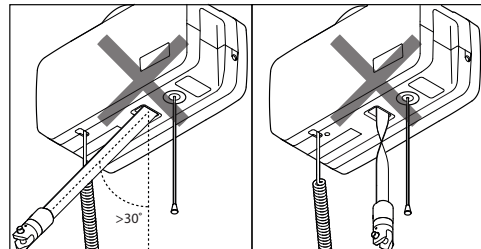

Om lyften inte reagerar när du trycker på uppåtknappen på handkontrollen kan det bero på att sensorn aktiverats på grund av att lyftbandets vinkel är för brant eller att lyftbandet har snott sig.

Tillbehör:

Laddningssladdar och laddningskontakter.

Strömadapter EU, art.nr 2510365

Strömadapter UK, art.nr 2510366

Strömadapter US, art.nr 2510367

Strömadapter AUS, art.nr 2510368

Sladd EU, art.nr 1140105

Sladd UK, art.nr 1140106


Sladd US, art.nr 1140104

Sladd AUS, art.nr 1140107

Väggfäste för laddare, art. no. 2610123

Lyftbyglar

Molift Air kan användas med 4- eller 8-punkts lyftbygel.

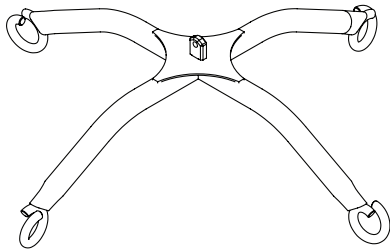

4-punkts lyftbygel, stål
Art. nr.: 2140003

Selar

Etac erbjuder ett brett sortiment av selar för olika slags förflyttningar. Molift RgoSling är utvecklad för att kombineras med en 4-punkts lyftbygel med upphängningsöglor. Selen fungerar även med en 2-punkts lyftbygel. Se kombinationslistan i selens manual för att hitta rätt kombination av sele och lyftbygel. Molift RgoSling-selen finns i storlekarna XXS–XXL, i polyester och nätpolyester.

En fullständig lista över selar och lyftbyglar finns på www.etac.com

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ambulating Vest
Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
Molift RgoSling Fabric Stretcher
Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XL)

Tillbehör:


Molift Rgosling Extension Loops

Art.nr.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Övergångskoppling

Vissa skensystem är utrustade med övergångskopplingar ①. Dessa används för att användaren ska kunna flyttas från ett skensystem till ett annat, t.ex. mellan två olika rum.

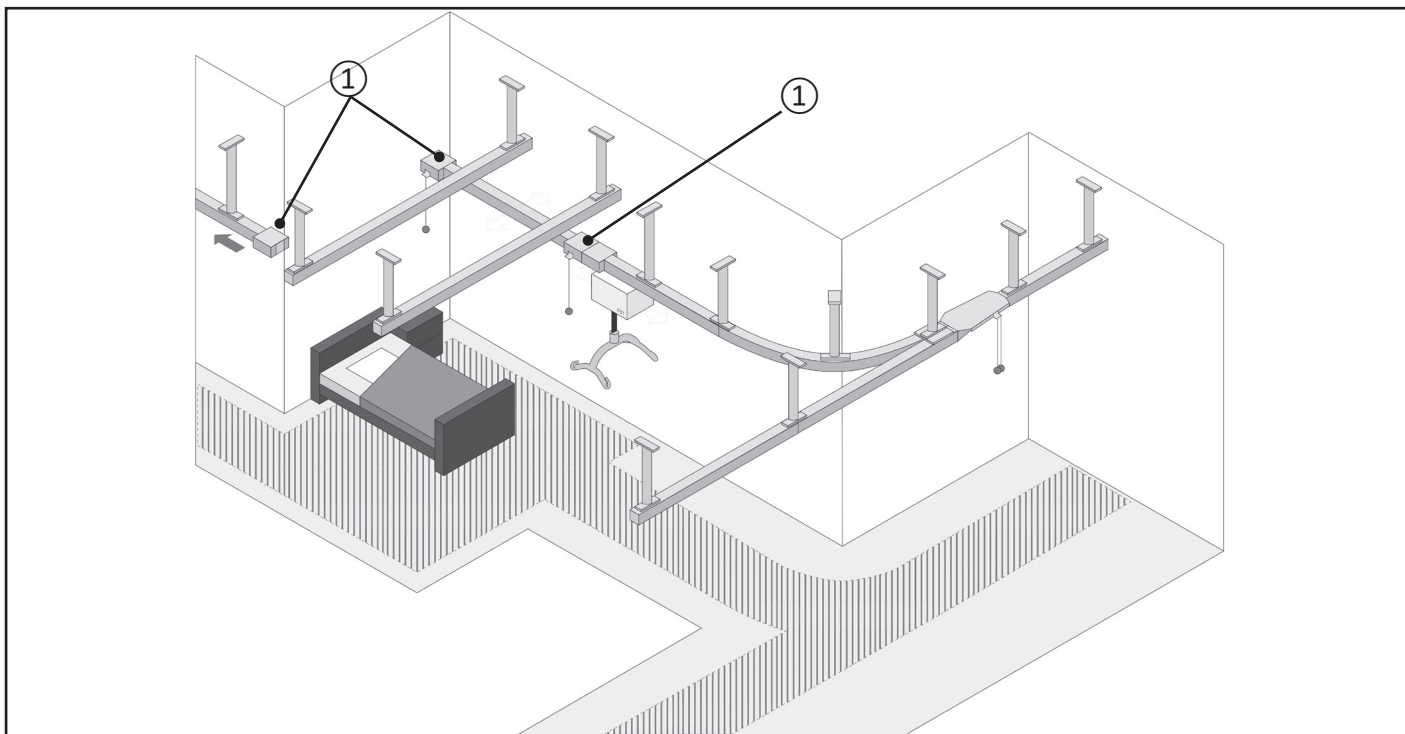


Komponenter

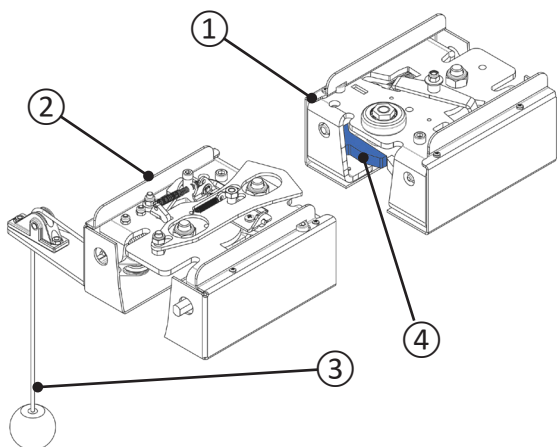


- ① Övergångskopplingsenhet
- ② Övergångskoppling med remskiva
- ③ Remskiva med vred
- ④ Port (två st. per enhet)

Status

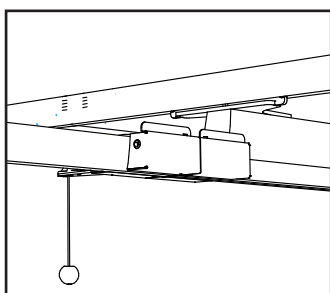


Ansluten

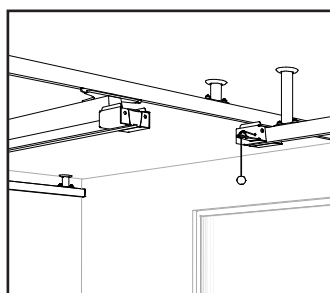

Frånkopplad


Frånkoppling

Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av minst 0,5 m från övergångskopplingsenheten innan övergångskopplingen kopplas från.

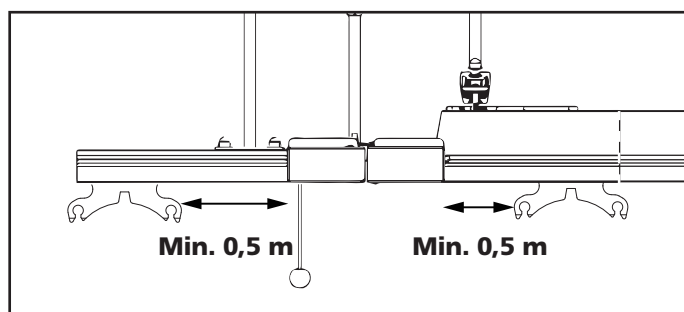

Dra ner remskivan tills det tar stopp.

Ett ljud hörs när frånkoppling sker.

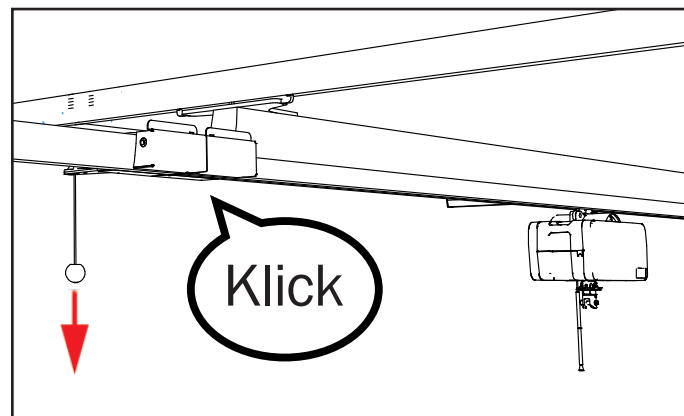


Övergångskopplingen är nu frånkopplad.



Överföring – fränkopplad övergångskoppling

Överför inte användaren förrän du har kontrollerat följande:


Båda portar ① är synliga (övergångskopplingsenhet sedd underifrån).

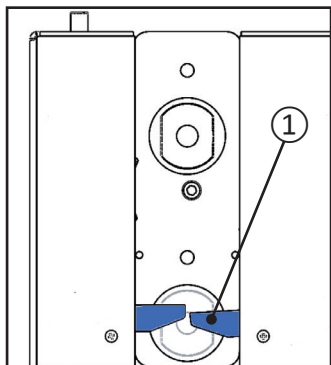

Låsbulten ② får **inte** synas när övergångskopplingen är fränkopplad.

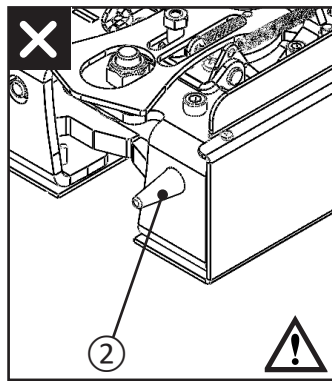
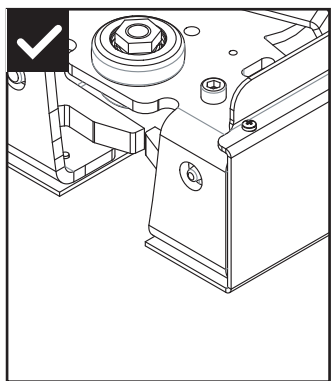


Skjut traversskenan i önskad riktning.

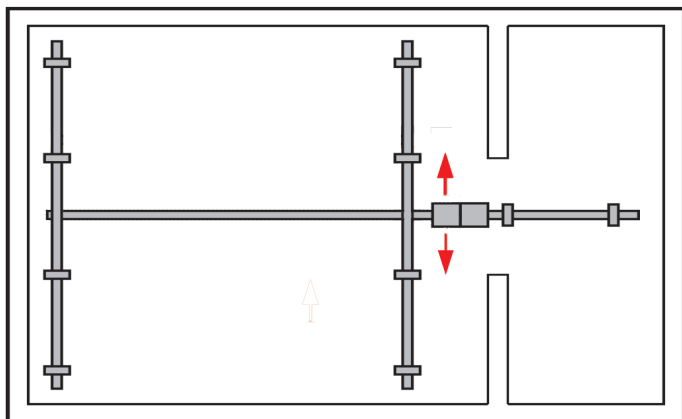


Anslutning

Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av minst 0,5 m från övergångskopplingen innan övergångskopplingsenheterna ansluts.

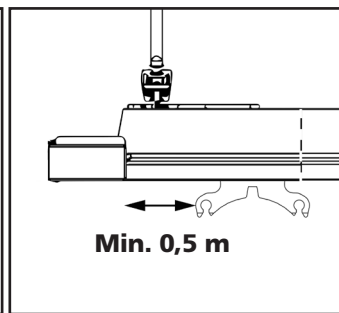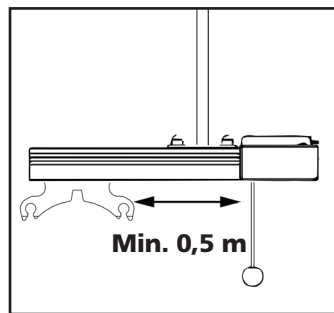

Skjut traversskenan mot den stationära skenan tills övergångskopplingarna ansluts och ett ljud hörs.

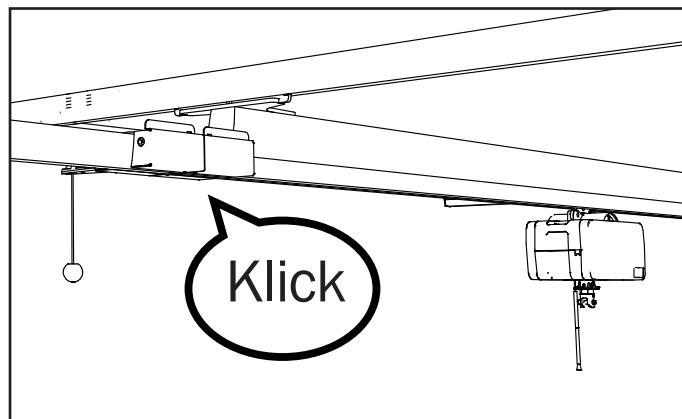

Överföring – ansluten övergångskoppling

Flytta inte användaren förrän du har kontrollerat att övergångskopplingsenheterna är helt ihoplåsta. Det ska inte gå att skjuta isär skenorna för hand.

Användaren kan nu flyttas från en skena till en annan.



Traverskoppling

Traverskoppling, inspektion efter installation


Aktivera traverskopplingen och kontrollera, med lyftanordningen belastad med minst 75 kg, att lyftanordningen löper fritt genom traverskopplingens båda riktningar.

Koppla in/ur traverskopplingen 10 gånger och kör genom traverskopplingen 10 gånger utan att stanna. Kontrollera att låsstiften på båda kopplingshalvorna återgår fritt till det nedre läget endast med hjälp av fjäderkraft.

För in en lyftvagn i skenan. Koppla in traverskopplingen. Rikta in vagnens ände mot änden av kopplingshalvan. Försök koppla ur traverskopplingen. Säkerhetsmekanismen måste förhindra detta. Upprepa testet för den andra kopplingshalvan.

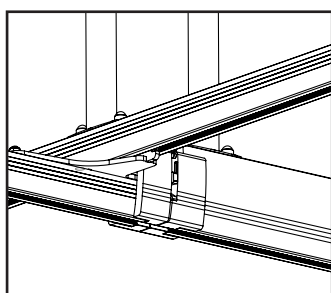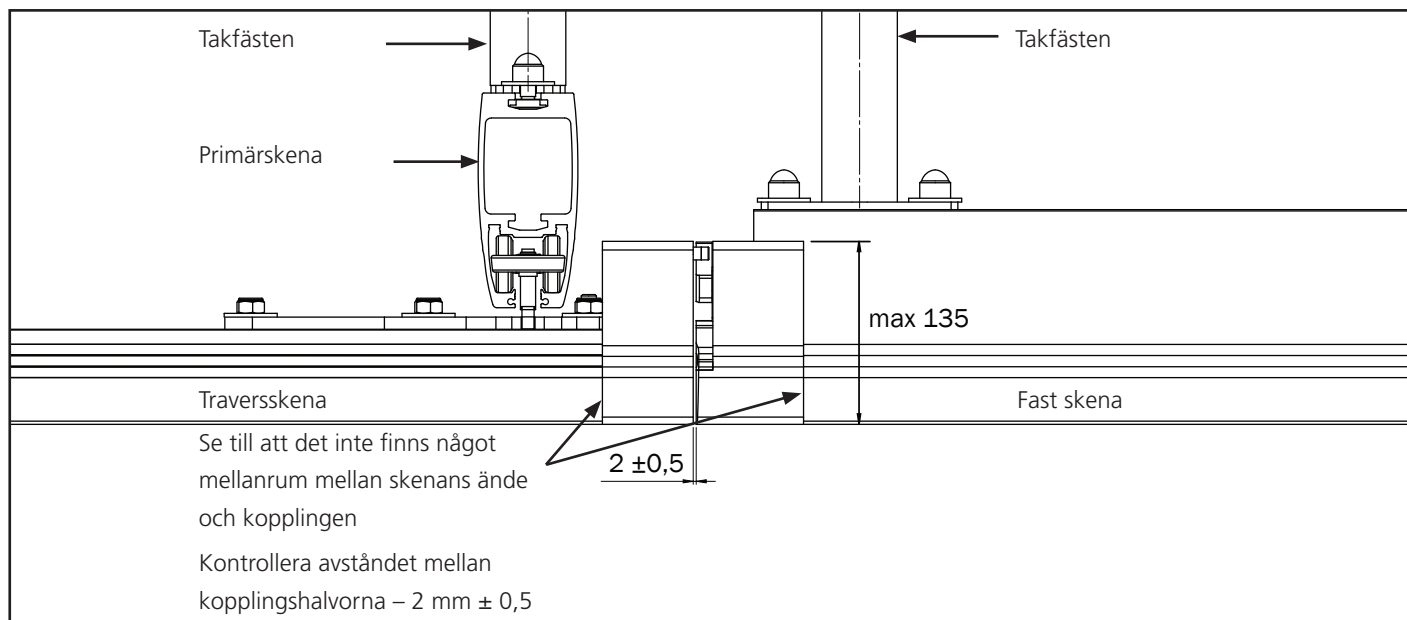

Ansluten

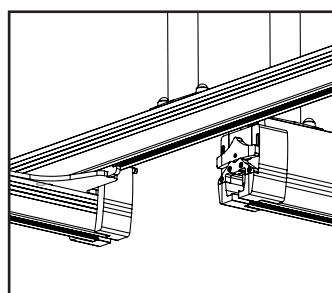


Frånkopplad

Överföring – frånkopplad traverskoppling

Användaren kan nu flyttas från en skena till en annan.

Etikettplacering

Följande etikett medföljer lådan med traverskopplingen. Fäst etiketten på traversskenan före användning enligt bilden nedan. Se till att den röda sidan är vänd närmast mot traverskopplingen.

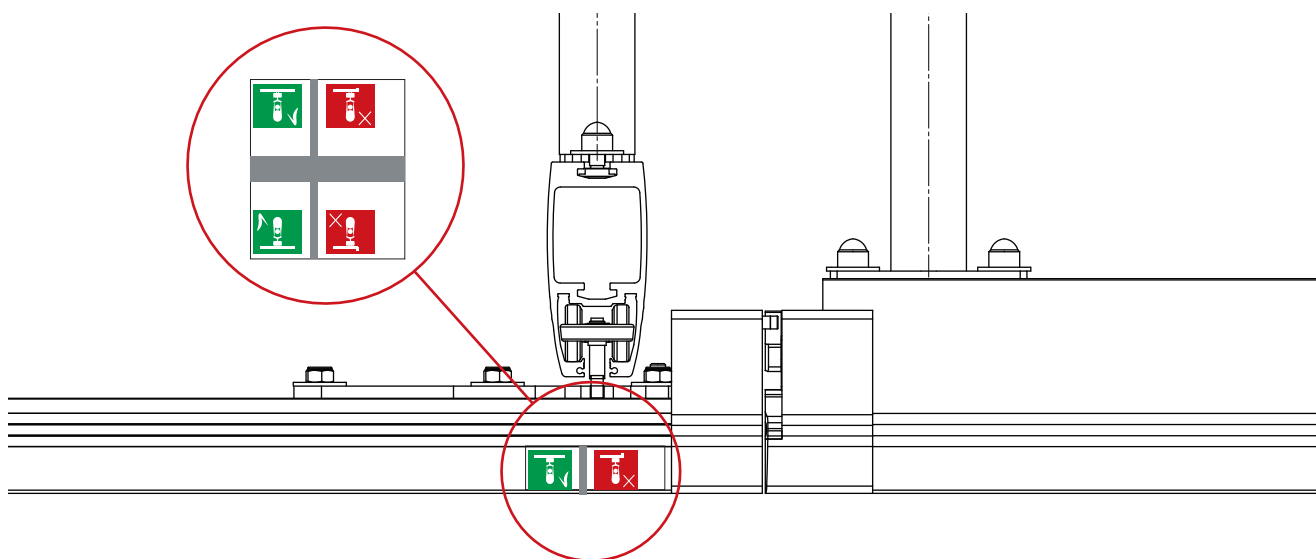

När du har fäst etiketten ska den tjocka grå linjen klippas av och tas bort. Detta gör att vagnen kan röra sig fritt fram och tillbaka längs skenan.

Symbolförklaringar



Vitt piktogram med grön bakgrund.
Denna symbol indikerar optimal placering av lyften för enkel anslutning av kopplingen.



Vitt piktogram med röd bakgrund.
Denna symbol indikerar en icke optimal placering av lyften, vilket försvårar kopplingsanslutningen.

Rengöring och desinfektion

Rengör regelbundet. Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel. Använd inte lösningssmedel eller starka vätskor eftersom det kan orsaka ytskador på lyften. För desinfektion vid behov: använd isopropylalkohol. Undvik slipande rengöringsmedel. Kontrollera nödstopps- och nödsänkingsfunktionen efter rengöring. Lyften får inte sköljas i rinnande vatten. Vid installation i miljöer med risk för fukt är det viktigt att skensystemet och motorn regelbundet tvättas och torkas. En komplett guide för att minska risk för korrosion kan fås på begäran.



Undvik att skada eller avlägsna etiketter under rengöring.



Lyftanordningen och handkontrollen har skyddsklass IP24 vilket innebär: >12,5 mm skydd mot åtkomst till farliga delar och att vatten som stänker mot kapslingen från något håll inte har några skadliga effekter.



Vårdgivare och brukare är exponerade för följande material: Polypropen och polyester (selar*), PC/ABS (handkontroll och lyft) pulverbelagt aluminium, pulverbelagt zink (lyftbyglar).

* = applicerad del



I sällsynta fall kan brukare eller vårdgivare som exponeras för polypropen och polyester drabbas av allergiska reaktioner som irritation, mild klåda och hudömhet.

Rekonditionering

Följ anvisningarna för rengöring och installation, genomför periodisk inspektion och använd checklistan efter installation för att rekonditionera lyften.

Återvinning

Se återvinningsanvisningar ("Recycling instructions") för information om hur produkten ska kasseras. De finns på www.etac.com.

Reservdelar

En lista över reservdelar kan fås på begäran.

Periodisk inspektion – omfattning

Periodisk inspektion är en visuell undersökning (framför allt av lyftens lastbärande struktur och lyftmekanism med fästen, bromsar, kontroller, säkerhetsanordningar och selar eller andra lyfttillbehör) enligt rapport för periodisk inspektion (Periodic Inspection Report) för Molift Air 500.

Se www.etac.com



Om säkerhetsrisker föreligger ska lyften omedelbart tas ur drift och tydligt märkas med "ur funktion". Lyften får inte användas igen förrän den är reparerad. Kontakta din lokala Molift/Etac återförsäljare/distributör för att rapportera eventuella problem.

Periodisk inspektion ska genomföras minst en gång om året, eller oftare om lokala bestämmelser kräver det. Inspektionen måste utföras av servicepersonal som auktoriserats av Etac. Kontakta Etac på Molift@etac.com för utbildning och auktorisering eller rekommendation av godkänd servicepartner.

När en periodisk inspektion utförs ska inspektören fylla i inspektionsrapporten för Molift Air. Rapporterna ska bevaras av den/de person(er) som ansvarar för service av lyften. Om inspektionen avslöjar defekter och skador ska lyften tas ur drift och märkas "ur funktion" tills den är reparerad.

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak/åtgärd
Lyften svarar inte på handkontrollmanövrar	Nödstoppet är aktiverat. Inaktivera det genom att trycka in knappen igen.
	Lyftens elektronik är överhettad. Vänta tills den svalnar.
	Handkontrollen är inte ordentligt isatt. Handkontrollen, dess kontakt eller sladd kan vara trasig och behöver bytas.
Lyften svarar inte på tryck på uppåtknappen på handkontrollen	Lyftbandets vinkelsensor är aktiverad. Justera lyftbandet eller flytta lyften så att lyftbandet blir mindre vinklat.
När elektrisk nödsänkning används går lyftbandet uppåt	Lyftbandet har dragits ut helt och hållet och har lindats åt fel håll. Använd manuell nödsänkning. Skicka lyften på service.

Tärkeää

Tämä käyttöohje sisältää nostoliinan ja lisävarusteiden käyttöön liittyviä tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja.




Tämä merkki tarkoittaa tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata näitä ohjeita huolellisesti.



Lue käyttöohje ennen käyttöä!
On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö kokonaisuudessaan, ennen kuin yrittää käyttää laitetta.

Lataa dokumentaatio osoitteesta www.etac.com, jotta käytössäsi on varmasti uusin versio.

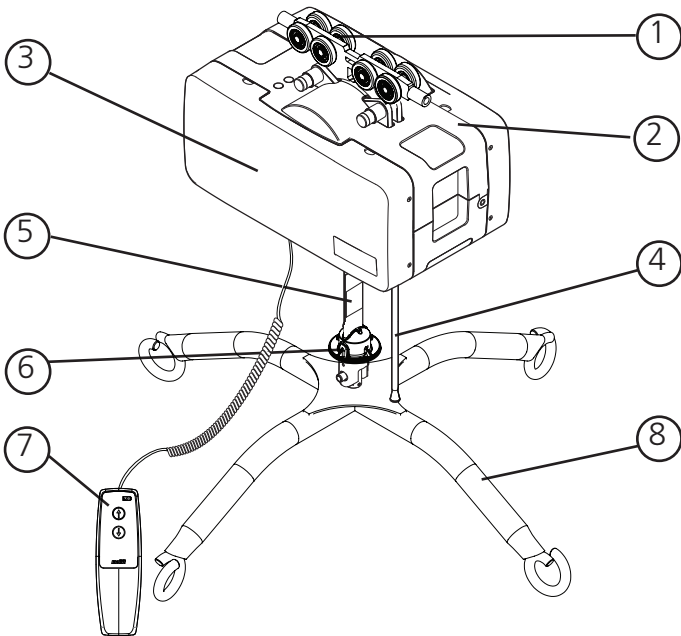Molift Air 500**Nostimen osat:**

1. Vaunu
2. Nostin
3. Sivusuojukset
4. Hätöpysäytys / hätälasku
5. Nostohihna
6. Pikalukitussocka
7. Käsiohjain
8. Liinatanko

Tietoja Molift Airista

Molift Air on vahva ja kätevä, kattoon kiinnitettävä potilasnosturi, jonka avulla potilaat saadaan siirrettyä mukavasti ja turvallisesti. Molift Airissa on erittäin kevyt moottori, joka pikalukituskyt-kentäjärjestelmään yhdistettynä helpottaa käsittelyä asennuksen ja huollon yhteydessä.

Yleistä**CE-ilmoitus**

Tuote ja sen tässä käyttöohjeessa kuvatut lisävarusteet ovat 5.4.2017 annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukaisia riskiluokkaan I kuuluvia lääkinällisiä laitteita. Tuote on testattu ja hyväksytty kolmannen osapuolen toimesta standardien IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 ja EN/ISO 10535:2021 mukaisesti. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

Käyttöehdot

Asiakkaan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina tietty riski, ja ainoastaan koulutettu henkilökunta saa käyttää tässä käyttöohjeessa kuvattuja laitteita ja lisävarusteita. Kiskojärjestelmän asennus on annettava pätevän henkilökunnan tehtäväksi sovellettavien asennusohjeiden mukaisesti. Potilasnosturia ei ole tarkoitettu nostettavan asiakkaan ohjattavaksi.

Muutokset ja eri valmistajien osien käyttäminen

Suosittelemme ainoastaan Molift-komponenttien ja -varaosien käyttämistä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole voimassa eikä Etac vastaa takuusta, jos tuotteeseen tehdään muutoksia. Etac ei vastaa vioista ja tapaturmista, joita voi sattua käytettäessä muiden valmistajien komponentteja. Tässä käyttöohjeessa mainitsemattomien lisävarusteiden, irrotettavien osien ja materiaalien käyttö voi olla vaarallista.



Vain pätevä henkilökunta saa avata nostimen tai sen lisävarusteita huoltoa tai korjausta varten. Pyörivistä osista tai sähköiskusta voi aiheutua loukkaantumisriski.



Takuuilmoitus
Kahden vuoden takuu, joka korvaa työstä ja materiaaleista johtuvat viat tuotteissamme. Yhden vuoden takuu akuille.
Katso ehdot osoitteesta www.etac.com.

Johdanto

Tässä käyttöohjeessa "käyttäjä" on henkilö, joka istuu laitteessa. "Hoitaja" on henkilö, joka ohjaa laitetta.

Käyttötarkoitus

Kattonostin on apuväline, joka on tarkoitettu vamman tai toimintakyvyn heikkenemisen aiheuttaman rajoituksen lievittämiseen tai korvaamiseen. Laite on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty seisomaan ja siirtymään sängystä, lattialta, pyörätuolista, tuolista, WC-istuimelta tai vastaavasta liikkuvuuden tai fyysisen voiman heikentymisen vuoksi.

Käyttäjäkunta

Laitetta voidaan käyttää lapsille, aikuisille ja iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea nostamiseen ja siirtymiseen tai kävelyharjoittelun aikana kiskojärjestelmässä.

Käyttöympäristö

Sisäkäyttöön kiskojärjestelmässä akuutissa hoidossa, pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa.

Käyttöaiheet

Käyttäjille, jotka tarvitsevat tukea nostamiseen ja siirtymiseen tai kävelyharjoitteluun, esim. henkilöillä, joiden liikkuvuus on rajoittunut ja jotka tarvitsevat kehon tukea siirtymisen aikana. Ei kattava luettelo.

Laitteen käyttäjäryhmä perustuu yksilölliseen terveyteen ja liikkuvuuteen, ei erityiseen diagnoosiin tai ikään.

Vasta-aiheet

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

Varotoimet


Varmista, että nostoliina sopii käyttäjälle ja liinatankoon.

Koulutusvaatimukset

Vain hoitajat, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttöohjeen, saavat käyttää laitetta.

Tuotteen merkintä**Tuotteen tarra**

Tuotetarrojen viivakoodit sisältävät tuotenumeron, sarjanumeron ja valmistuspäivän:

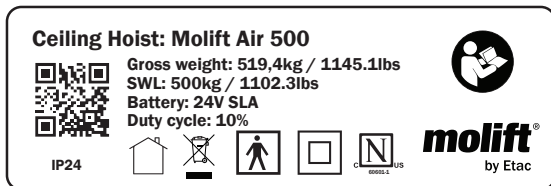**Varoitustarrat ja symbolit**

Tuotteessa käytettävät symbolit tarkemmin selitettynä:



Luokan II kaksoiseristys



CE-merkintä



Katso käyttöohje



Vain sisäkäyttöön



Potilaan enimmäispaino



Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.



Hätäpysäytys/
Hätälasku



Huollon merkkivalo



Akun merkkivalo



Kuusiotyökalusymboli, joka viittaa manuaaliseen hätälaskuun



Sertifiointielimen merkintä



Valmistaja



Valmistuspäivä



Luettelonumero



Sarjanumero



Lääkinnällinen laite



Yksilöllinen laitetunniste



UKCA-merkintä



BF-tyypin liityntäosa

Tekniset tiedot

Turvallinen työkuormitus (SWL)

Molift Air 500: 500 kg (1102 lbs)

Laitteen paino:

Kotelo mukaan lukien akku, ei sisällä liinatankoa:

14,1 kg (31 lbs)

4-pisteliinatanko. 5,3 kg (11,7 lbs)

Akku:

Tuotenro: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Akkulaturi:

Käsiohjaimen laturi, Mascot – tyyppi 3743

Tuotenro: 2540100

100–240 V AC, 50–60 Hz maks. 0,5 A

Lähtö 0,56 A

IRC:n virransyöttö, Mascot – tyyppi 3721

Tuotenro: 2610119

Tulo: 100-240 V AC, 50-60 Hz maks. 1,0 A

Lähtö: 24 V DC 1,75 A / 42 W

IRC:n laturi, Mascot – tyyppi 3844

Tuotenro: 2640200

Tulo: 20–30 VDC 1,3 A

Lähtö 0,5 A

Nostonopeus

60 mm/sekunti (2,36 tuumaa/sekunti)

75 kg kuormituksella

Suojaluokka

Käsiohjain IP24

Nostomoottori IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Käyttövoimapainike

Käsiohjaimen painikkeet: 3,4 N

Materiaali:

Alumiini, muovi, teräs

Arvioitu käyttöikä:

Nostimen arvioitu käyttöikä on 30 000 käyttökertaa turvallisella työkuormituksella (SWL) tai 15 vuotta. Kiskojen odotettu käyttöikä on 30 vuotta.

Mitat:

P x L x K (pituus, leveys, korkeus ilman vaunua)

36 x 24,6 x 19,5 cm

(14,2 x 9,7 x 7,7 tuumaa)


A (nostoalue)

300 cm (118 tuumaa)

B (Minimietäisyys katosta liinatangon

kiinnityspisteeseen) 32,7 cm (12.7/8 tuumaa)

Lisätietoja teknisistä tiedoista, huollosta ja korjauksista on teknisessä käyttöohjeessa.

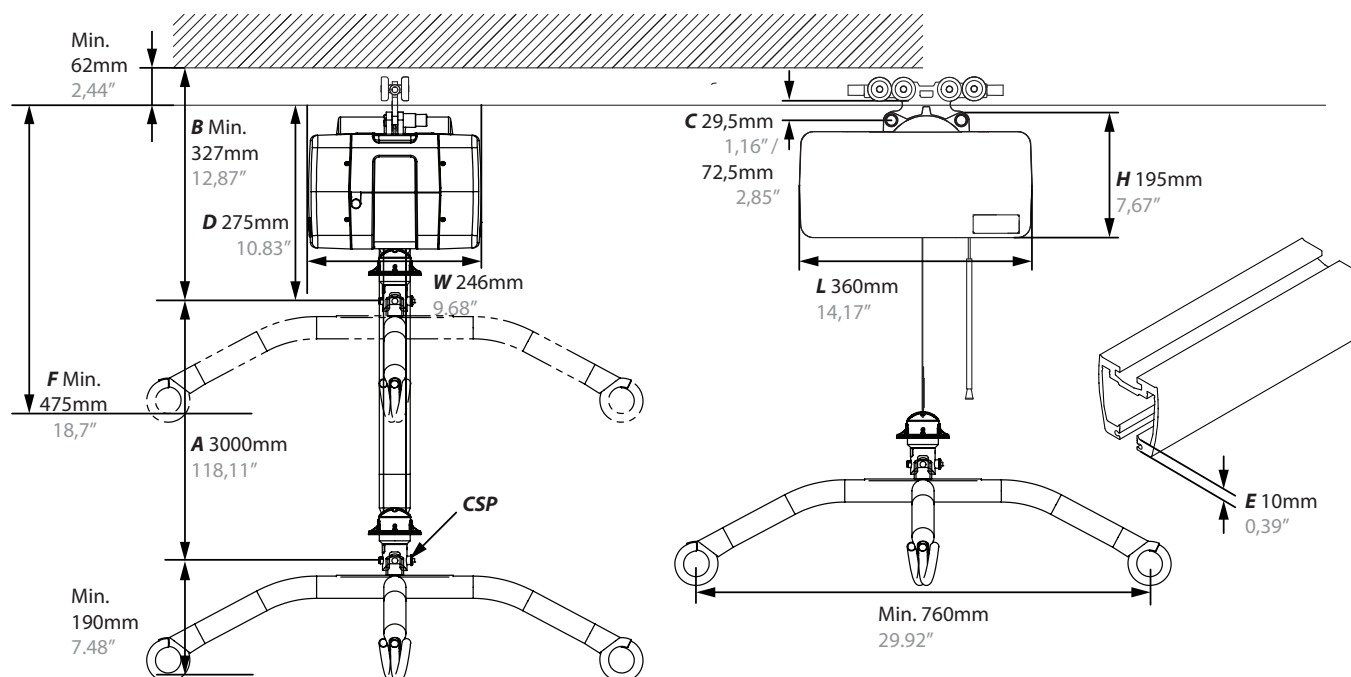

Asennus

Nostimeen on merkitty turvallinen työkuormitus (SWL), joka ei saa ylittää kiskojärjestelmän suurinta kuormituskapasiteettia.




Kiskojärjestelmä on annettava aina pätevän henkilökunnan asennettavaksi sovellettavien asennusohjeiden mukaisesti.



Älä aloita nostimen käyttöä ennen tarkistuslistan mukaista tarkastusta asennuksen jälkeen.

Vaunun asennus

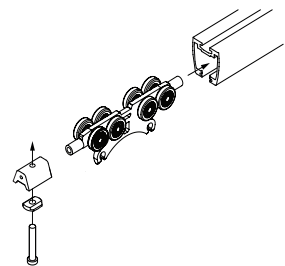

Vaunun asentaminen kiskojärjestelmään. Irrota päätypysäytin ja aseta vaunu kiskoille. Asenna päätypysäytin, ja varmista, että se on kiinnitetty tukevasti. Katso asennustiedot BM4401-mallista.




Varmista ennen nostimen käyttämistä, että kaikkiin kiskojärjestelmän päihin on asennettu päätypysäyttimet!

Nostimen asennus




Ole varovainen korkealla tehtävissä työtilanteissa. Suosittelemme, että laitetta on asentamassa vähintään kaksi asentajaa, jotta asennuksen aikana ei menetetä tasapainoa ja loukkaannuta!

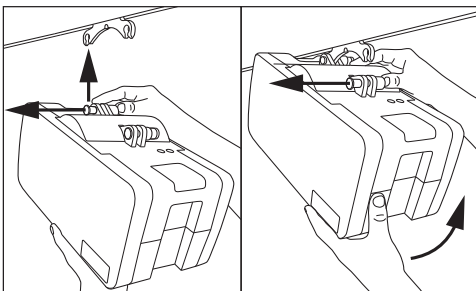

Potilasnosturin asentaminen vaunuun. Työkaluja ei tarvita. Nostimessa on kaksi kiinnityspistettä.

Kiinnitä ensin yksi piste. Paina painike pohjaan asti, ja aseta potilasnosturi kiinnityspisteen varassa vaunuun. Vapauta painike ja varmista, että se näyttää selvästi vihreää, ennen kuin kiinnität seuraavan pisteen.

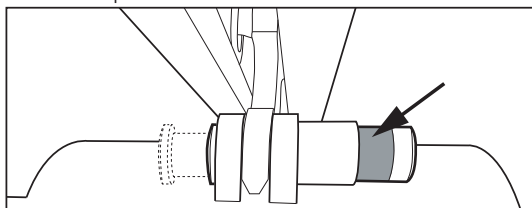

Varmista, että molemmat kiinnityspisteen painikkeet palautuvat kokonaan ja näyttävät selvästi vihreää asennuksen jälkeen. Hätälaskujohdon ja -putken voi säätää sopivan pituiseksi (korkeussuunnassa) leikkaamalla putkea ja johtoa.

Asennus

Varmista tämän tarkistuslistan avulla ennen käyttöä, että nostin on asennettu oikein ja toimii asianmukaisesti ja turvallisesti.

- ☐ Kiskon päätypysäyttimet asennetaan vaunun kiinnityksen jälkeen kuten kuvattu BM4401:ssä
- ☐ Varmista, että nostin on kiinnitetty kiskoon asianmukaisesti eikä nostimessa ole irrallisia osia.
- ☐ Tee yksi kuormitettu nosto (60–80 kg).
- ☐ Varmista, että akku on ladattu täyteen.

Molift Air -nostimen käyttö

Yleiset turvallisuusvaroitukset

Käytä ainoastaan sellaisia lisävarusteita ja nostoliinoja, jotka saa säädettyä asiakkaalle, tämän vamman tyyppille, koolle ja painolle sekä siirtotyyppille sopiviksi.

Taukosuhde / käyttöjakso

Molift Air 500-potilasnostinta ei saa käyttää yhtämittaisesti yli kahta minuuttia kauempaa (enimmäiskuormituksella) ja sen on annettava levätä vähintään 18 minuutin ajan. Käyttöjakso 0 % (Vuorottelu standardin ISO-EN 10535 mukaan)



Älä sijoita nostinta siten, että sen verkkovirtakaapelin irrottaminen on vaikeaa. Eristä järjestelmä irrottamalla verkkovirtakaapeli sähköpistorasiasta.



Jos nostimen liinatangon ja rungon tukiyksikön maksimikuormitukset (SWL) poikkeavat toisistaan, tulee aina käyttää pienintä maksimikuormitusta.



Molift-nostimia tulee käyttää ainoastaan asiakkaiden nostamiseen. Älä koskaan käytä nostinta minkäänlaisten esineiden nostamiseen tai siirtämiseen.

Tarkastukset ennen käyttöä / päivittäin


Hoitajana päivittäin tai ennen käyttöä suoritettava tarkastus:

- ☐ Tarkista, ettei nostimessa ja kiskojärjestelmässä ole näkyviä vaurioita, vikoja tai vääntymiä.
- ☐ Varmista, että liinatangon kiinnitys ja kaikki irrotettavat osat on kiinnitetty ja varmistettu asianmukaisesti.
- ☐ Testaa hätäpysäytyspainike ja hätälasku.
- ☐ Varmista, ettei akun tai huollon merkkivalo pala.
- ☐ Varmista, ettei nostohihnassa ole näkyviä vaurioita tai rispaantumia.
- ☐ Koekäytä nostimen käyttötoiminnot ja varmista, ettei siitä kuulu epätavallisia ääniä.

Jos potilasnosturissa on vikoja tai puutteita, se on poistettava käytöstä ja merkittävä "Poistettu käytöstä" -merkinnällä. Mitään Molift Air -nostimen osia ei saa huoltaa tai kunnostaa nostimen ollessa potilaskäytössä.

Käsiohjain


Käsiohjaimessa on 2 painiketta nostamista ja laskemista varten, tai 4 painiketta, jos nostin on varustettu työntötoiminnolla. Käsiohjaimessa on merkkivalo, joka syttyy, kun akun varaus on vähissä ja nostin on latauksen tarpeessa.

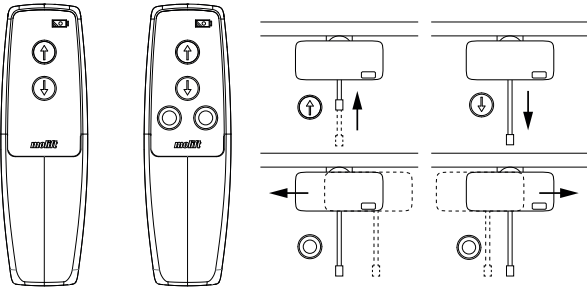

Älä vedä käsiohjaimesta siirtäessäsi nostinta kiskoa pitkin




Nostolaite ei toimi, jos käsiohjain on kytketty laturiin.
Irrota käsiohjain laturista ennen nostolaitteen käyttöä.

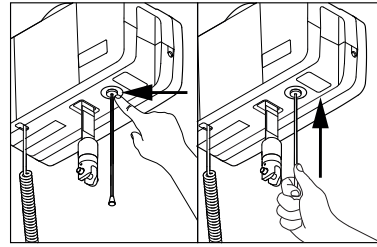

Paina sormella tai käytä johdon putkea painikkeen painamiseksi jälleen sisään ja hätäpysäytyksen nollaamiseksi.


Sähköinen hätälasku

Aloita lasku vetämällä ja pitämällä paikallaan. Pidä paikallaan, kunnes asiakas on laskettu alas ja voidaan irrottaa liinatangosta.

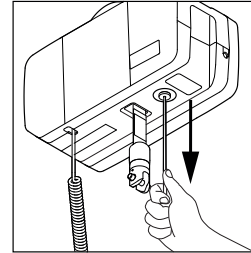

Vain hätäkäyttöön, jos käsiohjain ei toimi!

Liinatangon asennus

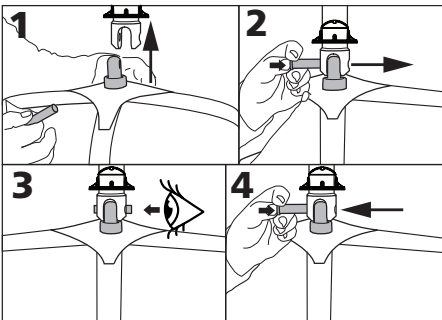


1. Kohdista liinatanko kiinnityspisteeseen.
2. Paina lukkotapin painiketta ja paina se pohjaan asti.
3. Varmista, että lukkotappi on kiinnitetty oikein.
4. Pidä lukkotapin painiketta painettuna ja irrota lukkotappi vetämällä.

Hätäpysäytys / hätälasku

Hätäpysäytys



Hätäpysäytyksen aktivointi ja nollaus:

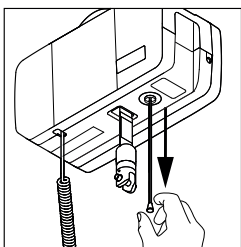

Aktivoi hätäpysäytys vetämällä. Painike tulee esiin, ja nostin pysähtyy.

Manuaalinen hätälasku

Potilasnosturin sisällä on kuusi otappiavain tai terä sähköporaan. Poista suojukset nostimen molemmilta puolilta.

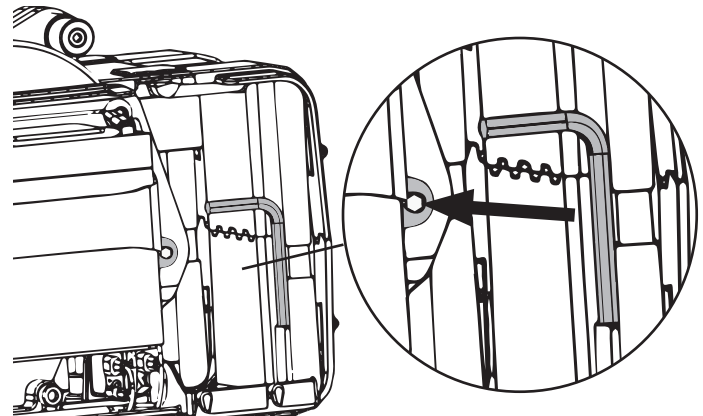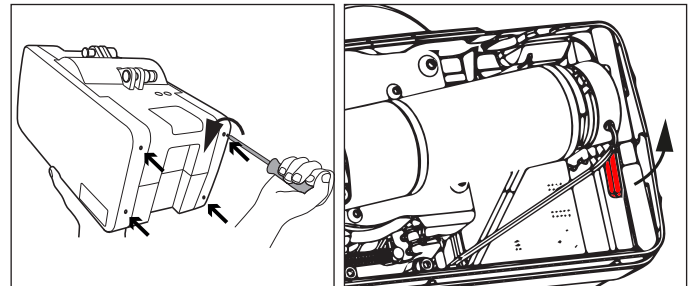

Avaa sivusuojukset käyttämällä ruuvinväännintä tai poraa kaikkiin 8 ruuviin (4 kummallakin puolella). Käännä "Jarrun vapautus" -kahva ylös. Etsi työkalut nostimen toiselta puolelta ja laske nostohihnaa pyörittämällä vastapäivään. Sähköporan käyttö on suositeltavaa.

Huoltoa EI tarvita, jos:

- 1) Air-nosturin manuaalisen hätälaskun käytön syy on tiedossa ja
- 2) hihna on ehjä ja
- 3) laite toimii normaalisti manuaalisen hätälaskuprosessin jälkeen.

Uusi jarrun ohitus vaikuttaa tähän tekemällä manuaalisesta laskusta hätätilanteesta vähemmän rasittavaa nosturin osille. Jos laitteessa on ollut tuntemattomasta syystä johtunut toimintahäiriö ja tällöin on käytetty manuaalista hätälaskujärjestelmää, laite on huollettava.

Elektroniikka

Kuljetus ja säilytys

Pitkäaikaista säilytystä varten on suositeltavaa aktivoida (vetää ulos) hätäpysäytyspainike. Potilasnosturia voi säilyttää ja kuljettaa -25...+70 °C:n lämpötiloissa.

Käyttö

Potilasnosturi on suunniteltu käytettäväksi normaalissa huoneenlämmössä (+5...+40 °C).

Ilmanpaine: 70 - 106 kPa

Suhteellinen kosteus: 15–90 %

Jos laitetta on säilytetty tai kuljetettu ohjeesta poikkeavissa lämpötiloissa, jätä se tilaan, jossa lämpötila on sopiva, kunnes se saavuttaa turvallisen käyttölämpötilan.



Lääketieteelliset sähkölaitteet edellyttävät erityisiä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyviä varotoimia. Kannettavat tai siirrettävät radioviestintälaitteet voivat vaikuttaa lääketieteellisiin sähkölaitteisiin, ja niitä tulee pitää vähintään 30 cm:n (12 tuuman) päässä potilasnosturin elektroniikasta.

Akut

Molift Air 500 on saatavilla 24 V SLA-akulla.

SLA-akun arvioitu käyttöikä on noin 500 latauskertaa.



Lataa akku sen saapuessa ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein akun vaurioitumisen estämiseksi.



Akut on hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Älä hävitä sekajätteen mukana.

Nostimen akun ja huollon merkkivalot

	Avainsymboli / huollon merkkivalo
	Akkusymboli / akun merkkivalo

Sähköjärjestelmässä on virransäästötoiminto, joka kytkee sähköjärjestelmän pois päältä viiden minuutin jälkeen viimeisestä käyttökerrasta. Kaikki merkkivalot sammuvat. Järjestelmä aktivoituu painettaessa yhtä käsiohjaimen käyttöpainikkeista.

Nostimen akun merkkivalo

Kun monitasoinen akun merkkivalo on keltainen, nostimessa on riittävästi virtaa vähintään yhteen kokonaiseen nostojaksoon maksimikuormituksella. Kun akun merkkivalo vilkkuu keltaisena, laitteella voi ainoastaan laskea liinatangon.

Akun merkkivalo	Akun varaus
	Vihreä
	Vihreä
	Vihreä
	Vihreä
	Keltainen
	Keltainen vilkkuu
	80 % tai enemmän
	80–60 %
	60–40 %
	40–20 %
	20–0 %
	0 %

Huollon merkkivalo / Määräaikaistarkastus

Potilasnosturin elektroniikka tallentaa muistiin nostetut painot ja nostokerrat. Tietyn käyttöajan jälkeen annetaan signaali, joka ilmaisee potilasnosturin huoltotarpeen.

Huollon merkkivalo	Tila
Ei valoa	Huoltoa ei tarvita
Keltainen	Tarvitaan määräaikaistarkastus
Vilkkuu vihreänä	Tilaa huolto
Punainen	Suorita huolto

Huollon laajuus

Kun nostin on suorittanut tietyn määrän nostoja, (5 000 nostoa suurimmalla sallitulla painolla (SWL)), huollon merkkivalo palaa punaisena.

Tämän jälkeen valtuutetun henkilöstön on suoritettava huolto, mukaan lukien kuluneiden osien tarkastus ja vaihto.

Ota yhteys Etaciin tai paikalliseen jälleenmyyjään tai käy osoitteessa etac.com hyväksytyn huoltokumppanin löytämiseksi.

Lataus

Molift Air voidaan ladata käsiohjaimen avulla akkulaturilla tai kiskon kautta kiskon sisäisellä latauksella (IRC).


Laturin ja virtälähteen merkkivalo

<i>Laturin merkkivalo</i>	<i>Tila</i>
Vilkkuu vihreänä	Ei yhdistetty nostimeen
Keltainen	Lataus
Vilkkuu keltaisena	Lähes latautunut
Vihreä	Kokonaan latautunut

<i>Virtälähteen merkkivalo</i>	<i>Tila</i>
Sininen	Kytetty pistorasiaan

Lataaminen käsiohjaimella


Akkulaturi kytketään pistorasiaan. Käsiohjaimelle on saatavana seinälle asennettava telakointiasema. Varmista, ettet vaurioita kaapelia. Laturi voi olla kytkettynä virtälähteeseen koko ajan. Käytä ainoastaan Molift-latureita. Käsiohjaimessa on merkkivalo, joka syttyy, kun akun varaus on vähissä ja nostin on latauksen tarpeessa. Molift Air -laitteen käsiohjaimen laturi: Tuotenro: 2540100

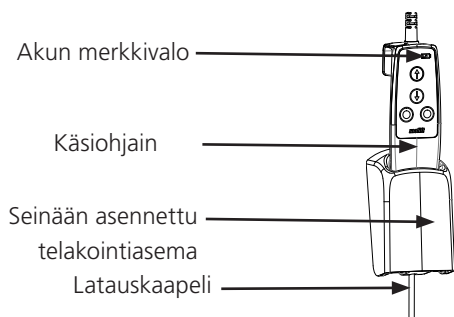


IRC - kiskon sisäinen lataus

Potilasnosturi ladataan nosturin moottorin sisäänrakennetulla laturilla, joka on tarkoitettu jatkuvaan lataamiseen koko kiskojärjestelmän alueella.

Molift Air IRC -mallissa on akkuun kytketty sisäänrakennettu laturi. Se on asennettava IRC-vaunun kanssa kiskojärjestelmään sähköä johtavan nauhan avulla. IRC-vaunu on liitetty Molift Air IRC:n sisäiseen akkulaturiin. IRC-vaunu on jatkuvasti yhteydessä kiskon sisällä kulkevaan johtavaan nauhaan. IRC-virtälähde on kytketty johtavaan nauhaan kiskon päässä olevan IRC-liitännän kautta, ja se syöttää virtaa Molift Air IRC:n sisäiseen akkulaturiin.

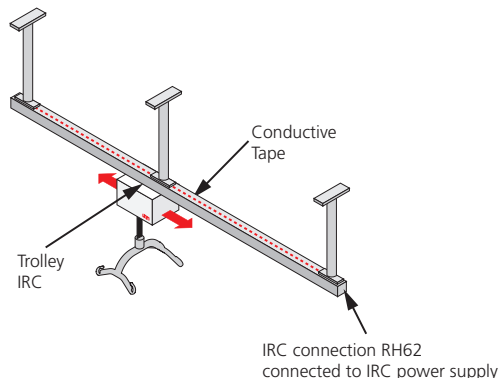

IRC sopii sekä yksikiskoisiin että poikittaisjärjestelmiin.

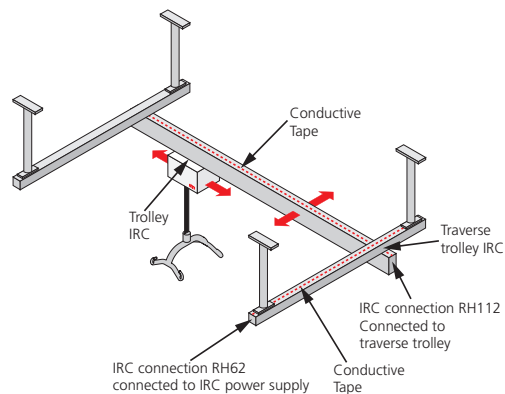

IRC:n virransyöttö

Tuotenro: 2610119

Laturi 3844 DC/DC (osa Molift Air IRC:tä)

Tuotenro: 2640200

Siirtäminen

Suunnittele nostotapahtuma etukäteen, jotta se sujuu mahdollisimman turvallisesti ja tasaisesti. Muista toimia ergonomisesti. Arvioi riskit ja tee muistiinpanoja. Avustaja vastaa käyttäjän turvallisuudesta.

Nostoliinojen käyttö

Nostoliina on testattava kunkin käyttäjän kanssa ja aiotussa nostotilanteessa.



Lue nostoliinan käyttöohje ennen käyttöä.



Älä käytä vaurioituneita tai pahasti kuluneita nostoliinoja.


Laiteyhdistelmät ja nostoliinojen yhteensopivuus

Jos laite yhdistetään muihin laitteisiin tai lisävarusteisiin, yhdistäminen ei saa muuttaa valmistajien määrittämiä tuotteiden käyttötarkoitusta tai tehdä tuotteisiin muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttämiseen tai laitteen turvalliseen käyttöön.


Suosittelemme Etac- tai Molift-liinojen käyttämistä. Nostinta voidaan käyttää muiden valmistajien nostoliinojen kanssa. Yhteensopivuustiedot löytyvät osoitteesta www.etac.com. Laitteiden yhdistämisestä vastaavan henkilön/yrityksen on varmistettava, että soveltuvat vaatimukset täyttyvät. Sähkösuojaus yhdessä nostoliinojen kanssa: BF-tyyppin liityntäosa.

Nostaminen ja laskeminen


Kun siirrät asiakasta, seiso nostamasi asiakkaan vieressä. Varmista, että kädet ja jalat eivät osu istuimeen, vuoteeseen tai muihin esteisiin. Paranna asiakkaan turvallisuuden tunnetta säilyttämällä katsekontakti.

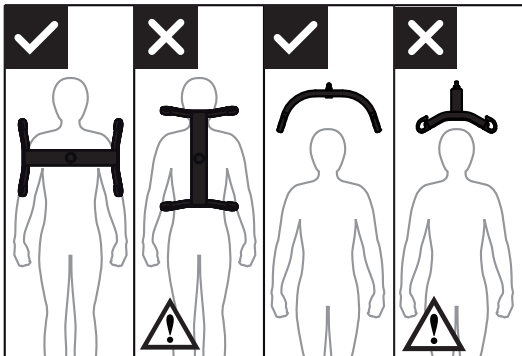

Nelipisteliinatanko on aina asetettava asiakkaan ylitse, jotta tämä ei liu'u vahingossa pois nostoliinasta.

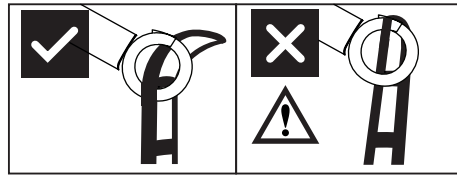


Liinatangon koukku estää nostoliinan irtoamisen vahingossa, kun se on oikein asennettu.

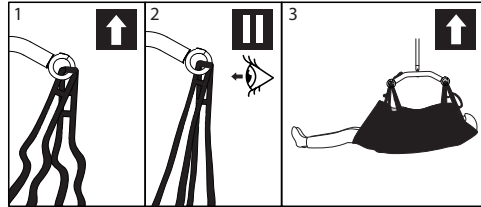

1. Tarkista, että nostoliina on asetettu oikein asiakkaan ympärille ja että nostoliinan lenkit on kiinnitetty oikein liinatangon koukkuihin.
2. Venytä nostoliinan hihnoja asiakasta nostamatta. Varmista, että nostoliinan kaikki neljä silmukkaa on kiinnitetty tukevasti, jotta käyttäjä ei pääse luisumaan tai putoamaan.
3. Nosta asiakas ja tee siirto.

Kulma-anturi

Nostimessa on suuntaturvallisuustoiminto, joka estää nostamisen, jos nostohihnan kulma on liian jyrkkä.

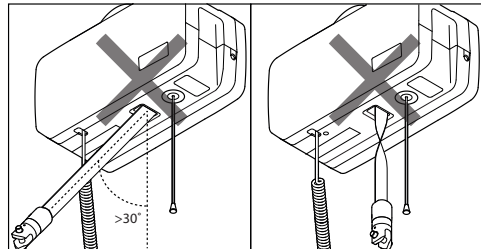

Jos nostin ei reagoi käsiohjaimen "ylös"-painikkeeseen, se voi johtua siitä, että nostohihnan kulma on liian jyrkkä tai nostohihna kiertynyt ja anturi aktivoitunut.


Lisävarusteet

Laturin johdot ja pistokkeet.

- Pistokesovitin EU, tuotenro. 2510365
- Pistokesovitin UK, tuotenro. 2510366
- Pistokesovitin US, tuotenro. 2510367
- Pistokesovitin AUS, tuotenro. 2510368
- Johto EU, tuotenro. 1140105
- Johto UK, tuotenro. 1140106
- Johto US, tuotenro. 1140104
- Johto AUS, tuotenro. 1140107
- Laturin seinäkiinnike, tuotenro. 2610123

Liinatangot

Molift Air -nostinta voi käyttää 4- tai 8-pisteliinatangolla.

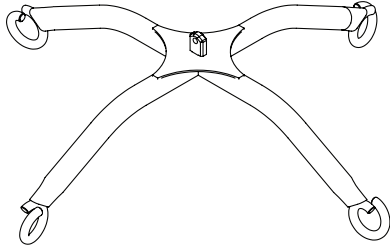

4-pisteliinatanko, teräs

Tuotenro: 2140003

Nostoliinat

Etac valikoimaan kuuluu runsaasti erilaisia nostoliinoja erityyppisiä siirtoja varten. Molift RgoSling on kehitetty yhdistettäväksi 4-pisteisen nostotangon kanssa, jossa on silmukkaliitännät.

Hihnat toimivat myös 2-pisteisen nostotangon kanssa. Katso oikeat nostoliinojen ja liinatankojen yhdistelmät nostoliinojen käyttöohjeen yhdistelmäluettelosta.

Molift RgoSling -nostoliinasarjasta on saatavana koot XXS–XXL, materiaaleina polyesteri ja polyesteriverkkokangas.

Liinojen ja liinatankojen täydellinen luettelo löytyy osoitteesta www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ambulating Vest

Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)

Molift RgoSling Fabric Stretcher

Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XL)

Lisävarusteet:


Molift Rgosling Extension Loops

Art.nr.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Siirtokytkin

Joissakin kiskojärjestelmissä on siirtokytkimet ① asennettuna. Niitä käytetään käyttäjän siirtämiseen yhdestä kiskojärjestelmästä toiseen, esim. kahden eri huoneen välillä.

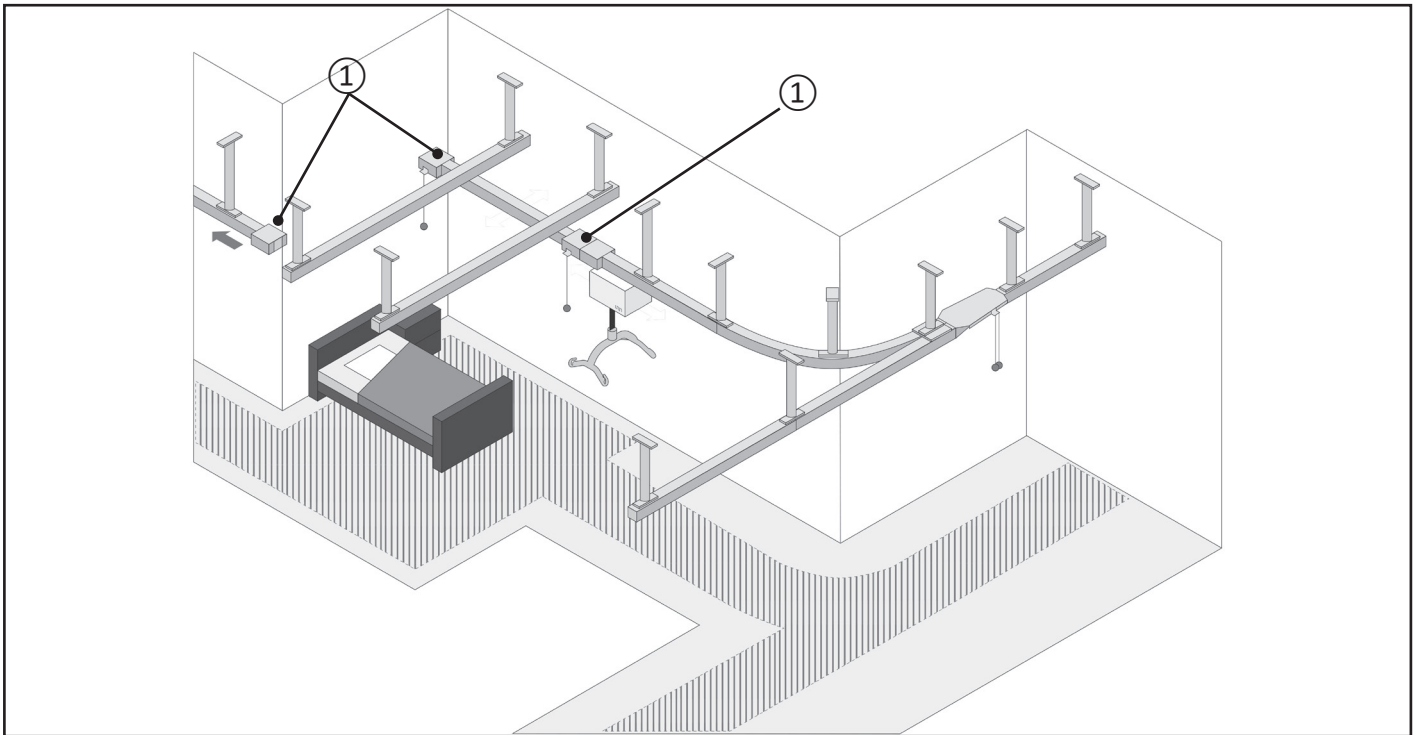


Osat

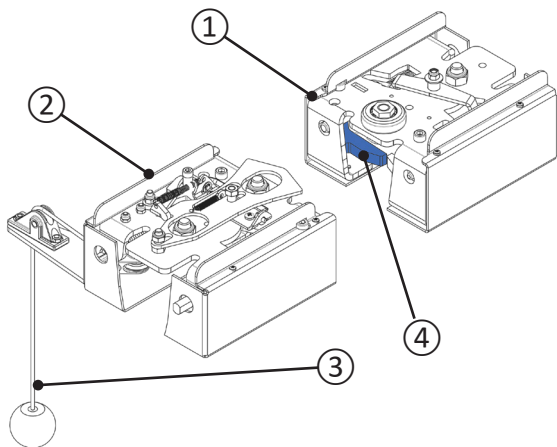


- ① Siirtokytkinyksikkö
- ② Siirtokytkinyksikkö hihnapyörällä
- ③ Hihnapyörä ja nappi
- ④ Portti (kaksi kpl/yksikkö)

Tilat

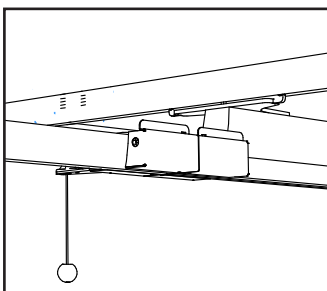


Kytetty

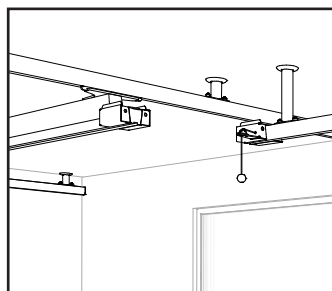

Irrotettu


Irrottaminen

Varmista ennen siirtokytkimen irrottamista, että vaunu on vähintään 0,5 metrin päässä siirtokytkinyksiköstä.

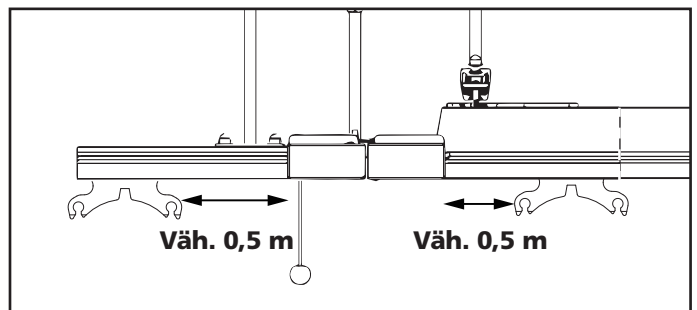

Vedä hihnapyörää alas vasteeseen asti.

Kuulet äänen, joka vahvistaa irtoamisen.

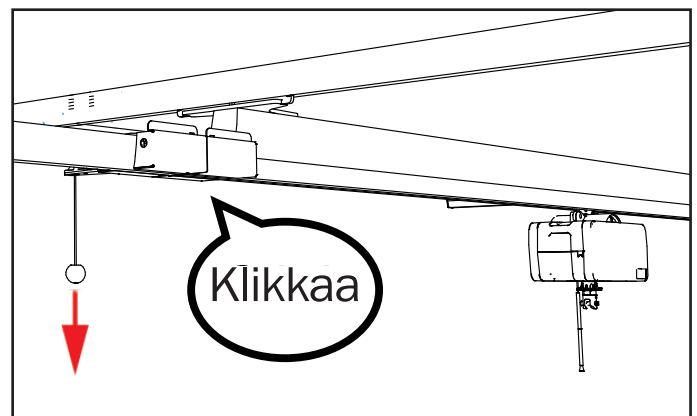


Siirtokytkin on nyt irrotettu.



Siirto – irrotettu siirtokytkin

Älä siirrä käyttäjää ennen kuin olet tarkistanut seuraavat asiat:


Molemmat portit ① ovat näkyvissä (siirtokytkinkyksikö alhaalta katsottuna).

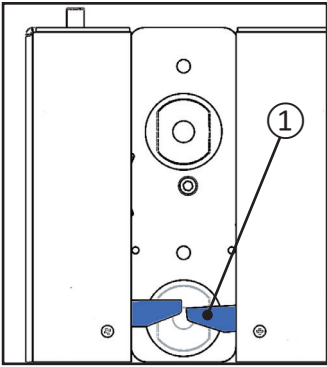



Lukitusruuvi ② ei saa olla näkyvissä, kun kytkentä irrotetaan.

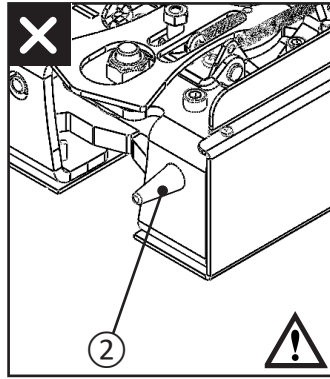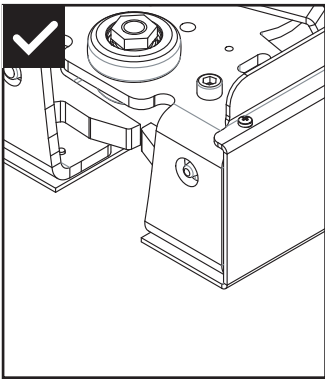


Työnnä poikittaiskiskoa haluttuun suuntaan.

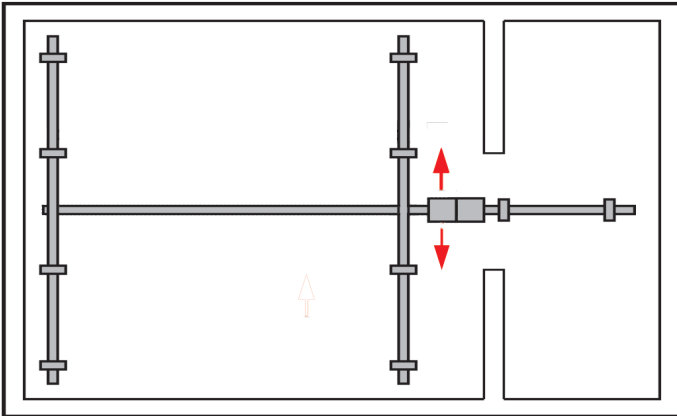**Kytkeminen**

Varmista ennen siirtokytkinkyksiköiden kytkemistä, että vaunu on vähintään 0,5 metrin päässä siirtokytkinkyksiköstä.

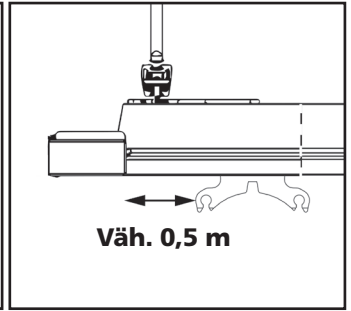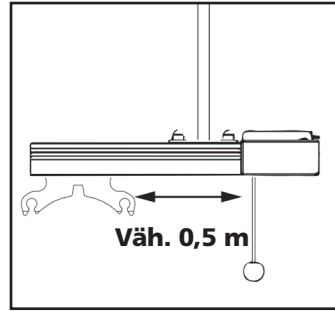

Työnnä poikittaiskiskoa kohti kiinteää kiskoa niin, että siirtokytkinkyksiköt kytkeytyvät ja kuulet äänen.

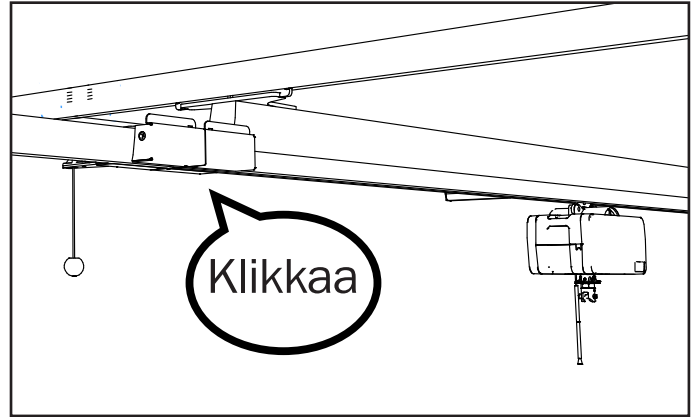**Siirto – kytketty siirtokytkin**

Älä siirrä käyttäjää ennen kuin olet tarkistanut, että siirtokytkinkyksiköt on täysin lukittu yhteen. Kiskojen työntäminen erilleen käsin ei saa olla mahdollista.

Käyttäjä voidaan nyt siirtää kiskolta toiselle.



Poikittaisliitântä

Poikittaisliitântä, tarkastus asennuksen jälkeen


Kytke poikittaisliitântä ja tarkista nostimen ollessa kuormitettuna vähintään 75 kg:lla, että nostin liikkuu vapaasti poikittaisliitännän molempiin suuntiin.

Kytke/irrota poikittaisliitântä 10 kertaa ja aja poikittaisliitännän läpi 10 kertaa pysähtymättä. Tarkista, että molempien liitännän puolikkaiden lukitustapit palaavat vapaasti ala-asentoonsa pelkällä jousen voimalla.

Työnnä yksi nostinvaunu kiskoon. Kytke poikittaisliitântä. Kohdista vaunun pää liitännän puolikkaan päähän. Yritä irrottaa poikittaisliitântä. Turvamekanismin on estettävä tämä. Toista testi toiselle liitännän puolikkaalle.

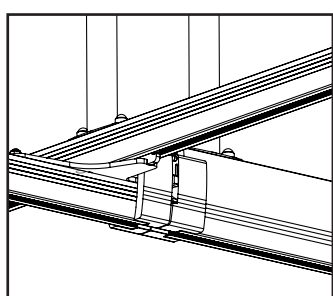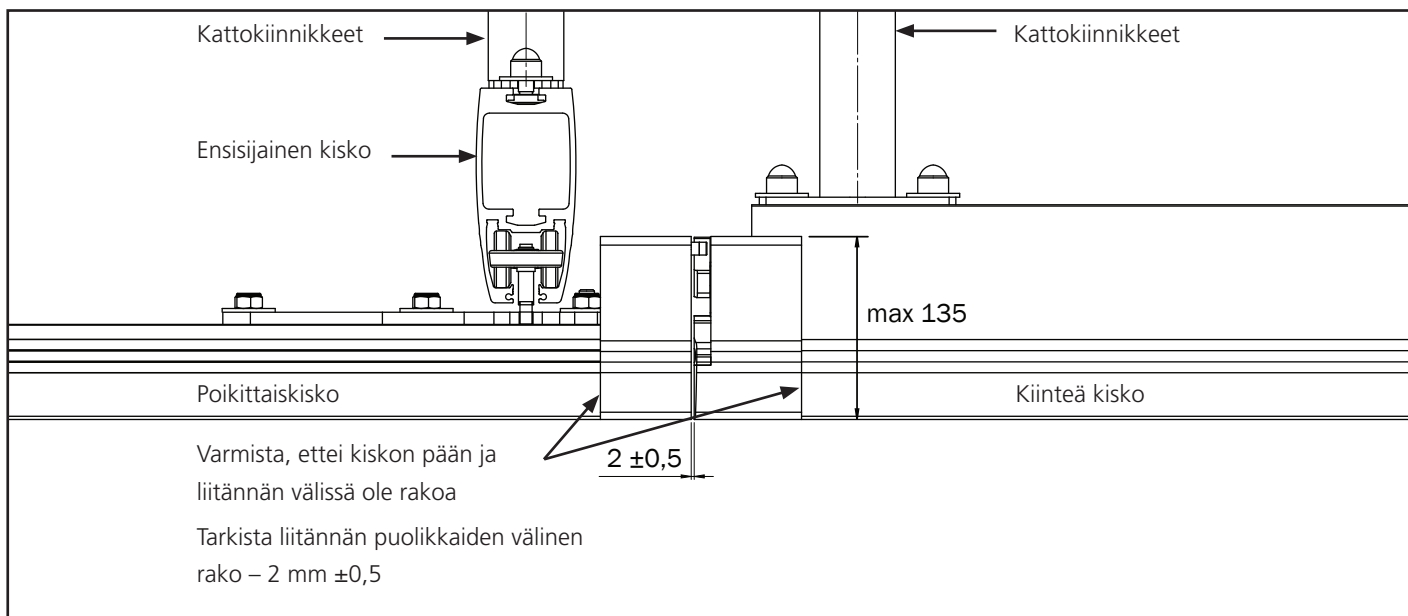

Kytetty

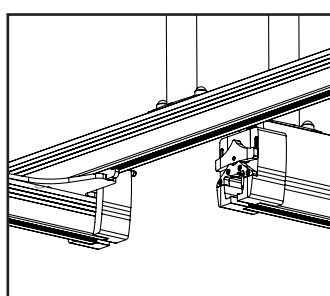


Irrotettu

Siirto – kytketty poikittaisliitäntä
Käyttäjä voidaan nyt siirtää kiskolta toiselle.

Tarran sijoittaminen

Seuraava tarra sisältyy poikittaisliitännän pakkaukseen. Kiinnitä tarra poikittaiskiskoon ennen käyttöä alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista, että punainen puoli on lähimpänä poikittaisliitäntää.

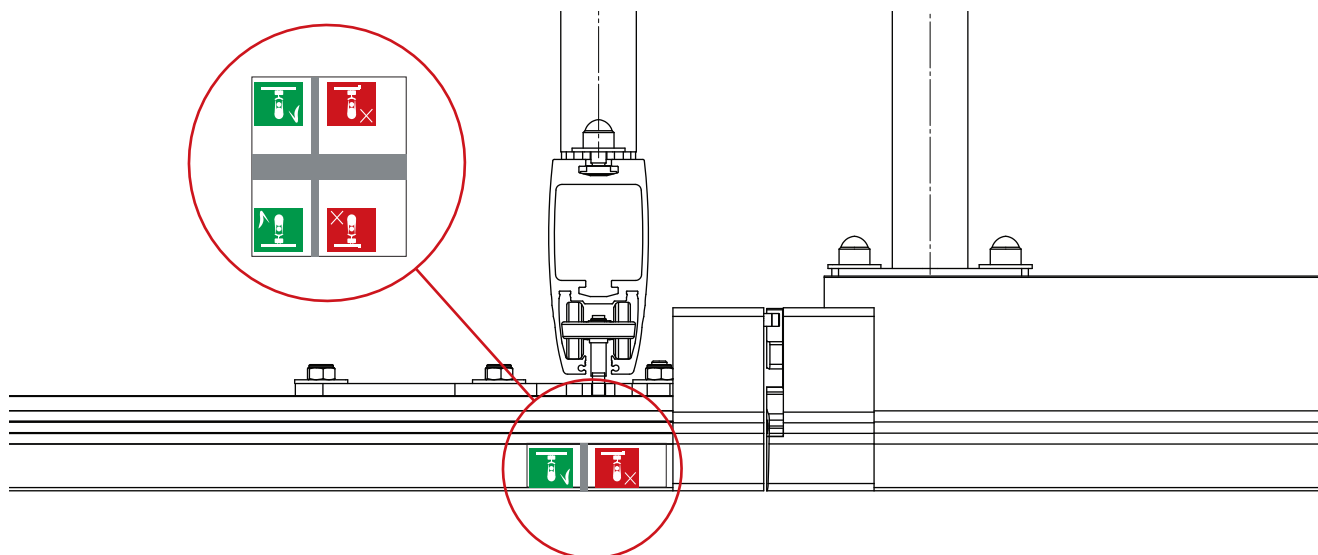

Kun olet kiinnittänyt tarran, leikkaa ja poista paksu harmaa viiva. Näin vaunu voi liikkua vapaasti edestakaisin kiskoa pitkin.

Merkkien selitykset



Valkoinen kuvake vihreällä taustalla.
Tämä symboli osoittaa nostimen optimaalisen sijainnin liitännän helppoa liittämistä varten.



Valkoinen kuvake punaisella taustalla.
Tämä symboli osoittaa, että nostin ei ole sijoitettu optimaalisesti, mikä vaikeuttaa liittämistä.

Puhdistus/desinfiointi

Puhdista säännöllisesti. Puhdista pinnat kostealla liinalla käyttäen asianmukaista, pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai vahvoja nesteitä, sillä tämä voi vahingoittaa potilasnosturin pintoja. Käytä tarvittaessa desinfiointiin isopropyylialkoholia. Vältä hankaavia puhdistustuotteita. Tarkasta hätäpysäytys ja hätälasku puhdistuksen jälkeen. Potilasnosturia ei saa altistaa juoksevalle vedelle. Asennettaessa ympäristöihin, joissa on kosteusriski, on tärkeää, että kiskojärjestelmä ja moottori pestään ja kuivataan säännöllisesti. Täydellinen opas korroosioriskin vähentämiseksi on saatavilla pyynnöstä.



Varmista, ettet vaurioita tai irrota tarroja puhdistuksen yhteydessä.



Nosturin ja käsiohjaimen suojaluokka on IP24, jonka mukaisesti niissä on >12,5 mm:n suojus vaarallisiin osiin pääsyä vastaan. Lisäksi tämä suojaluokka tarkoittaa, että mistä tahansa kulmasta pystysuunnasta katsottuna aina 60 asteeseen saakka ruiskuava vesi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia.



**Hoitaja ja potilas altistuvat seuraaville materiaaleille: Polypropyleeni ja polyesteri (nostoliinat*), PC/ABS (käsiohjain ja nosturin suojus), maalipinnoitettu alumiini, maalipinnoitettu sinkki (nostoliinatangot).
* = Käytettävä osa**



Harvinaisissa tapauksissa polypropyleenille ja polyesterille altistunut potilas tai hoitaja voi saada allergisen reaktion, kuten ihoärsytystä, lievää kutinaa tai ihoarkuutta.

Kunnostus

Noudata puhdistus- ja asennusohjeita, tee määräaikaistarkastus ja käytä asennuksen jälkeen sovellettavaa tarkistuslistaa potilasnosturin kunnostukseen.

Kierrätys

Katso ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen "Kierrätysohjeista". Tiedot löytyvät osoitteesta www.etac.com.

Varaosat

Varaosaluettelo on saatavana pyynnöstä.

Määräaikaistarkastuksen laajuus

Määräaikaistarkastus on silmämääräinen tarkastus (jossa keskitytään erityisesti potilasnostimen kantavaan rakenteeseen, nostomekanismiin sekä kiinnikkeisiin, jarruihin, säätimiin, turvalaitteisiin ja henkilökohtaisiin tukivälineisiin). Tarkastus suoritetaan määräaikaisen Molift Air 500 -tarkastusraportin mukaisesti. Käy osoitteessa www.etac.com.



Jos potilasnosturissa havaitaan turvallisuuden vaarantavia ongelmia, se tulee poistaa viipymättä käytöstä ja siihen tulee kiinnittää selkeä merkintä "epäkunnossa". Potilasnosturia ei saa käyttää, ennen kuin se on korjattu. Raportoi ongelmista ottamalla yhteyttä paikalliseen Moliftin/Etacin jälleenmyyjään/jakelijaan.

Määräaikaistarkastus tulee suorittaa ainakin kerran vuodessa tai useammin, jos paikalliset vaatimukset sitä edellyttävät. Tarkastus on annettava Etac:n valtuuttaman huoltohenkilöstön tehtäväksi. Ota yhteyttä Etac:n osoitteeseen molift@etac.com saadaksesi tietoa hyväksytyn huoltokumppanin koulutusta ja valtuutusta tai suositusta varten.

Määräaikaistarkastusta suorittaessaan tarkastajan tulee täyttää Molift Air -potilasnosturin tarkastusraportti. Raporttien ylläpito tulee antaa nostimen huollosta vastaavien henkilöiden tehtäväksi. Jos tarkastuksessa havaitaan vikoja ja vaurioita, potilasnosturi on poistettava käytöstä ja siihen on kiinnitettävä merkintä "epäkunnossa", kunnes se on korjattu.

Vianetsintä

Oire	Mahdollinen syy/toimenpide
Potilasnosturi ei reagoi käsiohjaimen toimintaan	Hätäpysäytys on aktivoitu. Poista se käytöstä painamalla painike takaisin sisään.
	Potilasnosturin elektroniikka on ylikuumentunut. Odota, että se jäähtyy.
	Käsiohjainta ei ole kytketty oikein. Käsiohjain tai pistoke tai johto on ehkä rikkoutunut, ja se on vaihdettava.
Potilasnosturi ei reagoi käsiohjaimen ylös-painikkeeseen	Nostohihnan kulma-anturi on aktivoitunut. Säädä nostohihnaa tai siirrä nostinta pienentääksesi nostohihnan kulmaa.
Kun käytetään sähköistä hätälaskua, nostohihna liikkuu ylöspäin.	Nostohihna on kokonaan ulkona ja kelautunut väärin. Käytä manuaalista hätälaskua. Toimita nostolaite huoltoon.

Importante

Il presente manuale dell'utente contiene importanti istruzioni e informazioni di sicurezza relative all'utilizzo dell'imbracatura e degli accessori.




Questo simbolo indica un'informazione importante relativa alla sicurezza. Seguire attentamente queste istruzioni.



Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso. È importante comprendere pienamente il contenuto del manuale dell'utente prima di utilizzare l'attrezzatura.

Visitare www.etac.com per scaricare la versione più recente della documentazione.

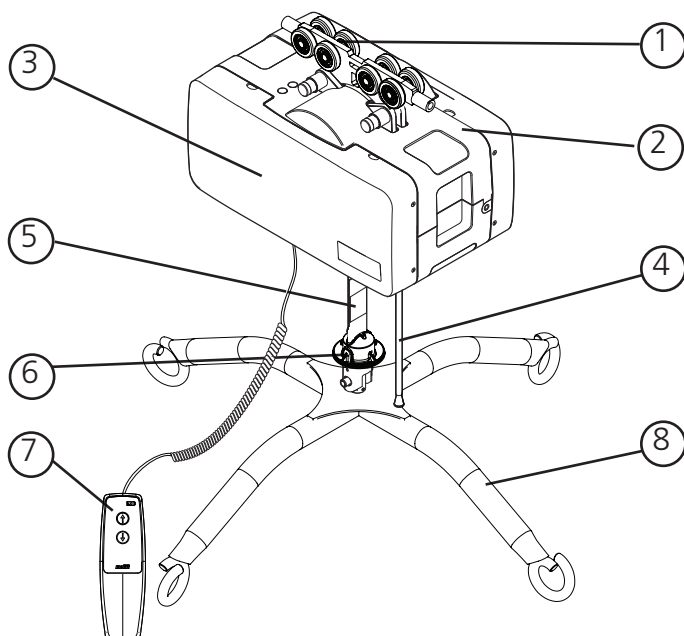Molift Air 500**Componenti del sollevatore:**

1. Carrello
2. Sollevatore
3. Protezioni laterali
4. Arresto di emergenza/Discesa di emergenza
5. Cinghia di sollevamento
6. Perno a rilascio rapido
7. Pulsantiera
8. Barra per imbracatura

Informazioni su Molift Air

Molift Air è un sistema di sollevamento a soffitto resistente e stabile che permette a pazienti e degenti di essere trasferiti in modo comodo e sicuro.

Molift Air comprende un motore molto leggero che, in combinazione con l'attacco a rilascio rapido, facilita la gestione del sistema di sollevamento durante il montaggio e la manutenzione.

Informazioni generali**Dichiarazione di conformità CE**

Il prodotto e i relativi accessori descritti nelle presenti istruzioni per l'uso (IFU) sono conformi al regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 - come dispositivo medico, classe di rischio I.

Il prodotto è stato testato e approvato da terzi secondo le norme IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e EN/ISO 10535:2021.

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Condizioni di utilizzo

Il sollevamento e il trasferimento di un cliente presentano sempre determinati rischi. Il sistema a binari deve essere installato da personale certificato in conformità alle relative istruzioni di installazione. Il sistema di sollevamento non è ideato per essere impiegato dal cliente che viene sollevato.

Modifiche e utilizzo di componenti fabbricati da altri produttori

Si consiglia di utilizzare solamente componenti e pezzi di ricambio Molift. Se vengono apportate modifiche al prodotto, la dichiarazione di conformità e la garanzia Etac perdono di validità. Etac non è responsabile di eventuali danni o incidenti che possano verificarsi quando si utilizzano componenti di altri produttori. L'utilizzo di accessori, componenti rimovibili e materiali non elencati nel presente manuale dell'utente può essere pericoloso.



L'apertura del sollevatore e degli accessori per le operazioni di assistenza e riparazione è consentita esclusivamente a personale certificato. Rischio di lesioni dovute a componenti rotanti e rischio di scosse elettriche.

**Garanzia**

Garanzia di 2 anni per difetti di fabbricazione e dei materiali dei nostri prodotti. Garanzia di un anno per le batterie. Consultare www.etac.com per i termini e le condizioni.

Introduzione

Il soggetto indicato con il termine "l'utente" è la persona seduta sul prodotto. "L'assistente" è la persona che manovra il prodotto.

Uso previsto

Il sollevatore a soffitto è un dispositivo di assistenza destinato ad alleviare o compensare una compromissione funzionale dovuta a lesioni o disabilità. Il dispositivo è progettato per una persona che non è in grado di alzarsi e spostarsi da/verso un letto, il pavimento, una sedia a rotelle, una sedia, un WC o effettuare movimenti simili, a causa della ridotta mobilità o forza fisica. Il dispositivo può essere utilizzato anche per le attività di allenamento alla mobilità.

Utente a cui il prodotto è destinato

Il dispositivo può essere utilizzato per bambini, adulti e persone anziane che necessitano di un supporto per essere sollevati e spostati, o durante l'allenamento alla mobilità, all'interno di un sistema a binario.

Ambiente previsto

Per uso interno in un sistema a binario in terapia intensiva, assistenza a lungo termine e domiciliare.

Indicazioni

Per utenti che necessitano di supporto per essere sollevati e spostati o durante l'allenamento alla mobilità; ad es. persone con capacità di movimento limitata e che necessitano di supporto per il corpo durante i trasferimenti. Non è un elenco esaustivo. Il gruppo di utenti del dispositivo varia in base alla salute e alla mobilità del singolo paziente e non in base a una diagnosi specifica o all'età.

Controindicazioni

Non vi è alcuna controindicazione nota.

Precauzioni

Accertarsi che l'imbracatura sia adatta all'utente e alla barra per imbracatura.


Requisiti di formazione

Solo il personale sanitario che abbia letto e compreso il manuale d'uso è autorizzato a utilizzare il dispositivo.

Identificazione del prodotto

Etichetta del prodotto

L'etichetta del prodotto presenta un codice a barre con codice articolo, numero di serie e data di fabbricazione:

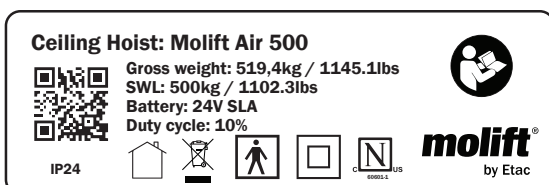

Etichette di avvertenza e simboli

Simboli usati sul prodotto, descritti in maggiore dettaglio:

- Classe II, doppio isolamento
- Marchio CE
- Fare riferimento al manuale dell'utente
- Solo per uso in interni
- Peso massimo paziente
- Non smaltire nei rifiuti generici
- Arresto di emergenza/
Discesa di emergenza
- Spia di assistenza
- Spia della batteria
- Simbolo dello strumento esagonale per la discesa manuale di emergenza
- Marchio dell'organismo di certificazione
- Produttore
- Data di produzione
- Numero di catalogo
- Numero di serie
- Dispositivo medico
- Identificazione unica del dispositivo
- Marchio UKCA
- Parte applicata del tipo BF

Dati tecnici

Carico di lavoro sicuro (SWL)

Molift Air 500: 500 kg (1.102 libbre)

Peso dell'unità:

Telaio batteria incl., barra per imbracatura escl.:

14,1 kg (31 libbre)

Barra per imbracatura a 4 punti: 5,3 kg (11,7 libbre)

Batteria:

Codice articolo: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Caricatore:

Caricatore per pulsantiera, Mascot - tipo 3743

Codice articolo: 2540100

100–240 V CA, 50–60 Hz max 0,5 A

Uscita 0,56 A

Alimentatore IRC, Mascot - tipo 3721

Codice articolo: 2610119

Ingresso: 100–240 V CA, 50–60 Hz max 1 A

Uscita: 24 V CC 1,75 A/42 W

Caricatore IRC, Mascot - tipo 3844

Codice articolo: 2640200

Ingresso: 20–30 V CC 1,3 A

Uscita: 0,5 A

Velocità di sollevamento

60 mm/s (2,36 pollici/s)

con un carico di 75 kg (165,35 libbre)

Classe di protezione

Pulsantiera IP24

Motore di elevazione IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Forza di esercizio dei pulsanti

Pulsanti sul telecomando: 3,4 N

Materiale:

Alluminio, plastica, acciaio

Durata prevista:

Il sollevatore ha una durata prevista di 30.000 cicli con carico di lavoro sicuro o 15 anni. Le rotaie hanno una durata prevista di 30 anni.

Dimensioni:

L x P x A (lunghezza, profondità, altezza senza carrello)

36 x 24,6 x 19,5 cm


(14,2 x 9,7 x 7,7 pollici)

A (ampiezza del sollevamento)

300 cm (118 pollici)

B (Distanza minima dal soffitto al punto di attacco della barra per imbracatura) 32,7 cm (12,7/8 pollici)

Per ulteriori informazioni sui dati tecnici e sulle modalità di assistenza e riparazione, consultare il manuale tecnico.

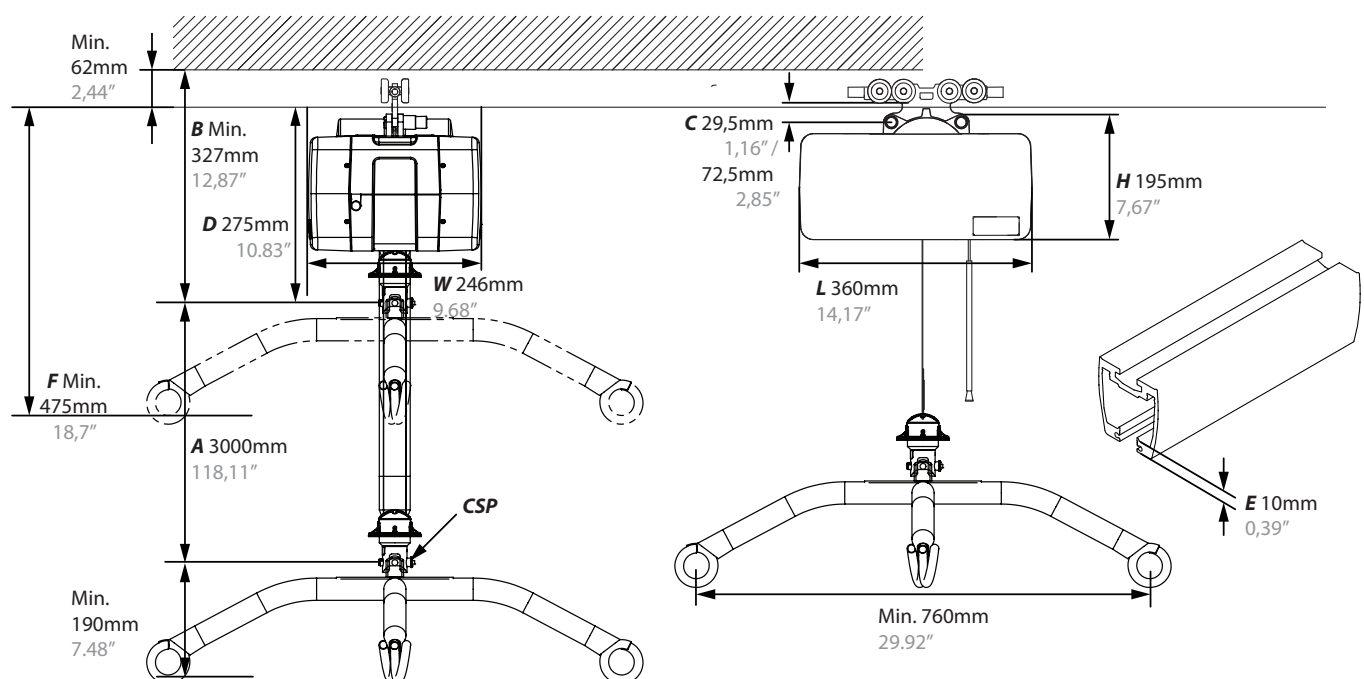

Installazione

Sul sollevatore è indicato il carico di lavoro sicuro (Safe Working Load - SWL) che non deve superare la capacità massima di carico dei sistemi a binari.




Il sistema a binari può essere installato esclusivamente da personale certificato secondo le relative istruzioni di installazione.



Non iniziare a utilizzare il sollevatore prima di aver completato la verifica secondo la checklist post-installazione.

Installazione del carrello

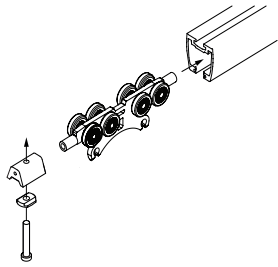

Montaggio del carrello nel sistema a binari. Rimuovere il finecorsa e inserire il carrello nel binario. Montare il finecorsa e assicurarsi che sia fissato saldamente. Consultare il documento BM4401 per i dettagli dell'installazione.




Assicurarsi che i finecorsa siano montati a tutte le estremità del sistema a binari prima di utilizzare il sollevatore!

Installazione del sistema di sollevamento




Fare attenzione quando si lavora ad altezze elevate. Si raccomanda la presenza di due o più installatori per evitare perdite di equilibrio e infortuni durante l'installazione!

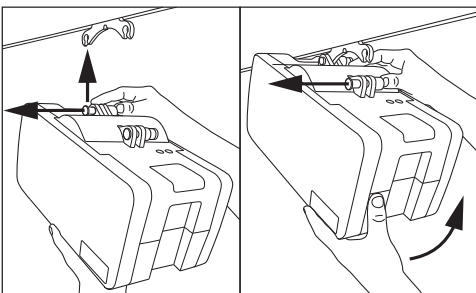

Montaggio del sistema di sollevamento sul carrello. Non sono necessari attrezzi. Il sistema di sollevamento ha due punti di collegamento.

Collegare innanzitutto il primo punto. Premere il pulsante completamente verso l'interno e posizionare il sistema di sollevamento sul punto di collegamento del carrello. Rilasciare il pulsante e assicurarsi che mostri chiaramente la parte verde prima di collegare il punto successivo.

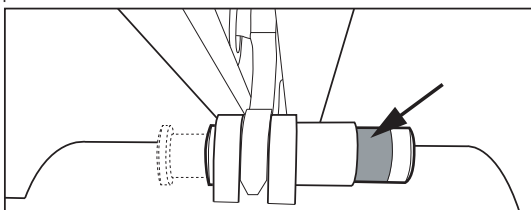

Assicurarsi che i pulsanti dei due punti di collegamento tornino completamente indietro e mostrino chiaramente la parte verde al termine dell'installazione.

Il tubo e il cavo della discesa di emergenza possono essere tagliati per regolarli alla lunghezza (altezza) corretta.

Installazione

Usare la presente checklist per verificare, prima dell'utilizzo, la corretta installazione del sollevatore e il suo corretto e sicuro funzionamento.

- ☐ I finecorsa sul binario sono stati installati dopo il montaggio del carrello come descritto nel documento BM4401
- ☐ Accertarsi che il sollevatore sia fissato correttamente al binario e che il sistema di sollevamento non presenti componenti allentati.
- ☐ Effettuare un sollevamento con carico (60–80 kg).
- ☐ Accertarsi che la batteria sia completamente carica.

Utilizzo di Molift Air

Precauzioni generali di sicurezza

Utilizzare esclusivamente accessori e imbracature adattati al cliente, al tipo di disabilità, alla taglia, al peso e al tipo di trasferimento.

Intervallo lavoro-pausa/Ciclo di lavoro

Molift Air 500 non deve essere tenuto in funzione per più di due minuti di seguito (al massimo del carico) e deve essere tenuto a riposo per almeno 18 minuti. Ciclo di lavoro 10%. (Intermittenza a norma UNI EN ISO 10535)



Non posizionare il sollevatore in modo da rendere difficile scollegare il cavo di alimentazione di rete. Per isolare il sistema, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a parete.



Se la barra per imbracatura del sollevatore e l'unità di supporto del corpo hanno un diverso carico di lavoro sicuro (SWL), impiegare il carico massimo più basso tra i due.



I sistemi di sollevamento Molift devono essere utilizzati solamente per il sollevamento di clienti. Non utilizzarli per sollevare o spostare oggetti di qualsiasi tipo.

Prima dell'utilizzo/Verifica quotidiana


Ispezione da effettuarsi da parte dell'operatore ogni giorno o prima dell'utilizzo:

- ☐ Verificare che il sistema di sollevamento e il sistema a binari non presentino danni, difetti o deformazioni visibili
- ☐ Accertarsi che tutti i collegamenti della barra per imbracatura e i componenti removibili siano collegati e fissati correttamente
- ☐ Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza e della funzione di discesa di emergenza
- ☐ Accertarsi che la spia della batteria o di assistenza non sia illuminata
- ☐ Accertarsi che la cinghia di sollevamento non presenti danni visibili o sfilacciature
- ☐ Effettuare una prova di funzionamento sulle funzioni del sistema di sollevamento e accertarsi che non produca rumori anomali

In caso vengano riscontrati danni o difetti, non utilizzare il sistema di sollevamento e designarlo come "fuori servizio". Nessun componente di Molift Air deve essere sottoposto a manutenzione o riparazione mentre è utilizzato con un paziente.

Pulsantiera


La pulsantiera è dotata di 2 pulsanti per il sollevamento e l'abbassamento o di 4 pulsanti se il sollevatore è dotato di un sistema di propulsione. La pulsantiera è dotata di una spia che si accende quando il livello della batteria è basso e il sistema di sollevamento deve essere ricaricato.

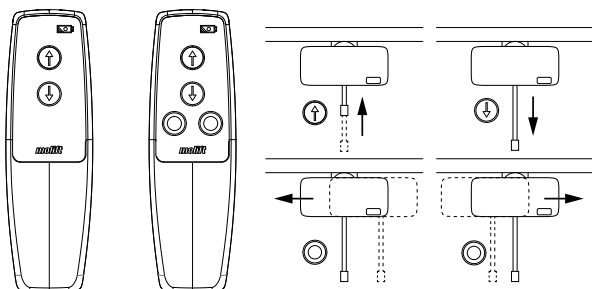

Non tirare la pulsantiera per spostare il sollevatore lungo il binario.




Il sollevatore non è operativo se la pulsantiera è collegata a un caricabatteria. Scollegare la pulsantiera dal caricabatteria prima di mettere in funzione il sollevatore.

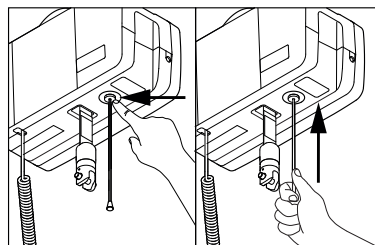

Spingere con un dito o utilizzare il tubicino sul cavo per spingere indietro il pulsante e ripristinare l'arresto di emergenza.

Discesa elettrica di emergenza





Tenere tirato per iniziare la discesa. Tenere finché il cliente non è abbassato e può essere sganciato dalla barra per imbracatura.

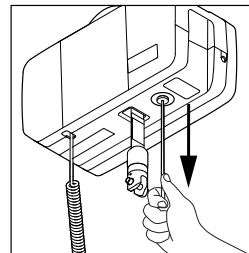


Utilizzare soltanto in caso di emergenza quando la pulsantiera non funziona!

Discesa manuale di emergenza

All'interno del sistema di sollevamento si trova una chiave a brugola o una punta da trapano. Per individuarla, rimuovere le protezioni da entrambi i lati del sollevatore.

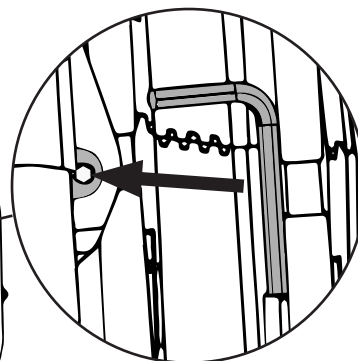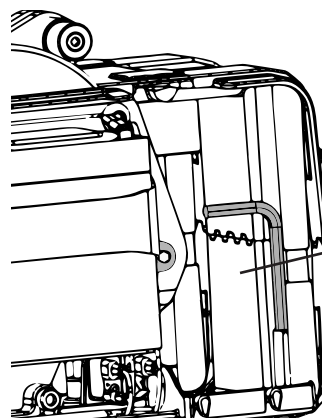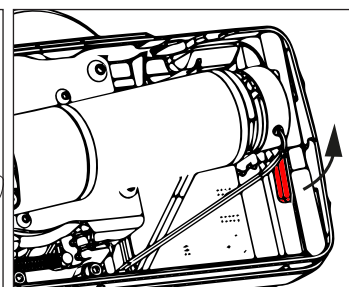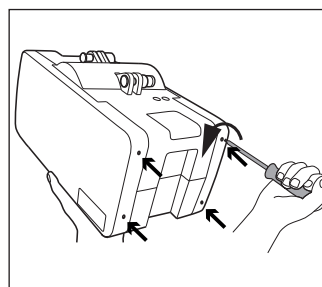

Montaggio della barra per imbracatura

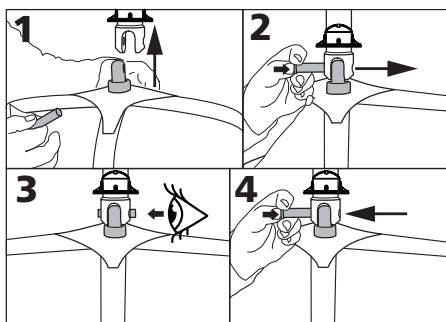


1. Allineare la barra per imbracatura al punto di collegamento.
2. Spingere il pulsante sul perno di blocco e inserirlo completamente.
3. Accertarsi che il perno di blocco sia ben fissato.
4. Spingere e tenere premuto il pulsante sul perno di blocco, quindi tirare per rimuoverlo.

Arresto di emergenza/Discesa di emergenza

Arresto di emergenza

Attivazione e ripristino dell'arresto di emergenza:

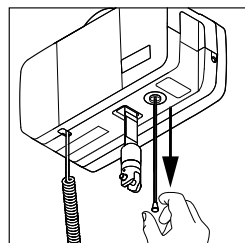

Tirare per attivare l'arresto di emergenza. Il pulsante fuoriesce e il sollevatore si arresta.

Per rimuovere le protezioni laterali svitare le 8 viti (4 per lato) utilizzando un cacciavite o un trapano. Tirare l'impugnatura rossa "Sblocco freno" verso l'alto. Individuare gli strumenti sull'altro lato del sollevatore e ruotare in senso antiorario per abbassare la cinghia di sollevamento. Si consiglia l'uso di un trapano.

NON è necessario un intervento di assistenza se:

- 1) È noto il motivo per cui è stata usata la discesa manuale di emergenza pneumatica.
- 2) La cinghia non presenta danni.
- 3) In seguito alla procedura di discesa manuale l'unità funziona normalmente.

Il nuovo meccanismo di disinserimento manuale del freno contribuirà a una minor sollecitazione dei componenti di sollevamento durante la discesa manuale di emergenza.

Se si è verificato un malfunzionamento dell'unità per motivi non noti, ed è stato usato il sistema di discesa manuale di emergenza, contattare l'assistenza.

Elettronica

Trasporto e conservazione

In caso di conservazione prolungata, si consiglia di attivare (estrarre) il pulsante di arresto di emergenza. Il sistema di sollevamento può essere conservato e trasportato a temperature comprese tra -25 e 70 °C.

Esercizio

Il sistema di sollevamento è ideato per essere impiegato a normali temperature ambiente (comprese tra +5 e +40 °C).

Pressione aria: 70–106 kPa

Umidità relativa: 15–90%

A seguito di trasporto o conservazione a temperature diverse da quelle indicate, lasciare il sistema di sollevamento in un ambiente con una temperatura adatta fino a raggiungere una temperatura idonea per il funzionamento.



Le apparecchiature elettromedicali richiedono speciali precauzioni in relazione alla compatibilità elettromagnetica (EMC). Le attrezzature di comunicazione radio portatili o mobili possono interferire con le apparecchiature elettromedicali e devono essere tenute a una distanza minima di 30 cm (12 pollici) dall'apparato elettronico del sistema di sollevamento.

Batterie

Molift Air 500 è disponibile con una batteria SLA da 24 V.

La batteria SLA ha una durata utile prevista di circa 500 cicli di carica.



Ricaricare la batteria al ricevimento e successivamente ogni sei mesi per evitare guasti alla batteria.



Smaltire le batterie come rifiuti speciali secondo i regolamenti e le disposizioni locali. Non smaltire nei rifiuti generici.

Spia della batteria e di assistenza sul sistema di sollevamento

	Simbolo della chiave/ Spia di assistenza
	Simbolo della batteria/ Spia della batteria

Il sistema elettrico dispone di una funzione di risparmio energetico che disattiva il sistema elettrico cinque minuti dopo l'ultimo utilizzo. Tutte le spie si spengono. Il sistema si attiva alla pressione di uno dei pulsanti di funzionamento sulla pulsantiera.

Spia della batteria sul sollevatore

Quando la spia della batteria multilivello è a luce gialla fissa, il sistema di sollevamento ha carica sufficiente per almeno un ciclo di sollevamento completo a pieno carico. Quando la spia della batteria è a luce gialla lampeggiante, è solamente possibile abbassare la barra per imbracatura.

Spia della batteria	Livello della batteria	
	Verde	80% o superiore
	Verde	80–60%
	Verde	60–40%
	Verde	40–20%
	Gialla	20–0%
	Gialla lampeggiante	0%

Spia di assistenza/Ispezione periodica

L'apparato elettronico del sistema di sollevamento registra il peso sollevato e il numero di sollevamenti. Dopo un determinato periodo di esercizio, viene emesso un segnale per indicare che è necessario un intervento di assistenza.

Spia di assistenza	Modalità
Nessuna luce	Non occorre assistenza
Gialla	Occorre l'ispezione periodica
Verde lampeggiante	Richiedere assistenza
Rossa	Eseguire intervento di assistenza

Ambito dell'intervento di assistenza

Quando il sollevatore ha eseguito un certo numero di sollevamenti (5.000 sollevamenti con il peso massimo consentito (SWL), la spia di assistenza si accende in rosso.

La manutenzione deve essere eseguita da personale autorizzato, compresa l'ispezione e la sostituzione delle parti usurate.

Contattare Etac o il proprio rivenditore locale o visitare etac.com per trovare un partner di assistenza approvato.

Ricarica

Molift Air 500 può essere ricaricato mediante pulsantiera con un caricabatterie o tramite il binario con caricatore integrato.

Spia di carica e spia di alimentazione


<i>Spia di carica</i>	<i>Modalità</i>
Verde lampeggiante	Nessun collegamento al sollevatore
Gialla	Ricarica
Gialla lampeggiante	Sovraccarica
Verde	Carica completa

<i>Spia di alimentazione</i>	<i>Modalità</i>
Blu	Collegato alla presa elettrica

Ricarica tramite pulsantiera

Il caricabatterie è collegato a una presa di corrente. Per la pulsantiera è disponibile un ancoraggio montato a parete. Fare attenzione a non danneggiare il cavo. Il caricatore può essere collegato alla presa in qualsiasi momento. Utilizzare solo caricatori Molift. La pulsantiera è dotata di una spia che si accende quando il livello della batteria è basso e il sistema di sollevamento deve essere ricaricato.


Caricatore per pulsantiera Molift Air: Codice articolo: 2540100

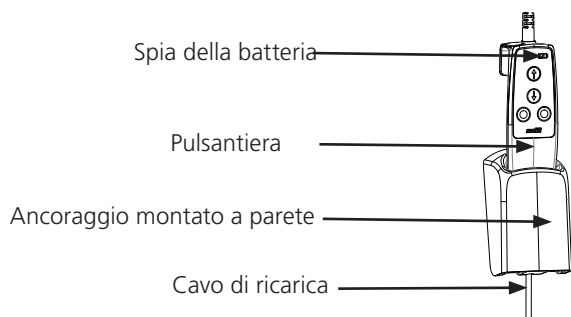


IRC (In Rail Charging)

Il sistema di sollevamento si ricarica tramite un caricatore integrato nel motore di elevazione per garantire una ricarica continua sull'intera lunghezza del sistema a binari.

Il sistema IRC di Molift Air dispone di un caricatore integrato collegato alla batteria, che deve essere installato assieme al carrello IRC in un sistema a binari con nastro conduttivo. Il carrello IRC è collegato al caricatore incluso nel sistema IRC di Molift Air ed è sempre in contatto con il nastro conduttivo che si trova all'interno del binario. L'alimentatore IRC è connesso al nastro conduttivo tramite il collegamento IRC alla fine del binario e fornisce energia al caricatore del sistema IRC di Molift Air.

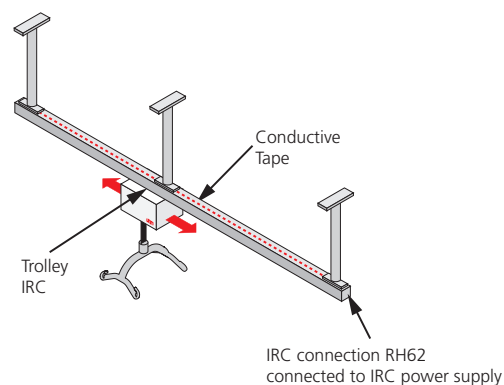

Il sistema IRC è adatto sia per sistemi a binari sia per sistemi a montante trasverso.

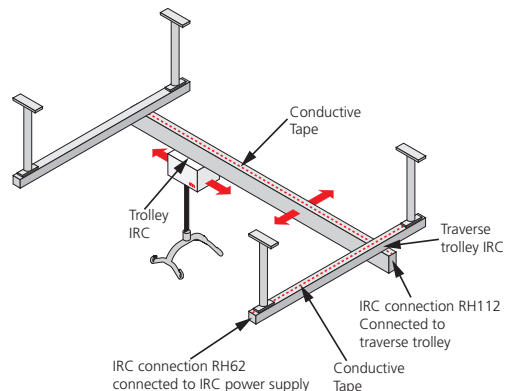

Alimentatore IRC

Codice articolo: 2510119

Caricatore 3844 CC/CC (parte del sistema IRC di Molift Air)

Codice articolo: 2640200

Trasferimento

Programmare con anticipo l'operazione di sollevamento per garantire che sia quanto più sicura e fluida possibile. Operare secondo principi di ergonomia. Valutare i rischi e prendere appunti. L'assistente è responsabile della sicurezza dell'utente.

Utilizzo delle imbracature

È importante che l'imbracatura sia stata testata con lo specifico utente e per la situazione di sollevamento prevista.



Leggere il manuale dell'utente relativo all'imbracatura prima dell'uso.



Non utilizzare imbracature danneggiate o usurate.

Combinazioni di dispositivi e compatibilità delle imbracature

Quando si combina un dispositivo medico con altri dispositivi o accessori, la combinazione non deve cambiare lo scopo previsto e definito dal produttore in merito ai dispositivi o modificare i dispositivi in modo tale che la conformità ai requisiti applicabili o l'utilizzo sicuro del dispositivo possano esserne influenzati.


Si consiglia di utilizzare imbracature Etac o Molift. Il sollevatore può essere combinato con imbracature di altri produttori; per le dichiarazioni di compatibilità visitare il sito www.etac.com.

La persona/azienda responsabile della combinazione dei dispositivi deve garantire che i requisiti applicabili siano soddisfatti.


Protezione elettrica in combinazione con imbracature: Parte applicata del tipo BF.

Operazioni di sollevamento e abbassamento


Durante lo spostamento, rimanere a lato del cliente che si sta sollevando. Accertarsi che braccia e gambe non ostacolino la sedia, il letto, ecc. Mantenere il contatto visivo con il cliente per trasmettere sicurezza.

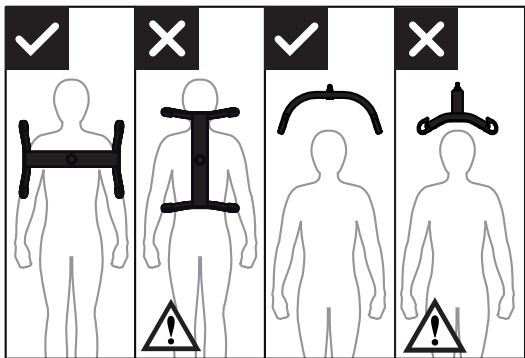

La barra per imbracatura a 4 punti deve essere sempre posizionata in modo da coprire tutto il cliente, per evitare che questi scivoli inavvertitamente fuori dall'imbracatura.

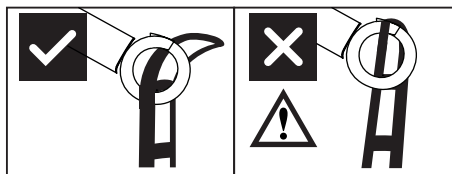


Il design del gancio della barra di sospensione impedisce il distacco accidentale dell'imbracatura, se montato correttamente.

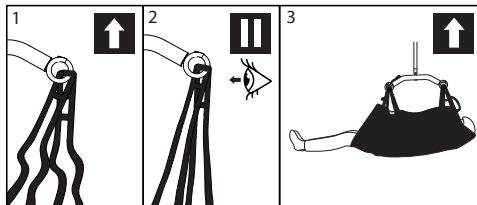

1. Verificare che l'imbracatura sia posizionata correttamente intorno al cliente e che i passanti siano montati correttamente nei ganci della barra per imbracatura.
2. Tendere le cinghie dell'imbracatura senza sollevare il cliente. Assicurarsi che i quattro passanti dell'imbracatura siano correttamente fissati per evitare che l'utente possa scivolare o cadere.
3. Sollevare il cliente ed eseguire il trasferimento.

Sensore di angolazione

Il sollevatore è dotato di una funzione di sicurezza della direzione che impedisce il sollevamento se l'angolazione della cinghia di sollevamento è eccessiva.

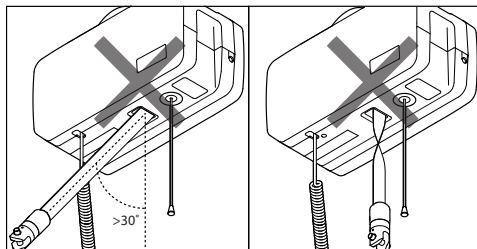

Se il sollevatore non risponde al pulsante "su" della pulsantiera, ciò potrebbe essere dovuto a un'angolazione eccessiva della cinghia di sollevamento oppure la cinghia potrebbe essere attorcigliata e il sensore attivo.

Accessori

Cavi e spine del caricabatterie.

Adattatore UE, codice articolo 2510365

Adattatore UK, codice articolo 2510366

Adattatore USA, codice articolo 2510367

Adattatore USA, codice articolo 2510368

Cavo UE, codice articolo 1140105

Cavo UK, codice articolo 1140106


Cavo USA, codice articolo 1140104

Cavo AUS, codice articolo 1140107

Supporto da parete per il caricabatteria, codice articolo 2610123

Barre per imbracatura

Molift Air può essere utilizzato con una barra per imbracatura a 4 o 8 punti di fissaggio.

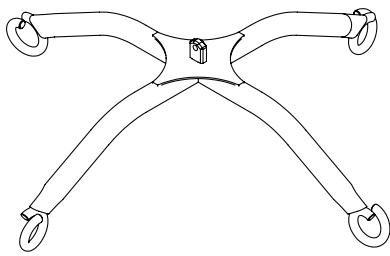

Barra per imbracatura a 4 punti, acciaio
Codice articolo: 2140003

Imbracature

Etac offre un'ampia gamma di imbracature per diversi tipi di trasferimenti. La serie di imbracature RgoSling di Molift è progettata per essere utilizzata in combinazione con una barra per imbracatura a 4 punti con collegamenti ad anello. Le imbracature funzionano anche con un bilancino a 2 punti. Consultare l'elenco delle combinazioni nel manuale dell'utente dell'imbracatura per la corretta combinazione di imbracatura e barra per imbracatura.

La serie di imbracature RgoSling di Molift è disponibile nelle misure da XXS a XXL, sia nella versione in poliestere che nella versione in rete di poliestere.

L'elenco completo delle imbracature e delle barre per imbracatura è disponibile su www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ambulating Vest
Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
Molift RgoSling Fabric Stretcher
Molift RgoSling Repositioning


SWL 500
Molift MediumBack Plus (L-XL)

Accessori:


Molift Rgosling Extension Loops
Art.nr.: 1721600
Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Raccordo di transizione

Alcuni sistemi a binario sono già dotati dei raccordi di transizione ①. Questi vengono utilizzati per trasferire l'utente da un sistema a binario all'altro, ad esempio tra due stanze diverse.

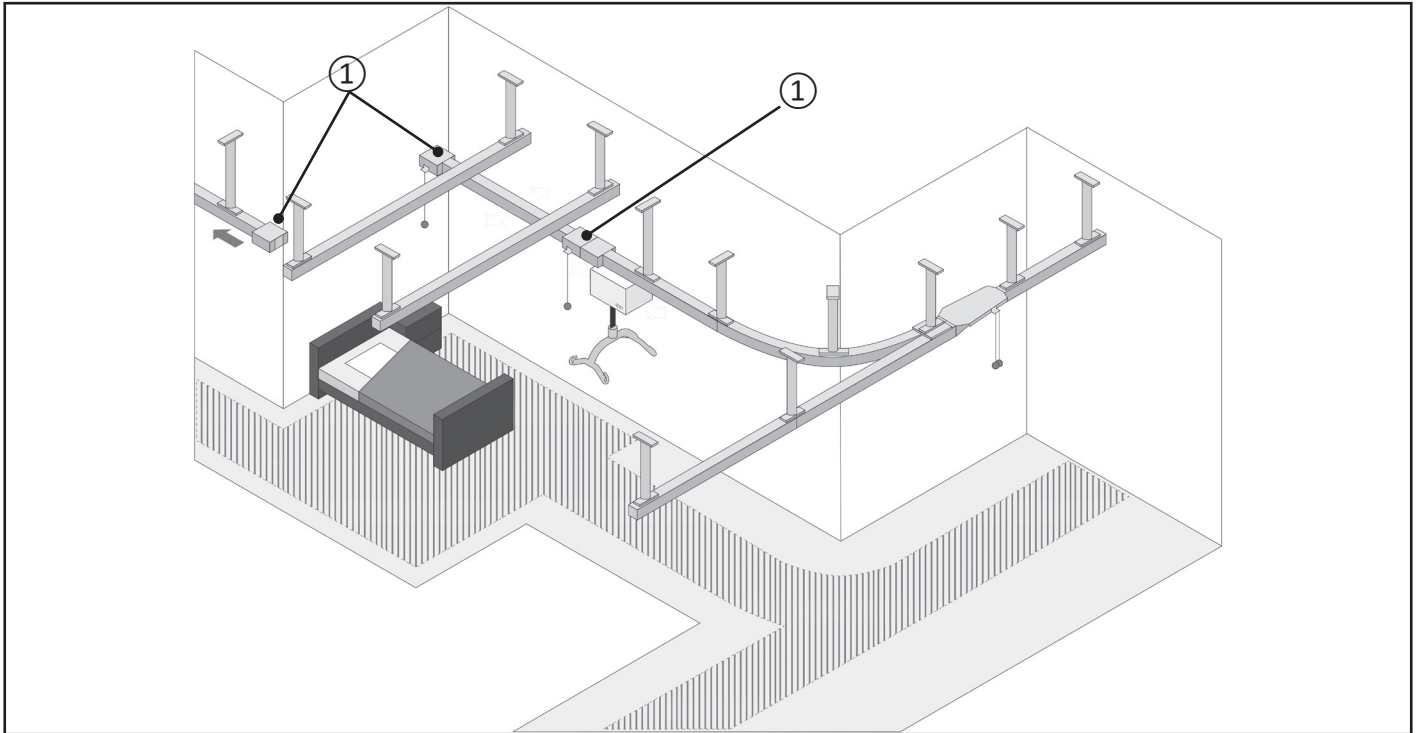


Componenti

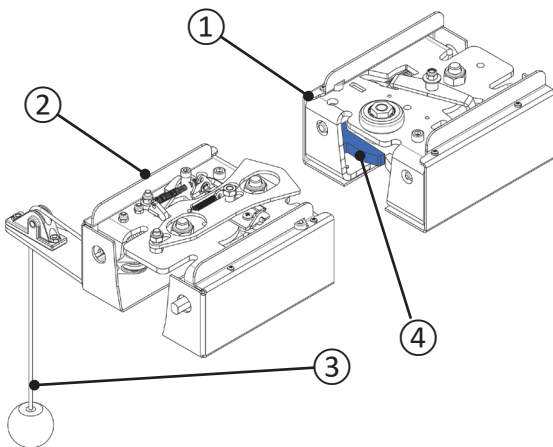


- ① Unità raccordo di transizione
- ② Unità raccordo di transizione con puleggia
- ③ Puleggia con manopola
- ④ Cannelletto (due componenti per unità)

Stati

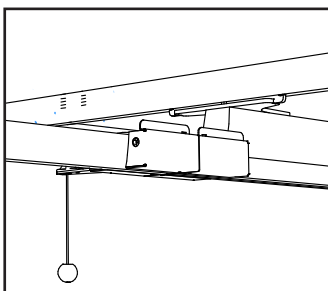


Collegato

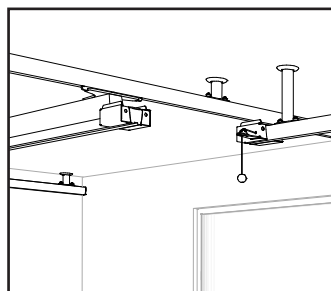

Scollegato


Scollegamento

Prima di scollegare il raccordo di transizione, assicurarsi che il carrello sia ad almeno 0,5 m dall'unità raccordo di transizione.

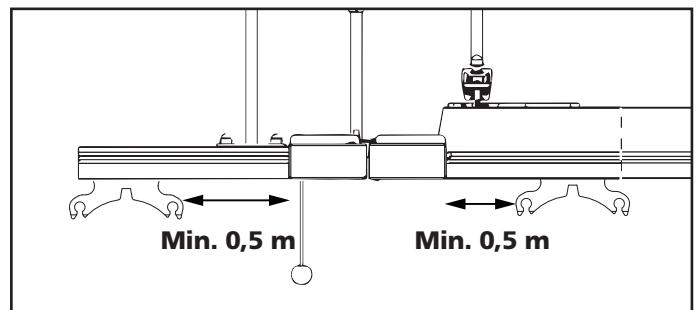

Tirare la puleggia verso il basso fino all'arresto.

Si sentirà un suono che conferma lo scollegamento.

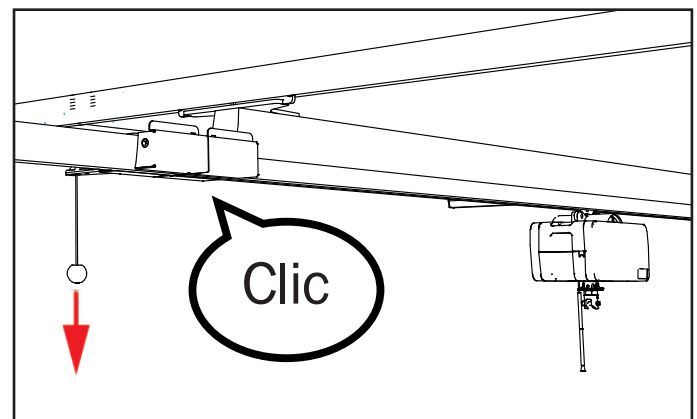


Il raccordo di transizione ora è scollegato.



Trasferimento: raccordo di transizione scollegato

Effettuare i trasferimenti dell'utente solamente dopo aver verificato quanto segue:


Entrambi i cancelletti ① devono essere visibili (unità raccordo di transizione vista dal basso).

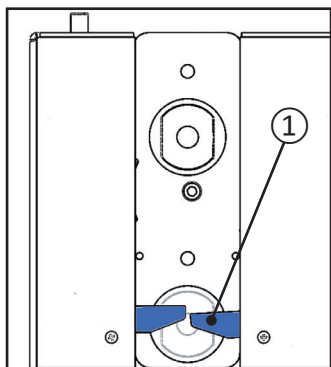

Il bullone di bloccaggio ② **non** deve essere visibile quando il raccordo è scollegato.

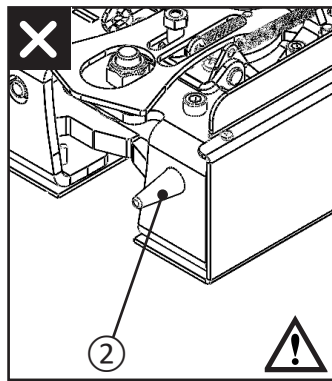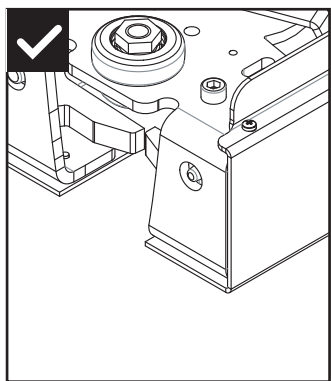


Spingere il binario trasversale nella direzione desiderata.

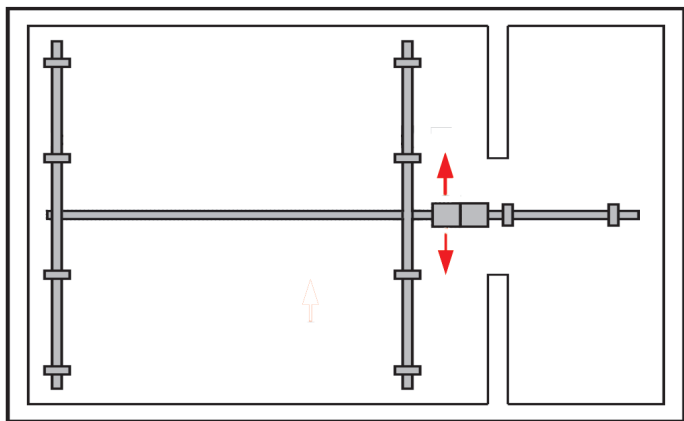


Collegamento

Prima di collegare le unità raccordo di transizione, assicurarsi che il carrello sia ad almeno 0,5 m dall'unità raccordo di transizione.

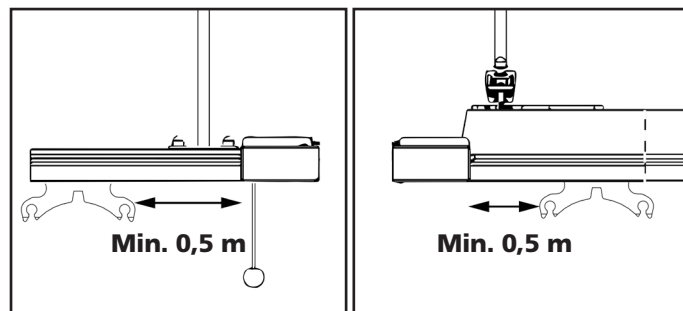

Spingere il binario trasversale verso il binario fisso, in modo che le unità raccordo di transizione si colleghino e si senta un suono.

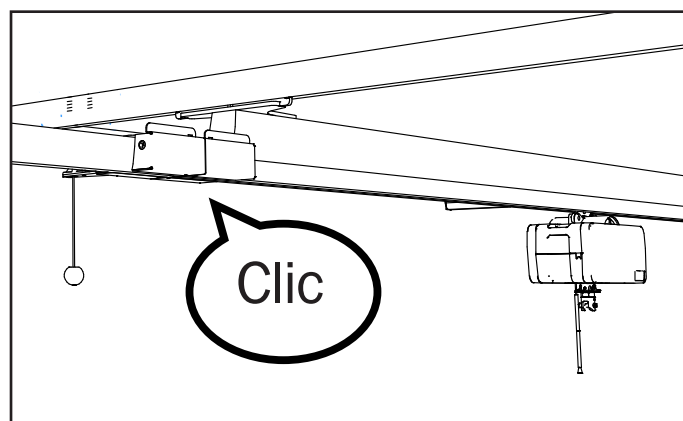

Trasferimento: raccordo di transizione collegato

Effettuare i trasferimenti dell'utente solamente dopo aver verificato che le unità raccordo di transizione sono completamente bloccate insieme. Non è possibile separare i binari manualmente. Ora l'utente può essere trasferito da un binario all'altro.



Raccordo trasversale

Raccordo trasversale, ispezione dopo l'installazione


Inserire il raccordo trasversale e, con il sollevatore con almeno 75 kg di carico, controllare che il sollevatore scorra liberamente in entrambe le direzioni del raccordo trasversale.

Inserire/disinserire il raccordo trasversale 10 volte e farlo scorrere 10 volte senza fermarlo. Controllare che i perni di bloccaggio su entrambe le metà raccordo ritornino liberamente nella posizione inferiore solo per effetto della forza della molla.

Inserire un carrello del sollevatore nel binario. Inserire il raccordo trasversale. Allineare l'estremità del carrello con l'estremità della metà raccordo. Provare a disinserire il raccordo trasversale. Il meccanismo di sicurezza deve impedire tale operazione. Ripetere il test per l'altra metà raccordo.

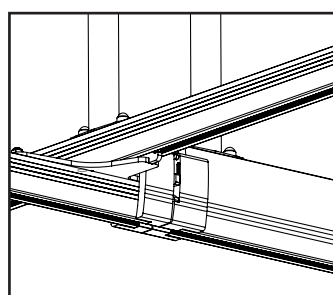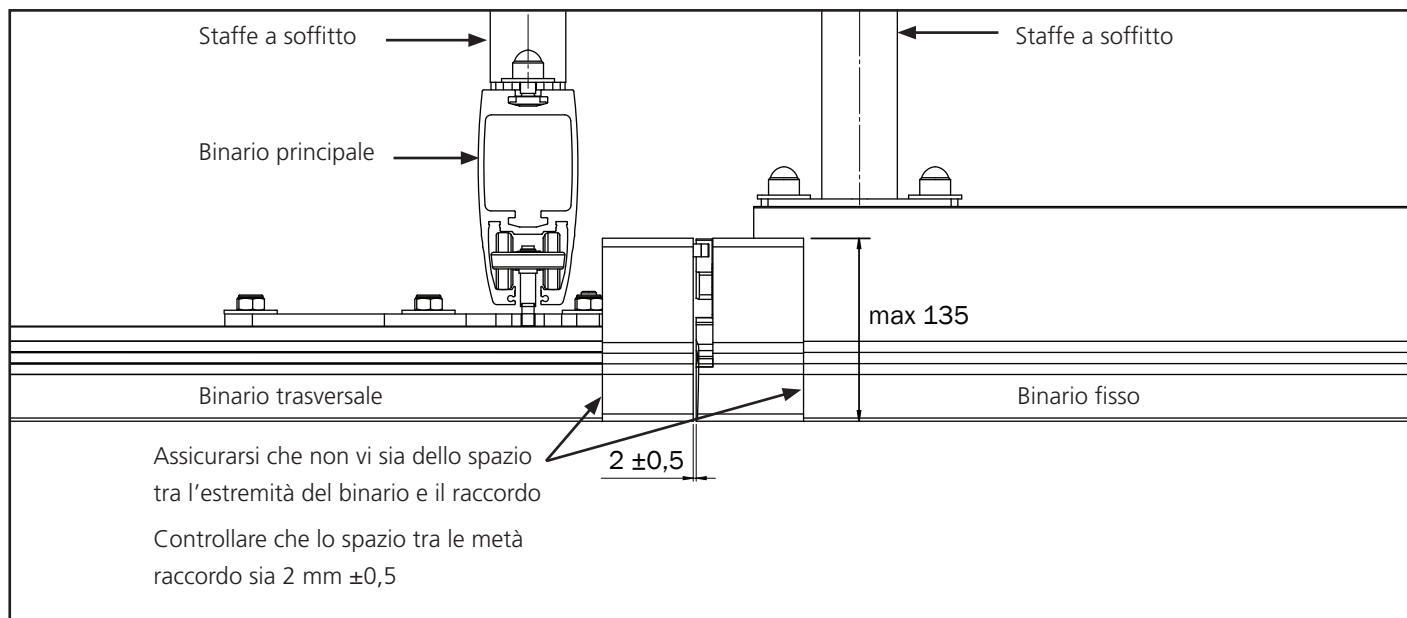

Collegato

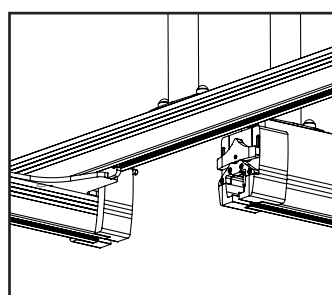


Scollegato

Trasferimento: raccordo di trasversale collegato
Ora l'utente può essere trasferito da un binario all'altro.

Posizionamento dell'etichetta

La seguente etichetta è inclusa nella scatola con il raccordo trasversale. Prima dell'uso, applicare l'etichetta sul binario trasversale come mostrato di seguito. Assicurarsi che il lato rosso sia posizionato più vicino al raccordo trasversale.

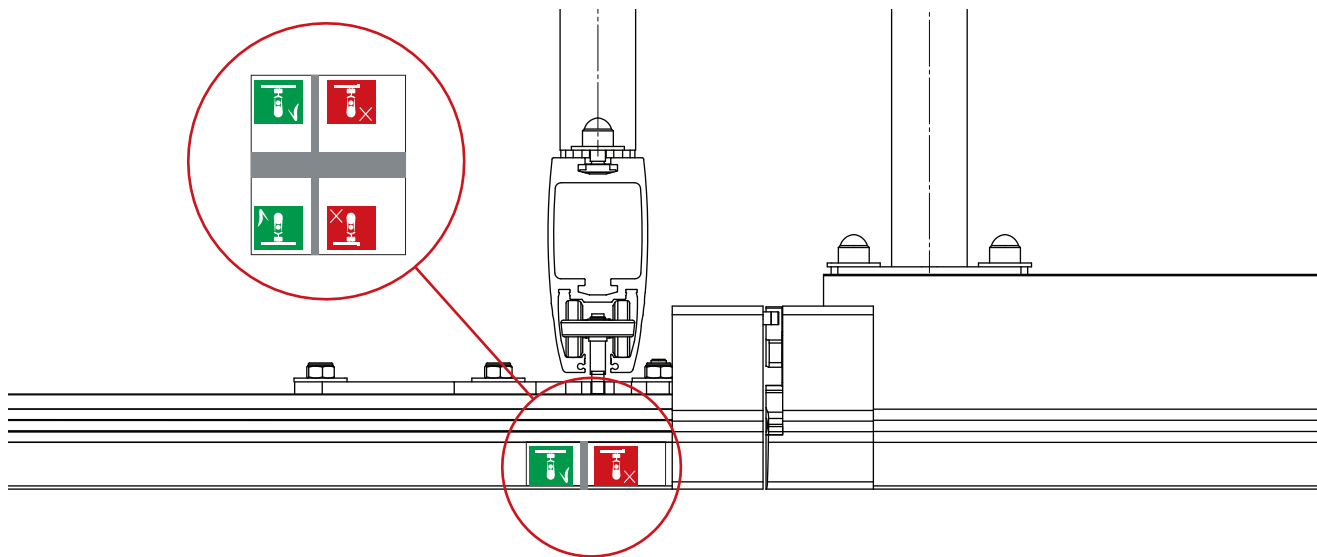

Dopo aver applicato l'etichetta, tagliare e rimuovere la linea grigia spessa. Ciò consente al carrello di muoversi liberamente avanti e indietro lungo il binario.

Spiegazione dei simboli



Pittogramma bianco su sfondo verde.
Questo simbolo indica il posizionamento ottimale del sollevatore per facilitare il collegamento del raccordo.



Pittogramma bianco su sfondo rosso.
Questo simbolo indica un posizionamento non ottimale del sollevatore, rendendo più difficile il collegamento del raccordo.

Pulizia/Disinfezione

Effettuare regolarmente la pulizia. Pulire le superfici con un panno umido utilizzando un apposito detergente con pH neutro. Non utilizzare solventi o detersivi aggressivi, che potrebbero danneggiare le superfici del sistema di sollevamento. Per la disinfezione, quando necessario, utilizzando alcool isopropilico. Evitare l'impiego di prodotti di pulizia abrasivi. Verificare il funzionamento dell'arresto di emergenza e della funzione di discesa di emergenza dopo la pulizia. Non esporre il sistema di sollevamento ad acqua corrente. In caso di installazione in ambienti con rischio di umidità, è importante che il sistema di binari e il motore vengano lavati e asciugati regolarmente. Su richiesta è disponibile una guida completa per ridurre il rischio di corrosione.



Accertarsi di non danneggiare o rimuovere le etichette durante la pulizia.



Il sollevatore e la pulsantiera rientrano nella classe di protezione IP24, la quale indica una protezione contro l'accesso a componenti pericolosi da parte di corpi solidi di diametro superiore a 12,5 mm e una protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale.



L'assistente e il cliente sono esposti ai seguenti materiali: Polipropilene e poliestere (imbracature*), PC/ABS (pulsantiera e copertura del sollevatore), alluminio verniciato a polvere, zinco verniciato a polvere (barre per imbracatura).

* = parte applicata



I clienti o gli assistenti esposti a polipropilene e poliestere possono in rari casi soffrire di reazioni allergiche quali irritazioni cutanee, leggero prurito e fragilità cutanea.

Ricondizionamento

Seguire la procedura di pulizia e installazione, completare l'ispezione periodica e usare la checklist post-installazione per rimettere in servizio il sistema di sollevamento.

Riciclaggio

Fare riferimento alle "Istruzioni sul riciclaggio" per un corretto smaltimento del prodotto. Questo documento è disponibile su www.etac.com.

Ricambi

Un elenco dei ricambi è disponibile su richiesta.

Ambito dell'ispezione periodica

L'ispezione periodica è un esame visivo (in particolare della struttura di sostegno del carico del sistema di sollevamento e del meccanismo di sollevamento, compresi attacchi, freni, comandi, dispositivi di sicurezza e dispositivi di sostegno delle persone) in base al Rapporto di ispezione periodica di Molift Air 500. Consultare il sito www.etac.com.



In caso di problemi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle persone, il sistema di sollevamento deve essere messo immediatamente fuori servizio e contrassegnato come "guasto". Non utilizzare il sistema di sollevamento finché non è stato riparato. Comunicare gli eventuali problemi al proprio rivenditore/distributore Molift/Etac locale.

L'ispezione periodica deve essere effettuata almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza se richiesto dalle disposizioni locali. L'ispezione deve essere eseguita da personale di assistenza autorizzato da Etac. Contattare Etac all'indirizzo molift@etac.com per informazioni sulla formazione e sulle autorizzazioni oppure per conoscere i partner di assistenza autorizzati.

Durante l'esecuzione dell'ispezione periodica, il manutentore dovrà compilare il rapporto per Molift Air. I rapporti devono essere conservati dalla persona o dalle persone responsabili della manutenzione del sistema di sollevamento. Se l'ispezione rileva difetti e danni, il sistema di sollevamento deve essere messo immediatamente fuori servizio e designato chiaramente con "fuori servizio" fino alla riparazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa/ Intervento
Il sistema di sollevamento non risponde agli interventi sulla pulsantiera	È stato attivato l'arresto di emergenza. Disattivarlo spingendo indietro il pulsante.
	L'apparato elettronico è surriscaldato. Attendere che si raffreddi.
	La pulsantiera non è collegata correttamente. La pulsantiera, la spina o il cavo potrebbero essere danneggiati e devono essere sostituiti.
Il sistema di sollevamento non risponde al pulsante "su" della pulsantiera	Il sensore di angolazione della cinghia di sollevamento è stato attivato. Regolare la cinghia di sollevamento o spostare il sollevatore per ridurre l'angolazione della cinghia.
Quando si utilizza la discesa elettrica di emergenza, la cinghia di sollevamento si sposta verso l'alto.	La cinghia di sollevamento è fuoriuscita completamente ed è stata avvolta scorrettamente. Utilizzare la discesa manuale di emergenza. Inviare il sistema di sollevamento in assistenza.

Important

Ce manuel d'utilisation contient des instructions de sécurité importantes et des informations relatives à l'utilisation du harnais et des accessoires.



Ce symbole signale des informations importantes liées à la sécurité. Suivre attentivement ces instructions.




Lisez le manuel d'utilisation avant toute utilisation !

Il est important de comprendre parfaitement le contenu du manuel d'utilisation avant de tenter d'utiliser l'équipement.

Rendez-vous sur www.etac.com pour télécharger la documentation et vous assurer que vous disposez bien de la dernière version.

Molift Air 500

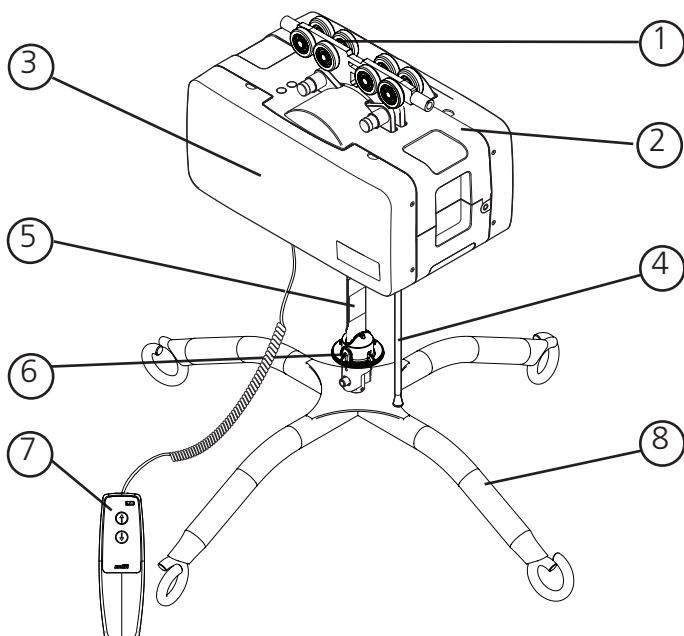

Composants du lève-personne :

1. Chariot
2. Treuil
3. Capots latéraux
4. Arrêt d'urgence/abaissement d'urgence
5. Courroie de levage
6. Goupille de déverrouillage rapide
7. Commande manuelle
8. Barre d'élingue

À propos de Molift Air

Molift Air est un lève-personne fixé au plafond, robuste et au fonctionnement fluide, qui permet de transférer les patients et résidents de façon sûre et confortable.

Molift Air comprend un moteur très léger qui, associé au système de raccord à déverrouillage rapide, facilite la manipulation pendant l'installation et l'entretien.

Généralités



Déclaration CE

Le produit et ses accessoires, décrits dans le présent mode d'emploi, sont conformes au règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 à titre de dispositif médical de classe I. Le produit a été testé et approuvé par un organisme tiers conformément aux normes CEI 60601-1, CEI 60601-1-2 et EN/ISO 10535:2021. Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Conditions d'utilisation

Le levage et le transfert d'un client présentent toujours un risque. Le système de rail doit être installé par du personnel certifié conformément aux instructions d'installation en vigueur. Le lève-personne n'est pas conçu pour être actionné par le client soulevé.

Modifications et utilisation de composants conçus par d'autres fabricants

Nous recommandons d'utiliser uniquement des composants et pièces détachées Molift. La déclaration de conformité n'est pas valable et Etac ne prend pas en charge la garantie si des modifications sont apportées au produit. Etac ne peut être tenu responsable de pannes ou d'accidents susceptibles de se produire lors de l'utilisation de composants d'autres fabricants. L'utilisation d'accessoires, de pièces détachables et de matériaux non répertoriés dans le présent manuel de l'utilisateur peut constituer un danger.



Seul du personnel certifié est autorisé à ouvrir le treuil ou les accessoires afin de réaliser des opérations d'entretien ou de réparation. Risque de blessure causée par les pièces rotatives et risque de décharge électrique.



Avis de garantie

Garantie de deux ans contre les vices de fabrication et les défauts matériels de nos produits.

Garantie d'un an pour la batterie.

Pour connaître les conditions générales, veuillez consulter le site www.etac.com.

Introduction

La personne désignée comme « l'utilisateur » correspond à la personne assise sur le produit. « Le soignant » est la personne qui manœuvre le produit.

Usage prévu

Le lève-personne plafonnier est un dispositif d'assistance destiné à soulager ou à compenser une déficience fonctionnelle due à une blessure ou à un handicap. Le dispositif est conçu pour une personne qui n'est pas capable de se lever et de se déplacer vers/ depuis un lit, le sol, un fauteuil roulant, un fauteuil, des toilettes ou un équipement similaire, en raison d'une mobilité réduite ou d'une force physique réduite.

Caractéristiques techniques

Charge maximale d'utilisation (CMU)

Molift Air 500 : 500 kg (1 102 lbs)

Poids de l'unité :

Châssis, avec batterie et sans barre d'élingue :

14,1 kg (31 lbs)

Dispositif de suspension à quatre points : 5,3 kg (11,7 lbs)

Batterie :

Art. : 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Chargeur de batterie :

Chargeur de la commande manuelle, Mascot – type 3743

Art. n° : 2540100

100-240 V CA, 50-60 Hz max. 0,5 A

Sortie : 0,56 A

Alimentation électrique IRC, Mascot - type 3721

Art. n° : 2610119

Entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz max. 1,0 A

Sortie : 24 V CC 1,75 A/42 W

Chargeur IRC, Mascot - type 3844

Art. n° : 2640200

Entrée : 20-30 V CC 1,3 A

Sortie : 0,5 A

Vitesse de levage

60 mm/seconde (2,36 pouces/seconde)

avec une charge de 75 kg (165,35 lb)

Classe de protection

Commande manuelle IP24

Moteur de levage IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Force nécessaire à l'actionnement des boutons

Boutons du boîtier de contrôle : 3,4 N

Matériau :

Aluminium, plastique, acier

Durée de vie prévue :

Le treuil a une durée de vie prévue de 30 000 cycles (CMU)
ou 15 ans. Les rails ont une durée de vie prévue de 30 ans.

Dimensions :

L x l x H (longueur, largeur, hauteur sans chariot)

36 x 24,6 x 19,5 cm


(14,2 x 9,7 x 7,7 pouces)

A (plage de levage)

300 cm (118 pouces)

B (distance minimale entre le plafond et le point de raccordement
de la suspension) 32,7 cm (12,78 pouces)

Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques, comment réaliser l'entretien et les réparations, reportez-vous au manuel technique.

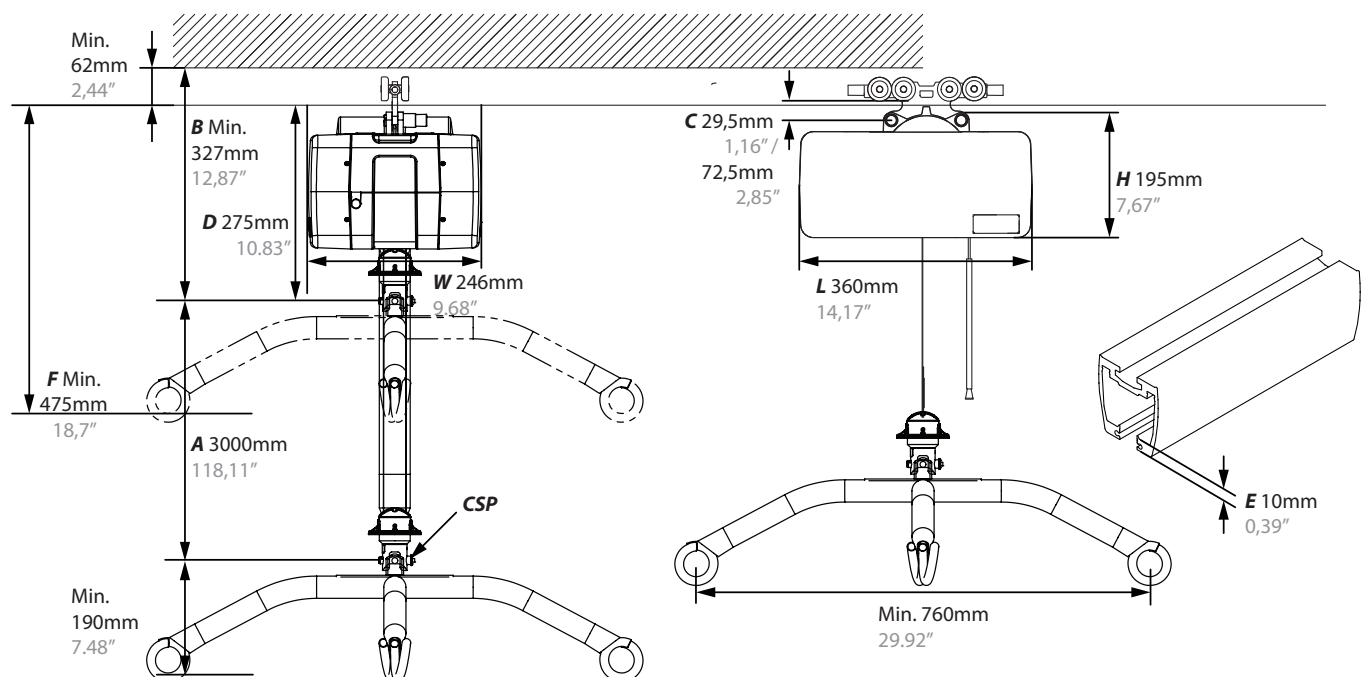

Installation

La charge maximale d'utilisation (CMU) est indiquée sur le treuil et ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du système de rail.




Le système de rail peut être installé uniquement par du personnel certifié conformément aux instructions d'installation en vigueur.



Terminez le contrôle indiqué par la liste de vérification post-installation avant de commencer à utiliser le treuil.

Installation du chariot

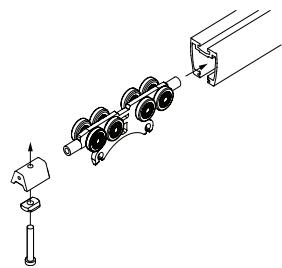

Montage du chariot dans le système de rail. Ôtez la butée et insérez le chariot dans le rail. Montez la butée et assurez-vous qu'elle est solidement fixée. Reportez-vous à BM4401 pour les instructions d'installation détaillées.




Assurez-vous que les butées sont montées à chaque extrémité du système de rail avant d'utiliser le treuil !

Installation du lève-personne




Soyez prudent lorsque vous travaillez en hauteur. Nous recommandons d'être au moins deux pour procéder à l'installation, afin de prévenir toute perte d'équilibre ou blessure !

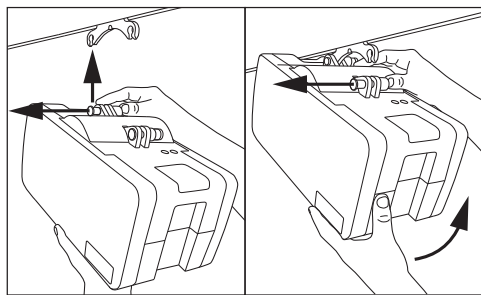

Montage du lève-personne sur le chariot. Pas d'outils nécessaires. Le lève-personne présente deux points de raccordement.

Raccordez d'abord un point. Enfoncez entièrement le bouton et placez le lève-personne dans le point de raccordement sur le chariot. Relâchez le bouton et veillez à ce qu'il soit vert avant de connecter le point suivant.

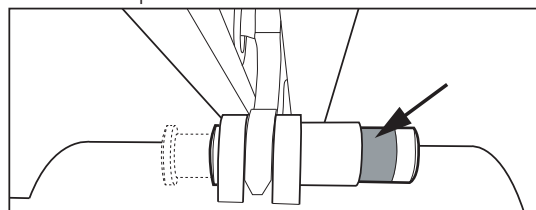

Assurez-vous que les deux boutons de point de raccordement se remettent complètement en place et apparaissent clairement en vert après l'installation.

Il est possible d'ajuster le tube et le cordon d'abaissement d'urgence à la longueur appropriée (hauteur) en les coupant.

Installation

Utilisez cette liste de vérification pour vous assurer avant toute utilisation que le treuil est installé correctement et peut fonctionner convenablement et en toute sécurité.

- ☐ Les butées sur le rail sont installées une fois le chariot monté, comme décrit dans BM4401.
- ☐ Assurez-vous que le treuil est correctement fixé au rail et qu'aucune pièce n'est lâche sur le lève-personne.
- ☐ Réalisez un levage avec charge (60-80 kg).
- ☐ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Comment utiliser Molift Air

Précautions générales relatives à la sécurité

N'utilisez que des accessoires et harnais adaptés au client, à son type de handicap, à sa taille, à son poids, ainsi qu'au type de transfert.

Intervalles de fonctionnement et de pause/pourcentage d'utilisation

Molift Air 500 ne doit pas fonctionner en continu pendant plus de 2 minutes (sous charge maximale) et doit rester au repos pendant au moins 18 minutes. Pourcentage d'utilisation : 10 %. (Intervalles conformes à la norme ISO-EN 10535)



Ne placez pas le treuil dans une position qui rend difficile le débranchement du câble secteur. Pour isoler le système, retirez le câble secteur de la prise électrique murale.



Si la charge maximale d'utilisation (CMU) diffère entre la barre d'élingue du treuil et l'unité de soutien du corps, respectez toujours la charge maximale la plus faible.



Les lève-personnes Molift peuvent uniquement être utilisés pour soulever des clients. N'utilisez jamais le lève-personne pour soulever ou déplacer des objets d'aucune sorte.

Vérifications quotidiennes/avant utilisation


Contrôles à réaliser quotidiennement ou avant toute utilisation par le soignant :

- ☐ Vérifiez que le lève-personne et le système de rail ne présentent aucun dommage, défaut ou déformation visible.
- ☐ Assurez-vous que la barre d'élingue et toutes les pièces détachables sont correctement connectées et fixées.
- ☐ Testez le bouton d'arrêt d'urgence et l'abaissement d'urgence.
- ☐ Vérifiez que les témoins d'entretien et de batterie ne sont pas allumés.
- ☐ Assurez-vous que la sangle de levage ne présente aucun signe de dommage ou d'effilochage.
- ☐ Testez les fonctions du lève-personne et assurez-vous que le lève-personne ne fait pas de bruit anormal.

En présence de défauts, l'appareil doit être mis hors d'état de fonctionnement et marqué « hors service ». Aucune pièce du Molift Air ne doit être entretenue ou réparée lorsqu'un patient est installé sur l'appareil.

Commande manuelle

La commande manuelle est munie de 2 boutons destinés au levage et à l'abaissement ou de 4 boutons si le treuil est équipé d'un système de propulsion. La commande manuelle présente un témoin lumineux qui s'allume lorsque le niveau de la batterie est faible et que le lève-personne doit être chargé.

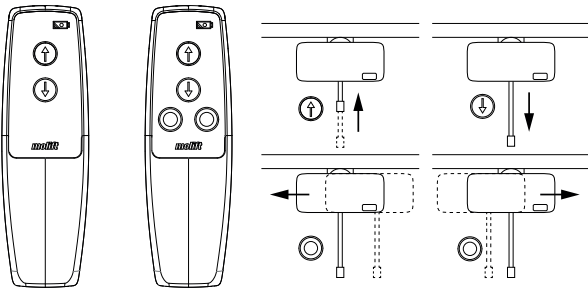


Ne tirez pas sur la commande manuelle pour déplacer le treuil le long du rail.



La levée ne fonctionne pas si la commande manuelle est connectée à un chargeur. Débrancher la commande manuelle du chargeur avant d'utiliser le système de levage.

Montage de la barre d'élingue

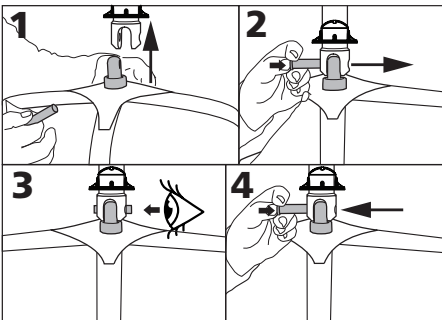


1. Alignez la barre d'élingue avec le point de raccordement.
2. Appuyez sur le bouton de la goupille de verrouillage et enfoncez-le complètement.
3. Assurez-vous que la goupille de verrouillage est correctement fixée.
4. Appuyez sur le bouton de la goupille de verrouillage et maintenez-le enfoncé, puis tirez pour retirer la goupille de verrouillage.


Arrêt d'urgence/abaissement d'urgence

Arrêt d'urgence

Activation et réinitialisation de l'arrêt d'urgence :

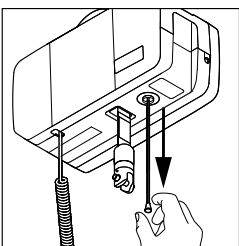


Tirez pour activer l'arrêt d'urgence. Le bouton sort et le treuil s'arrête.

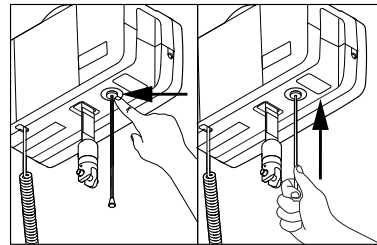

Appuyez avec le doigt ou utilisez le tube sur le cordon pour remettre le bouton en position afin de réinitialiser l'arrêt d'urgence.

Abaissement d'urgence électrique




Tirez jusqu'à ce que l'abaissement s'enclenche. Maintenez jusqu'à ce que le client soit abaissé et puisse être détaché de la barre d'élingue.

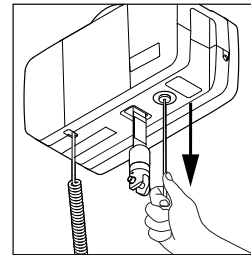

Uniquement pour les situations d'urgence, lorsque la commande manuelle ne fonctionne pas !

Abaissement d'urgence manuel

Une clé Allen ou une mèche de perceuse électrique est incluse dans le lève-personne. Ôtez les capots des deux côtés du treuil pour la localiser.

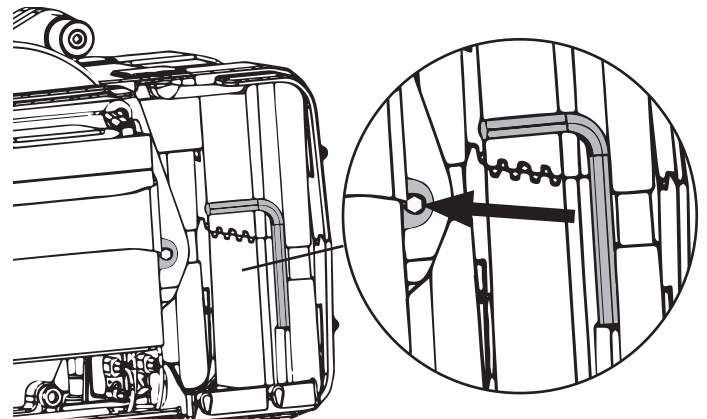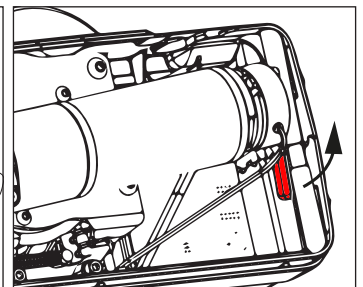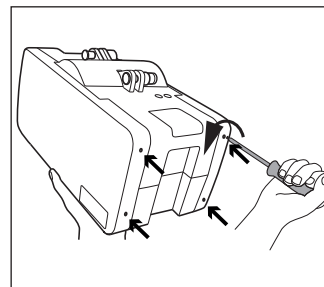

Pour ouvrir les capots latéraux, dévissez les 8 vis (4 de chaque côté) à l'aide d'un tournevis ou d'une perceuse électrique. Relevez la poignée rouge de « desserrage du frein ». Localisez les outils de l'autre côté du treuil et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la courroie de levage. L'utilisation d'une perceuse électrique est recommandée.

Une opération d'entretien n'est PAS nécessaire si :

- 1) l'abaissement d'urgence manuel de l'Air est utilisé pour une raison connue, et si
- 2) la courroie n'est pas endommagée, et si
- 3) l'unité fonctionne normalement après la procédure d'abaissement d'urgence manuel.

Le nouveau système de neutralisation du freinage contribue à éviter la nécessité d'une opération d'entretien grâce à une moindre sollicitation des composants du lève-personne en cas d'abaissement d'urgence manuel.

Si l'unité a subi un dysfonctionnement dont la raison est inconnue et si le système d'abaissement d'urgence manuel a été utilisé, une opération d'entretien est nécessaire.

Système électronique

Transport et stockage

En cas de stockage prolongé, il est recommandé d'activer le bouton d'arrêt d'urgence (bouton sorti). Vous pouvez stocker et transporter le lève-personne à des températures comprises entre -25 et 70 °C.

Fonctionnement

Le lève-personne est destiné à une utilisation à des températures ambiantes standard (+5 à +40 °C).

Pression de l'air : 70 - 106 kPa

Humidité relative : 15 - 90 %

Après un stockage ou un transport à d'autres températures, laissez le lève-personne dans une pièce présentant une température adéquate jusqu'à ce qu'il atteigne une température de fonctionnement sûre.



Les équipements électromédicaux nécessitent des précautions spéciales en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). Les équipements de radiocommunication portables ou mobiles peuvent affecter les équipements électromédicaux et doivent rester à au moins 30 cm (12 pouces) du système électronique du lève-personne.

Batteries

Molift Air 500 est disponible avec une batterie 24 V SLA. La batterie SLA présente une durée de vie de 500 cycles de charge environ.



Rechargez la batterie à sa réception, puis rechargez-la tous les six mois, pour éviter toute défaillance de celle-ci.



Les batteries doivent être mises au rebut en tant que déchets spéciaux, conformément aux règles et réglementations locales. Ne pas jeter avec les déchets ménagers.

Témoins de batterie et d'entretien sur le lève-personne

	Symbole de clé/témoin d'entretien
	Symbole de batterie/témoin de batterie

Le système électrique est pourvu d'une fonction d'économie d'énergie qui désactive le système électrique au bout de dix minutes après son dernier fonctionnement. Tous les témoins s'éteignent. Le système s'active lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de fonctionnement de la commande manuelle.

Témoin de batterie sur le treuil

Lorsque le témoin de batterie à plusieurs niveaux est jaune, le lève-personne dispose de suffisamment d'énergie pour au moins un cycle complet de levage à charge maximale. Lorsque le témoin de batterie clignote en jaune, il est seulement possible d'abaisser la barre d'élingue.

<i>Témoin de batterie</i>	<i>Niveau de batterie</i>	
	Vert	80 % ou plus
	Vert	80 - 60 %
	Vert	60 - 40 %
	Vert	40 - 20 %
	Jaune	20 % - 0 %
	Jaune clignotant	0 %

Témoin d'entretien/inspection périodique

Le système électronique du lève-personne mémorise le nombre de levages et les charges correspondantes. Au bout d'une durée de fonctionnement donnée, un signal est envoyé pour indiquer qu'un entretien est nécessaire.

<i>Témoin d'entretien</i>	<i>Mode</i>
Éteint	Entretien pas nécessaire
Jaune	Inspection périodique requise
Vert clignotant	Prévoir un entretien
rouge.	Réaliser l'entretien

Entretien

Lorsque le lève-personne a effectué un certain nombre d'opérations de levages (5 000 levages avec la charge maximale autorisée [CMU]), le témoin d'entretien s'allume en rouge. Un entretien, incluant l'inspection et le remplacement des pièces usées, doit ensuite être effectué par du personnel autorisé. Contactez Etac ou votre revendeur local, ou rendez-vous sur etac.com pour trouver un partenaire de service agréé.

Recharge

Molift Air 500 peut être chargé par l'intermédiaire de la commande manuelle avec le chargeur de batterie ou via le chargement sur rail.


Témoin du chargeur et témoin d'alimentation électrique

<i>Témoin du chargeur</i>	<i>Mode</i>
Vert clignotant	Treuil non connecté
Jaune	Recharge
Jaune clignotant	Maintien du niveau de charge
Vert	Recharge terminée

<i>Témoin d'alimentation électrique</i>	<i>Mode</i>
Bleu	Branché à la prise de courant

Chargement via la commande manuelle


Le chargeur de batterie est branché à une prise électrique. Une station d'accueil murale est disponible pour la commande manuelle. Prenez garde à ne pas endommager le câble. Le chargeur peut être connecté à la prise électrique à tout moment. Utilisez uniquement des chargeurs Molift. La commande manuelle présente un témoin lumineux qui s'allume lorsque le niveau de la batterie est faible et que le lève-personne doit être chargé. Chargeur pour commande manuelle Molift Air : Art. n° : 2540100

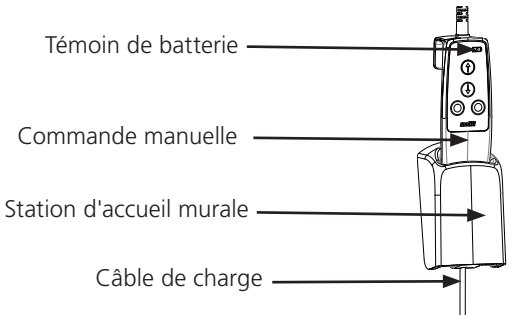


IRC (In Rail Charging) - chargement sur rail

Le moteur se charge par l'intermédiaire d'une alimentation et d'un chargeur intégré permettant un chargement continu sur toute la longueur du système de rail.

Molift Air IRC est muni d'un chargeur intégré relié à la batterie. Il doit être installé avec un chariot IRC sur un système de rail doté d'un ruban conducteur. Le chariot IRC est relié au chargeur de batterie situé à l'intérieur de Molift Air IRC. Il est en contact constant avec le ruban conducteur à l'intérieur du rail. L'alimentation électrique IRC est reliée au ruban conducteur via la connexion IRC à l'extrémité du rail et fournit de l'électricité au chargeur de batterie situé à l'intérieur de Molift Air IRC.

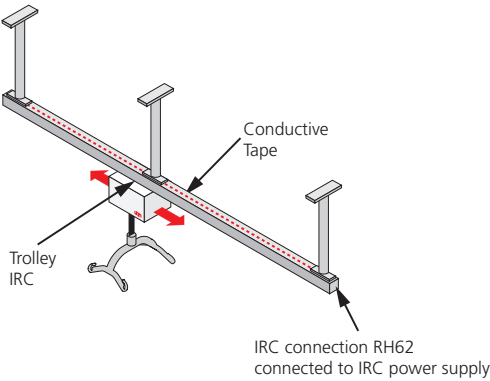

Le système IRC convient tant pour le rail simple que pour les systèmes transversaux.

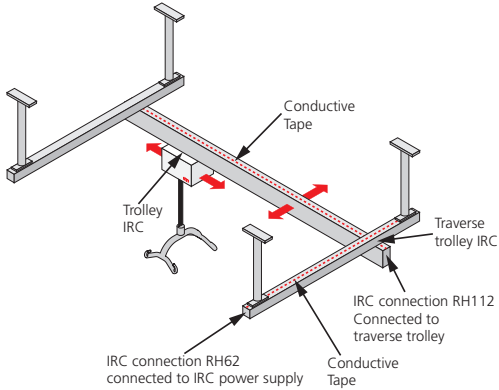

Alimentation électrique IRC

Art. n° : 2610119

Chargeur 3844 CC/CC (élément de Molift Air IRC)

Art. n° : 2640200

Transfert

Planifiez l'opération de levage à l'avance afin de garantir une procédure aussi sûre et fluide que possible. Pensez à travailler de façon ergonomique. Évaluez les risques et prenez des notes. L'assistant est responsable de la sécurité de l'utilisateur.

Utilisation des harnais

Il est important que le harnais soit testé avec chaque utilisateur et pour le levage prévu.



Lisez le manuel d'utilisation du harnais avant toute utilisation.



N'utilisez pas de harnais endommagés ou usés.

Combinaisons de dispositifs et compatibilité des harnais


En cas de combinaison d'un dispositif médical avec d'autres dispositifs ou accessoires, la combinaison ne doit pas modifier la destination des dispositifs établie par le fabricant ou modifier les dispositifs d'une manière qui pourrait affecter la conformité aux exigences applicables, ou l'utilisation sûre du dispositif.

Nous recommandons d'utiliser des harnais Etac ou Molift. Le lève-personne peut être combiné avec des harnais d'autres fabricants. Consultez le site www.etac.com pour connaître les déclarations de compatibilité.


La personne/l'entreprise responsable de la combinaison des dispositifs doit s'assurer que les exigences applicables sont respectées. Protection électrique en combinaison avec des harnais : Partie appliquée de type BF.

Levage et abaissement


Lorsque vous déplacez le client, tenez-vous à côté de lui. Assurez-vous que les bras et jambes n'obstruent pas l'accès au siège, au lit, etc. Maintenez le contact visuel avec le client pour qu'il se sente en sécurité.

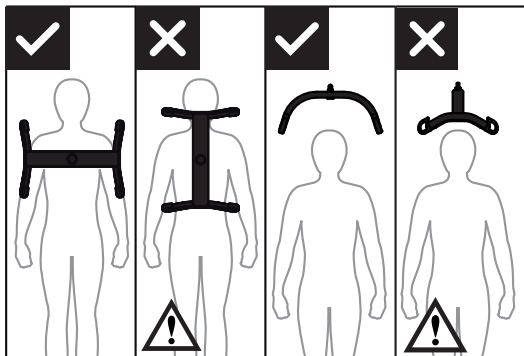

La barre d'élingue à 4 points doit toujours être positionnée dans la largeur du client afin d'éviter que celui-ci ne glisse accidentellement du harnais.

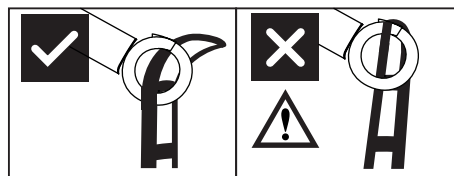


La conception du crochet de la barre d'élingue empêche le harnais de se détacher accidentellement lorsqu'il est monté correctement.

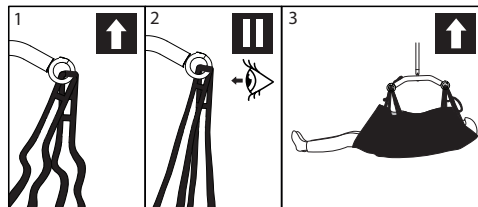

1. Vérifiez que le harnais soutient correctement le client et que les boucles des sangles sont correctement fixées aux crochets de la barre d'élingue.
2. Étirez les sangles du harnais sans soulever le client. Assurez-vous que les quatre boucles du harnais sont fermement fixées afin d'éviter tout glissement ou toute chute de l'utilisateur.
3. Soulevez le client et procédez au transfert.

Capteur d'angle

Le treuil présente une fonction de sécurité directionnelle qui empêche le levage si l'angle de la sangle de levage est trop élevé.

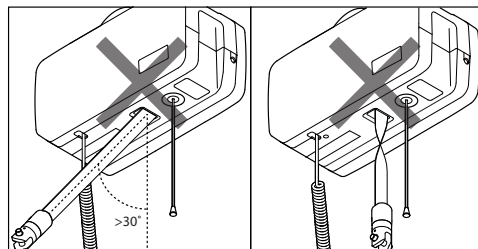

Si le treuil ne réagit pas au bouton de levée de la commande manuelle, cela peut être dû à un angle trop élevé de la sangle de levage ou à la torsion de la courroie de levage. Dans ces cas, le capteur s'active.


Accessoires

Cordons et prises du chargeur.

Adaptateur pour prise UE, art. n° 2510365
 Adaptateur pour prise R.-U., art. n° 2510366
 Adaptateur pour prise É.-U., art. n° 2510367
 Adaptateur pour prise AUS, art. n° 2510368
 Cordon UE, art. n° 1140105
 Cordon R.-U., art. n° 1140106
 Cordon É.-U., art. n° 1140104
 Cordon AUS, art. n° 1140107
 Support mural pour chargeur, art. n° 2610123

Barres d'élingue

Molift Air peut être utilisé avec une barre d'élingue à 4 ou 8 points.

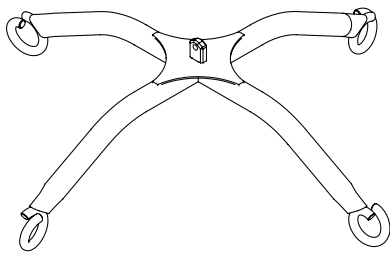

Dispositif de suspension à quatre points, acier
 Art. n° : 2140003

Harnais

Etac propose une grande variété de harnais convenant à divers types de transfert. La gamme de harnais Molift RgoSling a été conçue pour être associée à une barre d'élingue à 4 points avec connexions en boucle. Le harnais fonctionne également avec une barre d'élingue à 2 points. Reportez-vous à la liste des combinaisons dans le manuel d'utilisation du harnais pour savoir quels harnais et barre d'élingue associer.

La gamme de harnais Molift RgoSling est disponible dans les tailles XXS à XXL, en polyester ou polyester maille. Vous retrouverez la liste complète des harnais et barres d'élingue sur www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ambulating Vest
 Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
 Molift RgoSling Fabric Stretcher
 Molift RgoSling Repositioning


SWL 500
 Molift MediumBack Plus (L-XXL)

Accessoires :


Molift Rgosling Extension Loops
 Art. n° : 1721600
 Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Système de connexion

Certains systèmes de rail sont équipés de systèmes de connexion ①. Ils sont utilisés pour transférer l'utilisateur d'un système de rail à un autre, par exemple entre deux pièces différentes.

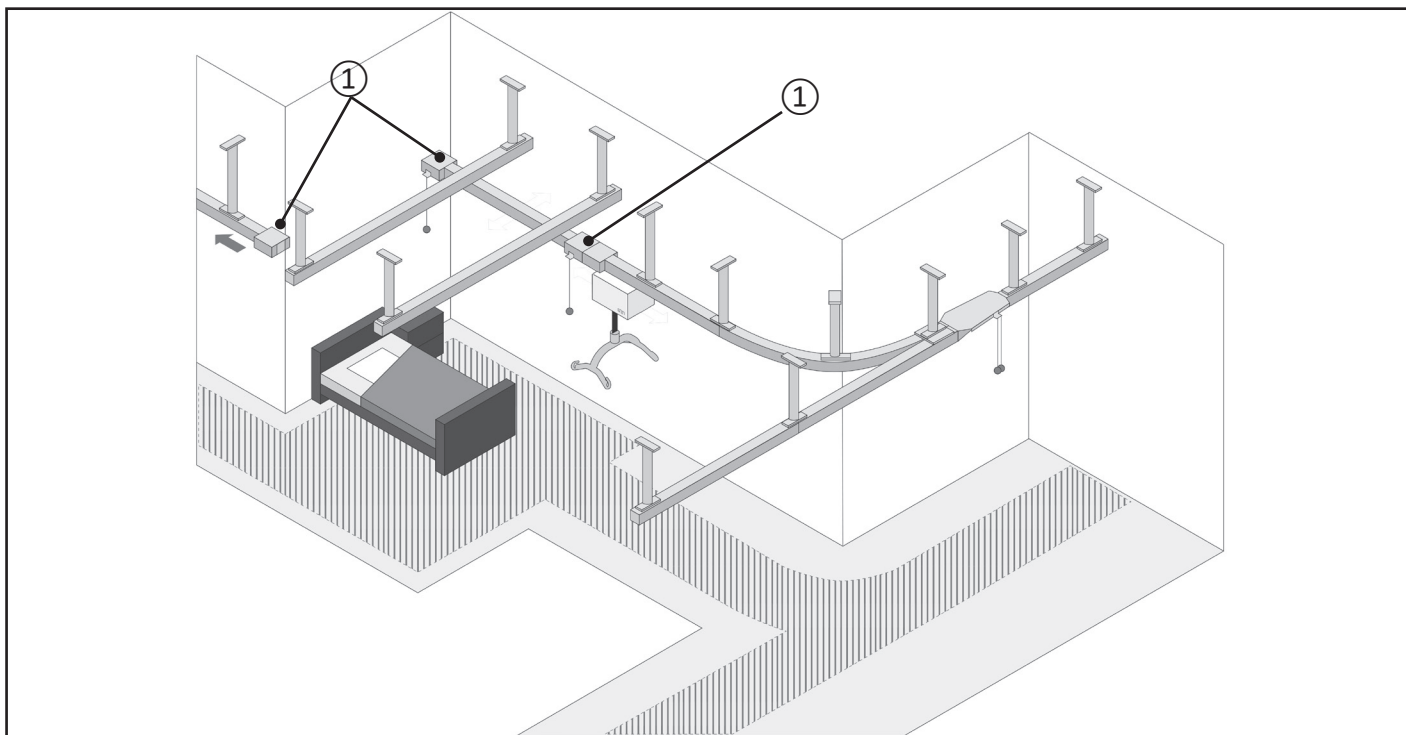


Composants

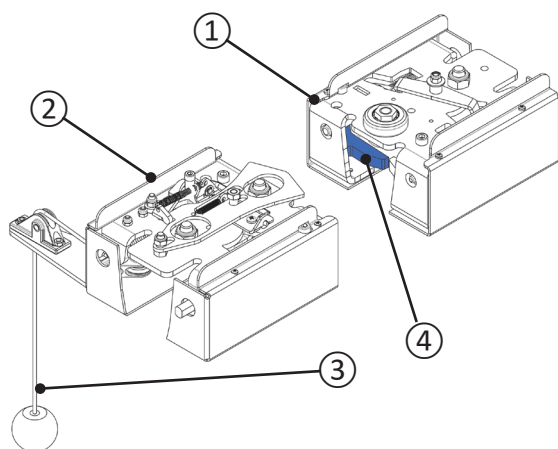


- ① Unité de système de connexion
- ② Unité de système de connexion avec poulie
- ③ Poulie avec poignée
- ④ Sécurité (deux par unité)

États

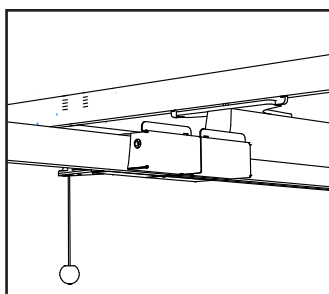


Connecté

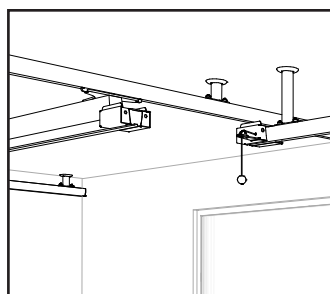

Déconnecté


Déconnexion

Avant de déconnecter le système de connexion, assurez-vous que le chariot se trouve à 0,5 m minimum de l'unité de système de connexion.

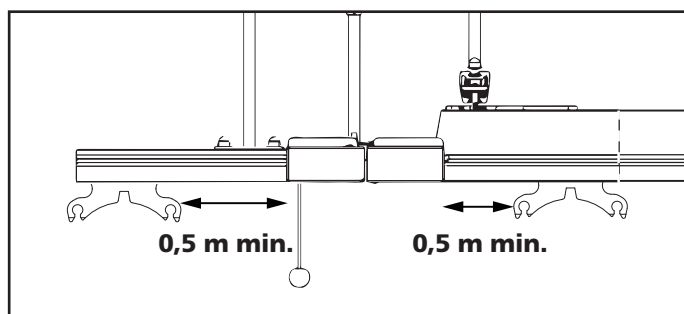

Tirez la poulie vers le bas jusqu'à la butée.

Un son confirmant la déconnexion est émis.

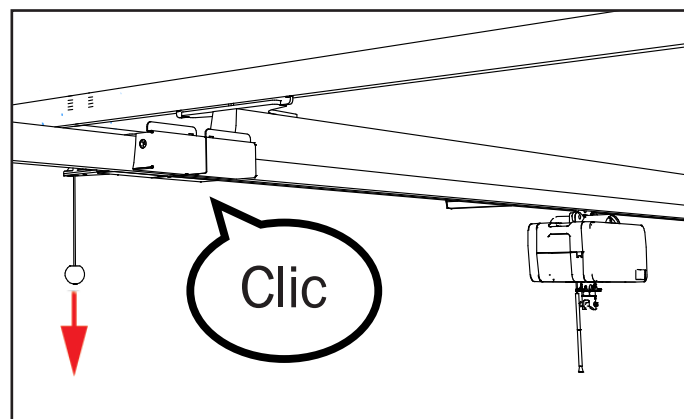


Le système de connexion est à présent déconnecté.



Transfert – Système de connexion déconnecté

N'effectuez aucun transfert d'utilisateur avant d'avoir vérifié les points suivants :


Les deux sécurités ① sont visibles (unité de système de connexion vue du bas).

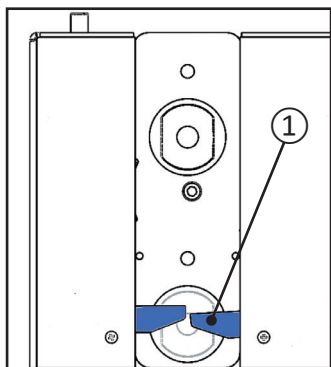

Le boulon de verrouillage ② ne doit **pas** être visible lorsque le couplage est débranché.

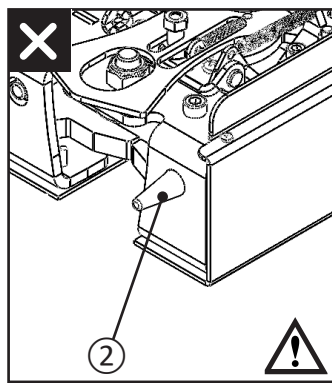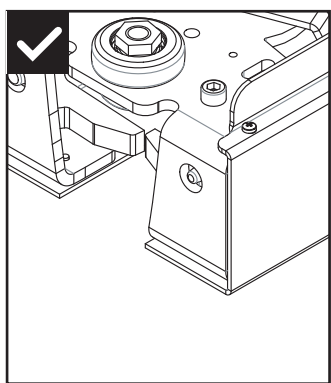


Poussez le rail transversal dans la direction souhaitée.

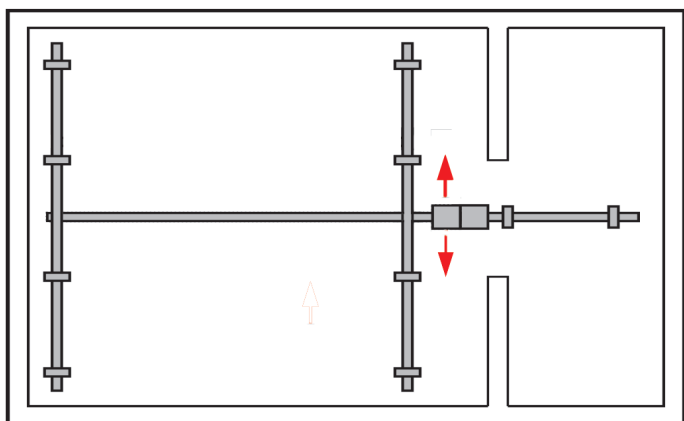


Connexion

Avant de raccorder les unités de système de connexion, assurez-vous que le chariot se trouve à 0,5 m minimum de l'unité de système de connexion.

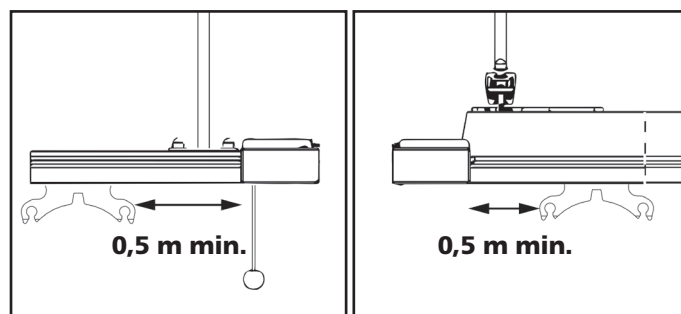

Poussez le rail transversal vers le rail fixe, de sorte que les systèmes de connexion se connectent et que vous entendiez un clic.

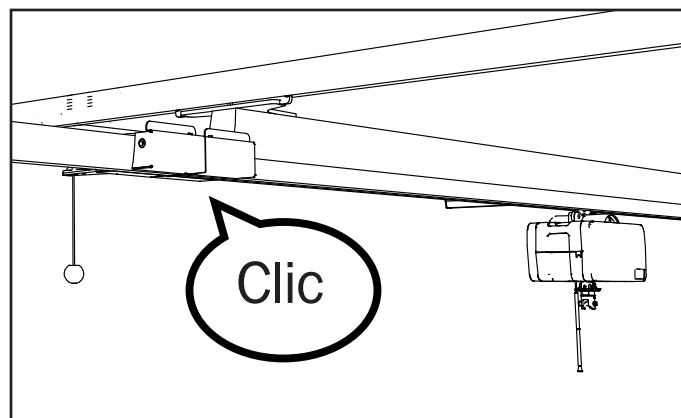

Transfert – système de connexion connecté

N'effectuez aucun transfert d'utilisateur avant d'avoir vérifié que les systèmes de connexion sont complètement verrouillés ensemble. Il doit être impossible d'écarter les rails manuellement. L'utilisateur peut maintenant être transféré d'un rail à l'autre.



Raccordement de traverse

Raccordement de traverse, contrôle post-installation

Engager le raccordement de traverse et vérifier, avec une charge d'au moins 75 kg dans le lève-personne, que le lève-personne se déplace librement dans les deux sens du raccordement de traverse.

Engager/Désengager le raccordement de traverse 10 fois et le faire passer 10 fois sans arrêt. Vérifier que les goupilles de verrouillage des deux semi-raccordements reviennent librement en position inférieure uniquement par la force du ressort.

Insérer un chariot lève-personne dans le rail. Engager le raccordement de traverse. Aligner l'extrémité du chariot avec l'extrémité du semi-raccordement. Essayer de désengager le raccordement de traverse. Le mécanisme de sécurité doit l'empêcher. Répéter le test pour l'autre semi-raccordement.

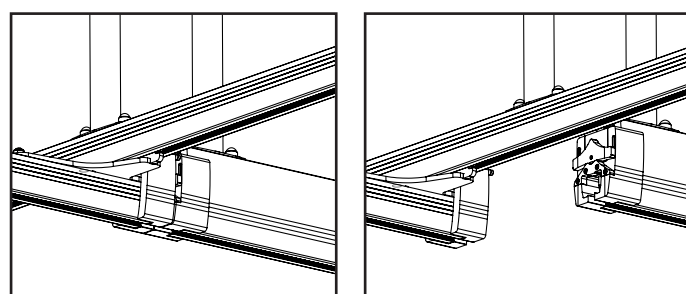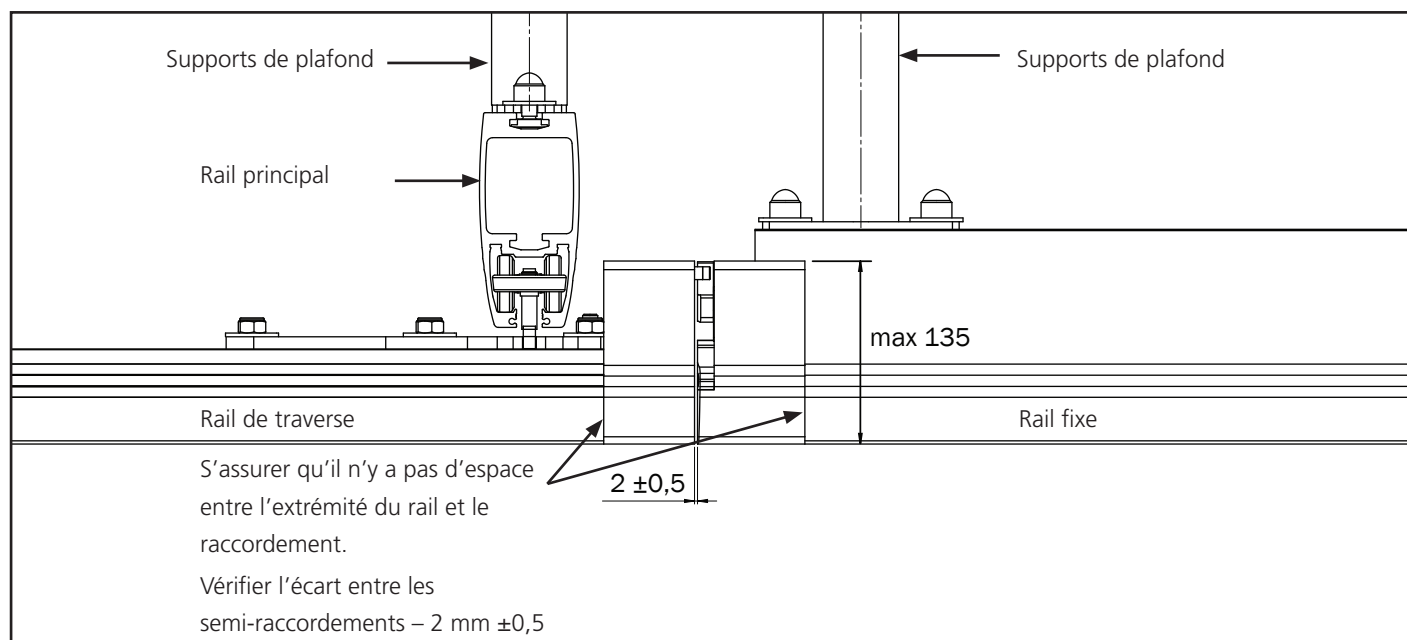

Connecté


Déconnecté

Transfert - Raccordement de traverse connecté

L'utilisateur peut maintenant être transféré d'un rail à l'autre.

Positionnement de l'étiquette

L'étiquette suivante est incluse dans la boîte avec le raccordement de traverse. Avant utilisation, veuillez fixer l'étiquette sur le rail de traverse comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que le côté rouge est positionné le plus près du raccordement de traverse.

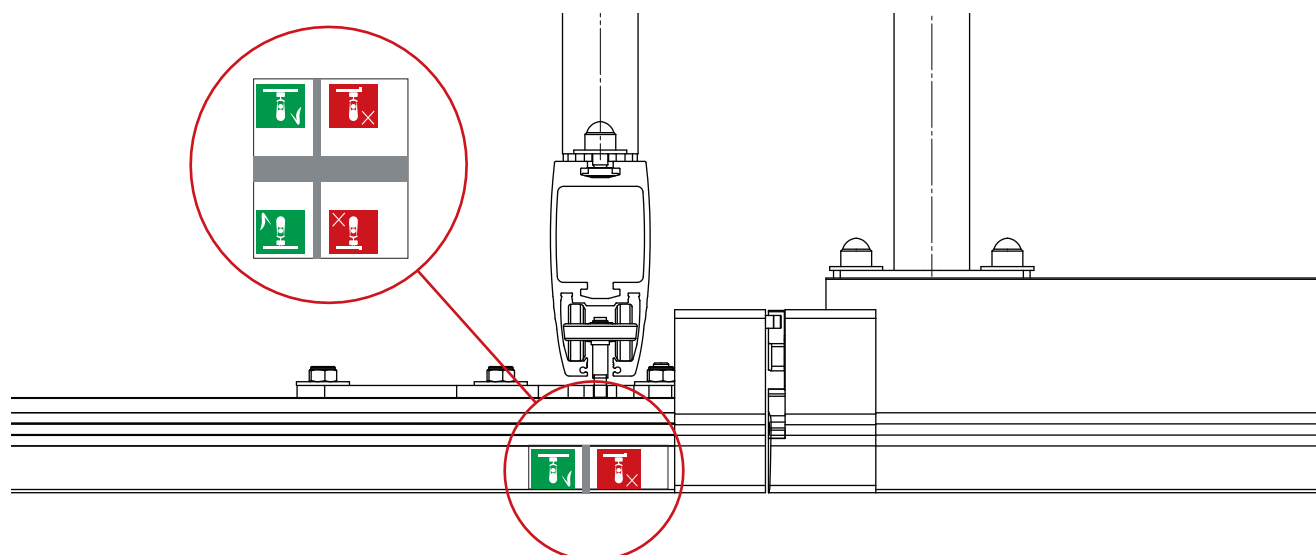

Après avoir collé l'étiquette, veuillez couper et retirer la ligne grise épaisse. Cela permet au chariot de se déplacer librement d'avant en arrière le long du rail.

Explication des symboles



Pictogramme blanc sur fond vert.

Ce symbole indique le positionnement optimal du lève-personne pour faciliter la connexion du raccordement.



Pictogramme blanc sur fond rouge.

Ce symbole indique un positionnement sous-optimal du lève-personne, ce qui complique la connexion du raccordement.

Nettoyage/désinfection

Nettoyez le dispositif régulièrement. Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide et un détergent approprié au pH neutre. N'utilisez pas de solvants ou de liquides forts, car ils pourraient endommager les surfaces du lève-personne. Lorsqu'une désinfection est nécessaire, utilisez de l'alcool isopropylique. Évitez les produits de nettoyage abrasifs. Vérifiez l'arrêt d'urgence et l'abaissement d'urgence après le nettoyage. Le lève-personne ne doit pas être exposé à de l'eau courante. Lors d'une installation dans des environnements présentant un risque d'humidité, il est important que le système de rails et le moteur soient régulièrement lavés et séchés. Un guide complet pour réduire les risques de corrosion est disponible sur demande.



Assurez-vous de ne pas endommager ou ôter les étiquettes lors du nettoyage.



Le treuil et la commande manuelle sont conformes à la classe de protection IP24 ce qui signifie qu'ils sont dotés d'une protection > 12,5 mm contre l'accès aux parties dangereuses et contre l'eau tombant en pluie fine à la verticale dans une direction faisant un angle inférieur ou égal à 60°.



Le soignant et le client sont exposés aux matériaux suivants : polypropylène et polyester (harnais*), PC/ABS (protection de la commande manuelle et du treuil), aluminium laqué époxy, zinc thermolaqué (barres d'élingue).

* = Partie appliquée



Dans de rares cas, le client ou le soignant exposé au polypropylène et au polyester peut déclencher des réactions allergiques telles que des irritations et une sensibilité cutanées ainsi que des démangeaisons légères.

Reconditionnement

Suivez la procédure de nettoyage et d'installation, réalisez l'inspection périodique et utilisez la liste de vérification post-installation pour reconditionner le lève-personne.

Recyclage

Reportez-vous aux instructions de recyclage pour savoir comment mettre le produit au rebut correctement. Elles sont disponibles sur www.etac.com.

Pièces détachées

Une liste de pièces détachées est disponible sur demande.

Champ de l'inspection périodique

L'inspection périodique est un examen visuel (en particulier de la structure de soutien de la charge du lève-personne et du mécanisme de levage avec ses fixations, freins, commandes, dispositifs de sécurité et dispositifs de soutien des personnes) conforme au rapport d'inspection périodique des Molift Air 500.

Rendez-vous sur www.etac.com.



En cas de problème sur le lève-personne présentant un danger pour la sécurité, le lève-personne doit immédiatement être mis hors service et marqué comme tel. N'utilisez pas le lève-personne tant qu'il n'a pas été réparé. Contactez votre revendeur/distributeur local Molift/Etac pour signaler tout problème.

L'inspection périodique doit être réalisée au moins une fois par an ou plus fréquemment si les exigences locales le requièrent. L'inspection doit être réalisée par du personnel d'entretien autorisé par Etac. Contactez Etac à l'adresse molift@etac.com pour la formation et l'autorisation ou la recommandation d'un partenaire d'entretien agréé.

Lors d'une inspection périodique, l'inspecteur doit remplir le rapport d'inspection de Molift Air. Les rapports doivent être conservés par la/les personne(s) responsable(s) de l'entretien du lève-personne. Si vous observez des défauts et des dommages, veuillez mettre le lève-personne hors service et l'indiquer clairement comme tel jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Dépannage

Problème	Cause possible/mesure
Le lève-personne ne réagit pas aux boutons de la commande manuelle	L'arrêt d'urgence est activé. Désactivez-le en remettant le bouton en place.
	Le système électronique du lève-personne est en surchauffe. Attendez qu'il refroidisse.
	La commande manuelle n'est pas branchée correctement. La commande manuelle ou la prise ou le cordon peuvent être cassés et nécessiter un remplacement.
Le lève-personne ne réagit pas au bouton de levée de la commande manuelle	Le capteur d'angle de la sangle de levage est activé. Ajustez la sangle de levage ou déplacez le treuil pour réduire l'angle de la sangle de levage.
En utilisant l'abaissement d'urgence électrique, la sangle de levage va vers le haut	La sangle de levage est complètement sortie et s'enroule à l'envers. Utilisez l'abaissement d'urgence manuel. Envoyez le lève-personne en réparation.

Importante

Este manual del usuario contiene instrucciones de seguridad importantes e información relacionada con el uso de la eslinga y sus accesorios.




Este símbolo indica que se trata de información importante sobre seguridad. Siga atentamente estas instrucciones.



¡Lea el manual del usuario antes de usar el equipo!
Es importante entender completamente el contenido del manual del usuario antes de utilizar el equipo.

Visite www.etac.com para descargar la documentación y asegurarse de que posee la versión más reciente.

Molift Air 500

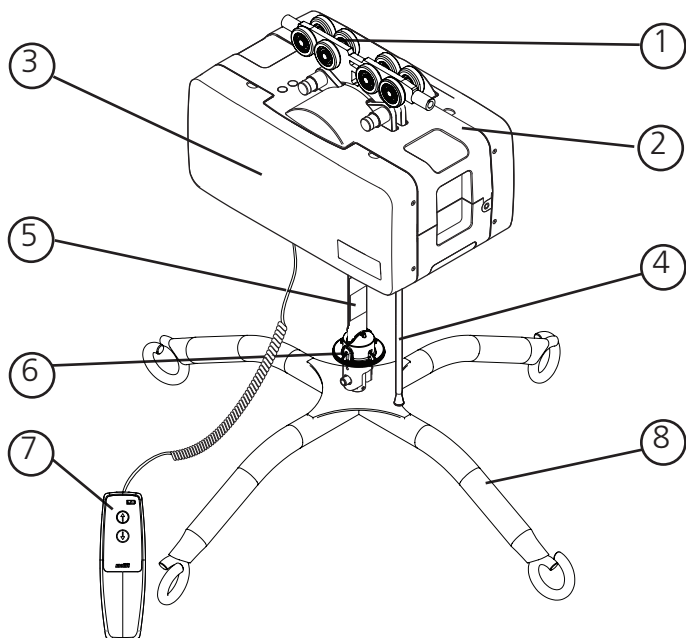

Componentes del elevador:

1. Carro
2. Elevador
3. Cubiertas laterales
4. Parada/descenso de emergencia
5. Cinta de elevación
6. Pasador de desenganche rápido
7. Mando
8. Percha

Acerca de Molift Air

Molift Air es una grúa de techo fuerte y suave que permite trasladar pacientes y residentes de forma cómoda y segura. Molift Air consiste en un motor muy ligero que, en combinación con el sistema de enganche y desenganche rápido, permite un montaje y funcionamiento fácil de manejar.

Información general



Declaración CE

El producto y sus accesorios relacionados, descritos en estas instrucciones de uso (IDU), cumplen con el reglamento (UE) 2017/745 del 5 de abril de 2017 como producto sanitario, clase de riesgo I.

El producto ha sido probado y aprobado por un tercero de acuerdo con las normas ICE 60601-1, ICE 60601-1-2 y EN/ISO 10535:2021. Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Condiciones de uso

Elevar y trasladar a un usuario siempre supondrá cierto riesgo. El sistema de railes debe ser instalado por personal certificado en conformidad con las instrucciones de instalación aplicables. El usuario que va a ser elevado no debe ser quien controle la grúa.

Modificaciones y uso de piezas de otros fabricantes

Recomendamos usar exclusivamente componentes y recambios de Molift. Si se modifica el producto, la declaración de conformidad deja de ser válida y Etac no se hace responsable de la garantía. Etac no se hace responsable de los errores o accidentes que puedan producirse al usar componentes de otros fabricantes. Puede resultar no seguro usar accesorios, piezas sueltas y materiales que no se mencionan en este manual del usuario.



Solamente el personal certificado está autorizado para abrir el elevador o los accesorios para su mantenimiento o reparación. Hay riesgo de lesiones con las piezas giratorias y riesgo de descarga eléctrica.



Aviso de garantía

Garantía de 2 años contra defectos de mano de obra y en materiales de nuestros productos.
Un año de garantía para las baterías.
Consulte los términos y condiciones en www.etac.com.

Introducción

Uso previsto

La persona descrita como «el usuario» se refiere a la persona que está sentada sobre el producto. «El cuidador» es la persona que maniobra el producto.

Modificaciones y uso de piezas de otros fabricantes

El elevador de techo es un dispositivo de asistencia diseñado para aliviar o compensar una incapacidad funcional debida a una lesión o discapacidad. El dispositivo está diseñado para una persona que carece de la capacidad de levantarse y desplazarse hacia o desde una cama, el suelo, una silla de ruedas, una silla, un inodoro o similar debido a una movilidad o una fuerza física reducidas.

Usuario previsto

El dispositivo puede usarse para niños, adultos y mayores que necesiten ayuda para elevarlos y moverlos o durante el entrenamiento de marcha, dentro de un sistema de raíles.

Entorno previsto

Para uso en interiores dentro de un sistema de raíles en cuidados intensivos, cuidados de larga duración y atención domiciliaria.

Indicaciones

Se utiliza para usuarios que requieren apoyo para levantarse y moverse, o durante el entrenamiento de marcha; por ejemplo, personas con capacidad de movimiento limitada y que requieren apoyo corporal durante las transferencias. No es una lista exhaustiva. El grupo objetivo del dispositivo se basa en la salud y la función de movilidad de cada persona, y no en un diagnóstico o edad específicos.

Contraindicaciones

No existen contraindicaciones conocidas.

Precauciones

Asegúrese de que la eslinga se adapta al usuario y a la percha.


Requisitos de formación

Solo los cuidadores que hayan leído y comprendido el manual del usuario pueden utilizar el dispositivo.

Identificación del producto

Etiqueta del producto

El código de barras de las etiquetas del producto contiene el número del artículo, el número de serie y la fecha de fabricación:

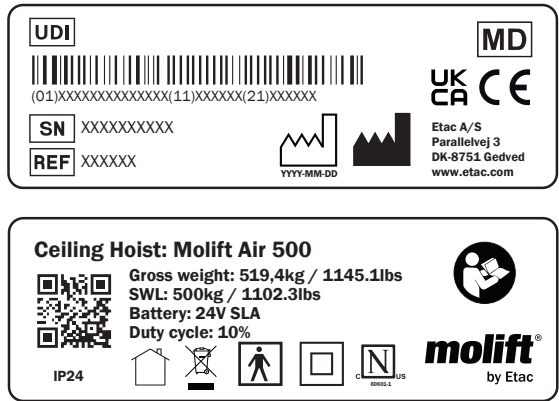

Símbolos y etiquetas de advertencia

Explicación más detallada de los símbolos utilizados en el producto:

- Clase II con aislamiento doble
- Con marcado CE
- Consulte el manual del usuario
- Solo para uso en interiores
- Peso máximo del paciente
- No eliminar con residuos comunes
- Parada/ descenso de emergencia
- Indicador de mantenimiento
- Indicador de la batería
- Símbolo de destornillador hexagonal para el descenso manual de emergencia
- Símbolo del organismo de certificación
- Fabricante
- Fecha de fabricación
- Número de catálogo
- Número de serie
- Producto sanitario
- Identificación única del dispositivo
- Marchio UKCA
- Parte aplicada de tipo BF

Datos técnicos

Carga de trabajo segura (CTS)

Molift Air 500: 500 kg (1102 libras)

Peso de la unidad:

Chasis con batería y sin percha:

14,1 kg (31 libras)

Percha de 4 puntos: 5,3 kg (11,7 libras)

Batería:

Ref.: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Cargador de baterías:

Cargador para mando, Mascot, tipo 3743

N.º de ref.: 2540100

100-240 V CA, 50-60 Hz máx. 0,5 A

Salida 0,56 A

Suministro de energía IRC, Mascot, tipo 3721

N.º de ref.: 2610119

Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz máx. 1,0 A

Salida: 24 V CC 1,75 A / 42 W

Cargador IRC, Mascot, tipo 3844

N.º de ref.: 2640200

Entrada: 20-30 V CC 1,3 A

Salida: 0,5 A

Velocidad de elevación

60 mm/s (2,36 pulgadas/s)

con 75 kg (165,35 lb) de carga

Clase de protección

Mando IP24

Motor de elevación IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Fuerza de accionamiento de botones:

Botones del mando: 3,4 N

Material:

Plástico, aluminio, acero

Vida útil prevista:

El elevador posee una vida útil prevista de 30 000 ciclos CTS o 15 años. Los rieles tienen una vida útil prevista de 30 años.

Dimensiones:

Lar. × An. × Al. (largo, ancho y alto sin carro)

36 × 24,6 × 19,5 cm

(14,2 × 9,7 × 7,7 pulgadas)


A (alcance de elevación)

300 cm (118 pulgadas)

B (distancia mínima del techo al punto de enganche de la percha)

32,7 cm (12,7/8 pulgadas)

Para más información sobre datos técnicos, sobre cómo realizar el mantenimiento y la reparación, consulte el manual técnico.

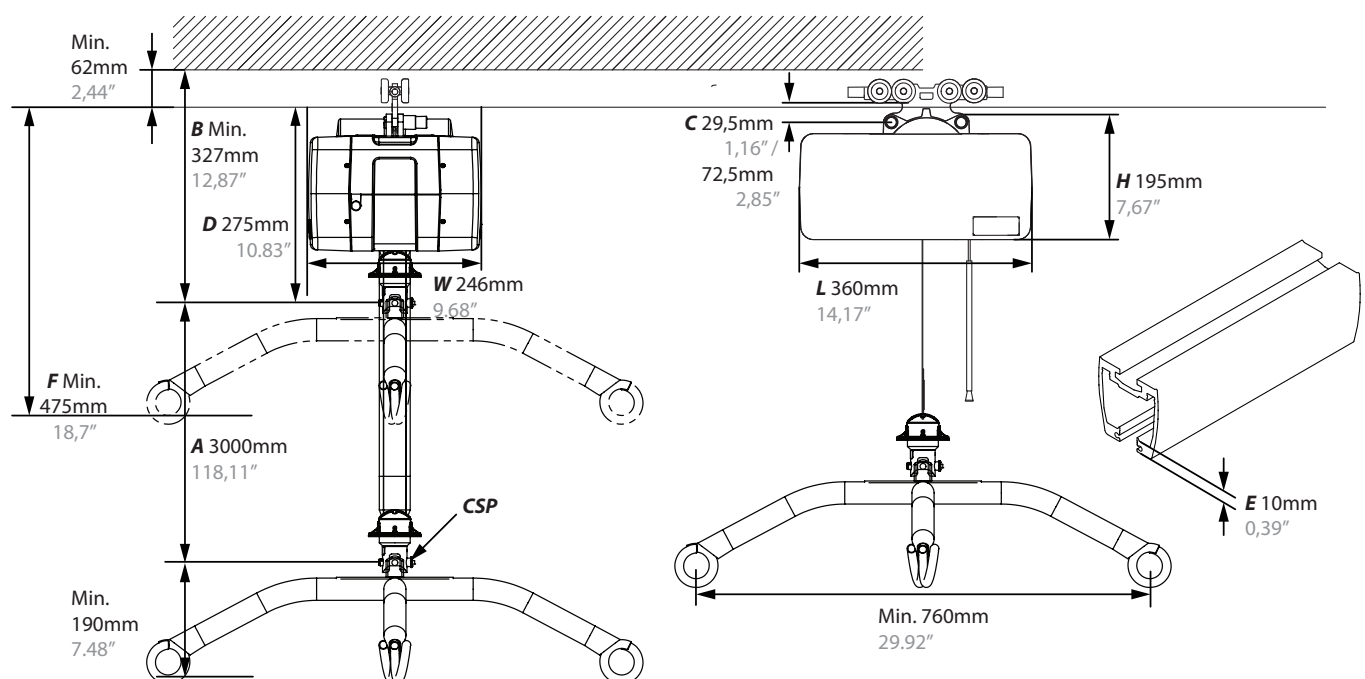

Instalación

El elevador está marcado con Carga de Trabajo Segura (CTS), que no debe superar la capacidad de carga máxima de los sistemas de raíles.




El sistema de raíles solamente puede ser instalado por personal certificado en conformidad con las instrucciones de instalación aplicables.



No empiece a utilizar el elevador sin haber realizado la lista de comprobación tras su instalación.

Instalación del carro

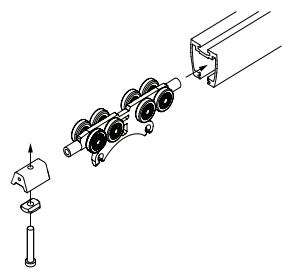

Montaje del carro en el sistema de raíles. Retire el tope e inserte el carro en el raíl. Vuelva a montar el tope y asegúrese de que está fijado de manera segura. Consulte BM4401 para ver los detalles de la instalación.




¡Asegúrese de que los topes están instalados en todos los extremos del sistema de raíles antes de utilizar el elevador!

Instalación de la grúa




Tenga cuidado cuando el usuario está elevado. ¡Recomendamos la presencia de dos o más instaladores para evitar que se pierda el equilibrio y se produzcan lesiones durante la instalación!

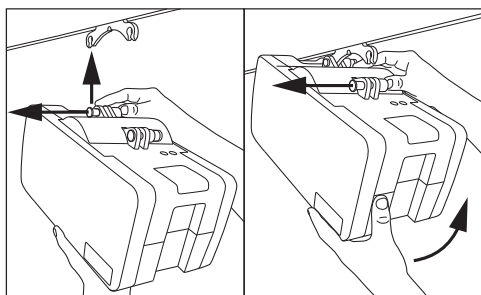

Montaje de la grúa en el carro. No es necesario utilizar herramientas. La grúa tiene dos puntos de conexión.

Conecte primero un punto. Empuje el botón al máximo y coloque la grúa en el punto de conexión del carro. Suelte el botón y asegúrese de que está claramente de color verde antes de conectar el siguiente punto.

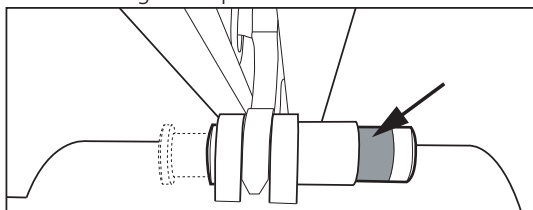

Tras la instalación, compruebe que los botones de los dos puntos de conexión están completamente en su sitio y muestran claramente el color verde.

El tubo y el cable de bajada de emergencia pueden cortarse para ajustarlos a la longitud (altura) adecuada.

Instalación

Utilice esta lista de comprobación para verificar que el elevador está instalado correctamente y puede funcionar de forma correcta y segura antes de su uso.

- ☐ Los topes en el raíl deben instalarse tras montar el carro tal y como se describe en BM4401
- ☐ Asegúrese de que el elevador se encuentra correctamente fijado al raíl y que la grúa no tiene piezas sueltas.
- ☐ Realice una elevación con carga (60-80 kg)
- ☐ Asegúrese de que la batería está cargada por completo.

Uso de Molift Air

Medidas generales de seguridad

Utilice únicamente accesorios y eslingas que se adapten al usuario, al tipo de discapacidad, al tamaño, al peso y al tipo de traslado.

Relación de pausas y ciclos de trabajo.

Molift Air 500 no debe estar en funcionamiento constante más de dos minutos seguidos (con carga máxima) y las pausas entre ciclos de trabajo deben ser de un mínimo de 18 minutos. Ciclo de trabajo del 10 %. (intermitencia conforme a la norma ISO-EN 10535)



No coloque el elevador de manera que sea difícil desconectar el cable de alimentación. Para aislar el sistema, retire el cable de alimentación del enchufe eléctrico de pared.



Si la carga máxima (CTS) difiere entre la percha del elevador y la unidad de soporte del cuerpo, deberá usarse siempre la menor carga máxima.



Las grúas de Molift solo deben usarse para elevar usuarios. Nunca utilice la grúa para elevar o desplazar objetos de ningún tipo.

Antes de su uso / comprobación diaria


Inspección obligatoria diaria o antes del uso por parte del cuidador:

- ☐ Revise que la grúa y el sistema de raíles no presentan daños, defectos ni deformaciones visibles.
- ☐ Asegúrese de que la conexión de la percha y todas las piezas desmontables están correctamente conectadas y aseguradas.
- ☐ Pruebe el botón de parada de emergencia y el descenso de emergencia.
- ☐ Asegúrese de que ni el indicador de la batería ni la luz de mantenimiento están iluminados.
- ☐ Compruebe que la correa de elevación no presenta daños visibles ni hilachas.
- ☐ Pruebe las funciones de elevación y asegúrese de que la grúa no emita sonidos anormales.

Si existiesen fallos o defectos, retire la grúa y márquela como «fuera de servicio». No deben realizarse tareas de reparación o mantenimiento en ninguna de las piezas de Molift mientras se esté usando con el paciente.

Mando


El mando posee dos botones para elevar y descender o cuatro botones si el elevador está equipado con propulsión. El indicador del mando se encenderá cuando quede poca batería y sea necesario cargarla.

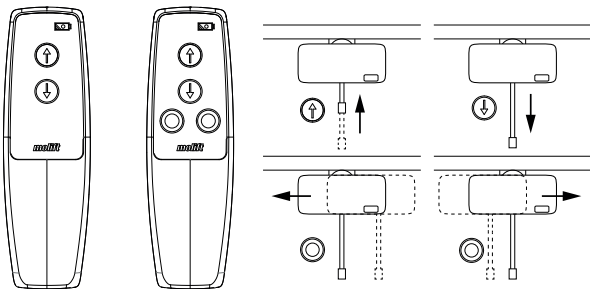

No tire del mando para mover el elevador por el raíl.




El elevador no funciona cuando el control manual está conectado al cargador. Desconecte el control manual del cargador antes de operar el elevador.

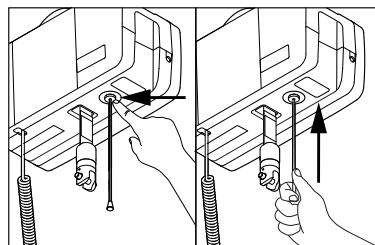

Empuje con el dedo o utilice el tubo en el cable para empujar el botón hacia atrás y reiniciar la parada de emergencia.

Descenso eléctrico de emergencia






Mantenga pulsado para iniciar el descenso. Manténgalo pulsado hasta que el usuario haya descendido y pueda desengancharse de la percha.

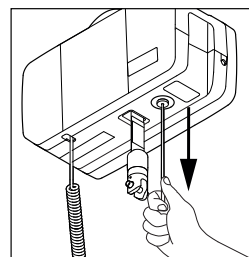

¡Utilícese solo en caso de emergencia cuando el mando no funcione!

Descenso manual de emergencia

En el interior de la grúa, encontrará una llave Allen o una broca para taladro. Retire las cubiertas a ambos lados del elevador para ubicarlas.

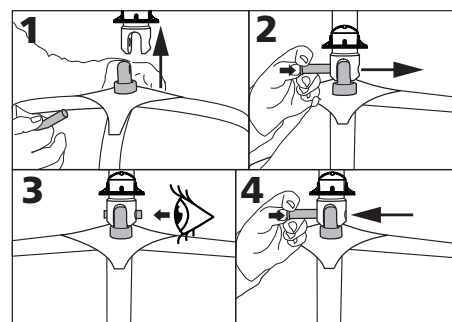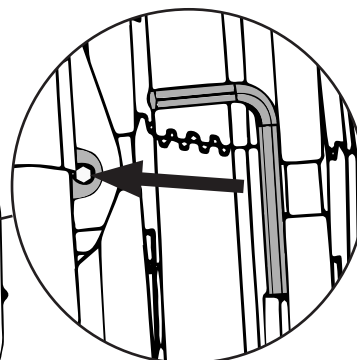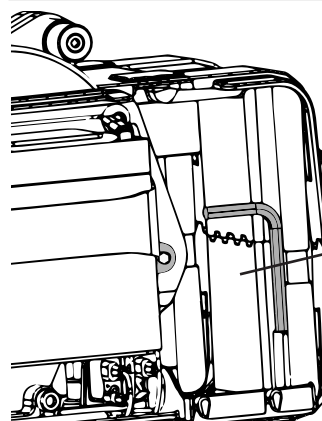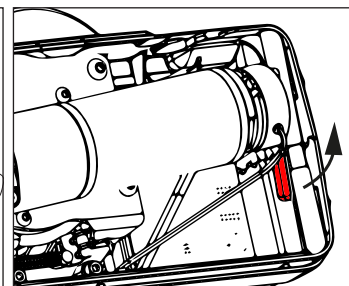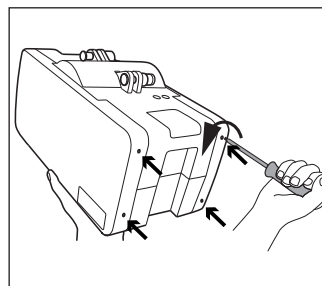


1. Sitúe la percha en el punto de conexión.
2. Empuje el botón del pasador de bloqueo e introdúzcala.
3. Compruebe que el pasador de bloqueo está correctamente fijado.
4. Mantenga pulsado el botón en el pasador de seguridad y tire de él para retirarlo.

Parada de emergencia / descenso de emergencia

Parada de emergencia

Activación y reinicio de la parada de emergencia:

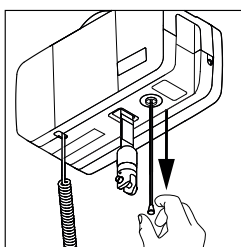

Tire para activar la parada de emergencia. El botón saldrá y el elevador se detendrá.

Para abrir las cubiertas laterales use un destornillador o un taladro eléctrico en los 8 tornillos (4 a cada lado). Gire hacia abajo la palanca roja «Brake Release» (soltar freno). Localice las herramientas en el otro lado del elevador y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la cinta de elevación. Se recomienda utilizar un taladro.

NO es necesario realizar un mantenimiento si:

- 1) se utiliza el descenso manual de emergencia del dispositivo Air por un motivo conocido,
- 2) la cinta no está dañada y
- 3) la unidad funciona con normalidad tras el procedimiento de descenso manual de emergencia.

El nuevo freno de seguridad contribuirá a ello haciendo que el descenso manual de emergencia genere menos tensiones en los componentes de la grúa.

Si la unidad ha tenido un fallo por un motivo desconocido y se ha utilizado el sistema de descenso manual de emergencia, es necesario realizar un mantenimiento.

Componentes electrónicos

Transporte y almacenamiento

Para un almacenamiento durante largos periodos, se recomienda dejar activado el botón de parada de emergencia (hacia fuera). La grúa puede almacenarse y transportarse a temperaturas entre -25 y 70 °C.

Funcionamiento

La grúa está diseñada para utilizarse en habitaciones con temperaturas estándares (de +5 a +40 °C).

Presión del aire: de 70 a 106 kPa.

Humedad relativa: 15 - 90 %

Tras el almacenamiento o transporte a otras temperaturas, deje la grúa en una habitación con una temperatura adecuada hasta que alcance una temperatura de funcionamiento segura.



Los equipos médicos eléctricos requieren precauciones especiales respecto a la compatibilidad electromagnética (CEM). Los equipos de radiocomunicaciones móviles o portátiles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos y deben mantenerse a una distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) de los componentes electrónicos de la grúa.

Baterías

Molift Mover 500 está disponible con una batería de 24 V SLA. La batería SLA tiene una vida útil prevista de aprox. 500 ciclos de carga.



Recargue la batería al recibirla y, después, cada seis meses para evitar que se estropee.



Las baterías deben desecharse como residuos especiales de acuerdo con las normativas y leyes locales. No las elimine con residuos comunes.

Indicador de mantenimiento y batería de la grúa

	Símbolo de llave inglesa / indicador de mantenimiento
	Símbolo de batería / indicador de batería

El sistema eléctrico dispone de una función de ahorro de energía que apagará el sistema eléctrico transcurridos cinco minutos desde la última operación. Esto apagará todos los indicadores. Para activar el sistema basta con pulsar cualquiera de los botones del panel.

Indicador de la batería del elevador

Cuando el indicador de batería multinivel esté en amarillo, la grúa tendrá la energía suficiente para realizar al menos un ciclo de elevación completo con carga máxima. Cuando la batería parpadee en color amarillo, solamente será posible bajar la percha.

Indicador de la batería	Nivel de batería	
	Verde	80 % o más
	Verde	80 - 60%
	Verde	60 - 40%
	Verde	40 - 20%
	Amarillo	20 % - 0 %
	Amarillo intermitente	15 - 0 %

Indicador de mantenimiento / inspección periódica

Los componentes electrónicos de la grúa registran el peso levantado y el número de elevaciones. Tras un determinado periodo de uso, se emite una señal para indicar que el equipo requiere mantenimiento.

Indicador de mantenimiento	Modo
Sin luz	No necesita mantenimiento
Amarillo	Inspección periódica necesaria
Verde intermitente	Solicitar mantenimiento
Rojo	Realizar mantenimiento

Alcance del mantenimiento

Cuando se hayan realizado varias ascensiones (5000 ascensiones con el peso máximo permitido [SWL]), el indicador de servicio se iluminará en rojo.

Acontinuación, el personal autorizado debe realizar un mantenimiento, incluida la inspección y sustitución de las piezas desgastadas.

Póngase en contacto con Etac o con su distribuidor local, o visite etac.com para encontrar un socio de servicio autorizado.

Carga

Molift Air 500 puede cargarse a través del mando con un cargador de baterías o a través del rail con el In Rail Charging (sistema de carga dentro del rail).

Indicador del cargador e indicador de la fuente de alimentación

Indicador del cargador	Modo
Verde intermitente	No conectado al elevador
Amarillo	Carga
Amarillo intermitente	Máximo de carga
Verde	Carga completa


Indicador de fuente de alimentación	Modo
Azul	Conectado a una toma eléctrica

Carga mediante mando

El cargador de baterías se enchufa a una toma eléctrica. Hay disponible un acoplamiento de montaje en pared para el mando.

Asegúrese de no dañar el cable. El cargador se puede conectar a la toma eléctrica en cualquier momento. Utilice únicamente cargadores Molift. El indicador del mando se encenderá cuando quede poca batería y sea necesario cargarla.


Cargador para el mando de Molift Air: N.º de ref.: 2540100

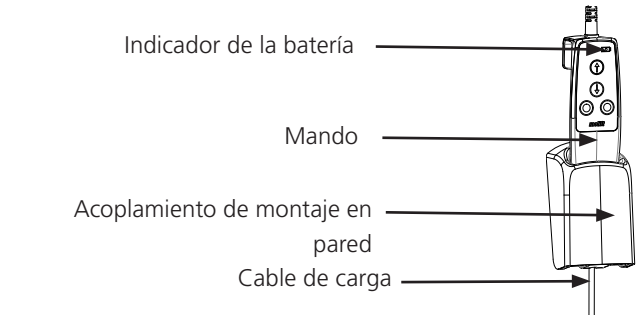


IRC (In Rail Charging) - carga dentro del rail

La grúa se carga a través de un cargador integrado en el motor de elevación para la carga continua a lo largo de todo el sistema de raíles.

El sistema IRC de Molift Air dispone de un cargador integrado conectado a la batería que debe estar instalado con el carro del IRC en un sistema de raíles con una cinta conductora. El carro del IRC está conectado al cargador de baterías dentro del sistema IRC de Molift Air. El carro del IRC siempre está en contacto con la cinta conductora dentro del rail. El suministro eléctrico del IRC está conectado a la cinta conductora mediante la conexión del IRC al final del rail y suministra electricidad al cargador de batería dentro del sistema IRC de Molift Air.

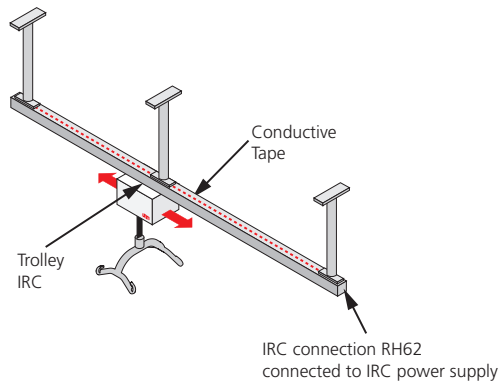

El IRC se adapta tanto al sistema de raíl individual como al sistema de raíl transversal.

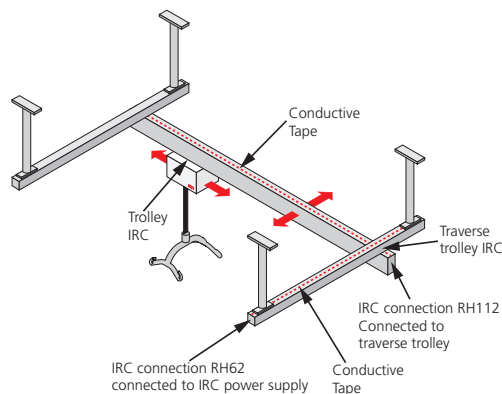

Fuente de alimentación de IRC
N.º de ref.: 2610119
Cargador 3844 CC/CC (pieza del IRC de Molift Air)
N.º de ref.: 2640200

Traslado

Planifique la elevación con antelación para asegurarse de que discorra de la forma más segura y fluida posible. Recuerde trabajar de manera ergonómica. Evalúe los riesgos y tome nota de ellos. El asistente es responsable de la seguridad del usuario.

Uso de las eslingas

Es importante que la eslinga se haya probado con el usuario y para la situación de elevación prevista.



Lea el manual de usuario de la eslinga antes de su uso.



No utilice eslingas dañadas o muy desgastadas.

Combinaciones de dispositivos y compatibilidad de eslingas

Cuando se combine un producto sanitario con otros productos o accesorios, la combinación no debe cambiar la finalidad prevista de los productos definida por el fabricante ni modificar los productos de modo que se vea afectado el cumplimiento de los requisitos aplicables o el uso seguro del producto.


Recomendamos usar eslingas Etac o Molift. La grúa puede combinarse con eslingas de otros fabricantes; visite www.etac.com para ver las declaraciones de compatibilidad.

La persona / empresa responsable de la combinación de los dispositivos debe garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables.


Protección eléctrica en combinación con eslingas: Parte aplicada de tipo BF.

Elevación y descenso


Al trasladar al usuario, colóquese a su lado. Compruebe que las extremidades no obstruyan el asiento, la cama, etc. Mantenga contacto visual con el usuario para que se sienta seguro.

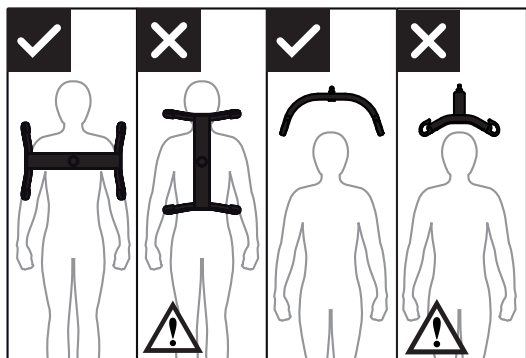

La percha de 4 puntos debe colocarse siempre cruzada sobre el usuario para evitar que este se salga accidentalmente de la eslinga.

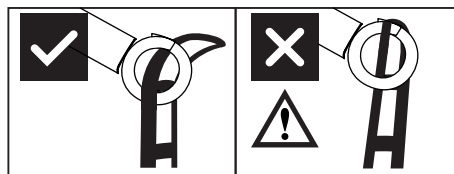


El diseño de los ganchos de la percha evita que la eslinga se desate involuntariamente cuando esté correctamente montada.

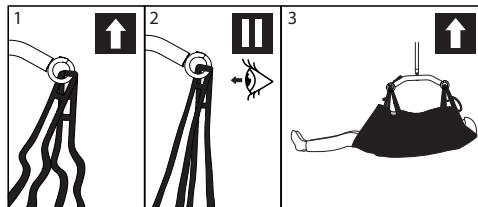

1. Compruebe que la eslinga está correctamente colocada alrededor del usuario y que los lazos de las correas están correctamente colocados en los ganchos de la percha.
2. Estire las correas de la eslinga sin elevar al usuario. Asegúrese de que los cuatro lazos de la eslinga están correctamente fijados para que el usuario no se pueda deslizar ni caer.
3. Eleve al usuario y realice el traslado.

Sensor de ángulo

El elevador cuenta con una opción de seguridad direccional que impide la elevación si el ángulo de la correa de elevación es demasiado inclinado.

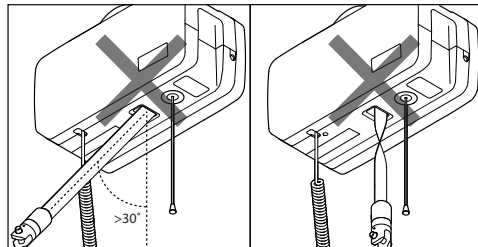

Si el elevador no responde al botón «arriba» del mando, puede que se deba a que el ángulo de la correa de elevación es demasiado inclinado o a que la cinta de elevación está doblada y el sensor está activado.


Accesorios

Enchufes y cables del cargador.

- Adaptador de conexión para la UE, n.º de ref. 2510365
- Adaptador de conexión para el Reino Unido, n.º de ref. 2510366
- Adaptador de conexión para EE. UU., n.º de ref. 2510367
- Adaptador de conexión para Australia, n.º de ref. 2510368
- Cable para la UE, n.º de ref. 1140105
- Cable para el Reino Unido, n.º de ref. 1140106
- Cable para EE. UU., n.º de ref. 1140104
- Cable para Australia, n.º de ref. 1140107
- Soporte de pared para el cargador, n.º de ref. 2610123

Perchas

Molift Air puede utilizarse con perchas de 4 o 8 puntos de anclaje.

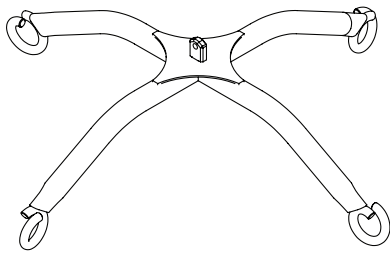

Percha de 4 puntos, acero
N.º de ref.: 2140003

Eslingas

Etac ofrece una amplia gama de eslingas para diferentes tipos de traslados. La eslinga Molift RgoSling se ha desarrollado para combinarse con un percha de 4 puntos con conexiones de bucle. Las eslingas también funcionan con una percha de 2 puntos. Consulte la lista de combinaciones en el manual de usuario de la eslinga para ver la combinación correcta de eslinga y percha. La serie Molift RgoSling está disponible en los tamaños XXS-XXL, en poliéster y malla de poliéster. En www.etac.com se puede encontrar la lista completa de eslingas y perchas.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
 Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
 Molift Rgosling Ambulating Vest
 Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
 Molift RgoSling Fabric Stretcher
 Molift RgoSling Repositioning


SWL 500
 Molift MediumBack Plus (L-XL)

Accesorios:


Molift Rgosling Extension Loops
 Art.nr.: 1721600
 Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Acoplamiento de transición

Algunos sistemas de rieles tienen acoplamientos de transición ① instalados. Se utilizan para transferir al usuario de un sistema de rieles a otro, por ejemplo, entre dos habitaciones diferentes.

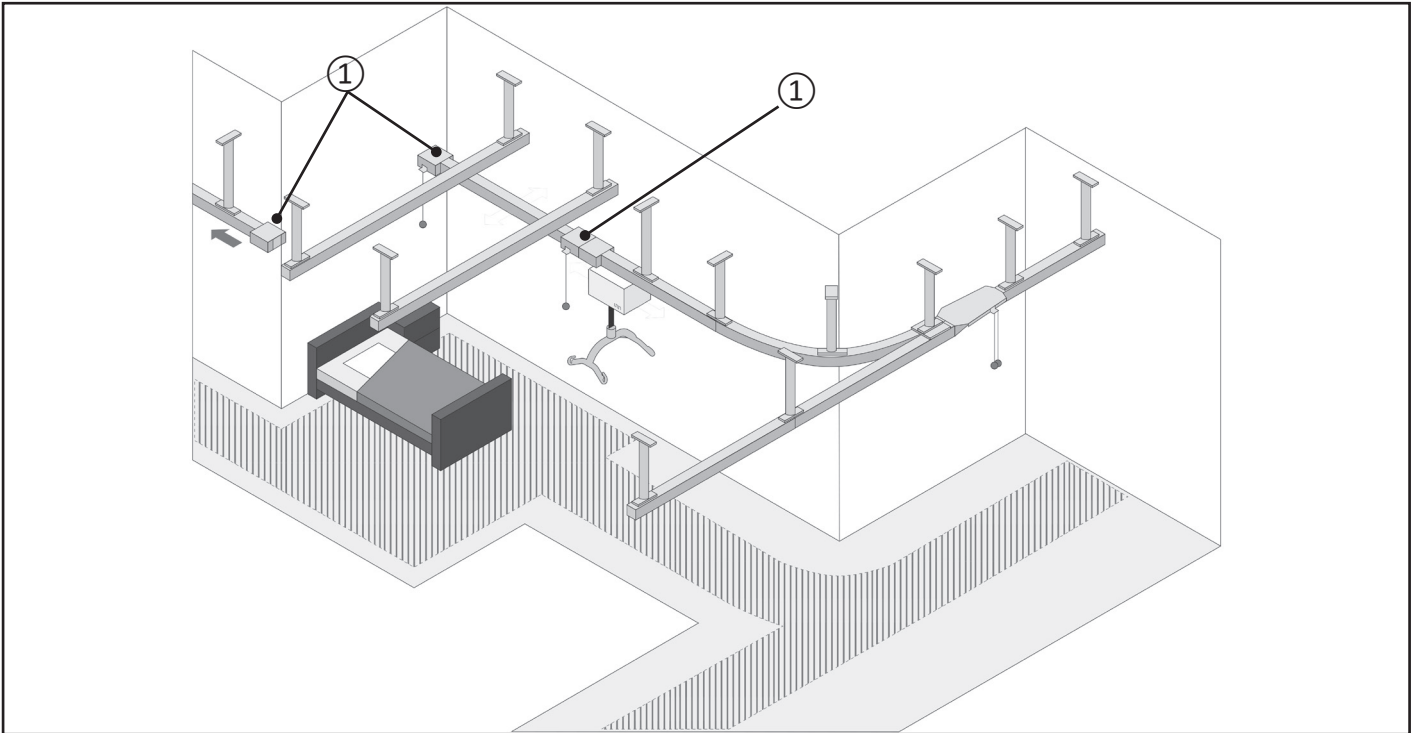


Componentes

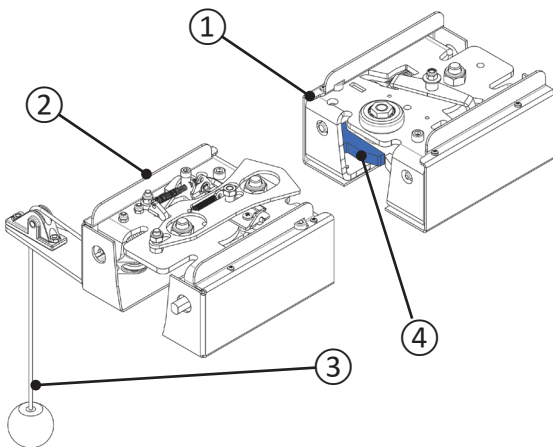


- ① Unidad de acoplamiento de transición
- ② Unidad de acoplamiento de transición con polea
- ③ Polea con pomo
- ④ Puerta (dos unidades por unidad)

Estados

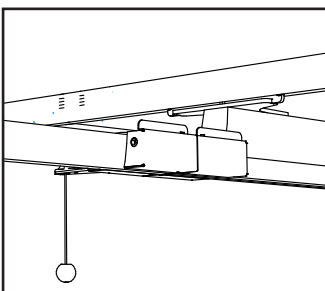


Conectado

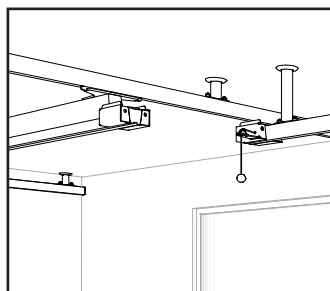

Desconectado


Desconectar

Antes de desconectar el acoplamiento de transición, asegúrese de que el carro esté como mínimo a 0,5 m de la unidad de acoplamiento de transición.

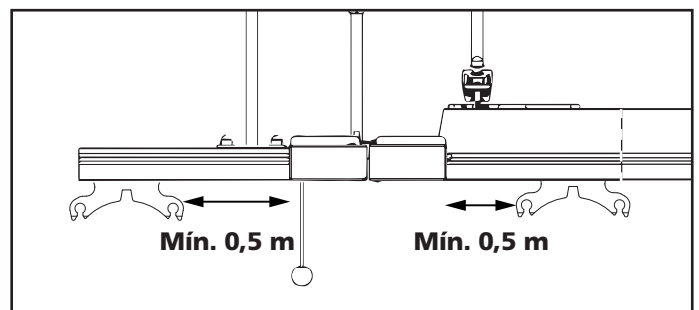

Tire de la polea hacia abajo hasta el tope.

Escuchará un sonido que confirma la desconexión.

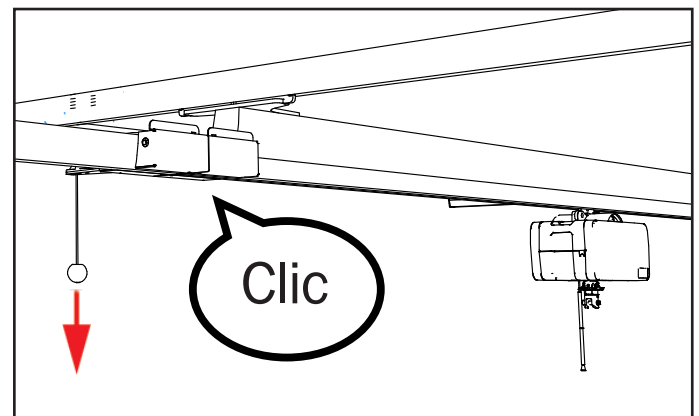


El acoplamiento de transición está ahora desconectado.



Transferencia - acoplamiento de transición desconectado

No realice ninguna transferencia de usuario antes de haber comprobado lo siguiente:


Ambas puertas ① son visibles (unidad de acoplamiento de transición vista desde abajo).

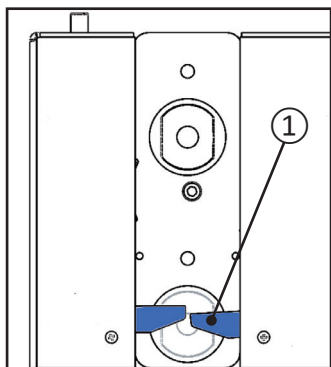

El perno de bloqueo ② **no** debe ser visible cuando se desconecta el acoplamiento.

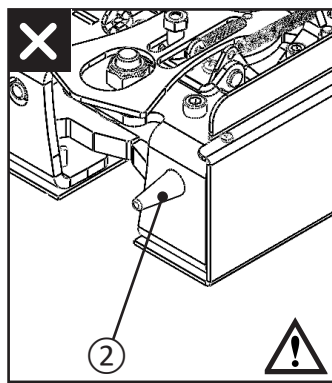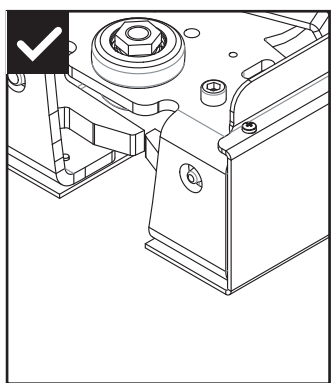


Empuje el raíl transversal en la dirección deseada.

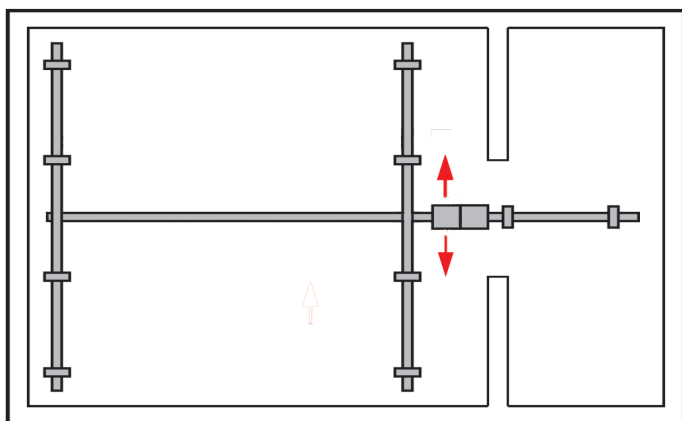


Conectar

Antes de conectar las unidades de acoplamiento de transición, asegúrese de que el carro esté como mínimo a 0,5 m de la unidad de acoplamiento de transición.

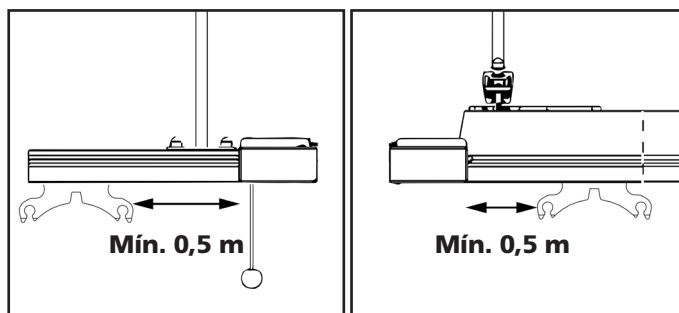

Empuje el raíl transversal hacia el raíl fijo, de modo que las unidades de acoplamiento de transición se conecten, y oiga un sonido.

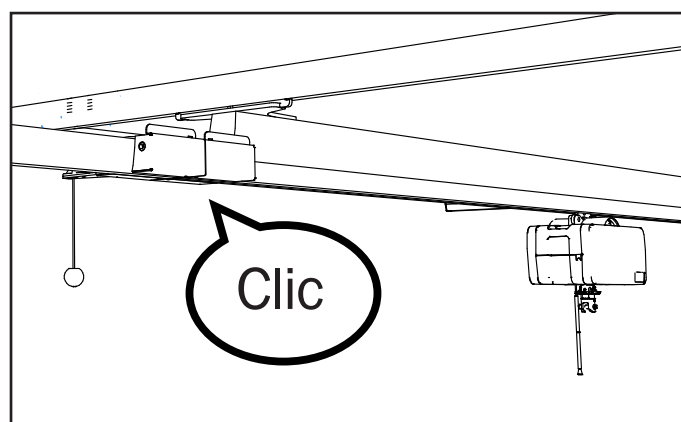

Transferencia - acoplamiento de transición conectado

No realice ninguna transferencia de usuario antes de haber comprobado que las unidades de acoplamiento de transición están completamente bloqueadas entre sí. Debe ser imposible separar los rieles con la mano. Ahora se puede transferir al usuario de un riel a otro.



Acoplamiento transversal

Acoplamiento transversal, inspección después de la instalación


Enganche el acoplamiento transversal y compruebe, con el puente-grúa cargado con un mínimo de 75 kg, que el puente-grúa se mueva libremente en ambas direcciones del acoplamiento transversal.

Enganche/desenganche el acoplamiento transversal 10 veces y pase a través del acoplamiento transversal 10 veces sin detenerse. Compruebe que los pasadores de bloqueo de ambas mitades del acoplamiento vuelvan libremente a la posición inferior solo por la fuerza del muelle.

Inserte un carro de grúa en el riel. Enganche el acoplamiento transversal. Alinee el extremo del carro con el extremo de la mitad del acoplamiento. Intente separar el acoplamiento transversal. El mecanismo de seguridad debe evitarlo. Repita la prueba para la otra mitad del acoplamiento.

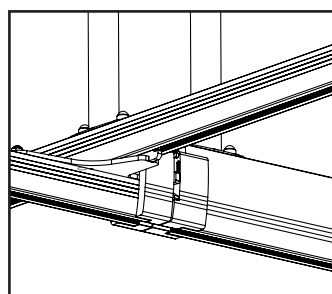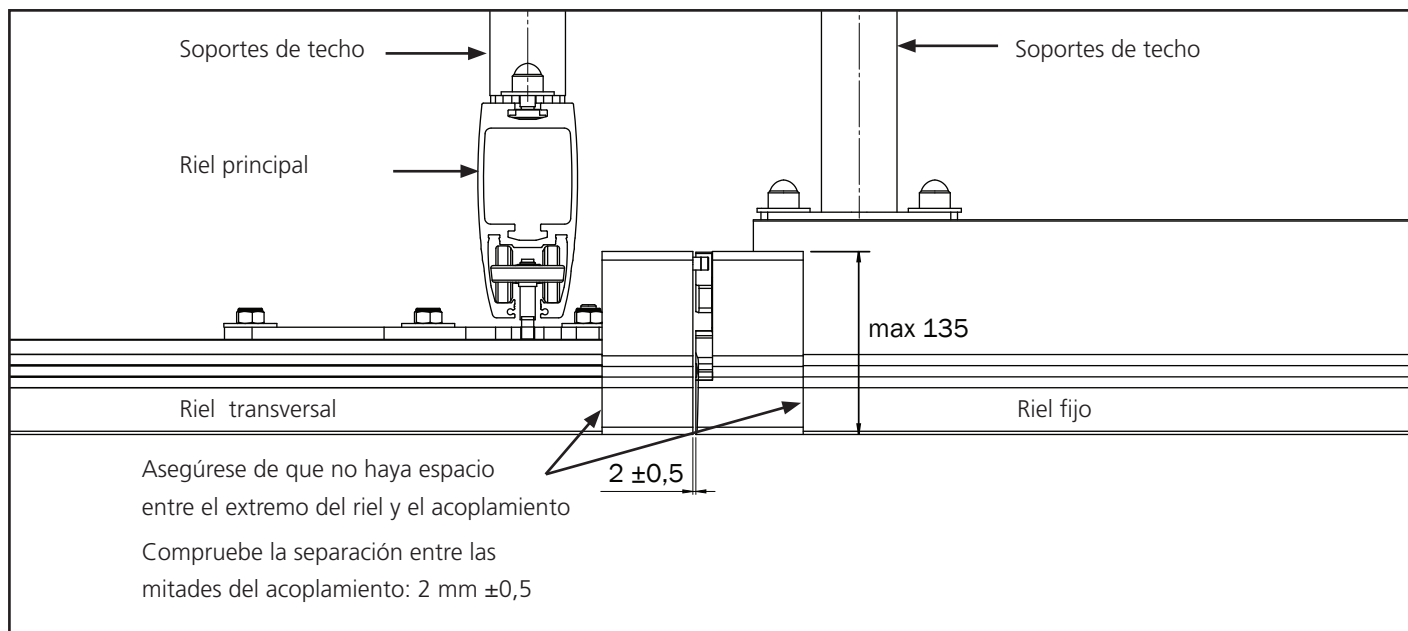

Conectado

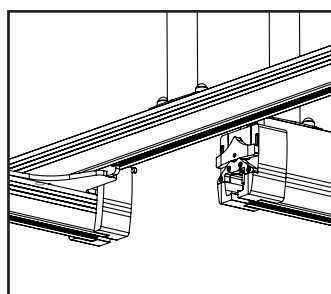


Desconectado

Transferencia -acoplamiento transversal conectado
Ahora se puede transferir al usuario de un riel a otro.

Colocación de las etiquetas

La siguiente etiqueta se incluye en la caja con el acoplamiento transversal. Antes de su uso, coloque la etiqueta en el riel transversal como se muestra a continuación. Asegúrese de que el lado rojo esté colocado más cerca del acoplamiento transversal.

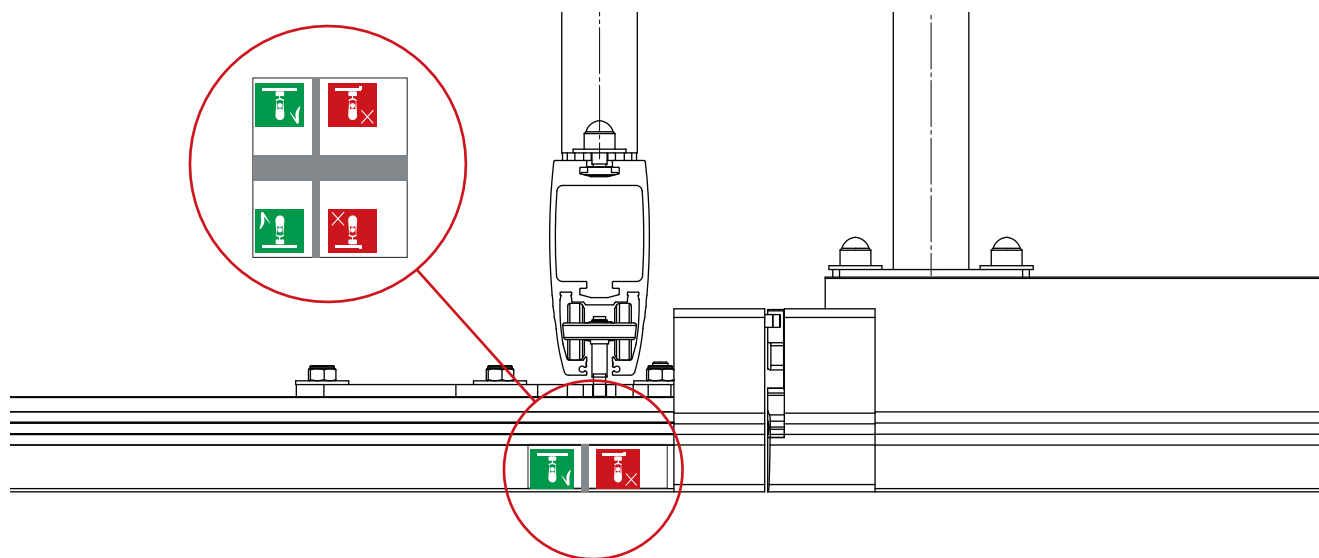

Después de pegar la etiqueta, corte y retire la línea gris gruesa. Esto permite que el carro se mueva libremente hacia adelante y hacia atrás a lo largo del riel.

Explicación de los símbolos



Pictograma blanco sobre fondo verde.
Este símbolo indica la colocación óptima de la grúa para facilitar la conexión del acoplamiento.



Pictograma blanco sobre fondo rojo.
Este símbolo indica una colocación subóptima de la grúa, lo que dificulta la conexión del acoplamiento.

Limpieza / desinfección

Limpie el producto con regularidad. Limpie las superficies con un paño húmedo utilizando un detergente con pH neutro adecuado. No utilice disolventes ni líquidos fuertes, podría dañar las superficies de la grúa. Cuando sea necesario desinfectar, utilice alcohol isopropílico. Evite utilizar productos de limpieza abrasivos. Compruebe la parada y el descenso de emergencia después de la limpieza. No debe exponer la grúa a agua corriente. Al instalar en ambientes con riesgo de humedad, es importante que el sistema de rieles y el motor se laven y sequen periódicamente. Una guía completa para reducir el riesgo de corrosión está disponible a pedido.



Asegúrese de que las etiquetas no se hayan dañado ni eliminado con la limpieza.



El elevador y el mando tienen una clase de protección IP24 que indica: >12,5 mm de protección frente al acceso a partes peligrosas, y que la caída del agua en forma pulverizada desde cualquier ángulo superior a 60° desde la vertical no daña el equipo,



El cuidador y el paciente están expuestos a los siguientes materiales: El polipropileno y el poliéster (eslingas*), policarbonato/ABS (mando y cubierta del elevador), aluminio recubierto de pintura, zinc con revestimiento de polvo (perchas).

* = Piezas aplicadas



En casos poco frecuentes el cuidador o el paciente expuestos a polipropileno y poliéster pueden tener reacciones alérgicas como irritación cutánea, picazón y sensibilidad cutánea.

Ajustes

Tras la limpieza y el procedimiento de instalación, realice una inspección periódica y utilice la lista de comprobación tras la instalación para reajustar la grúa.

Reciclaje

Consulte las «Instrucciones de reciclaje» para saber cómo desechar correctamente el producto. Están disponibles en www.etac.com.

Piezas de recambio

Puede solicitar una lista de piezas de recambio.

Alcance de la inspección periódica

La inspección periódica consiste en un examen visual (especialmente de la estructura de carga de la grúa y el mecanismo de elevación con accesorios, frenos, controles, dispositivos de seguridad y dispositivos de soporte de personas), de acuerdo con el informe de inspección periódica de Molift Air 500.

Visite www.etac.com.



La grúa debe dejar de utilizarse inmediatamente y señalarse como «fuera de servicio» si surge cualquier problema con ella que pueda poner en peligro la seguridad de alguien. No utilice la grúa hasta que esté reparada. Póngase en contacto con el proveedor/distribuidor local de Molift/Etac para informar de cualquier problema.

La inspección periódica debe realizarse una vez al año o con más frecuencia si así lo requieren las normativas locales. La inspección debe realizarla personal de mantenimiento autorizado por Etac. Puede ponerse en contacto con Etac a través de molift@etac.com para obtener formación y autorización o recomendaciones sobre los socios de mantenimiento aprobados.

Al llevar a cabo la inspección periódica, el inspector debe rellenar el informe de inspección del Molift Air. La persona o las personas responsables del mantenimiento de la grúa deben conservar los informes. Si la inspección revela defectos y daños, habrá que retirar la grúa y marcarla como «fuera de servicio» hasta que se repare.

Solución de problemas

Problema	Causas/acciones posibles
La grúa no responde al mando	La parada de emergencia está activada. Desactívela empujando el botón hacia adentro.
	Los componentes electrónicos de la grúa se han sobrecalentado. Espere a que se enfrien.
	El mando no está enchufado correctamente. El mando, el enchufe o el cable pueden estar rotos y debe sustituirlos.
La grúa no responde al botón «arriba» del mando	El sensor de ángulo de la correa de elevación está activado. Ajuste la correa de elevación o mueva el elevador para reducir el ángulo de la correa de elevación.
Al utilizar el descenso eléctrico de emergencia, la banda de elevación asciende	La banda de elevación ha salido por completo y se ha enrollado en la dirección equivocada. Utilice el descenso manual de emergencia. Ordene la reparación de la grúa.

Belangrijk

In deze handleiding staan belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over het gebruik van de sling en de accessoires.




Dit symbool geeft belangrijke informatie over de veiligheid aan. Volg deze instructies zorgvuldig.



Lees de gebruikershandleiding vóór gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de gebruikershandleiding volledig hebt begrepen voordat u de apparatuur gebruikt.

Op www.etac.com kunt u de laatste versie van de documentatie downloaden.

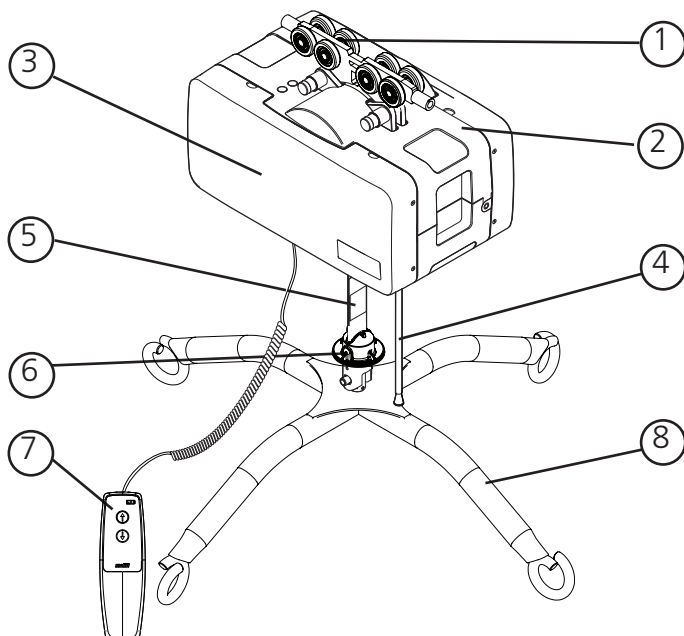Molift Air 500**Onderdelen van de tilvoorziening:**

1. Kraankat
2. Tilvoorziening
3. Zijkappen
4. Noodstop/nooddaling
5. Tilband
6. Snelontgrendelpen
7. Handbediening
8. Tiljuk

Over Molift Air

De Molift Air is een sterke, soepel werkende plafondlift waarmee patiënten en bewoners van zorginstellingen comfortabel en veilig kunnen worden verplaatst.

De Molift Air heeft een zeer lichte motor, die in combinatie met het snelontgrendelsysteem eenvoudig kan worden gemonteerd en onderhouden.

Algemeen**CE-verklaring**

Het product en de bijbehorende accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, voldoen aan Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 – als medisch hulpmiddel, risicoklasse I.

Het product is getest en goedgekeurd door een externe instantie overeenkomstig de normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 en EN/ISO 10535:2021.

Elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Gebruiksvoorwaarden

Het tillen en verplaatsen van een cliënt houdt altijd een bepaald risico in. Het railsysteem moet door gecertificeerd personeel worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de juiste installatie-instructies. De lift is niet bedoeld voor gebruik door de cliënt die wordt getild.

Aanpassingen en gebruik van onderdelen van andere fabrikanten

We raden u aan om uitsluitend Molift-onderdelen en -reserveonderdelen te gebruiken. Als er aanpassingen aan het product worden uitgevoerd, vervalt de conformiteitsverklaring en kunnen er geen garantieclaims bij Etac worden ingediend. Etac is niet aansprakelijk voor fouten of ongevallen door het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten. Het kan onveilig zijn om accessoires, afneembare onderdelen en materialen te gebruiken die niet in deze gebruikershandleiding worden genoemd.



Alleen gecertificeerd personeel mag de tilvoorziening of de accessoires openen om onderhoud of reparaties uit te voeren. Er is kans op letsel door draaiende onderdelen en elektrische schokken.

**Garantieverklaring**

Wij bieden op onze producten een garantie van twee jaar tegen materiaal- en fabricagefouten.

Eén jaar garantie op de batterijen.

Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden.

Inleiding

De persoon die als 'de gebruiker' wordt aangeduid, is de persoon die op het product zit. 'De verzorger' is de persoon die het product manoeuvreert.

Beoogd doel

De plafondlift is een hulpmiddel dat bedoeld is om een functiebeperking als gevolg van een ongeluk of een beperking te verlichten of te compenseren. Het hulpmiddel is ontworpen voor personen die vanwege een verminderde mobiliteit of fysieke kracht niet in staat zijn om op te staan en zichzelf te verplaatsen naar/vanuit een bed, de vloer, een rolstoel, een stoel, een toilet of soortgelijk.

Beoogde gebruiker

Het hulpmiddel kan worden gebruikt voor kinderen, volwassenen en ouderen die ondersteuning nodig hebben bij het tillen en verplaatsen, of bij de looptraining, binnen een railsysteem.

Beoogde omgeving

Voor gebruik binnenshuis binnen een railsysteem in de acute en langdurige zorg en thuiszorg.

Indicaties

Voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben bij het tillen en verplaatsen, of tijdens de looptraining, bv. personen met beperkte mobiliteit die tijdens transfers lichaamsondersteuning nodig hebben. Dit is geen complete lijst.

De gebruikersgroep voor het hulpmiddel is gebaseerd op individuele gezondheid en mobiliteit, en niet op een specifieke diagnose of leeftijd.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat de tilband geschikt is voor de gebruiker en het tiljuk.


Opleidingseisen

Alleen verzorgers die de gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen, mogen het hulpmiddel gebruiken.

Productidentificatie

Productlabel

In de streepjescode van het product staan het artikelnummer, het serienummer en de productiedatum.

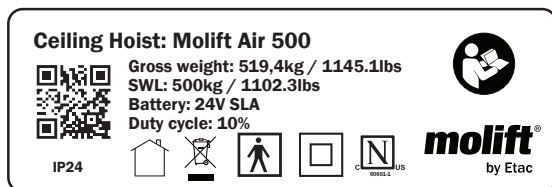

Waarschuwinglabels en symbolen

Toelichting op de symbolen die op het product worden gebruikt:



Klasse II dubbel geïsoleerd



CE-markering



Zie de gebruikershandleiding



Alleen voor gebruik binnenshuis



Max gebruikersgewicht



Niet weggooien bij huishoudelijk afval



Noodstop/
nooddaling



Servicelampje



Acculampje



Symbool zeskant voor handbediende nooddaling



Markering certificeringsinstantie



Fabrikant



Productiedatum



Catalogusnummer



Serienummer



Medisch hulpmiddel



Unieke hulpmiddelidentificatie



UKCA-markering



Onderdeel van type BF

Technische gegevens

Veilige werkbelasting (VWB)

Molift Air 500: 500 kg (1102 lbs)

Gewicht van eenheid:

Onderstel incl. accu, excl. tiljuk:

14,1 kg (31 lbs)

4-punts tiljuk: 5,3 kg (11,7 lbs)

Accu:

Art: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Acculader:

Oplader voor handbediening, Mascot - type 3743

Art.nr.: 2540100

100-240 VAC, 50-60 Hz max 0,5 A

Stroomsterkte 0,56 A

IRC-voeding, Mascot - type 3721

Art.nr.: 2610119

Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz max 1,0A

Output: 24 VDC 1,75A/42W

IRC-oplader, Mascot - type 3844

Art.nr.: 2640200

In: 20-30 V DC 1,3 A

Stroomsterkte 0,5 A

Tilsnelheid

60 mm/sec. (2,36 inch/sec.)

met een belasting van 75 kg (165,35 lbs)

Beschermingsklasse

Handbediening IP24

Liftmotor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Kracht op knop

Knoppen op handbediening: 3,4 N

Materiaal:

Aluminium, plastic, staal

Verwachte levensduur:

De tilvoorziening heeft een verwachte levensduur van 30.000 cycli VWB of 15 jaar. De rails hebben een verwachte levensduur van 30 jaar.

Afmetingen:

L x B x H (lengte, breedte, hoogte zonder kraankat)

36 x 24,6 x 19,5 cm


(14,2 x 9,7 x 7,7 inch)

A (tilbereik)

300 cm (118 inch)

B (Minimale afstand van het plafond tot het koppelpunt van de tiljukstang) 32,7 cm (12.7/8 inch)

Voor uitgebreide informatie over de technische gegevens, de uitvoering van service en reparatie, zie de technische handleiding.

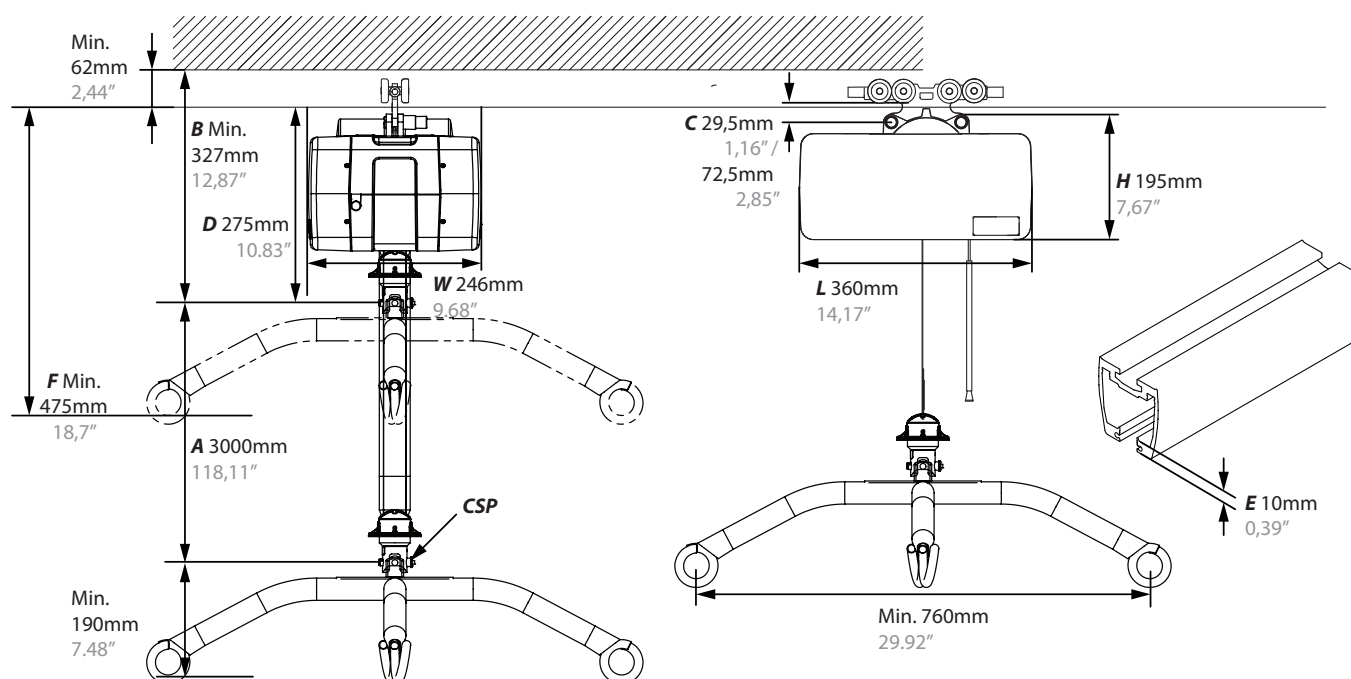

Installatie

Op de tilvoorziening wordt een Veilige werkbelasting (VWB) aangegeven. Deze mag de maximale belastingscapaciteit van het railsysteem niet overschrijden.




Het railsysteem mag alleen door gecertificeerd personeel worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de juiste installatie-instructies.



Voer na de installatie altijd eerst een volledige controle aan de hand van de controlelijst uit voordat u de tilvoorziening gebruikt.

De kraankat installeren

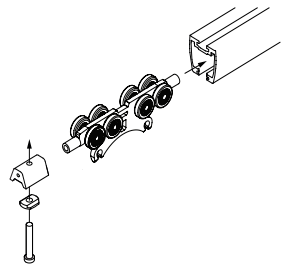

De kraankat in het railsysteem monteren. Verwijder de aanslag en plaats de kraankat in de rail. Monteer de aanslag en zorg dat deze stevig is bevestigd. Zie BM4401 voor informatie over de installatie.




Zorg ervoor dat er in alle uiteinden van het railsysteem aanslagen worden gemonteerd voordat u de tilvoorziening gebruikt!

De lift installeren




Wees voorzichtig bij werksituaties boven het hoofd. We raden twee of meer installateurs aan om te voorkomen dat tijdens de installatie het evenwicht wordt verloren en er iets wordt opgelopen!

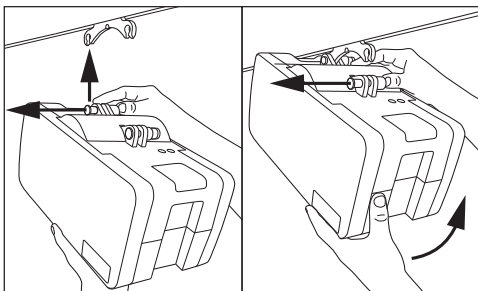

De lift op de kraankat monteren. U hebt hierbij geen gereedschap nodig. De lift heeft twee aansluitpunten:

Sluit eerst één punt aan. Druk de knop helemaal in en plaats de lift in het aansluitpunt op de kraankat. Laat de knop los en zorg dat deze duidelijk groen is voordat u het volgende punt aansluit.

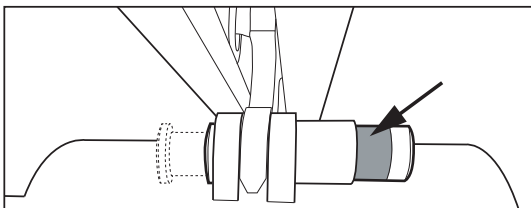

Zorg dat beide knoppen voor het aansluitpunt weer helemaal in de oorspronkelijke positie staan en duidelijk groen zijn na de installatie. Het koord en de buis voor de daalfunctie in noodgeval kunnen op de juiste lengte (hoogte) worden ingesteld door de buis en het koord af te snijden.

Installatie

Gebruik deze controlelijst om te controleren of de tilvoorziening goed is geïnstalleerd en veilig werkt voordat u de voorziening gaat gebruiken.

- ☐ Aanslagen worden na het monteren van de kraankat in de rail bevestigd zoals beschreven in BM4401
- ☐ Zorg dat de tilvoorziening goed in de rail is bevestigd en dat alle onderdelen van de lift goed zijn bevestigd.
- ☐ Gebruik de lift om een belasting op te tillen (60-80 kg).
- ☐ Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen.

Hoe gebruikt u de Molift Air?

Algemene veiligheidsmaatregelen

Gebruik alleen accessoires en slings die aan de cliënt, diens handicap, lengte en gewicht, en het type transfer zijn aangepast.

Verhouding werking/onderbreking - werkcyclus.

De Molift Air 500 mag niet langer dan 2 minuten (bij maximale belasting) continu draaien en minimaal 18 minuten rusten. Gebruikscyclus 10%. (Periodiciteit volgens standaard ISO-EN 10535)



Plaats de tilvoorziening niet op een manier die het moeilijk maakt om de netvoedingskabel los te maken. Om het systeem spanningsvrij te maken trekt u de netvoedingskabel uit het stopcontact.



Als de maximale belasting (VWB) van het tiljuk van de lift en de ondersteuningseenheid voor het lichaam niet hetzelfde zijn, dan moet altijd de laagste maximale belasting worden aangehouden



Liften van Molift mogen uitsluitend worden gebruikt voor het optillen van cliënten. Gebruik de lift nooit om voorwerpen op te tillen of te verplaatsen.

Vóór gebruik / dagelijkse controle


Controles die dagelijks of vóór elk gebruik moeten worden uitgevoerd door de zorgverlener:

- ☐ Controleer of de lift en het railsysteem geen zichtbare schade, defecten of vervormingen vertonen.
- ☐ Zorg ervoor dat de aansluiting van het tiljuk en alle afneembare onderdelen goed zijn aangesloten en bevestigd
- ☐ Test de noodstopknop en de nooddaalfunctie.
- ☐ Controleer of het controlelampje voor de accu of het service-lampje niet brandt
- ☐ Controleer of de tilband geen duidelijk zichtbare schade of rafels vertoont.
- ☐ Test de functies van de lift en controleer of de lift geen abnormale geluiden maakt.

Als er fouten of gebreken zijn, moet de lift buiten bedrijf gesteld worden en worden voorzien van een label "buiten werking". Er mogen geen onderdelen van de Molift Air worden onderhouden of gerepareerd terwijl deze in gebruik zijn bij een patiënt.

Handbediening


De handbediening heeft 2 knoppen voor het tillen en dalen of 4 knoppen als de tilvoorziening is voorzien van een aandrijving. De handbediening heeft een controlelampje dat gaat branden als de accu bijna leeg is en de lift moet worden opgeladen

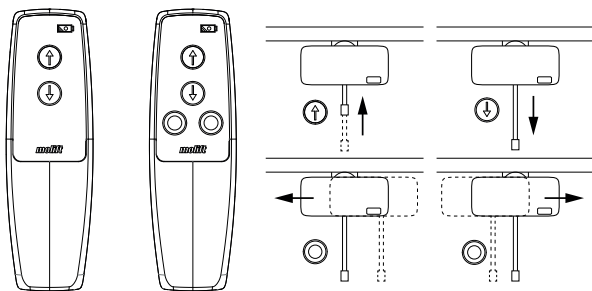

Trek niet aan de handbediening om de tilvoorziening langs de rail te verplaatsen.




De lift werkt niet als de handbediening op een oplader is aangesloten. Koppel de handbediening los van de oplader voordat u de lift bedient.

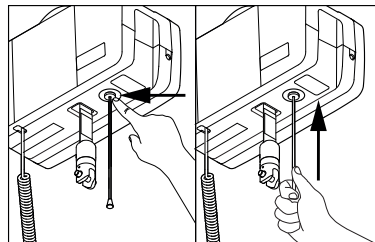

Duw met een vinger of gebruik de buis op het koord om de knop terug te duwen en de noodstop te resetten.


Elektrische nooddaling

Trek en houd aangetrokken om te beginnen met dalen. Houd vast totdat de cliënt omlaag is gebracht en uit het tiljuk kan worden losgehaald.

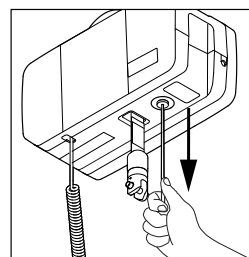

Uitsluitend voor gebruik in noodgevallen wanneer de handbediening niet werkt!

Montage van het tiljuk

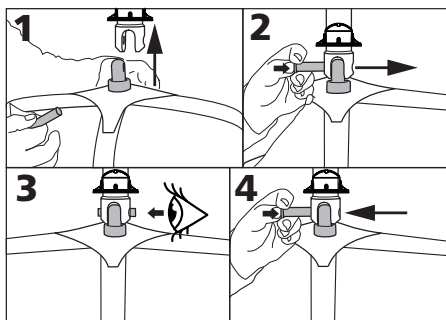


1. Lijn het tiljuk uit met het aansluitpunt.
2. Druk op de knop op de vergrendelpen en steek deze helemaal naar binnen.
3. Zorg ervoor dat de vergrendelpen stevig is vastgezet
4. Houd de knop op de vergrendelpen ingedrukt, en trek om de vergrendelpen te verwijderen.





Noodstop/nooddaling

Noodstopknop

De noodstop activeren en resetten:

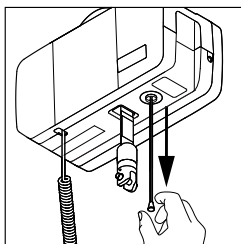

Trek aan de knop om de noodstop te activeren. De knop komt naar buiten en de tilvoorziening stopt.

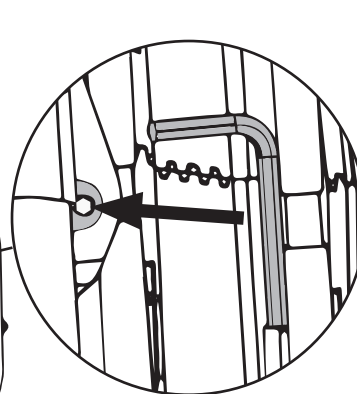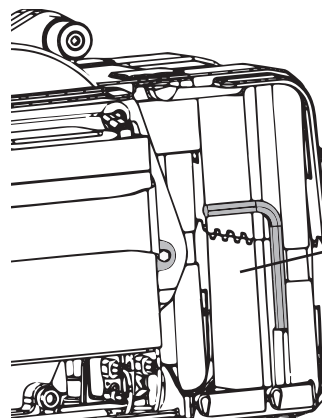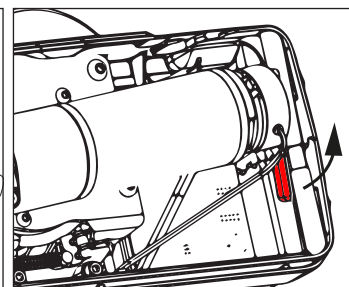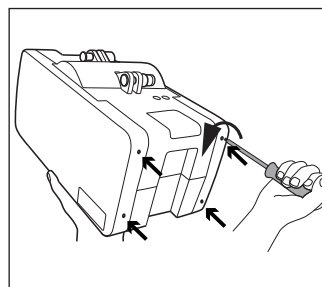

gebruik een schroevendraaier of boormachine voor alle 8 schroeven (4 aan elke kant) om de zijafdekkingen te openen. Draai de rode hendel 'Brake Release' (rem vrijgeven) naar omhoog. Zoek het gereedschap aan de andere zijde van de tilvoorziening en draai het linksom om de tilband te laten zakken. We raden u aan een elektrische boor te gebruiken.

Er is GEEN service nodig in de volgende gevallen:

- 1) de handbediende nooddaling van de Air wordt om een bekende reden toegepast
- 2) de band is onbeschadigd
- 3) de eenheid werkt normaal nadat u de handbediende nooddaling hebt uitgevoerd.

De nieuwe removerbrugging helpt daarbij door handbediende nooddalingen minder belastend te maken voor de liftonderdelen. Wanneer zich om onbekende redenen een storing heeft voorgedaan en de handbediende nooddaling is toegepast, is service vereist.

Elektronica

Transport en opslag

Bij langdurige opslag raden wij u aan om de noodstopknop te activeren (uittrekken). De lift kan worden opgeslagen en vervoerd bij temperaturen tussen -25 en 70 °C.

Gebruik

De lift is bedoeld voor gebruik bij normale kamertemperatuur (+5 tot +40 °C).

Luchtdruk: 70 - 106 kPa

Relatieve vochtigheid: 15 - 90 %

Na opslag of transport bij andere temperaturen moet u de lift in een ruimte met een geschikte temperatuur plaatsen, totdat de lift een veilige werktemperatuur bereikt.



Bij elektrische medische apparatuur moeten speciale maatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) worden genomen. Draagbare of mobiele radiocommunicatieapparatuur kan elektrische medische apparatuur storen en moet op minimaal 30 cm (12 inch) van de elektronica van de lift worden gehouden.

Accu's

De Molift Air 500 is verkrijgbaar met een loodzuuraccu van 24V. De loodzuuraccu heeft een verwachte levensduur van ongeveer 500 laadcycli.



Laad de accu direct na ontvangst op en vervolgens om de zes maanden, om storingen te voorkomen.



Accu's moeten als speciaal afval en volgens de plaatselijke regels en voorschriften worden weggegooid. Niet weggooien bij huishoudelijk afval

Accu- en onderhoudslampje op lift

	Symbool sleutel / servicelampje
	Symbool accu / acculampje

Het elektrische systeem heeft een energiebesparende functie die het elektrische systeem uitschakelt vijf minuten na de laatste handeling. Alle lampjes gaan uit. Het systeem wordt geactiveerd door een van de bedieningsknoppen op de handbediening in te drukken.

Acculampje op de lift

Als het acculampje geel is, heeft de lift nog voldoende vermogen om ten minste één volledige tilcyclus met maximale belasting uit te voeren. Wanneer het acculampje geel knippert, kan het tiljuk alleen nog omlaag worden gebracht.

Acculampje	Accuniveau
	Groen
	Groen
	Groen
	Groen
	Geel
	Geel knipperend
	80% of meer
	80 - 60%
	60 - 40%
	40 - 20%
	20% - 0%
	0%

Onderhoudslampje / periodieke inspectie

De elektronica van de lift registreert het gewicht en hoe vaak de lift is gebruikt. Na een bepaalde periode wordt met een signaal aangegeven dat de lift een onderhoudsbeurt nodig heeft.

Onderhoudslampje	Indicatie
Brandt niet	Geen onderhoud nodig
Geel	Periodieke inspectie vereist
Groen knipperend	Onderhoud regelen
Rood	Onderhoud uitvoeren

Onderhoudswerkzaamheden

Wanneer de takel een bepaald aantal keer heeft gehesen (5000 keer tillen met het maximaal toegestane gewicht (VWB)), gaat de service-indicator rood branden.

Een onderhoudsbeurt moet dan worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met inbegrip van de inspectie en vervanging van versleten onderdelen.

Neem contact op met Etac of uw plaatselijke dealer, of ga naar etac.com om een erkende servicepartner te vinden.

Opladen

Molift Air 500 kan worden opgeladen via handbediening met een acculader of via de rail met In Rail Charging.

Lampje op de lader en lampje van de voedingsspanning


<i>Laadlampje</i>	<i>Indicatie</i>
Groen knipperend	Niet aangesloten op de tilvoorziening
Geel	Opladen
Geel knipperend	Bijladen
Groen	Volledig opgeladen

<i>Lampje van de voedingsspanning</i>	<i>Indicatie</i>
Blauw	Aangesloten op het stopcontact

Opladen via handbediening

De acculader is in een stopcontact gestoken. Er is aan de wand gemonteerde docking voor handbediening beschikbaar. Voorkom dat de kabel beschadigd raakt. De lader mag continu op het stopcontact zijn aangesloten. Gebruik uitsluitend laders van Molift. De handbediening heeft een controlelampje dat gaat branden als de accu bijna leeg is en de lift moet worden opgeladen.


Lader voor handbediening Molift Air: Art.nr.: 2540100

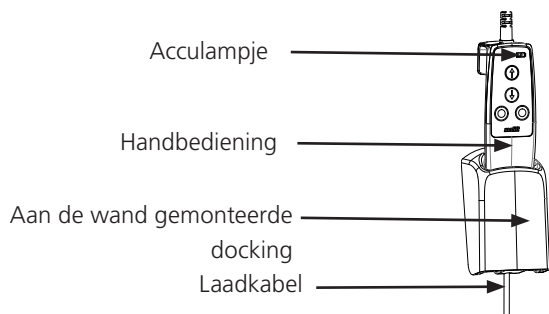


IRC (In Rail Charging)

De lift wordt opgeladen via een ingebouwde oplader in de liftmotor voor continu opladen over de hele lengte van het railsysteem.

Molift Air IRC heeft een ingebouwde oplader die aangesloten is op de accu. Deze moet met de IRC-kraankat in een railsysteem worden geïnstalleerd met geleidingstape. De IRC-kraankat is aangesloten op de acculader binnenin de Molift Air IRC. De IRC-kraankat staat altijd in contact met de geleidende band binnenin de rail. De IRC-stroomtoevoer is aangesloten op de geleidende band via een IRC-aansluiting aan het einde van de rail en levert stroom aan de acculader binnenin de Molift Air IRC.

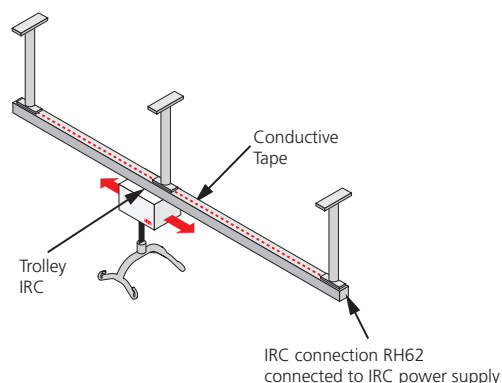

IRC past op systemen met zowel enkele rail als dwarsstuk.

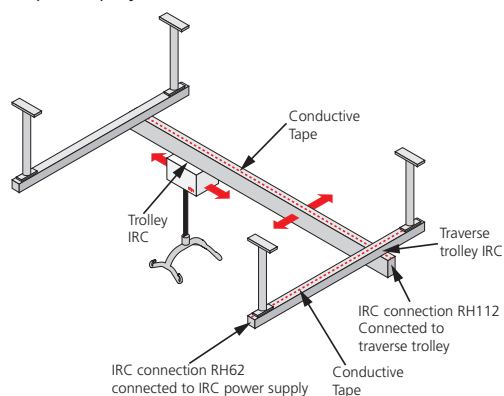

IRC-voeding

Art.nr.: 2610119

Lader 3844 DC/DC (onderdeel van Molift Air IRC)

Art.nr.: 2640200

Transfer

Plan de tilhandeling tijdig zodat die zo veilig en gemakkelijk mogelijk verloopt. Vergeet niet om ergonomisch te werken. Beoordeel de risico's en maak aantekeningen. De assistent is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruiker.

Slings gebruiken

Het is belangrijk dat de sling eerst met de individuele gebruiker en voor de bedoelde tilsituatie wordt getest.



Lees de gebruikershandleiding voor de sling voordat u deze gebruikt.



Gebruik geen beschadigde of zeer versleten slings.

Combinaties van hulpmiddelen en compatibiliteit van tilbanden

Als het medische hulpmiddel met andere hulpmiddelen of accessoires wordt gecombineerd, mag deze combinatie het door de fabrikant gedefinieerde doel van de hulpmiddelen niet veranderen of de hulpmiddelen zodanig wijzigen dat naleving van de toepasselijke vereisten of het veilige gebruik van het hulpmiddel worden beïnvloed.


We raden u aan om alleen tilbanden van Etac of Molift te gebruiken. De tilift kan worden gecombineerd met tilbanden van andere fabrikanten. Ga naar www.etac.com voor compatibiliteitsverklaringen.

De persoon die/het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de combinatie van de hulpmiddelen moet ervoor zorgen dat aan de toepasselijke vereisten wordt voldaan.


Elektrische bescherming in combinatie met tilbanden: Onderdeel van type BF.

Tillen en laten zakken


Als de cliënt wordt verplaatst, moet u naast de cliënt staan die u gaat optillen. Zorg ervoor dat armen en benen de stoel, het bed enz. niet kunnen belemmeren. Houd oogcontact met de cliënt zodat hij of zij zich veilig voelt.

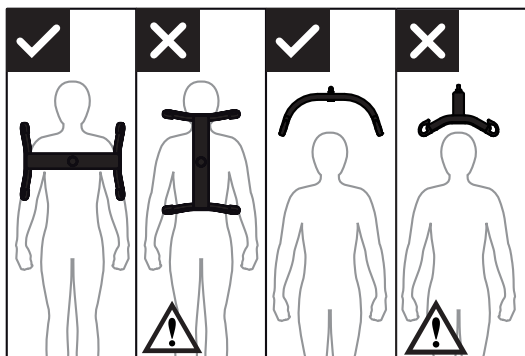

Het 4-punts tiljuk moet altijd tegenover de cliënt worden geplaatst, zodat de cliënt niet uit de sling kan glijden.

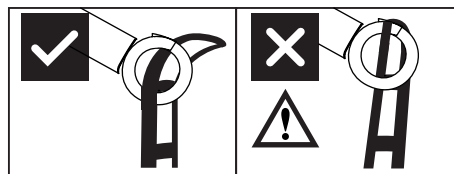


De haken van het tiljuk zijn zo ontworpen dat de sling niet per ongeluk kan loskomen als die correct is bevestigd.

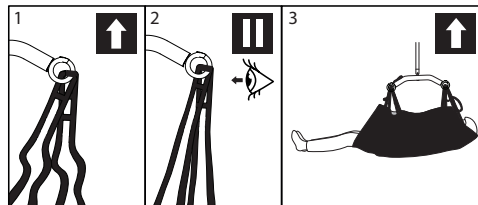

1. Controleer of de cliënt goed in de sling is geplaatst en of de bandlussen op de juiste wijze aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
2. Haal de lussen omhoog tot ze strak staan, maar til de cliënt nog niet op. Zorg ervoor dat alle vier lussen van de sling stevig zijn bevestigd zodat de gebruiker niet wegglijdt of valt.
3. Til de cliënt op en verplaats hem.

Hoeksensor

De tilvoorziening heeft een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat deze niet kan tillen als de hoek van de tilband te steil is.

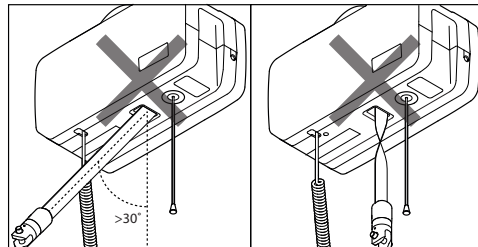

Als de tilvoorziening niet reageert op de knop Omhoog van de handbediening, kan dat komen doordat de hoek van de tilband te steil is of de tilband is gedraaid en de sensor wordt geactiveerd.

Accessoires

Laadsnoeren en stekkers.

Stekkeradapter EU, art.nr. 2510365

Stekkeradapter UK, art.nr. 2510366

Stekkeradapter US, art.nr. 2510367

Stekkeradapter AUS, art.nr. 2510368

Koord EU, art.nr. 1140105

Koord UK, art.nr. 1140106


Koord US, art.nr. 1140104

Koord AUS, art.nr. 1140107

Muurbeugel voor oplader, art. no. 2610123

Tiljukken

De Molift Air kan met een 4- of 8-punts tiljuk worden gebruikt.

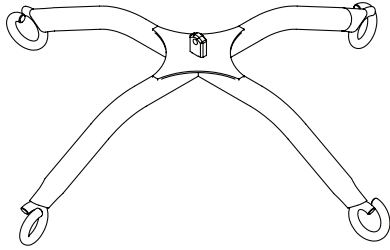

4-punts tiljuk, staal

Art.nr.: 2140003

Slings

Etac heeft een breed assortiment slings voor verschillende transfertypes. De Molift RgoSling is ontwikkeld voor gebruik met een 4-punts tiljuk met lusverbindingen. De tilbanden werken ook met een 2-punts tiljuk. Zie de combinatielijst in de gebruikershandleiding van de sling voor de juiste combinatie van sling en tiljuk.

De serie Molift RgoSling-slings is verkrijgbaar in de maten XXS – XXL, in polyester en polyestermesh.

Een volledige lijst van slings en tiljukken vindt u op www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)

Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)

Molift Rgosling Ambulating Vest

Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)

Molift RgoSling Fabric Stretcher

Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XL)

Accessoires:


Molift Rgosling Extension Loops

Art.nr.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Overgangskoppeling

Bij sommige railsystemen zijn overgangskoppelingen ① geïnstalleerd. Deze worden gebruikt om de gebruiker van het ene railsysteem naar het andere te verplaatsen, bijv. tussen twee verschillende kamers.

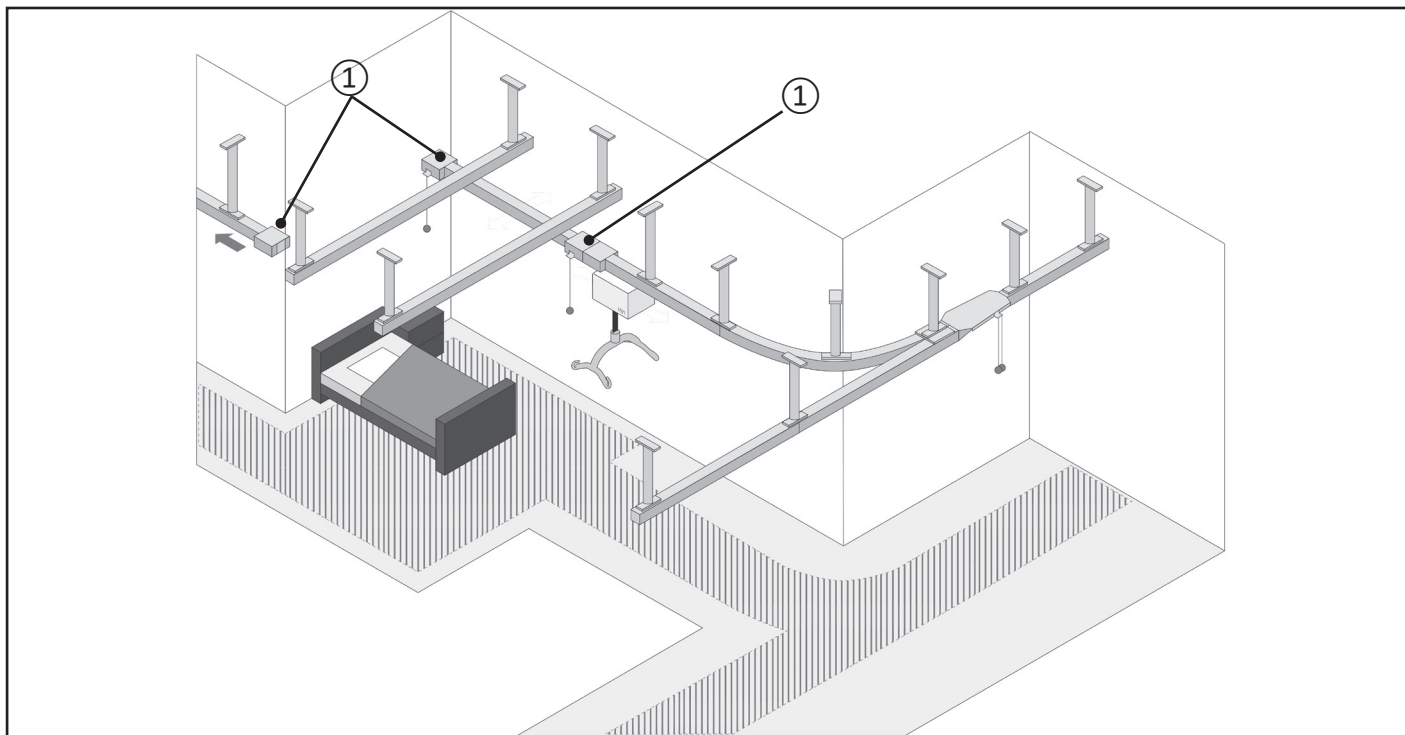


Componenten

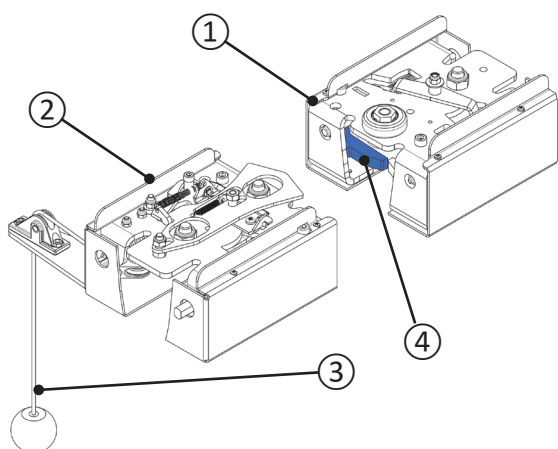


- ① Overgangskoppeling
- ② Overgangskoppeling met katrol
- ③ Katrol met gewicht
- ④ Poort (twee stuks per eenheid)

Statussen

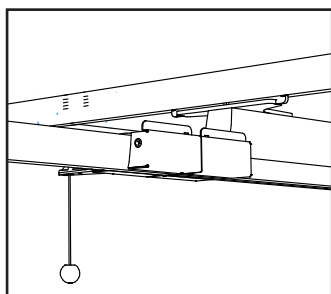


Gekoppeld

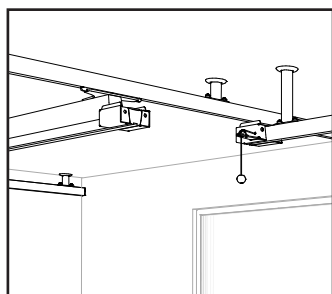

Losgekoppeld


Loskoppelen

Voordat u de overgangskoppeling loskoppelt, moet u controleren of de kraankat min. 0,5 m verwijderd is van de overgangskoppeling.

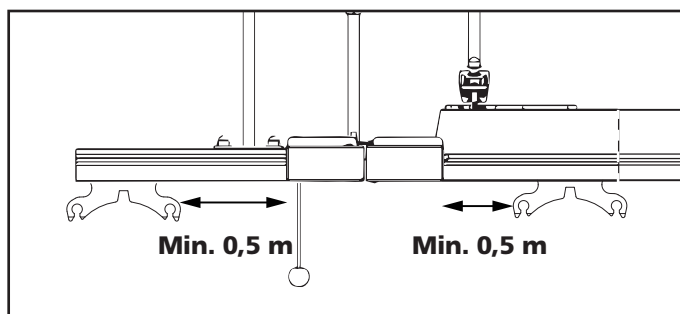

Trek de katrol omlaag tot aan de aanslag.

U hoort een geluid dat aangeeft dat deze los is.

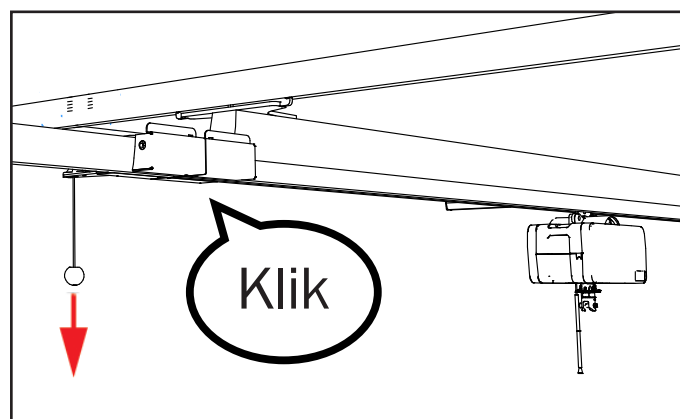


De overgangskoppeling is nu losgekoppeld.



Transfer – losgekoppelde overgangskoppeling

Voer geen transfers uit voordat u het volgende hebt gecontroleerd:


Beide poorten ① zijn zichtbaar (overgangskoppeling van onderaf gezien).

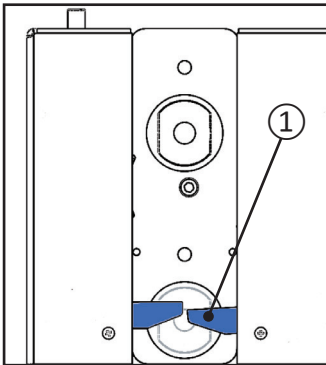



Borgbout ② mag **niet** zichtbaar zijn wanneer de koppeling is losgekoppeld.

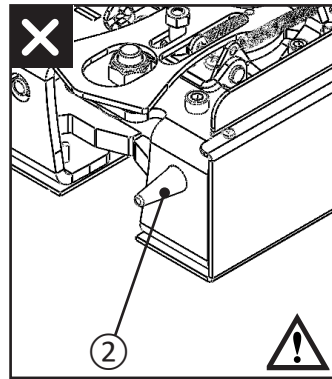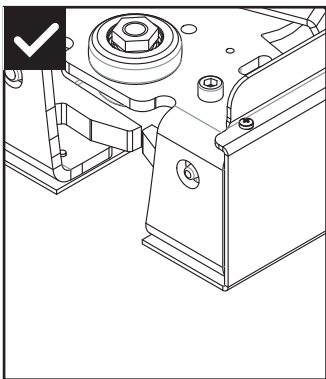


Duw de traverserail in de gewenste richting.

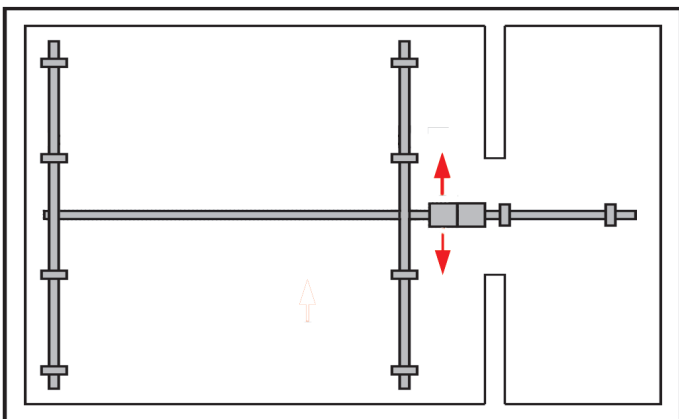**Koppelen**

Voordat u overgangskoppelingen koppelt, moet u controleren of de kraankat min. 0,5 m verwijderd is van de overgangskoppeling.

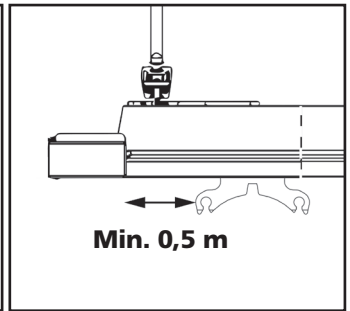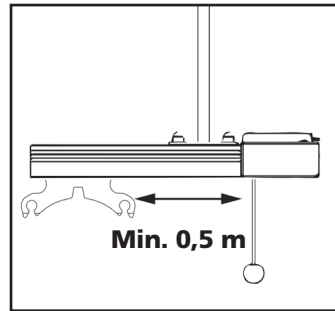

Duw de traverserail in de richting van de stationAire rail, zodat de overgangskoppelingen op elkaar aansluiten en u een geluid hoort.

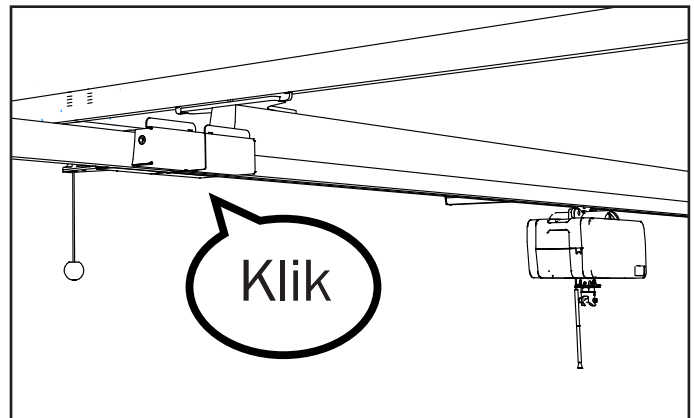**Transfer – gekoppelde overgangskoppeling**

Verplaats de gebruiker niet voordat u hebt gecontroleerd of de overgangskoppelingen volledig aan elkaar zijn vergrendeld. De rails mogen niet met de hand uit elkaar kunnen worden geschoven.



De gebruiker kan nu van de ene rail naar de andere worden verplaatst.

Traversekoppeling**Traversekoppeling, inspectie na installatie**


Breng de traversekoppeling aan en controleer, met de tillift belast met min. 75 kg, of de tillift vrij kan bewegen in beide richtingen van de traversekoppeling.

Koppel de traversekoppeling 10 keer aan/los en beweeg deze 10 keer zonder te stoppen door de traversekoppeling. Controleer of de borgpennen op beide koppelingshelften alleen door veerkracht vrij naar de onderste positie terugkeren.

Steek één kraankat van de tillift in de rail. Breng de traversekoppeling aan. Lijn het uiteinde van de kraankat uit met het uiteinde van de koppelingshelft. Probeer de traversekoppeling los te koppelen. Het veiligheidsmechanisme moet dit voorkomen. Herhaal de test voor de andere koppelingshelft.

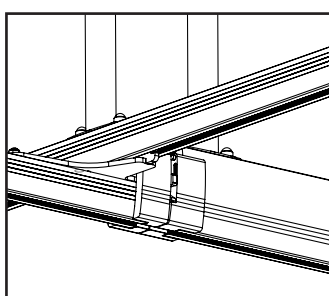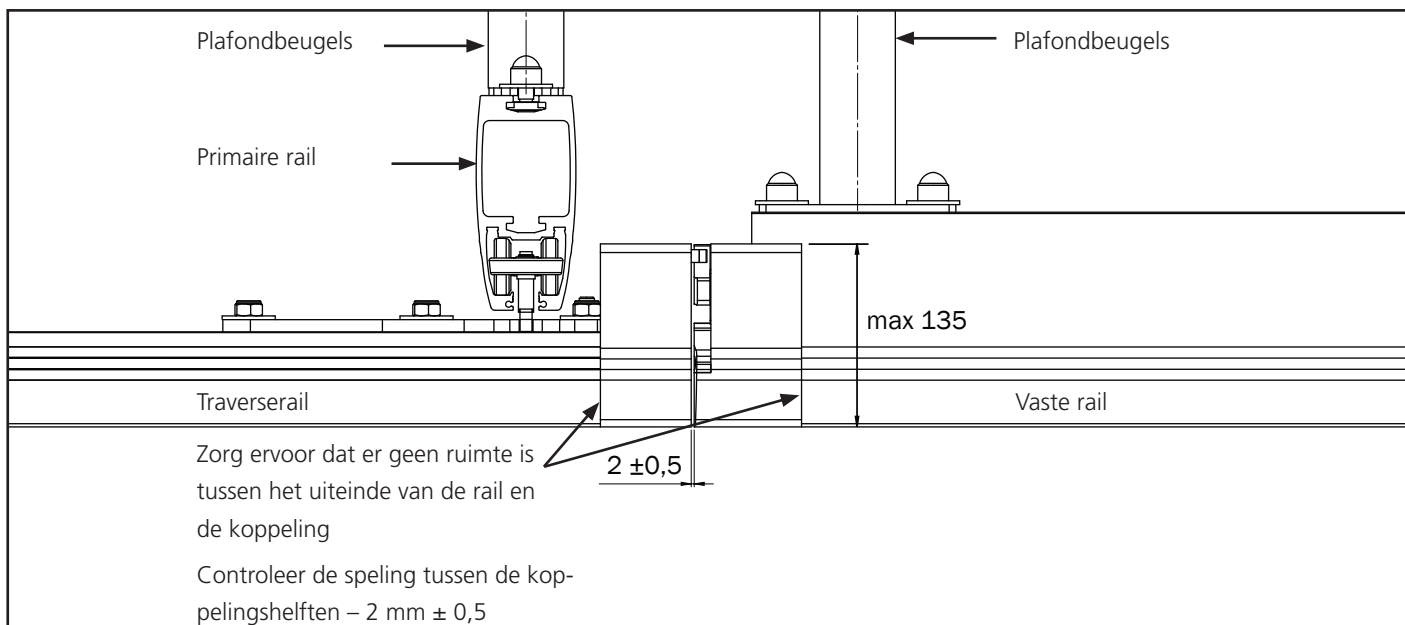

Gekoppeld

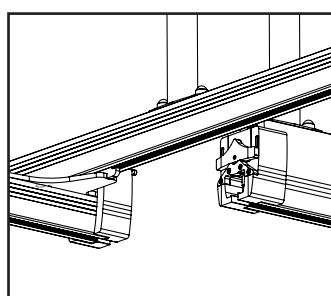


Losgekoppeld

Transfer – gekoppelde traversekoppeling

De gebruiker kan nu van de ene rail naar de andere worden verplaatst.

Plaatsing van label

Het volgende label zit in de doos met de traversekoppeling. Bevestig vóór gebruik het label op de traverserail zoals hieronder weergegeven. Zorg ervoor dat de rode zijde zich het dichtst bij de traversekoppeling bevindt.

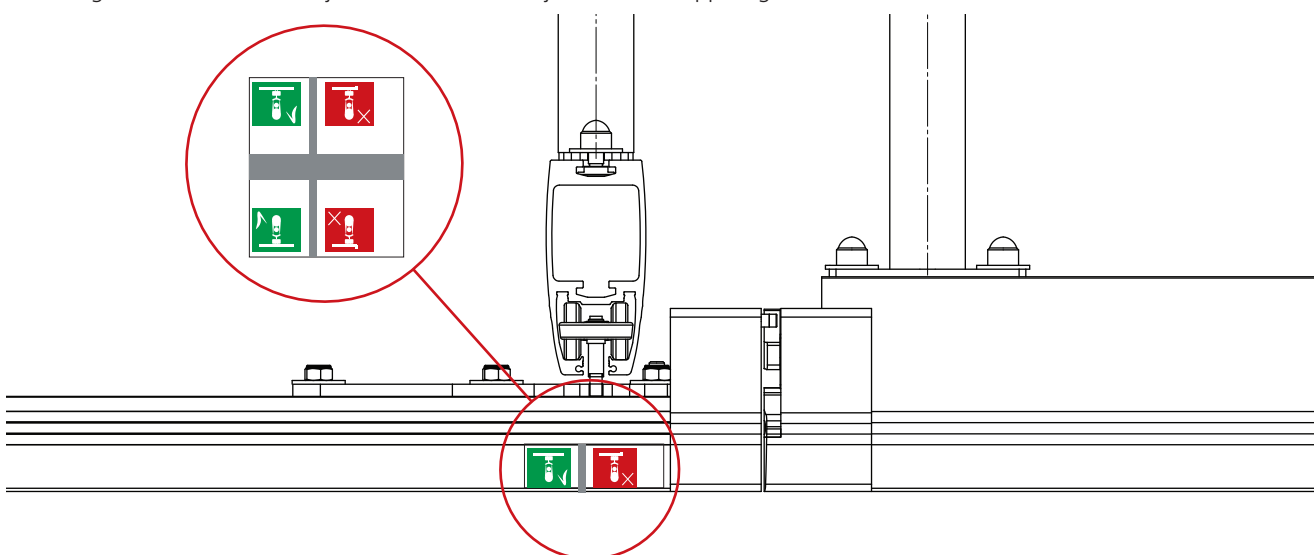

Knip na het aanbrengen van het label de dikke grijze lijn door en verwijder deze. Hierdoor kan de kraankat vrij heen en weer bewegen langs de rail.

Verklaring van symbolen



Wit pictogram met groene achtergrond.
Dit symbool geeft de optimale plaatsing van de tillift aan voor een eenvoudige aansluiting van de koppeling.



Wit pictogram met rode achtergrond.
Dit symbool geeft een suboptimale plaatsing van de tillift aan, waardoor de koppeling moeilijker wordt.

Reiniging / desinfectie

Reinig het product regelmatig. Reinig oppervlakken met een vochtige doek en een geschikt pH-neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve middelen omdat de oppervlakken van de lift hierdoor beschadigd kunnen raken. Voor desinfectie wanneer nodig: gebruik hiervoor isopropylalcohol. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Controleer de noodstop en nooddaalfunctie na het reinigen. De lift mag niet worden gereinigd met stromend water. Bij installatie in omgevingen met risico op vocht is het belangrijk dat het railsysteem en de motor regelmatig worden gewassen en gedroogd. Een volledige gids voor het verminderen van het risico op corrosie is op aanvraag verkrijgbaar.



Zorg ervoor dat u tijdens het reinigen geen labels beschadigt of verwijdt.



Beschermingscode IP24 geldt voor de lift en de handbediening: beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm en geen schade indien besproeid onder eender welke hoek tot 60°.



De zorgverlener en de klant worden blootgesteld aan de volgende materialen: polypropyleen en polyester (slings*), PC/ABS (handbediening en liftkap), gepoedercoat aluminium, gepoedercoat zink (tiljukken).
*= Toegepast deel



In zeldzame gevallen kunnen cliënten of zorgverleners die worden blootgesteld aan polypropyleen en polyester last hebben van allergische reacties zoals huidirritatie, lichte jeuk en een gevoelige huid.

Revisie

Volg de procedure voor reiniging en installatie, voer de periodieke inspectie uit en gebruik de controlelijst na het installeren om de lift weer gebruiksklaar te maken.

Recycling

Zie 'Instructies voor recycling' voor het correct afvoeren van het product. Ga hiervoor naar www.etac.com.

Reserveonderdelen

Op verzoek is een lijst met reserveonderdelen beschikbaar.

Omvang van de periodieke inspectie

De periodieke inspectie is een visuele controle (vooral van de lastdragende structuur van de lift en het tilmechanisme met bevestigingen, remmen, bedieningen, veiligheidsvoorzieningen en ondersteuningsvoorzieningen voor de gebruiker) volgens het Rapport voor periodieke inspectie van de Molift Air 500. Zie www.etac.com.



Wanneer er door problemen met de lift sprake is van gevaar voor de veiligheid, moet de lift onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en duidelijk worden gemarkeerd met 'buiten werking'. De lift mag pas na reparatie opnieuw worden gebruikt. Neem contact op met uw plaatselijke Molift/Etac-dealer/distributeur om eventuele problemen te melden.

De periodieke inspectie moet minimaal één keer per jaar worden uitgevoerd of vaker als dit verplicht is volgens de lokale voorschriften. Deze inspectie moet door servicepersoneel worden uitgevoerd dat door Etac is erkend. Neem contact op met Etac via molift@etac.com voor training en autorisatie of aanbevelingen voor een goedgekeurde servicepartner.

Bij het uitvoeren van een periodieke inspectie moet de inspecteur het inspectierapport voor Molift Air invullen. De rapporten moeten worden bewaard door degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor het onderhoud van de lift. Als er bij de inspectie defecten en schade worden vastgesteld, wordt de lift buiten gebruik gesteld en gemarkeerd met een label "buiten werking" totdat hij is hersteld.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak/corrigerende maatregel
De lift reageert niet op de handbediening	De noodstop is geactiveerd. Deactiveer deze door de knop weer in te drukken.
	De elektronica van de lift is oververhit. Wacht totdat deze is afgekoeld.
	De handbediening is niet goed aangesloten. De handbediening, de stekker of het snoer kan defect zijn en moet worden vervangen.
De lift reageert niet op de knop Omhoog van de handbediening	De hoeksensor van de tilband is geactiveerd. Pas de stand van de tilband aan of verplaats de tilvoorziening zodat de hoek van de tilband afneemt.
Wanneer u de elektrische nooddaling gebruikt, gaat de tilband omhoog.	De tilband is volledig naar buiten gekomen en de verkeerde kant opgedraaid. Gebruik de handbediende nooddaling. Laat de tileenheid nakijken.

Vigtigt

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og oplysninger vedrørende anvendelse af sejlet og tilbehøret.




Dette symbol angiver vigtige oplysninger angående sikkerhed. Følg disse instruktioner nøje.



Læs brugervejledningen inden brug!
Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår indholdet i brugervejledningen, før du forsøger at bruge udstyret.

Besøg www.etac.com for at downloade dokumentationen, så du er sikker på at have den nyeste version.

Molift Air 500

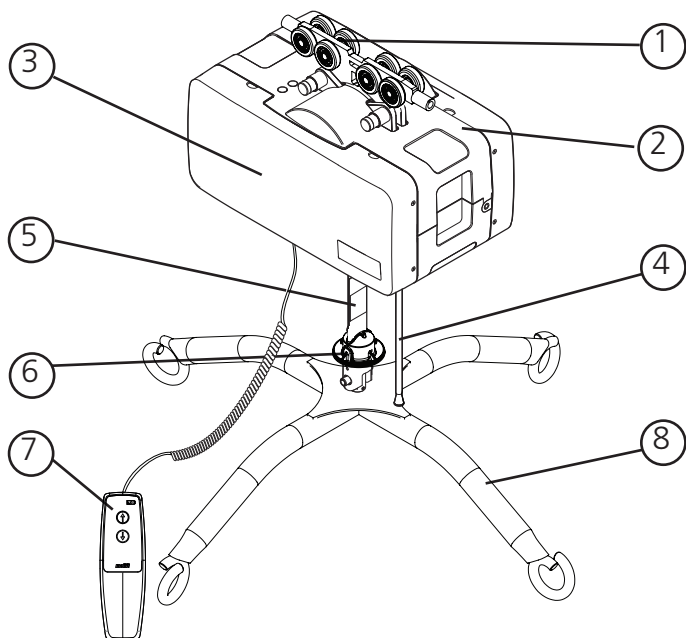

Hejseværkets komponenter:

1. Løbekat
2. Hejseværk
3. Sidebeklædning
4. Nødstop/nødsækning
5. Løftebælte
6. Stift til hurtig frigørelse
7. Betjeningshåndsat
8. Løfteåg

Om Molift Air

Molift Air er en stærk og letløbende loftsmonteret personløfter, som gør det muligt for patienter og beboere at blive forflyttet på en behagelig og sikker måde.

Molift Air har en meget let motor, som i kombination med koblingssystemet til hurtig frigørelse giver nem håndtering ved montering og servicering.

Generelt



CE-erklæring

Produktet og det relaterede tilbehør, der er beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 - som medicinsk udstyr, risikoklasse I.
Produktet er testet og godkendt af en tredjepart i henhold til standarderne IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og EN/ISO 10535:2021.
Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Betingelser for anvendelse

Der er altid en vis risiko ved løft og forflytning af en bruger. Skinnesystemet skal monteres af certificeret personale iht. gældende monteringsvejledning. Personløfteren er ikke beregnet til at blive betjent af den bruger, der bliver løftet.

Modifikationer og anvendelse af komponenter fra andre producenter

Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes Molift-komponenter og -reservedele. Overensstemmelseserklæringen vil ikke længere være gyldig, og Etacs garantiforpligtelse bortfalder, hvis der foretages nogen form for modifikationer på produktet. Etac er ikke ansvarlig for fejl eller uheld, som måtte opstå ved brug af komponenter fra andre producenter. Det kan være usikkert at bruge tilbehør, aftagelige dele og materialer, som ikke er anført i denne brugervejledning.



Kun certificeret personale må åbne hejseværket eller tilbehøret for at udføre service eller reparation. Der er risiko for personskade fra roterende dele og elektrisk stød.



Garanti
To års garanti på fabrikations- og materialefejl på vores produkter.
Et års garanti på batterier.
Se www.etac.com for vilkår og betingelser.

Indledning

Den person, der benævnes "brugeren", er den person, der sidder i produktet. "Hjælperen" er den person, der manøvrerer produktet.

Tilsigtet formål

Løftliften er et hjælpemiddel, der er beregnet til at mildne eller kompensere for en funktionsnedsættelse på grund af en skade eller et handicap. Produktet er designet til en person, der på grund af nedsat mobilitet eller fysisk styrke ikke er i stand til at rejse sig og forflytte sig selv til/fra en seng, gulvet, en kørestol, en stol, et toilet eller lignende.

Tilsigtet bruger

Den person, der beskrives som "brugeren" i denne brugervejledning, er den person, der sidder i produktet. "Hjælperen" er den person, der manøvrerer produktet.

Tilsigtet miljø

Til indendørs brug i et skinnesystem i akut pleje, langvarig pleje og hjemmepleje.

Indikationer

Til brugere, der har behov for støtte til at blive løftet og forflyttet eller i forbindelse med gangtræning, f.eks. personer med begrænset mobilitet, som har brug for kropsstøtte under forflytninger. Ikke en udtømmende liste.

Produktets brugergruppe er baseret på individuel sundheds- og mobilitetsfunktion og ikke en specifik diagnose eller alder.

Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer.

Forholdsregler

Sørg for, at sejlet passer til brugeren og løfteåget.


Krav til uddannelse

Kun hjælpere, der har læst og forstået brugervejledningen, må bruge produktet.

Produktidentifikation

Produktmærkat

Produktmærkatens stregkode indeholder varenummer, serienummer og produktionsdato:

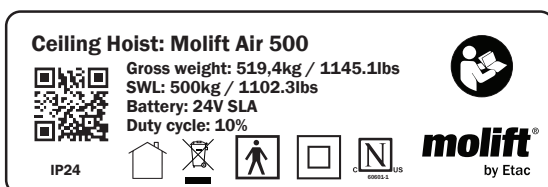

Advarselmærkater og -symboler

Symboler, som bruges i produktet, beskrives her nærmere:



Klasse II dobbeltisoleret



CE-mærket



Se brugervejledningen



Kun til indendørs brug



Maks. brugervægt



Må ikke bortskaffes med almindeligt affald



Nødstop/
nødsænkning



Servicelys



Batterilyl



Unbrakonøglesymbol til manuel nødsænkning



Bemyndigede organs mærke



Producent



Fremstillingsdato



Katalognummer



Løbenummer



Medicinsk udstyr



Unik udstyrsidentifikator



UKCA-mærket



Type BF anvendt del

Tekniske data

Sikker arbejdsbelastning (SWL, Safe Working Load)

Molift Air 500: 500 kg (1102 pund)

Enhedens vægt:

Stel inkl. batteri, ekskl. løfteåg:

14,1 kg (31 pund)

4-punkts løfteåg: 5,3 kg (11,7 pund)

Batteri:

Varenr.: 2920007 12 V SLA 2,9 Ah

Batterioplader:

Oplader til betjeningshåndsettet, Mascot – type 3743

Varenr.: 2540100

100-240 V AC, 50-60 Hz maks. 0,5 A

Output 0,56 A

IRC-strømforsyning, Mascot – type 3721

Varenr.: 2610119

Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz maks. 1,0 A

Output: 24 V DC 1,75 A/42 W

IRC-strømforsyning, Mascot – type 3844

Varenr.: 2640200

Input: 20-30 V DC 1,3 A

Output 0,5 A

Løfthastighed

60 mm/sek. (2,36 tommer/sek.)

med en belastning på 75 kg (165,35 pund)

Kapslingsklasse

Betjeningshåndsett IP24

Løftemotor IP24

Sound pressure

52 dBA

Sound power (L_{WA})

63 dB

Betjeningskraft for knapper

Knapper på håndsettet: 3,4 N

Materiale:

Aluminium, plastik, stål

Forventet levetid:

Hejseværket har en forventet levetid på 30.000 cyklusser med SWL eller 15 år. Skinnerne har en forventet levetid på 30 år.

Mål:

L x B x H (Længde, bredde, højde uden løbekat)

36 x 24,6 x 19,5 cm


(14,2 x 9,7 x 7,7 tommer)

A (Hejserækkevidde)

300 cm (118 tommer)

B (Mindste afstand fra loftet til løfteågets koblingspunkt) 32,7 cm (12 7/8 tommer)

Der er yderligere oplysninger om tekniske data og udførelse af service og reparation i den tekniske vejledning.

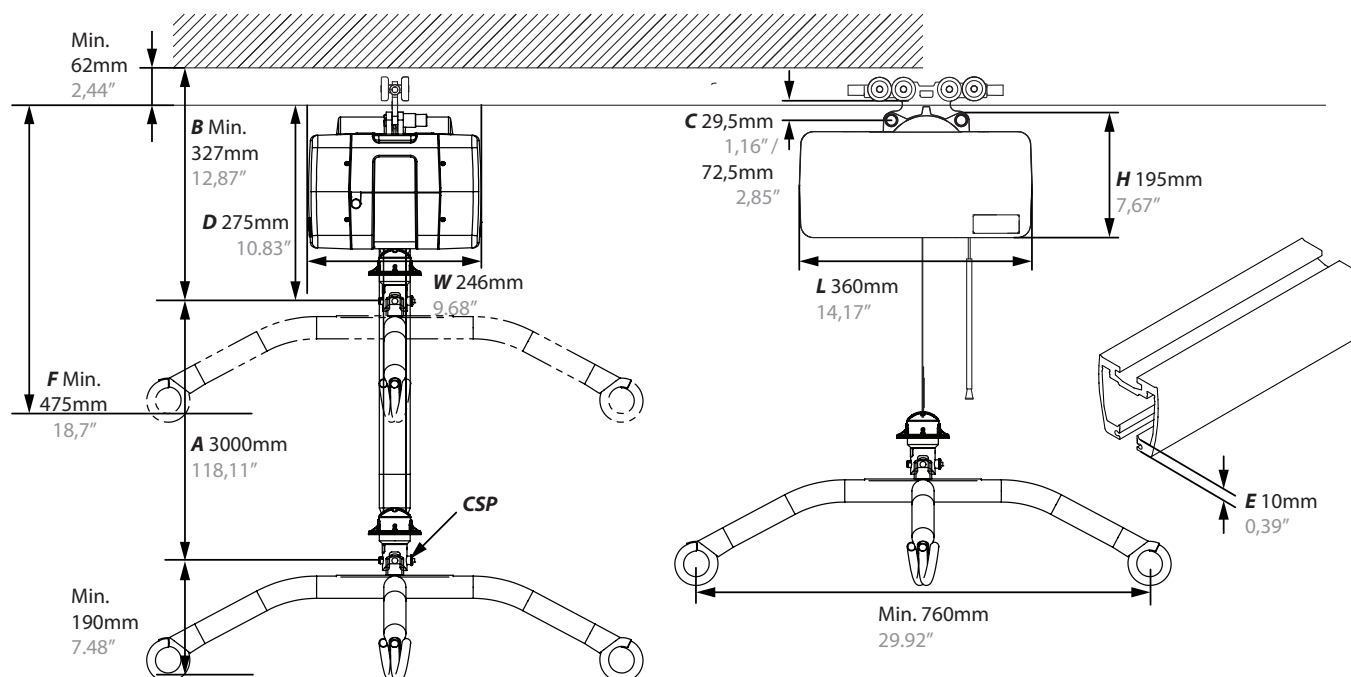

Montering

Hejseværket er mærket med sikker arbejdsbelastning (SWL, Safe Working Load). Denne må ikke overstige skinnesystemets maksimale belastningskapacitet.




Skinnesystemet må kun monteres af certificeret personale iht. gældende monteringsinstruktioner.



Start ikke med at hejse, før du har afsluttet kontrollen iht. tjeklisten efter montering.

Montering af løbekatten

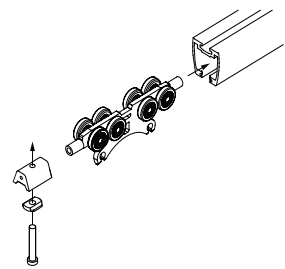

Montering af løbekatten i skinnesystemet. Fjern endestoppet, og indsæt løbekatten i skinnen. Montér endestoppet, og kontrollér, at det sidder fast. Detaljeret beskrivelse af montering findes i BM4401.




Kontrollér, at endestoppene er monteret i alle enderne af skinnesystemet, før du bruger hejseværket!

Montering af personløfteren




Vær forsigtig i situationer, hvor der arbejdes i højden. Vi anbefaler to eller flere montører for at forhindre, at man mister balancen, så der opstår personskade under monteringen!

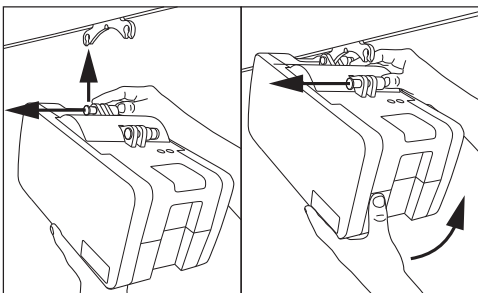

Montering af personløfteren på løbekatten. Der kræves intet værktøj. Personløfteren har to fastgøringsspunkter.

Fastgør det ene punkt først. Tryk knappen helt ind, og placér personløfteren i løbekattens fastgøringspunkt. Slip knappen, og kontrollér, at den lyser tydeligt grønt, før du fastgør det næste punkt.

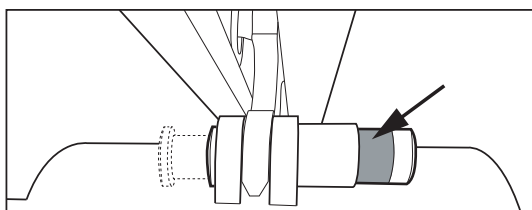

Kontrollér, at begge knapper til fastgørelsespunkterne vender helt tilbage til udgangspunktet og lyser tydeligt grønt efter monteringen.

Ledningen og røret til nødsænkning kan tilpasses til den korrekte længde (højde) ved tilklipping af røret og ledningen.

Montering

Brug denne tjekliste til at bekræfte, at hejseværket er korrekt monteret og kan betjenes korrekt og sikkert, før det tages i brug.

- ☐ Der er monteret endestop på skinnen efter montering af løbekatten som beskrevet i BM4401
- ☐ Kontrollér, at hejseværket er korrekt fastgjort til skinnen, og at personløfteren ikke har nogen løse dele.
- ☐ Udfør ét løft med belastning (60-80 kg)
- ☐ Kontrollér, at batteriet er helt opladet.

Sådan anvendes Molift Air

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Brug kun tilbehør og sejl, der er justeret, så de passer til brugeren, typen af handicap, størrelsen, vægten og typen af forflytning.

Forhold mellem arbejdspauser/driftsperiode.

Molift Air 500 må ikke køre i mere end 2 minutter ad gangen (med maksimal belastning). Herefter skal der holdes en pause på mindst 18 minutter. Drifts-periode 10 %. (Intermittens iht. standarden ISO-EN 10535)



Anbring ikke hejseværket på en måde, der gør det svært at afbryde strømkablet. Systemet isoleres ved at trække strømkablet ud af stikkontakten i væggen.



Hvis den maksimale belastning (SWL) mellem hejseværkets løfteåg og kropsstøtteenheden er forskellig, skal der altid bruges den laveste maksimale belastning.



Molift-personløftere må kun anvendes til at løfte brugeren. Anvend aldrig personløfteren til at løfte eller flytte nogen form for genstande.

Før anvendelse/dagligt tjek


Inspektion, som plejegiveren skal udføre dagligt eller før anvendelse:

- ☐ Inspicér personløfteren og skinnesystemet for synlig skade, synlige fejl eller skævheder
- ☐ Kontrollér, at løfteågsforbindelsen og alle dele, som kan afmonteres, er korrekt fastgjort og sikret
- ☐ Test nødstopknappen og nødsænkningen
- ☐ Kontrollér, at batteriindikatoren eller serviceindikatoren ikke lyser
- ☐ Kontrollér, at løfteremmen ikke har synlige skader eller trævler.
- ☐ Testkør personløfterens driftsfunktioner, og kontrollér, at personløfteren ikke afgiver unormale lyde

Hvis der er fejl eller defekter, skal personløfteren tages ud af drift og markeres med "ude af drift". Der må ikke udføres service eller vedligeholdelse på nogen del af Molift Air, mens systemet er i brug med en patient.

Betjeningshåndsat

Betjeningshåndsettet har 2 knapper til at løfte og sænke, eller 4 knapper, hvis hejseværket er udstyret med fremdrift. Betjeningshåndsettet har en indikator, der lyser, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og personløfteren skal genoplades.

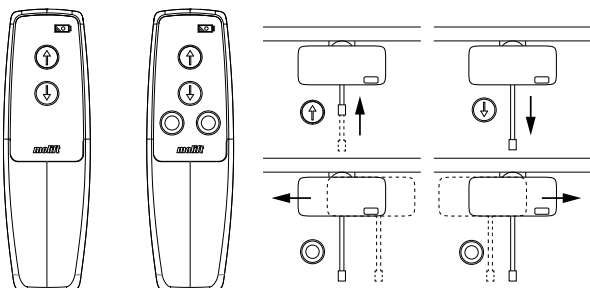


Træk ikke i betjeningshåndsettet for at flytte hejseværket langs skinnen



Liften virker ikke, hvis betjeningshåndsettet er tilsluttet en oplader. Afbryd forbindelsen mellem betjeningshåndsettet og opladeren, før du benytter liften.

Montering af løfteåget

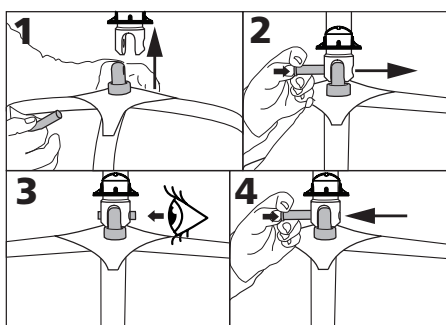


1. Juster løfteåget i fastgørelsespunktet.
2. Tryk på knappen på låsestiften, og før den hele vejen igennem.
3. Kontrollér, at låsestiften er korrekt fastgjort.
4. Tryk på og hold knappen på låsestiften nede, og træk for at fjerne låsestiften.


Nødstop/nødsænkning

Nødstop

Aktivering og nulstilling af nødstop:

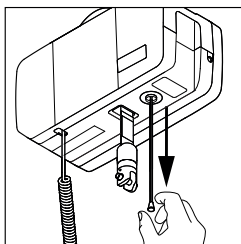


Træk for at aktivere nødstoppet. Knappen springer ud, og hejseværket stopper.

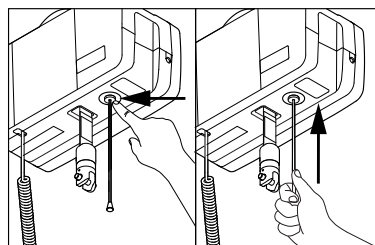

Brug en finger eller røret på ledningen til at trykke knappen tilbage for at nulstille nødstoppet.

Elektrisk nødsænkning





Træk og hold for at starte med at sænke. Hold, indtil brugeren er sænket ned og kan frigøres fra løfteåget.

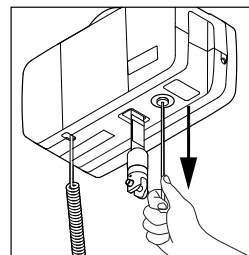

Kun til brug i nødstilfælde, når betjeningshåndsettet ikke fungerer!

Manuel nødsænkning

Unbrakonøgle eller borebit findes indvendigt i personløfteren. Find værktøjet ved at fjerne beklædningen på begge sider af hejseværket.

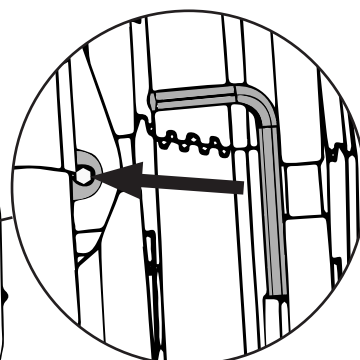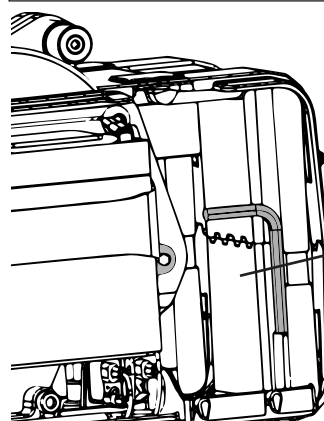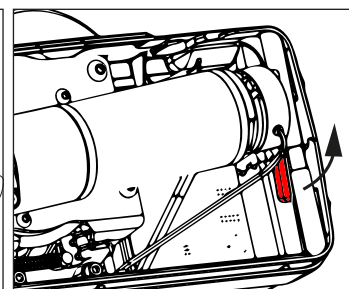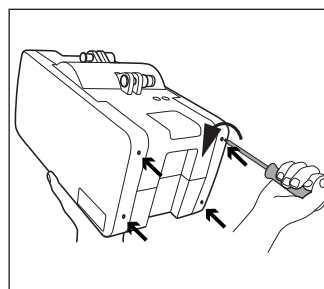

Sidebeklædningen åbnes ved hjælp af en skruetrækker eller en boremaskine i alle 8 skruer (4 på hver side). Drej det røde "bremseudløser"-håndtag opad. Find værktøjet på den anden side af hejseværket, og drej mod uret for at sænke løftebæltet. Det anbefales, at der bruges en boremaskine.

Service er IKKE påkrævet, hvis:

- 1) den manuelle Air-nødsænkning er brugt af en kendt årsag
- 2) bæltet ikke er beskadiget, og
- 3) enheden fungerer normalt efter den manuelle nødsækningsprocedure.

Den nye bremseforbikobling vil bidrage til dette ved at gøre manuel nødsænkning mindre belastende for løftekomponenterne. Hvis der har været en fejlfunktion på enheden, hvor årsagen ikke er kendt, og det manuelle nødsænkningssystem har været brugt, er service påkrævet.

Elektronik

Transport og opbevaring

Ved længere tids opbevaring anbefales det, at nødstopknappen er aktiveret (trukket ud). Personløfteren kan opbevares og transporteres ved temperaturer på mellem -25 °C og 70 °C.

Drift

Personløfteren er konstrueret til anvendelse ved stuetemperatur (+5 °C til +40 °C).

Lufttryk: 70 - 106 kPa

Relativ luftfugtighed: 15 - 90 %

Efter opbevaring eller transport ved andre temperaturer skal personløfteren efterlades i et rum med en passende temperatur, indtil den får en sikker driftstemperatur.



Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Bærbart eller mobilt radiokommunikationsudstyr kan påvirke det medicinske elektriske udstyr og skal holdes i en afstand på mindst 30 cm (12 tommer) fra personløfterens elektronik.

Batterier

Molift Air 500 kan leveres med et 24 V SLA-batteri.

SLA-batteriet har en forventet levetid på ca. 500 ladecykler.



Genoplad batteriet ved modtagelsen og derefter hver sjette måned for at undgå batterisvigt.



Batterier skal bortskaffes som særligt affald iht. lokal lovgivning og lokale regler. De må ikke bortskaffes med almindeligt affald.

Batteri- og serviceindikator på personløfteren

	Skruenøglesymbol/ serviceindikator
	Batterisymbol/ batteriindikator

Det elektriske system har en strømsparefunktion, som slukker det elektriske system fem minutter efter sidste betjening. Alle indikatorer slukker. Systemet aktiveres, når der trykkes på en af betjeningsknapperne på betjeningshåndsettet.

Batteriindikator på hejseværk

Når flerniveaubatteriindikatoren lyser gult, har personløfteren tilstrækkelig strøm til mindst én fuld løftecyklus med maksimal belastning. Når batteriet blinker gult, er det kun muligt at sænke løfteåget.

Batteriindikator	Batteriniveau
	Grøn 80 % eller derover
	Grøn 80 - 60 %
	Grøn 60 - 40 %
	Grøn 40 - 20 %
	Gul 20 % - 0 %
	Blinker gult 0 %

Serviceindikator/periodisk inspektion

Personløfterens elektronik registrerer de løftede belastninger og antallet af løft. Efter en vis driftsperiode afgives der et signal for at angive, at service er påkrævet.

Serviceindikator	Tilstand
Lyser ikke	Ikke behov for service
Gul	Periodisk inspektion påkrævet
Blinker grønt	Bestil service
Rød	Udfør service

Omfang af service

Når hejseværket har udført et antal løft (5.000 løft med den sikre arbejdsbelastning (SWL)), lyser serviceindikatoren rødt. Der skal derefter udføres service af autoriseret personale, herunder eftersyn og udskiftning af slidte dele. Kontakt Etac eller din lokale forhandler eller besøg etac.com for at finde en godkendt servicepartner.

Opladning

Molift Air 500 kan oplades ved hjælp af betjeningshåndsettet med en batterioplader eller via skinnen med IRC (In Rail Charging).

Indikator på oplader og strømforsyningsindikator


<i>Opladerindikator</i>	<i>Tilstand</i>
Blinker grønt	Ikke tilsluttet til hejseværk
Gul	Oplader
Blinker gult	Næsten opladet
Grøn	Helt opladet

<i>Strømforsyningsindikator</i>	<i>Tilstand</i>
Blå	Tilsluttet til strømudtag

Opladning af betjeningshåndsettet

Batteriopladeren sættes i et strømstik. Der fås vægmonteret docking til betjeningshåndsæt. Sørg for, at kablet ikke beskadiges. Opladeren kan forblive tilsluttet til strømudtaget. Brug kun Molift-opladere. Betjeningshåndsettet har en indikator, der lyser, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og personløfteren skal genoplades.


Oplader til Molift Air-betjeningshåndsæt: Varenr.: 2540100

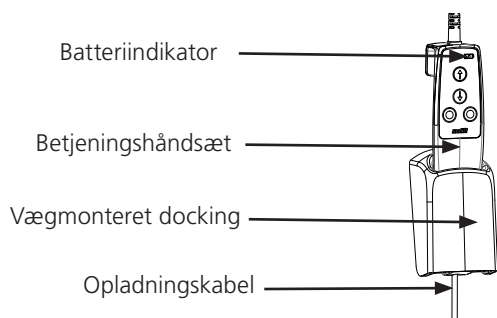


IRC (In Rail Charging)

Personløfteren oplades gennem en indbygget oplader i løftmotoren, der sikrer konstant opladning gennem hele skinnerne.

Molift Air IRC har en indbygget oplader, der er tilsluttet batteriet. Den skal monteres med IRC-løbekatten i et skinneresystem med elektrisk ledende tape. IRC-løbekatten er tilsluttet batteriopladeren i Molift Air IRC. IRC-løbekatten er altid i kontakt med den elektrisk ledende tape i skinnen. IRC-strømforsyningen er tilsluttet den elektrisk ledende tape gennem IRC-forbindelsen for enden af skinnen og leverer strøm til batteriopladeren i Molift Air IRC.

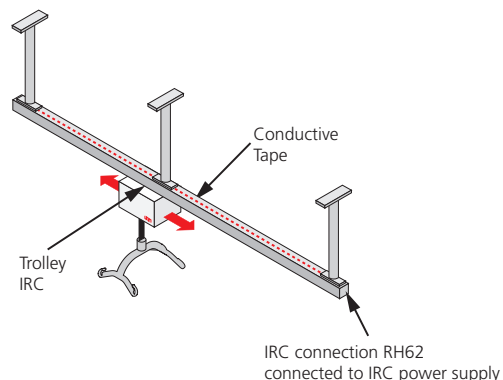

IRC passer både til enkeltskinneresystemer og tværgående skinneresystemer.

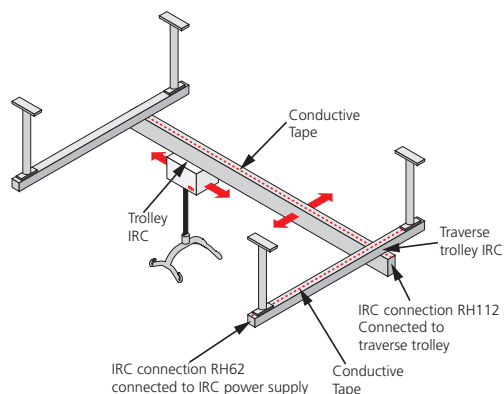

IRC-strømforsyning

Varenr.: 2610119

Oplader 3844 DC/DC (en del af Molift Air IRC)

Varenr.: 2640200

Forflytning

Planlæg løfteprocessen på forhånd for at sikre, at den foregår så sikkert og ubesværet som muligt. Husk at arbejde ergonomisk korrekt. Vurder risiciene, og tag notater. Hjælperen er ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Brug af sejl

Det er vigtigt, at sejlet er blevet afprøvet på den enkelte bruger og til den tilsigtede løftesituation.



Læs brugervejledningen, før du bruger sejlet.



Brug ikke ødelagte eller nedslidte sejl.

Enhedskombinationer og sejlkompatibilitet


Når medicinsk udstyr kombineres med andre produkter eller tilbehør, må kombinationen ikke ændre produkternes tilsigtede formål som angivet af producenten, eller ændre produkterne på en sådan måde, at overholdelsen af de gældende krav kan blive påvirket.

Vi anbefaler, at der kun bruges Etac- eller Molift-sejl. Liften kan kombineres med sejl fra andre producenter. Se kompatibilitetserklæringer på www.etac.com.


Den person/virksomhed, der er ansvarlig for kombinationen af produkterne, skal sikre, at de gældende krav er opfyldt. Elektrisk beskyttelse i kombination med sejl: Type BF anvendt del.

Løfte og sænke


Når du flytter brugeren, skal du stå ved siden af den bruger, du løfter. Sørg for, at arme og ben ikke kommer i vejen for sæde, seng osv. Bevar øjenkontakten med brugeren, så vedkommende føler sig sikker.

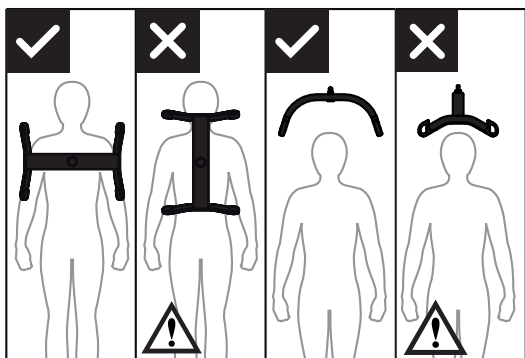

4-punkts løfteåget skal altid anbringes på tværs af brugeren for at forhindre, at brugeren ved et uheld glider ud af sejlet.

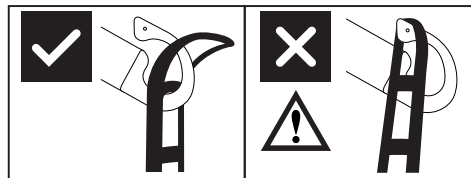

Udformningen af løfteågets kroge forhindrer, at sejlet ved en fejl går løs, når det er monteret korrekt.

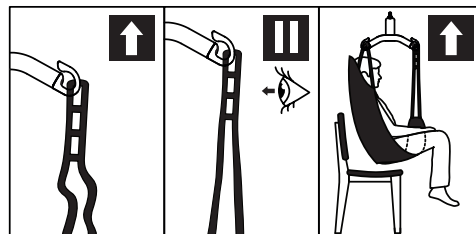


1. Sørg for, at sejlet er placeret korrekt omkring brugeren, og at stroløkker er fastgjort korrekt i krogene på løfteåget.
2. Stræk sejlstropperne uden at løfte brugeren. Kontrollér, at alle fire løkker på sejlet er fastgjort korrekt, så brugeren ikke glider eller falder ud.
3. Løft brugeren, og udfør forflytningen.



Brug ikke nødstopet til at slukke hejseværket, bortset fra nødsituationer. Hejseværket slukker automatisk (går i standby) efter 5 minutters inaktivitet.

Vinkelføler


Hejseværket har en retningssikkerhedsfunktion, som forhindrer løft, hvis vinklen på løfteremmen er for stejl.

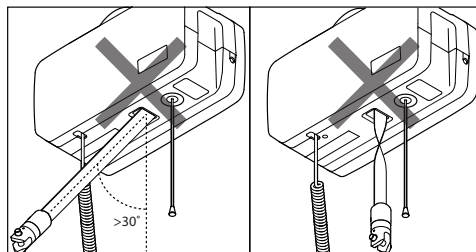

Hvis hejseværket ikke reagerer på betjeningshåndsettets "op"-knap, kan det skyldes, at løfteremmens vinkel er for stejl, eller at løftebæltet er snoet, og føleren er aktiveret.

Løfteåg

Molift Air kan anvendes med et 4- eller 8-punkts løfteåg.

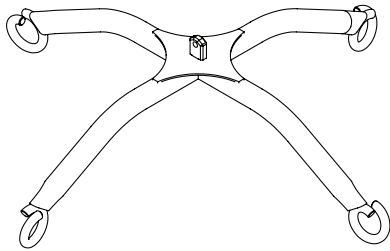

4-punkts løfteåg, stål
Varenr.: 2140003

Sejl

Etac leverer et bredt udvalg af sejl til forskellige typer forflytning. Sejlserien Molift RgoSling er konstrueret til at blive kombineret med et 4-punkts løfteåg med stropløkker. Sejlene kan også benyttes sammen med et 2-punkts løfteåg. Kombinationslisten med den korrekte kombination af sejl og løfteåg findes i brugervejledningen til sejl.

Molift RgoSling-sejlserien leveres i størrelserne XXS-XXL, i polyester og polyesternet.

En komplet liste over sejl og løfteåg findes på www.etac.com.

Molift Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
Molift Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
Molift Rgosling Ambulating Vest
Molift Rgosling Comfort Highback (S-L)
Molift RgoSling Fabric Stretcher
Molift RgoSling Repositioning

SWL 500

Molift MediumBack Plus (L-XL)


Tilbehør:

Molift Rgosling Extension Loops
Art.nr.: 1721600


Molift Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)
Molift RgoSling Ambulating Vest-lyskestrop (XXS-XL)

Forflytningskobling

Nogle skinneresystemer har forflytningskoblinger ① monteret. Disse bruges til at forflytte brugeren fra ét skinneresystem til et andet, for eksempel mellem to forskellige rum.

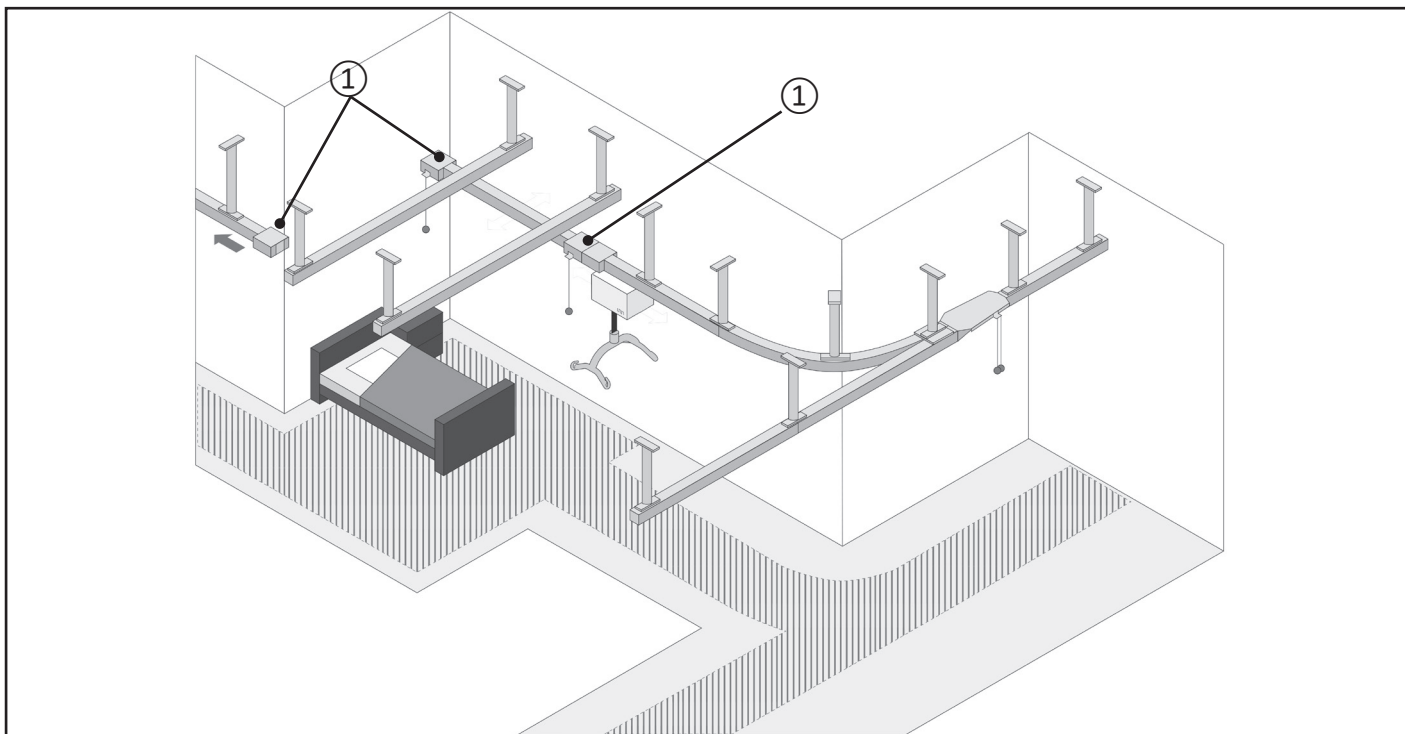


Komponenter

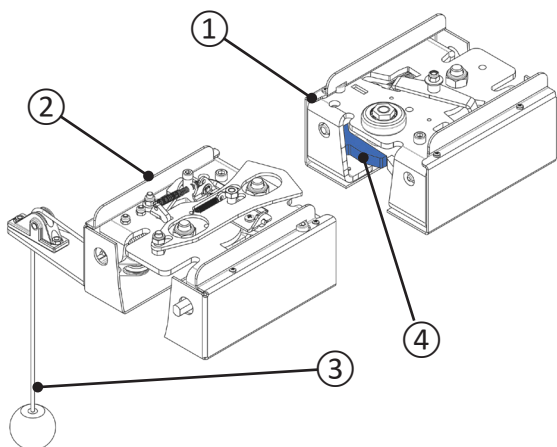


- ① Forflytningskoblingsenhed
- ② Forflytningskoblingsenhed med talje
- ③ Talje med greb
- ④ Port (to stk. pr. enhed)

Tilstande

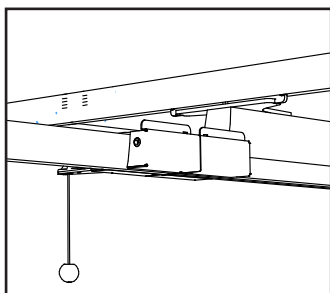


Tilkoblet

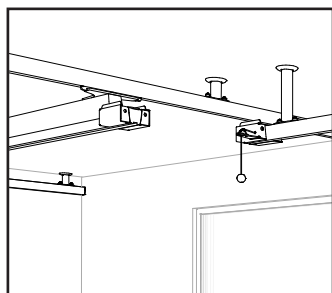


Frakoblet

Frakobling

Inden frakobling af forflytningskoblingen skal det sikres, at taljen er mindst 0,5 m fra forflytningskoblingsenheden.

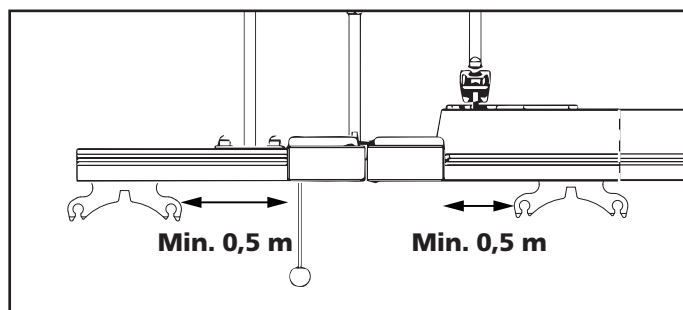

Træk taljen ned, indtil den stopper.
Du hører en lyd, der bekræfter frakobling.

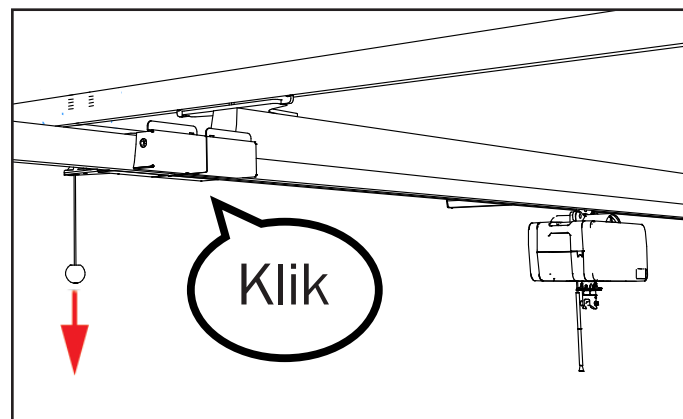


Forflytningskoblingen er nu frakoblet.



Forflytning – frakoblet forflytningskobling

Udfør ikke forflytning af brugeren, før du har kontrolleret følgende:


Begge porte ① er synlige (forflytningskoblingsenheden set nedefra).

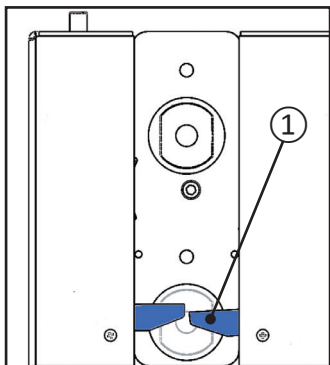

Låsebolten ② må **ikke** være synlig, når koblingen er frakoblet.

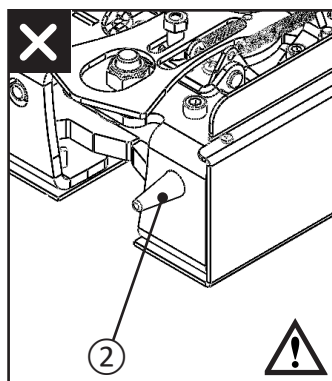
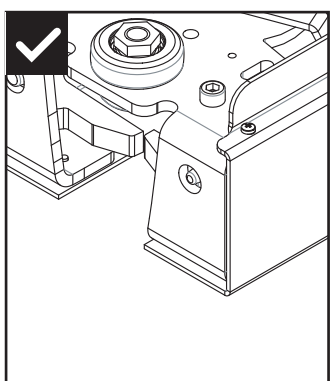


Skub tværskinnen i den ønskede retning.

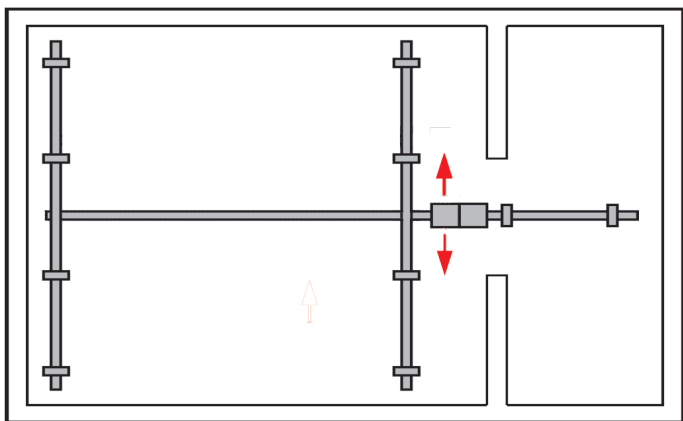


Tilkobling

Før forflytningskoblingerne tilkobles, skal det sikres, at taljen er mindst 0,5 m fra forflytningskoblingsenheden.

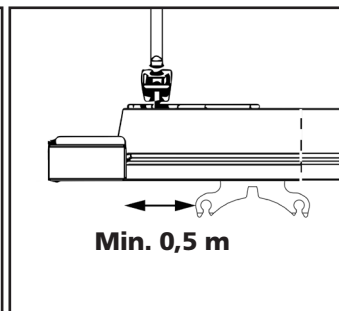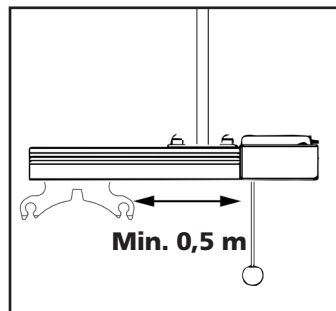

Skub tværskinnen mod den stationære skinne, så forflytningskoblingsenhederne tilkobles, og du hører en lyd.

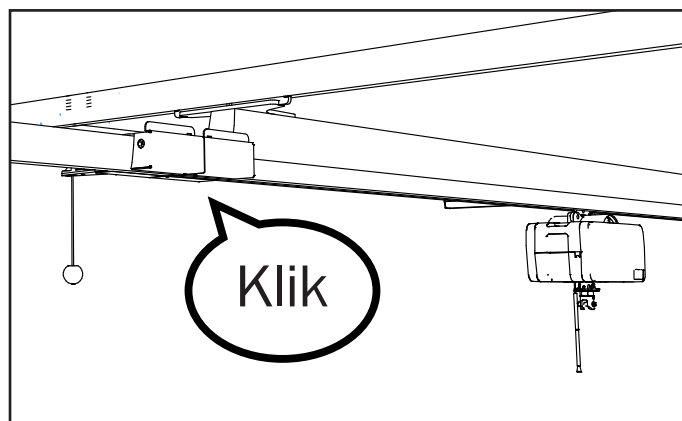

Forflytning – tilkoblet forflytningskobling

Udfør ikke forflytning af brugeren, før du har kontrolleret, at forflytningskoblingsenhederne er låst helt sammen. Det må ikke være muligt at skubbe skinnerne fra hinanden med hånden. Brugeren kan nu forflyttes fra én skinne til en anden.



Traverskobling

Traverskobling, inspektion efter montage


Indkobl traverskoblingen, og kontrollér, at liften med en belastning på min. 75 kg kører frit gennem traverskoblingen i begge retninger.

Indkobl/frakobl traverskoblingen 10 gange, og kød igennem traverskoblingen 10 gange uden at stoppe. Kontrollér, at låsestifterne på begge koblingshalvdele vender frit tilbage til den nederste position ved hjælp af fjederkraft alene.

Indsæt en liftløbekat i skinnen. Indkobl traverskoblingen. Juster enden af løbekatten i forhold til enden af koblingshalvdelen. Prøv at frakoble traverskoblingen. Sikkerhedsmekanismen skal forhindre dette. Gentag testen for den anden koblingshalvdel.

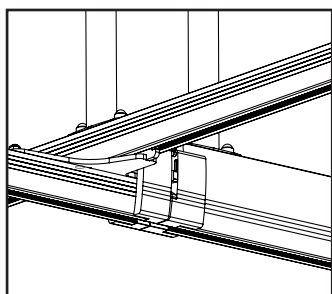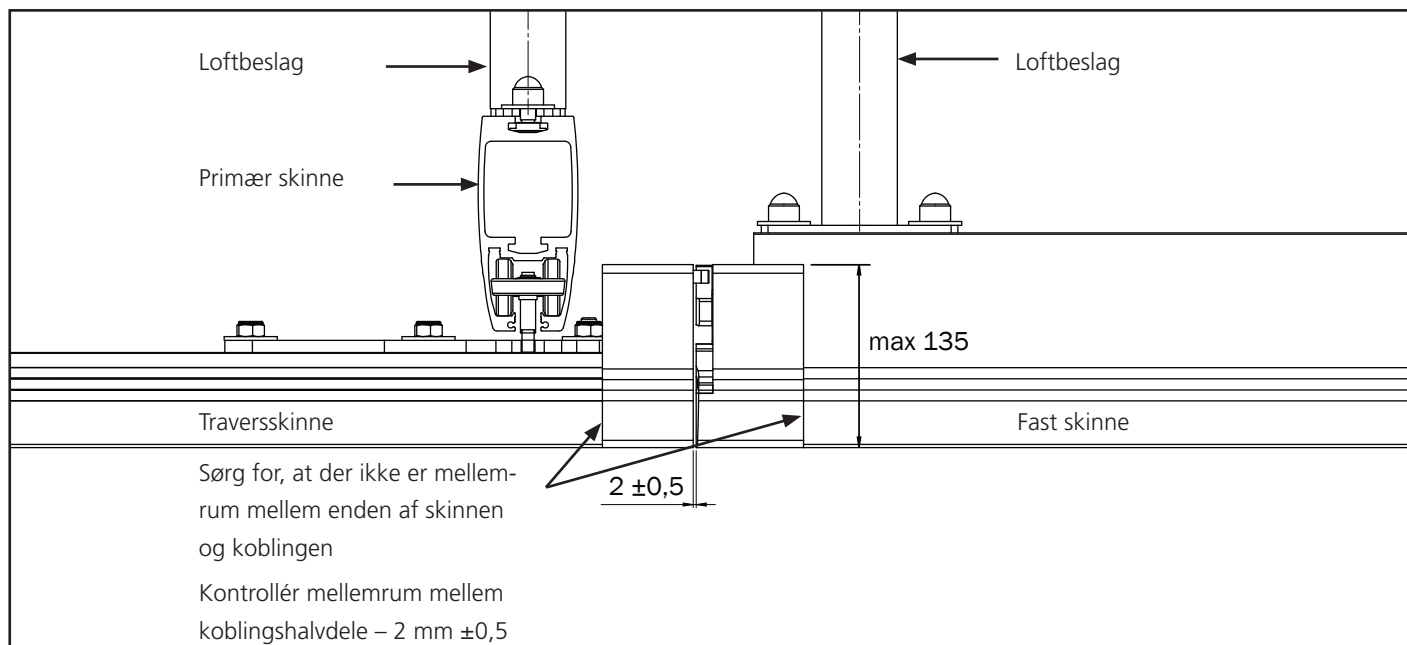

Tilkoblet

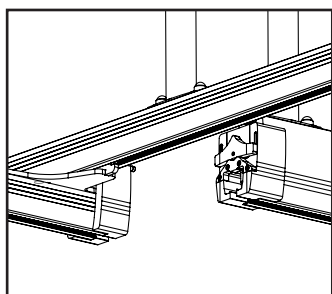


Frakoblet

Forflytning – tilkoblet traverskobling

Brugeren kan nu forflyttes fra én skinne til en anden.

Placering af mærkat

Følgende mærkat er inkluderet i kassen med traverskoblingen. Sæt mærkaten på traverssskinnen før brug som vist nedenfor. Sørg for, at den røde side er placeret tættest på traverskoblingen.

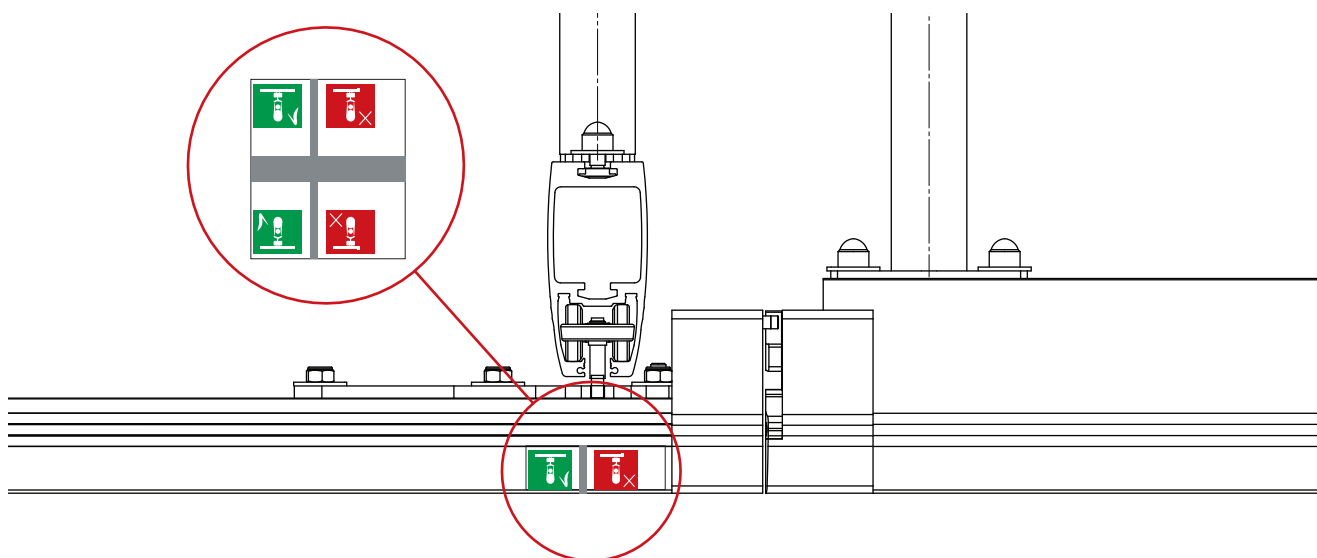

Når du har påsat mærkaten, skal du klippe den tykke grå streg over og fjerne den. Dette gør det muligt for løbekatten at bevæge sig frit frem og tilbage langs skinnen.

Symbolforklaring



Hvidt piktogram med grøn baggrund.
Dette symbol angiver den optimale placering af liften for nem tilslutning af koblingen.



Hvidt piktogram med rød baggrund.
Dette symbol angiver en suboptimal placering af liften, hvilket gør det vanskeligere at tilslutte koblingen.

Rengøring/desinficering

Rengør regelmæssigt. Rengør overfladerne med en fugtig klud med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller stærke væsker, da dette kan ødelægge personløfterens overflader. Brug isopropylalkohol til desinficering, når det er nødvendigt. Undgå slidende rengøringsprodukter. Kontrollér nødstop og nødsænkning efter rengøring. Personløfteren må ikke udsættes for rindende vand. Ved montering i miljøer med risiko for fugt er det vigtigt, at skinnedesystemet og motoren regelmæssigt vaskes og tørres. En komplet guide til reduktion af risikoen for korrosion fås på forespørgsel.



Kontrollér, at du ikke beskadiger eller fjerner mærkater under rengøringen.



Hejseværket og betjeningshåndsettet har kapslingsklasse IP24, hvilket angiver: >12,5 mm beskyttelse mod adgang til farlige dele, og at vandstænk i en vinkel på op til 60° fra lodret ikke har skadelig virkning.



Plejegiveren og den plejkrævende person eksponeres for følgende materialer: Polypropylen og polyester (sejl*), PC/ABS (betjeningshåndsat og hejseværkets dæksel), pulverlakeret aluminium, pulverlakeret zink (løfteåg).

* = Anvendt del



I sjældne tilfælde kan den plejkrævende person eller plejegiveren, som eksponeres for polypropylen eller polyester, få en allergisk reaktion såsom hudirritation, let kløe og øm hud.

Istandsættelse

Følg rengørings- og monteringsproceduren, udfør regelmæssig inspektion, og brug tjeklisten efter montering for at holde personløfteren i god stand.

Genbrug

Vejledningen om genbrug viser, hvordan du bortskaffer produktet korrekt. Den findes på www.etac.com.

Reservedele

Reservedelsliste kan rekvireres på forespørgsel.

Omfang af periodisk inspektion

Periodisk inspektion er en visuel undersøgelse (især af personløfterens vægtbærende struktur og løftmekanisme med fastgørelseselementer, brems, betjeningshåndtag, sikkerhedsenheder og personbærende enheder) i henhold til den periodiske inspektionsrapport for Molift Air 500.

Se www.etac.com.



Hvis der er nogen form for problemer med personløfteren, som kan bringe personers sikkerhed i fare, skal personløfteren omgående tages ud af brug og mærkes med "ude af drift". Brug ikke personløfteren, før den er blevet repareret. Kontakt den lokale Molift/Etac forhandler/distributør for at indberette eventuelle problemer.

Den periodiske inspektion skal udføres mindst én gang om året og hyppigere, hvis det kræves af de lokale myndigheder. Inspektionen skal udføres af servicepersonale, som er godkendt af Etac. Kontakt Etac på molift@etac.com for uddannelse og godkendelse eller anbefaling af en godkendt servicepartner.

Under den periodiske inspektion skal inspektøren udfylde en inspektionsrapport for Molift Air. Rapporterne skal opbevares af den eller de personer, som er ansvarlige for at servicere personløfteren. Hvis inspektionen afslører defekter og skader, skal personløfteren tages ud af drift og mærkes med "ude af drift". Personløfteren må ikke anvendes, før den er repareret.

Fejlsøgning

Symptom	Mulig årsag/udbedring
Personløfteren reagerer ikke på betjeningshåndsettets handling	Nødstop er aktiveret. Deaktiver det ved at trykke knappen ind.
	Personløfterens elektronik er overophedet. Vent, til den er kølet ned.
	Betjeningshåndsettet er ikke tilsluttet korrekt. Betjeningshåndsettet, stikket eller ledningen kan være i stykker og skal udskiftes.
Personløfteren reagerer ikke på betjeningshåndsettets op-knap	Løfteremmens vinkelsensor er aktiveret. Justér løfteremmen, eller flyt hejseværket for at mindske løfteremmens vinkel.
Ved brug af elektrisk nødsænkning bevæger løftebåndet sig opad	Løftebåndet er helt ude og er blevet snoet den forkerte vej. Brug manuel nødsænkning. Send personløfteren til service.

Notes

[illegible][illegible]

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac